



2021 - 2022


schuchmann[®]
by **ottobock.**

Legenda

Chiari e concisi.

| | |
|--|--|
|  Indoor |  Inclinazione seduta (-)15°-15° |
|  Outdoor |  Profondità seduta 16-35 cm |
|  Umidità |  Larghezza seduta 17-40 cm |
|  Auto |  Altezza gomito 41-98 cm |
|  Portata massima max. 60 kg |  Altezza manopola 30-88 cm |
|  Inclinazione (-)15°-30° |  Lunghezza gambe 30-95 cm |
|  Reclinazione (-)15°-15° |  Altezza 85-185 cm |
|  Bascula (-)5°-37° |  Altezza di accesso 16-23 cm |
|  Altezza seduta 25-62 cm |  Classificazione GMFCS Levels I-III |

Le nostre icone ti mostrano come e dove puoi utilizzare i nostri ausili.

Puoi capire al primo sguardo se i nostri prodotti sono pensati per l'uso in ambiente interno o esterno e come possono adattarsi alle tue misure ed esigenze.



Se desideri possiamo personalizzare il tuo ausilio per la seduta, ricamando sull'imbottitura dello schienale il tuo nome.



Ciao!
siamo Miriam e Torsten Schuchmann. La nostra azienda familiare ha più di 30 anni di esperienza nella produzione e vendita di ausili per la riabilitazione pediatrica.

Aiutare i bambini con disabilità è un lavoro che ci coinvolge personalmente e che cerchiamo di fare il meglio possibile, creando prodotti che siano adattabili perfettamente a te.

Cosa ci ispira.

La ragione che ci ha spinto a dirigere i nostri sforzi verso la riabilitazione pediatrica ha origine nella nostra famiglia: abbiamo infatti un'esperienza personale nella disabilità e per questo comprendiamo in pieno le sfide legate ad una persona con disabilità grave.

Quando la sorella di Miriam era piccola, lo sviluppo di dispositivi per la riabilitazione pediatrica era ai suoi inizi. I suoi genitori sapevano cosa migliorare per facilitare la sua partecipazione alla vita quotidiana e questo portò alla nascita dell'azienda Schuchmann.

Le nostre idee.

Il nostro scopo è supportare i bambini con disabilità così che diventino più mobili e indipendenti, ma allo stesso tempo il nostro obiettivo ha implicazioni importanti a lungo termine. Nel frattempo il nostro team di oltre 120 persone lavora a stretto contatto con rivenditori, dottori e terapisti, così che riusciamo davvero a capire nel profondo le necessità dei bambini e delle loro famiglie: un processo in continuo movimento.

I nostri prodotti sono più che semplici prodotti: sono compagni di vita. E non da ultimo, vogliamo che creino reali innovazioni che soddisfino appieno le esigenze in termini di funzionalità, design e sicurezza. Per cui, se hai domande o idee da sottoporci riguardanti i nostri prodotti, il team Schuchmann sarà ben felice di ascoltarti.



Per trovare il giusto compagno di giochi.

GMFCS è una classificazione delle abilità motorie di bambini e giovani adulti. I dottori e i terapisti la utilizzano per classificare il grado di invalidità motoria di bambini con paralisi cerebrale. Sono state definite 5 categorie, dal livello 1 al livello 5. Ogni livello illustra come e se i bambini sono in grado di muoversi indipendentemente o se necessitano di ausili e supporto fisico.

GMFCS tra i 6 e i 12 anni:

GMFCS livello I



Il bambino è in grado di camminare autonomamente a casa, a scuola, in ambiente esterno e nelle aree limitrofe. Il bambino può salire e scendere da marciapiedi senza bisogno di ausili ed è in grado di salire le scale senza reggersi al corrimano. Correre e saltellare è possibile, ma la velocità, l'equilibrio e la coordinazione sono limitate. Il bambino può partecipare alle attività fisiche e agli sport in funzione alle sue esigenze personali e alle condizioni ambientali.

GMFCS livello II



Nella maggior parte dei casi, il bambino può camminare liberamente, ma incontra difficoltà sulle lunghe distanze, su terreni sconnessi, in caso di discese,

in caso di affollamento, su sentieri stretti o se devono trasportare oggetti. Il bambino può salire e scendere le scale tenendosi al corrimano, o in mancanza di questi ultimi può farcela se supportato. In ambiente esterno e in aree limitrofe è in grado di camminare con supporto fisico oppure aiutandosi con un ausilio; sulle lunghe distanze usano una carrozzina. Correre e saltare sono limitati nei casi migliori. Le restrizioni nell'esecuzione di attività fisiche possono rendere necessari adattamenti che consentano al bambino di partecipare alle attività fisiche e allo sport.

GMFCS livello III



Il bambino di solito è in grado di camminare in ambiente interno con un deambulatore. Quando è seduto, può avere necessità di una cintura per raddrizzare le pelvi e che gli dia equilibrio. Nel passaggio dalla posizione seduta a quella eretta, è necessaria assistenza fisica da parte di una persona o di una superficie di supporto. Sulle lunghe distanze il bambino necessita di carrozzina. Il bambino può essere in grado di salire e scendere le scale tenendosi al corrimano, sotto supervisione o con l'aiuto fisico. Le limitazioni al cammino possono rendere necessari adattamenti oppure carrozzine manuali o elettriche, che consentano la partecipazione alle attività fisiche e agli sport.

GMFCS livello IV



Il bambino utilizza metodi per muoversi che normalmente richiedono supporto fisico o l'uso di una carrozzina elettrica. Il bambino necessita di dispositivi di seduta per il controllo del tronco e delle pelvi; il supporto fisico è necessario per la maggior parte dei trasferimenti. A casa, il bambino si sposta sul pavimento (strisciando o gattonando), cammina per brevi distanze con supporto fisico o utilizzando dispositivi elettrici. Quando il bambino è messo in posizione eretta, può utilizzare un deambulatore sia a casa che a scuola. A scuola, in ambienti esterni e limitrofi, il bambino viene spinto in carrozzina manuale o utilizza una carrozzina elettrica. A causa delle limitazioni al movimento, sono necessari adattamenti per consentire attività fisica o la partecipazione allo sport, incluso il supporto fisico e/o una carrozzina elettrica.

GMFCS livello V



Il bambino è sempre trasportato in carrozzina, in tutte le situazioni. Il bambino ha limitazioni nella possibilità di mantenere eretta la testa e il tronco e di effettuare movimenti degli arti.

Dispositivi per la postura sono utilizzati per migliorare la posizione del capo, le posture seduta, eretta e/o la mobilità, ma le limitazioni esistenti non possono essere compensate dagli ausili utilizzati.

I trasferimenti richiedono l'aiuto di un adulto. A casa i bambini sono in grado di muoversi sul pavimento per brevi distanze oppure sono trasportati da un adulto. Il bambino può essere in grado di muoversi indipendentemente tramite una carrozzina elettrica debitamente adattata in termini di postura e comandi. Le restrizioni alla mobilità rendono necessari adattamenti per consentire al bambino di partecipare ad attività fisiche e agli sport, incluso il supporto fisico e gli ausili elettrici per la mobilità.

GMFCS

Abbiamo assegnato il livello GMFCS di ognuno dei nostri prodotti, per aiutarti nella scelta dell'ausilio per le esigenze di tuo figlio. La classificazione è una mera indicazione, che può variare da bambino a bambino.



GMFCS
I-IIIkg
max. 60
(-)3°-17,5°
(-)5°-15°
16-40 cm
17-40 cm**Io sono il tuo seggiolone per tutti i giorni.**

Io favorisco una seduta attiva e in questo modo ti supporto nel tuo sviluppo. La cosa bella è che, indipendentemente da quanto tu sia alto, io comunque cresco con te. Per poterti sedere comodamente al tavolo con i tuoi fratelli più grandi, si possono spostare seduta e pedana verso l'alto o verso il basso, avanti o indietro. Sono stato costruito in legno con tanto amore: come sto bene con gli altri mobili di casa! E grazie ai miei tanti accessori, puoi personalizzarmi secondo le tue necessità.







Regolazione in altezza rapida

grazie ai profili in alluminio inseriti nelle guide.



Regolazione in inclinazione rapida tramite cinghietto





| Dati tecnici | Mis. 0 vers. scuola | Mis. 0 | Mis. 1 vers. scuola | Mis. 1 | Mis. 2 |
|---|-----------------------------|------------|---------------------|------------|------------|
| Larghezza di seduta | 17 - 28 cm | 17 - 28 cm | 20 - 35 cm | 20 - 35 cm | 30 - 40 cm |
| Profondità di seduta | 16 - 26 cm | 16 - 26 cm | 25 - 35 cm | 25 - 35 cm | 30 - 40 cm |
| Altezza seduta max. | 45 cm | 65 cm | 45 cm | 65 cm | 65 cm |
| Altezza schienale | 25 cm | 25 cm | 29 cm | 29 cm | 34 cm |
| Inclinazione schienale | (-)3° - 17,5° | | | | |
| Inclinazione seduta | (-)5°, 0°, 7,5°, 15° | | | | |
| Inclinazione pedana | (-)5°, 0°, 7,5°, 15° | | | | |
| Altezza pedana minima | 13 cm* / 18 cm** / 21 cm*** | | | | |
| Altezza pedana minima (per pedana regolabile in inclinazione) | 8 cm* / 13 cm** / 16 cm*** | | | | |
| Portata massima | 30 kg | 30 kg | 45 kg | 45 kg | 60 kg |
| Peso | 9,2 kg | 9,7 kg | 9,6 kg | 10,2 kg | 12 kg |
| Registrazione ministeriale | 1271366 - 1271369/R | | | | |

Lughezza gambe massima. = Altezza seduta massima - altezza pedana minima * senza rotelle, ** con rotelle da 50 mm, *** con rotelle da 75 mm



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
III-Vkg
max. 50

(-)5°-25°

(-)5°-37°


15-42 cm

46-58 cm

16-38 cm

**Io sono il seggiolone che cresce con te.**

Trovo che sia molto bello poterti accompagnare nella crescita. Per questo motivo mi hanno fatto in 4 misure. La cosa bella è che, tramite una leva, il mio sedile si può inclinare dolcemente, così tanto che tu ti puoi distendere e rilassare. Inoltre posso alzarmi e abbassarmi così che tu sia sempre all'altezza giusta.

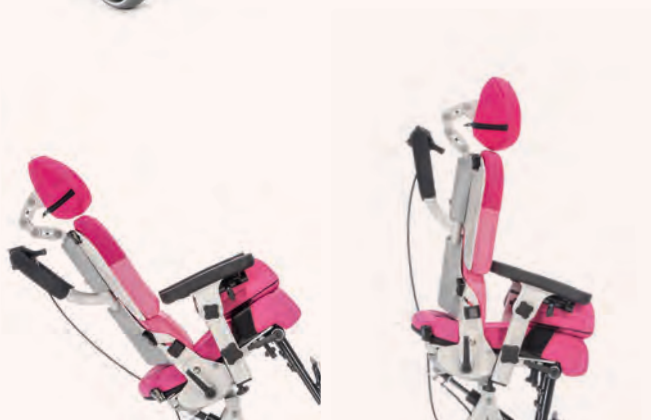



Maniglione

per semplificare gli spostamenti.

Schienale

composto di 2 parti, è regolabile in altezza e inclinazione.

Cinghia pelvica

fornisce una gran stabilità.

Telaio

compatto ed estremamente stabile.

Pedale

per la regolazione in altezza.

Poggiatesta

regolabile in altezza, profondità e inclinazione.

Pelotte per il tronco

forniscono stabilità al tronco e consentono una posizione eretta.

Tavolino

offre molto spazio per le attività.

Seduta

è regolabile a piacimento.

Pedana

per una posizione confortevole dei piedi.

Ruotine

disponibili in diverse misure per favorire gli spostamenti.



Colore del telaio ● Antracite metallic

● Grigio RAL 7047



| Dati tecnici | Mis. 0 | Mis. 1 | Mis. 1b | Mis. 2 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Profondità di seduta | 15 - 25 cm | 21 - 30 cm | 26 - 36 cm | 30 - 42 cm |
| Larghezza di seduta | 16 - 26 cm | 20 - 30 cm | 20 - 30 cm | 28 - 38 cm |
| Altezza dello schienale basso | 35 - 43 cm | 35 - 43 cm | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm |
| Altezza dello schienale alto | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm | 53 - 63 cm | 53 - 63 cm |
| Altezza seduta da terra | 46 - 58 cm | 46 - 58 cm | 46 - 58 cm | 46 - 58 cm |
| Altezza seduta da terra con telaio ribassato | 35 - 40 cm | 35 - 40 cm | - | - |
| Lunghezza gambe | 17 - 24 cm | 22 - 32 cm | 27 - 38 cm | 30 - 48 cm |
| Ingombro in larghezza | 45 cm | 45 cm | 53 cm | 53 cm |
| Lunghezza telaio | 66 cm | 66 cm | 77 cm | 77 cm |
| Basculazione | (-)5° - 37° | (-)5° - 37° | (-)5° - 37° | (-)5° - 37° |
| Reclinazione schienale | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° |
| Portata massima | 30 kg | 30 kg | 45 kg | 50 kg |
| Peso | 16 kg | 17 kg | 18 kg | 19 kg |
| Registrazione ministeriale | 807468/R | | | |



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
III-Vkg
max. 50

(-)5° - 25°

(-)5° - 37°

15 - 42 cm

25 - 62 cm

16 - 38 cm

**Io sono il tuo sistema di postura.**

Che sia al tavolo della colazione o nell'angolo giochi, ti porto all'altezza giusta, su e giù, come è meglio per te e con facilità, grazie alla molla a gas; poi se vuoi, mi basculo avanti e indietro. In questo modo mi adatto al tuo corpo e ai tuoi gusti: sono infatti disponibile in tanti bei colori. Lo sapevi già che lo schienale è divisibile? In questo modo puoi allenare i muscoli della schiena per stare più facilmente dritto.





Maniglione

per facilitare gli spostamenti.

Schienale

si può regolare in inclinazione e altezza ed è pure rimovibile.

Base Hi-Low

compatta e con una grande escursione.

Ruotine

disponibili in diverse misure, per facilitare gli spostamenti.

Poggiatesta

regolabile in altezza, profondità e inclinazione.

Pelotte per il tronco

disponibili con staffe fisse o swing away e supporti standard o allungati.

Seduta

regolabile per assecondare colpi di vento e abduzione.

Pedane separate per un posizionamento ottimale dei piedi.



Con una leva puoi sganciare la parte superiore dello schienale. Così hai più libertà di muoverti.



Colori del telaio ● Antracite metallic

● Grigio RAL 7047



| Dati tecnici | Mis. 0 | Mis. 1 | Mis. 1b | Mis. 2 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Profondità di seduta | 15 - 25 cm | 21 - 30 cm | 26 - 36 cm | 30 - 42 cm |
| Larghezza seduta | 16 - 26 cm | 20 - 30 cm | 20 - 30 cm | 28 - 38 cm |
| Altezza con schienale basso | 35 - 43 cm | 35 - 43 cm | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm |
| Altezza con schienale alto | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm | 53 - 63 cm | 53 - 63 cm |
| Altezza seduta da terra | 25 - 62 cm | 25 - 62 cm | 25 - 62 cm | 25 - 62 cm |
| Altezza seduta con pistone elettrico | 32 - 62 cm | 32 - 62 cm | 32 - 62 cm | 32 - 62 cm |
| Altezza seduta con pistone idraulico | 27 - 63 cm | 27 - 63 cm | 27 - 63 cm | 27 - 63 cm |
| Lunghezza gambe | 17 - 24 cm | 22 - 32 cm | 27 - 38 cm | 30 - 48 cm |
| Ingombro in larghezza | 52 cm | 54 cm | 64 cm | 64 cm |
| Ingombro in lunghezza | 58 cm | 61 cm | 75 cm | 75 cm |
| Basculazione | (-)8° - 37° | (-)8° - 37° | (-)8° - 37° | (-)8° - 37° |
| Reclinazione schienale | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° |
| Portata massima | 30 kg | 30 kg | 45 kg | 50 kg |
| Peso | 19 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg |
| Registrazione ministeriale | 807467/R | | | |



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi
sono disponibili nella scheda d'ordine.



madita-fun mini.

Piccolo, ma in gamba.

GMFCS
III-V

kg
max. 20



(-)5° - 25°

(-)5° - 42°

12 - 19 cm

25 - 62 cm

14 - 22 cm

Io sono il sistema di postura per quando sei piccolo piccolo.

Ti do tutta la sicurezza che meriti e ti porto all'altezza dei tuoi piccoli amici e poi mi posso rialzare così da poterti avvicinare ad ogni tavolo; se poi vuoi, ti riporto nuovamente a terra per riprendere i tuoi giochi. La mia seduta ha diverse opzioni, anche per assecondare il tuo colpo di vento o la tua esigenza di abduzione. In più posso avere uno schienale allargato per contenere più facilmente le tue braccia.





madita-fun mini.

Maniglione

per favorire gli spostamenti.

Braccioli

regolabili in altezza e larghezza.

Profondità di seduta

regolabile da 12 a 19 cm.

Poggiatesta

regolabile in tutte le direzioni.

Pelotte per il tronco

Ti sostengono per aiutarti a mantenere una posizione stabile.

Seduta

pensata per soddisfare anche le esigenze dei più piccoli.

Pedana unica

regolabile e imbottita.

Altezza seduta

regolabile tramite molla a gas.

Ruotine

favoriscono gli spostamenti.

Personalizzabile come vuoi tu: oltre al cuscino piano standard, puoi scegliere una seduta profilata o anche una seduta interamente regolabile con guide per le cosce interne ed esterne integrate.



Ideale per
i più piccoli.



| Dati tecnici | madita-fun mini. |
|----------------------------|---|
| Profondità di seduta | 12 - 19 cm |
| Larghezza seduta | 14 - 22 cm |
| Altezza schienale basso | 28 - 33 cm |
| Altezza schienale alto | 30 - 35 cm |
| Altezza seduta da terra | 25 - 62 cm |
| Lunghezza gambe | 12 - 22 cm |
| Ingombro in larghezza | 52 cm |
| Ingombro in lunghezza | 58 cm |
| Basculazione | (-) 5° - 37° / 0° - 42° |
| Reclinazione schienale | (-) 5° - 25° |
| Portata massima | 20 kg |
| Peso | 16 kg |
| Registrazione ministeriale | 807467/R |



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi
sono disponibili nella scheda d'ordine.



madita maxi.

Per i più grandi.

GMFCS
III-V

kg
max. 120



(-)5°-25°

(-)5°-30°

36-47 cm

48-60 cm

34-44 cm



Io sono il tuo solido accompagnatore.

Sono l'accompagnatore quotidiano di teenager e adulti. Che sia l'ora di pranzare, dei compiti o dell'ora di lettura, io faccio in modo che tu sia seduto sempre in posizione ottimale. La mia struttura irrobustita e le dimensioni più generose garantiscono una grande stabilità, per sopportare sollecitazioni più elevate. La mia seduta anatomica aiuta a tenere il bacino in posizione ed evita che tu possa scivolare in avanti.





madita maxi.

Maniglione

per favorire gli spostamenti.

Pelotte per il tronco

regolabili per darti una posizione stabile e confortevole.

Braccioli

sono dotati di poggibraccia larghi e si possono regolare in altezza, larghezza ed inclinazione.

Pedale

per la regolazione della bascula.

Ruotine doppie

facilitano gli spostamenti.

Poggiatesta

regolabile in altezza.

Schienale

regolabile.

Guide per le cosce

possono essere regolate in larghezza.

Cuneo di abduzione

per contenere le ginocchia.

Base Hi-Low

pensata per essere solida e robusta.

**Semplice e pratico:
puoi mettere i piedi sulla
pedana estraibile oppure
metterli direttamente a terra e
spingerti.**

**Montaggio
semplice!**





| Dati tecnici | madita maxi. |
|----------------------------|--------------|
| Profondità di seduta | 36 - 47 cm |
| Larghezza seduta | 34 - 44 cm |
| Altezza schienale basso | 40 cm /48 cm |
| Altezza schienale alto | 48 cm /56 cm |
| Altezza seduta | 48 - 60 cm |
| Lunghezza gambe | 18 - 45 cm |
| Ingombro in larghezza | 64 cm |
| Ingombro in lunghezza | 80 cm |
| Basculazione | (-)5° - 30° |
| Reclinazione schienale | (-)5° - 25° |
| Portata massima | 120 kg |
| Peso | 26 kg |
| Registrazione ministeriale | 807468/R |

Una seduta corretta in modo semplice: grazie allo schienale e alla seduta anatomici, il tuo bacino viene supportato in maniera confortevole.



Schienale e seduta anatomici.



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
IV-Vkg
max. 100

(-)0°-50°

(-)0°-18°

115-165 cm



Io sono il tuo sistema di postura sdraiata e seduta, completamente su misura. Grazie al materasso sotto vuoto perfettamente formabile, ti metto in una posizione così comoda che non avverti né pressioni, né alcun dolore, ma anzi ti senti molto sicuro e stabile. E sono pure facile da utilizzare: puoi regolare l'altezza e l'inclinazione sia dello schienale che della pedana. In questo modo perfino sedersi diventa così semplice! Lo sapevi che sono inaspettatamente leggera da spingere e movimentare? Così possiamo facilmente muoverci insieme, in ogni corridoio.







**Su di me puoi sdraiarti, ma non solo,
perchè puoi anche sederti comodamente.
Così puoi osservare il mondo attorno a te e
farti coinvolgere ogni volta che lo desideri.**



L'altezza della seduta e l'angolo schienale sono regolabili elettricamente.



Pompa elettrica per il materasso Vakuum.



| Dati tecnici della base | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Altezza del piano di seduta da terra | 53 - 79 cm |
| Reclinazione schienale | 0° - 50° (rispetto al piano orizz.) |
| Inclinazione supporto seduta | 0° - 18° |
| Inclinazione supporto per le gambe | 0° - 50° (rispetto al piano orizz.) |
| Larghezza utile indicativa | ca. 64 cm |
| Portata massima | 100 kg |
| Peso | 44 kg |



| Misure disponibili | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Larghezza | 60 cm | 70 cm | 70 cm |
| Lunghezza supporto per capo/tronco | 45 cm | 60 cm | 75 cm |
| Lunghezza supporto seduta | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
| Lunghezza supporto per le gambe | 35 cm | 45 cm | 55 cm |
| Lunghezza totale | 115 cm | 140 cm | 165 cm |
| Altezza delle guide laterali | 12 cm | 12 cm | 12 cm |



Ulteriori informazioni su accessori e bretellaggi sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
Levels II-IV



Sono il tuo sistema di seduta ammortizzato.

Trovo che stare seduti sia ancora assolutamente noioso! Preferisco di gran lunga lasciarmi adattare in tutte le posizioni possibili. Mi inclino in avanti e indietro, su e giù, quanto ne hai bisogno. La mia seduta attiva ha un grande vantaggio: ti aiuta ad alleviare le tensioni fisiche e psicologiche. Inoltre i miei numerosi accessori, come poggiatesta, imbottiture o supporti laterali, garantiscono la necessaria stabilità in ogni situazione.





activity chair.

Maniglie

per affrontare comodamente gli spostamenti.

Pelotte per il tronco

consentono una posizione stabile e sicura.

Imbracatura

per posizionare il bacino e sostenere correttamente la colonna vertebrale.

Sandali con cinghietti

possono essere regolate in base alla posizione dei piedi dell'utente per un allineamento ottimale del corpo.

Doppie rotelle con freni

per facilitare gli spostamenti.

Poggiatesta

si regola in altezza, profondità e inclinazione.

Reclinazione dello schienale

può essere adattata con l'aiuto di una molla a gas.

Braccioli

regolabili in altezza e inclinazione.

Imbottitura seduta

è comoda ed evita punti di pressione.

Base

è particolarmente stabile e regolabile in altezza.

Pedana

può essere ribaltata per consentire un trasferimento più semplice.



Ammortizzazione opzionale

consente di assecondare i movimenti del corpo e può essere disinserita a piacimento.



Colore telaio ● Nero



| Dati tecnici | Mis. 0 | Mis. 1 | Mis. 2 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Profondità seduta | 20 - 30 cm | 28 - 41 cm | 38 - 51 cm |
| Larghezza seduta | 30 cm | 36 cm | 43 cm |
| Larghezza seduta con guide per il bacino | 18 - 23 cm | 22 - 29 cm | 28 - 36 cm |
| Larghezza del torace | 14 - 29 cm | 17 - 30 cm | 24 - 36 cm |
| Altezza schienale | 32 - 39 cm | 39 - 48 cm | 48 - 61 cm |
| Altezza poggiatesta - seduta | 37 - 53 cm | 44 - 62 cm | 50 - 75 cm |
| Altezza braccioli | 13 - 19 cm | 18 - 27 cm | 18 - 27 cm |
| Lunghezza gambe | 23 - 30 cm | 30 - 41 cm | 38 - 51 cm |
| Altezza seduta con puntali corti / lunghi | 24 - 32 cm / 47 - 55 cm | 32 - 42 cm / 48 - 58 cm | 42 - 52 cm / 51 - 61 cm |
| Altezza seduta con ruotine corte / lunghe | 34 - 42 cm / 47 - 55 cm | 41 - 51 cm / 48 - 58 cm | 42 - 52 cm / 51 - 61 cm |
| Larghezza telaio con puntali corti / lunghi | 53 cm / 58 cm | 59 cm / 62 cm | 66 cm / 66 cm |
| Larghezza telaio con ruotine corte / lunghe | 57 cm / 60 cm | 62 cm / 65 cm | 71 cm / 71 cm |
| Basculazione | (-)15° - 15° | (-)15° - 15° | (-)15° - 15° |
| Reclinazione schienale | (-)5° - 20° | (-)5° - 20° | (-)5° - 20° |
| Portata max. | 34 kg | 68 kg | 113 kg |
| Numero di registrazione Ministero | | 2036486/R | |

GMFCS
III-Vkg
max. 60

90°-108°

0°/15°

25-40 cm

28-36 cm



Sono il tuo seggiolino rotante per

auto. Adoro viaggiare in auto: anche tu? E allora portami con te. Con me ti sentirai tranquillo, perchè mi hanno sottoposto a tanti test e hanno visto che sono estremamente sicuro, sia sul sedile passeggero, che sui sedili posteriori. E per rendere più semplice la vita ai tuoi genitori, posso ruotare di 90°, così tutto è più facile quando ti mettono a sedere su di me. Una mia grande qualità? Posso essere modificato a piacere, per venire incontro alle tue esigenze. Così nessuno mi può imitare.



Con fantastici
accessori!



Rivestimenti

rimovibili e lavabili.

Pelotte toracali

consentono una posizione di seduta rilassata e stabile.

Schienale

inclinabile in 3 posizioni.

Supporto sedile

con sistema di rotazione a 90°

Poggiatesta imbottito

regolabile in altezza.

Cinture

servono a supportare e aiutano il posizionamento.

Imbottiture laterali anatomiche

aiutano a supportare il tronco.

Pedana

è regolabile in altezza e rimovibile per favorire i trasferimenti.

90°

Dispositivo di rotazione

facilita i trasferimenti.

Pelotte estraibili



| Dati tecnici | Mis. 1 | | Mis. 2 | | Mis. 3 | |
|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | a | b | a | b | a | b |
| Profondità di seduta | 25 cm | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 35 cm | 40 cm |
| Larghezza seduta | 28 cm | | 32 cm | | 36 cm | |
| Altezza schienale | 40 cm | | 48 cm | | 56 cm | |
| Altezza poggiatesta | 59 - 69 cm | | 65 - 77 cm | | 76 - 86 cm | |
| Altezza pelotte | 25 - 33 cm | | 32 - 40 cm | | 36 - 44 cm | |
| Basculazione | 0°/15° | | 0°/10° | | 0°/10° | |
| Larghezza al tronco | 14 - 25 cm | | 16 - 29 cm | | 16 - 32 cm | |
| Reclinazione schienale | 90° - 108° | | 90° - 108° | | 90° - 108° | |
| Portata massima | 30 kg | | 45 kg | | 60 kg | |



**Ulteriori informazioni su accessori e bretel-
laggi**
sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
III-IVkg
max. 100

46-124 cm

29-113 cm



Sono il tuo deambulatore posteriore.

Sono sempre disponibile fin dal tuo primo anno d'età. Il mio hobby preferito è camminare e dovunque tu vada, io ti seguo.

Non appena ti appoggi a me, ti accorgerai di come ti sostengo.

Il mio telaio abdotto, ti aiuta a ridurre le oscillazioni durante la camminata.

Inoltre il supporto per il bacino facilita la camminata in linea retta. Forte, non ti pare?





Supporto per il bacino

si trasforma in schienale quando ci si siede

Telaio in alluminio

pieghevole per minimizzare gli ingombri.

Freno anti arretramento

per bloccare gli spostamenti all'indietro.

Ruotine in EVA

lo rendono maneggevole.

Supporti antibrachiali
con maniglie.

Seduta imbottita
ribaltabile all'indietro.

Blocchi direzionali
per consentire solo la marcia rettilinea.



Telaio abdotto
facilita la marcia e aiuta a minimizzare le oscillazioni.



Telaio in alluminio
pieghevole grazie alle cerniere.

Colore telaio mis. 0



Lapislazzuli metallic

Colore telaio mis. 1

Telemagenta (Pink)

Azzurro cielo

Colore telaio mis. 2



Lapislazzuli metallic

Rosso

Colore telaio mis. 3 e 4



Antracite metallic

Bianco



| Dati tecnici | Mis. 0 mini* | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 | Mis. 4 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Altezza manopole | 29 - 53 cm | 34 - 58 cm | 51 - 75 cm | 68 - 94 cm | 87 - 113 cm |
| Altezza appoggi antibrachiali | - | 46 - 70 cm | 63 - 87 cm | 79 - 103 cm | 98 - 124 cm |
| Distanza tra le manopole | 22 - 36 cm | 22 - 36 cm | 30 - 44 cm | 38 - 52 cm | 43 - 57 cm |
| Altezza seduta | - | 33 cm | 45 cm | 60 cm | 70 cm |
| Ingombro in larghezza | 52 cm | 51 cm | 61 cm | 68 cm | 75 cm |
| Ingombro in lunghezza | 58 cm | 58 cm | 70 cm | 77 cm | 87 cm |
| Altezza telaio (piegato) | 37 cm | 25 cm | 32 cm | 34 cm | 37 cm |
| Ingombro di trasporto (Lu x La x H) | 58 x 52 x 37 cm | 58 x 51 x 25 cm | 70 x 61 x 32 cm | 77 x 68 x 34 cm | 87 x 75 x 37 cm |
| Portata massima | 20 kg | 30 kg | 50 kg | 75 kg / 70 kg | 100 kg |
| Peso | 3,9 kg | 7,1 kg | 8,3 kg | 8,5 kg / 9,8 kg | 10,2 kg |
| Registrazione ministeriale | da 1271358/R a 1271362/R | | | | |

* Telaio non pieghevole



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.



malte outdoor.

Per l'attività all'esterno.



Freni con blocco
per una sosta sicura.

Seduta imbottita
ribaltabile all'indietro.

Telaio in alluminio
pieghevole.

Ruote piene in EVA
con freni a tamburo.

Anti arretramento opzionale
elimina i movimenti all'indietro.

Ruote
di dimensioni maggiorate
per l'uso in esterno.


Io sono il tuo deambulatore posteriore.

Esattamente come mio fratello sono sempre pronto ad accompagnarti quando vuoi davvero camminare e ti offro un grande supporto. Grazie alla mia configurazione Outdoor mi sento benissimo all'esterno e sono il perfetto accompagnatore per una passeggiata nella natura: le ruote maggiorate si adattano ad ogni terreno e i miei freni a tamburo offrono ulteriore sicurezza.



Antiribaltamento opzionale
per evitare situazioni spiacevoli.

Colore telaio
mis. 1

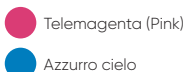

Colore telaio
mis. 2



Colore telaio
mis. 3





| Dati tecnici | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Altezza manopole | 34 - 58 cm | 51 - 75 cm | 68 - 94 cm |
| Altezza supporti antibrachiali | 46 - 70 cm | 63 - 87 cm | 79 - 103 cm |
| Distanza tra le manopole | 22 - 36 cm | 30 - 44 cm | 38 - 52 cm |
| Altezza sedile | 33 cm | 45 cm | 60 cm |
| Ingombro in larghezza | 56 cm | 66 cm | 73 cm |
| Ingombro in lunghezza | 66 cm | 75 cm | 82 cm |
| Altezza telaio (piegato) | 25 cm | 32 cm | 34 cm |
| Ingombro di trasporto (La x Lu x H) | 66 x 56 x 25 cm | 75 x 66 x 32 cm | 82 x 73 x 34 cm |
| Portata massima | 30 kg | 50 kg | 70 kg |
| Peso | 7,1 kg | 8,3 kg | 9,8 kg |
| Registrazione ministeriale | da 1271359/R a 1271361/R | | |

Lo sapevi che sono uno dei pochi deambulatori omologati per l'uso in esterno? Con ruote più grandi e larghe e i freni a tamburo sono agguerrito per le grandi avventure. Formidabile!





Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
II-IV

Sono il tuo deambulatore anteriore e ti sostengo già dai tuoi primi passi.

Non vedo l'ora, di fare i primi giri con te! Così stimolo il tuo equilibrio e contemporaneamente ti faccio allenare la muscolatura del tronco. Se hai bisogno di maggiore stabilità e sicurezza, le mie ruote posteriori si possono arretrare; viceversa, se vuoi più maneggevolezza, puoi fartele avvicinare, così puoi muoverti più agilmente. Se fai fatica a muoverti in linea retta, allora ti aiuto con il blocco delle ruote piroettanti.

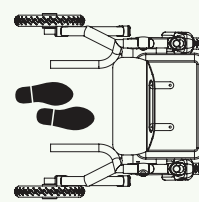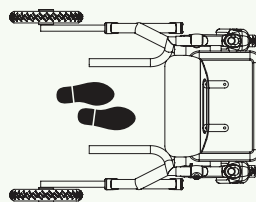



Manopole

si regolano in altezza e larghezza.

Telaio in alluminio

super compatto e pieghevole nelle misure 1-2-3.

Freni a slittamento

riducono la velocità, così che tu possa concentrare completamente sulla marcia.

Cestino

offre spazio per i giochi o le bevande che ti vuoi portare in giro.

Blocco direzionale delle ruote

per favorire la marcia rettilinea.

Ruote in PU

super resistenti.




Supporti antibrachiali regolabili
per darti maggiore stabilità.

**Freni opzionali**

ti danno più sicurezza e controllo— anche in combinazione con i supporti antibrachiali.



Colore telaio mis. 0+1

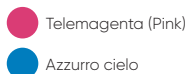

Colore telaio mis. 2



Colore telaio mis. 3





| Dati tecnici | Mis. 0 | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 |
|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Altezza manopole | 30 - 47 cm | 38 - 59 cm | 53 - 75 cm | 63 - 88 cm |
| Altezza supporti antibrachiali | 41 - 58 cm | 49 - 70 cm | 63 - 85 cm | 73 - 98 cm |
| Distanza tra le manopole | 18 - 32 cm | 22 - 36 cm | 30 - 44 cm | 36 - 50 cm |
| Altezza sedile | 25 cm | 30 cm | 45 cm | 45 cm |
| Ingombro in larghezza | 44 cm | 48 cm | 62 cm | 71 cm |
| Ingombro in lunghezza | 36,5 cm | 42,5 cm | 57,5 cm | 61 cm |
| Ingombro in lunghezza (telaio telescopico) | 39 - 47 cm | 45 - 55 cm | 60 - 74 cm | 65 - 79 cm |
| Portata massima | 20 kg | 30 kg | 50 kg | 65 kg |
| Peso | 4,2 kg | 5 kg | 7,4 kg | 9,1 kg |
| Registrazione ministeriale | 1271363/R - 1271364/R - 1271365/R | | | |



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.



GMFCS
Levels III-V



Sono il tuo deambulatore dinamico. Vuoi camminare, correre o anche scatenarti? Con le mie nuove taglie più piccole, ti sosterrò fin dai tuoi primi passi. La mia sella multiposizione, disponibile dalla taglia 1, sostiene parte del tuo peso corporeo e può adeguarsi al tuo bacino con la massima precisione.

Puoi spingermi davanti a te o tirarmi dietro di te. In ogni caso, con la mia ampia area di appoggio, ti aiuto a mantenere sempre una postura eretta. Il mio telaio superiore dinamico in opzione ti supporta nel trasferimento e nello spostamento del peso, che è necessario per una andatura funzionale.

Inoltre, tutte le modifiche e le regolazioni possono essere apportate senza attrezzi.





La mia sella multi posizione (MPS) ti entusiasmerà:

con lei, la tua posizione pelvica può essere regolata in modo così rapido e preciso in diverse direzioni così che il sollevamento del piede, la lunghezza del passo e il trasferimento del peso possano essere adattati all'istante. Ad esempio, con la corretta regolazione della profondità della sella, il bacino viene portato in una posizione ottimale rispetto alla parte superiore del corpo. Con l'aiuto dell'inclinazione della sella, il bacino viene portato in una posizione in avanti o all'indietro. La guida dell'anca può essere modificata in altezza e profondità in modo che i fianchi ricevano il supporto necessario. E con l'altezza della sella, la posizione pelvica può essere regolata in modo da poter determinare la quantità di peso corporeo che l'MPS deve sostenere

Vorrei mostrarti questo supporto per il torace. In combinazione con le nuove maniglie ti offro nuove possibilità di posizionamento.



dynamic pacer.

Supporti avambraccio
disponibili anche in
combinazione con le maniglie.

Telaio superiore dinamico
sostiene l'andatura e consente
un'oscillazione verticale di 8 cm e
un movimento orizzontale di 5 cm
durante la deambulazione.

Colonna centrale
regolabile in altezza grazie alla molla
a gas, ti aiuta ad alzarti in piedi.

Blocco direzionale
aiuta la marcia
rettilinea.

Sella Multi Posizione
si adatta rapidamente
alla posizione delle pelvi.

Costruzione leggera e stabile
trasmette sicurezza.

Conta passi
registra l'avanzamento
della terapia.

Ruotine
con freni a slittamento, antiarretamento,
freni e blocchi direzionali.

**Sistema
modulare**

Diverse possibilità di applicazione:

I telai superiori delle misure 2 + 3
possono essere sfilati dalla base
standard e montati sul telaio ausiliario
o sul tapis roulant.

Supporto multifunzionale per il tronco

Regolabile in profondità, altezza e
angolo.



Colore telaio
mis. 0 e 1

● Lime

Colore telaio
mis. 2

○ Bianco

Colore telaio
mis. 3

● Rosso

○ Bianco

Colore telaio
mis. 4

● Antracite

● Antracite



Grazie alla colonna centrale con molla a gas, l'altezza può essere regolata rapidamente, il che ha un grande vantaggio: il passaggio dalla posizione seduta alla verticale è semplicissimo!

| Dati tecnici | | Mis. 0 mini | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 | Mis. 4 |
|--|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Altezza al gomito raccomandata | | 39 - 52 cm | 47 - 70 cm | 61 - 89 cm | 81 - 119 cm | 86 - 124 cm |
| Ingombro in larghezza | Base standard | 52 cm | 58 cm | 66 cm | 71 cm | 80 cm |
| | Base da esterni | - | - | 76 cm | 81 cm | - |
| | Base tapis roulant stretta | - | 89 cm | 89 cm | 89 cm | - |
| | Base tapis roulant larga | - | 102 cm | 102 cm | 102 cm | - |
| Ingombro in lunghezza | Base standard | 57 cm | 66 cm | 76 cm | 91 cm | 101 cm |
| | Base da esterni | - | - | 91 cm | 103 cm | - |
| | Base tapis roulant | - | 104 cm | 104 cm | 104 cm | - |
| Altezza del telaio | Basi standard e da esterni | 32 cm | 41 - 53 cm | 55 - 69 cm | 72 - 98 cm | 79 - 104 cm |
| | Base tapis roulant | - | 58 - 89 cm | 60 - 93 cm | 76 - 119 cm | - |
| Altezza telaio inferiore (senza telaio super.) | Basi standard e da esterni | - | 28 cm | 37 cm | 41 cm | 47 cm |
| | Base tapis roulant | - | 53 cm | 53 cm | 53 cm | - |
| Peso | Base standard | 4,6 kg | 5,2 kg | 6,8 kg | 7 kg | 10,2 kg |
| | Base da esterni | - | - | 8,4 kg | 8,7 kg | - |
| | Base tapis roulant stretta | - | 12,5 kg | 12,5 kg | 12,5 kg | - |
| | Base tapis roulant larga | - | 12,7 kg | 12,7 kg | 12,7 kg | - |
| | Telaio superiore fisso | - | 2,7 kg | 3,4 kg | 4,4 kg | 4,9 kg |
| | Telaio superiore dinamico | - | 3,4 kg | 5,2 kg | 6,1 kg | 6,8 kg |
| Oscillazione del telaio superiore dinamico | Vertical | - | 3,5 cm | 8 cm | 8 cm | 8 cm |
| | Horizontal | - | 4 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| Largh. max. tapis roul. | Base tapis roulant stretta | - | 74 cm | 74 cm | 74 cm | - |
| | Base tapis roulant larga | - | 86 cm | 86 cm | 86 cm | - |
| Alt. max. tapis roulant | Base tapis roulant | - | 28 cm | 28 cm | 28 cm | - |
| Portata massima | | 23 kg | 34 kg | 68 kg | 91 kg | 113 kg |
| Numero di registrazione Ministero | | 2036453/R | | | | |



momo a 3 ruote. Ci facciamo un giro?

GMFCS
Level I-V

kg
max. 120



30-98,5 cm

16-23 cm

Sono la tua bellissima bicicletta. Sono pronta a fare un giro con te, se ne hai voglia. E pedalare non è solo divertente, è anche utile per allenare e muovere le tue articolazioni, la tua muscolatura e stimolare la tua circolazione. Mi puoi scegliere nelle combinazioni più diverse, cambiando selle, manubri e colori. Non ci sono limiti alla tua età, perchè sono disponibile in diverse dimensioni dal bambino fino all'adulto.





momo a 3 ruote.



Sella
disponibile in diverse
forme e dimensioni.

Supporto per la schiena
per sostenere il tronco.

Manubrio
disponibile in diverse versioni.

Geometria ottimizzata
per una salita semplice,
buona posizione di guida
e una grande manegge-
volezza.

Trasmissione a catena
estremamente silen-
ziosa.

Cambio
dalla versione a rapporto fisso,
quella a 7 marce, fino al motore
elettrico addizionale.

Telaio ribassato di serie
consente una sfilata confortevole e
autonoma.

Telaio
in lega di alluminio,
leggera e robusta.

Ricco catalogo accessori


per il supporto ottimale e la
personalizzazione, trovi ulteriori
informazioni a pag. 52.



**Hai scelta! Manubri, selle, supporti per i piedi,
poggiatesta e differenti trasmissioni!**



Colore telaio
12"

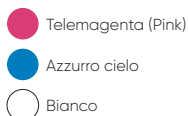

Colore telaio
16" e 20"



Colore telaio
24", 26" e 26" XL





| Dati tecnici | 12" | 16" | 20" | 24" | 26" | 26" (XL) |
|---|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Distanza dal pedale alla sella* | 30 - 38 cm | 42 - 57,5 cm | 50 - 64,5 cm | 56,5 - 73,5 cm | 66,5 - 83 cm | 74 - 90,5 cm |
| Distanza dal pedale alla sella** | 33 - 41 cm | 45 - 60 cm | 52 - 68 cm | 58 - 81,5 cm | 67,5 - 91 cm | 75 - 98,5 cm |
| Distanza dal supporto sella al telaio anteriore | 33 cm | 39 cm | 45 cm | 52 cm | 58 cm | 58 cm |
| Distanza tra le ruote ant./post. (passo) | 68 cm | 80 cm | 91 cm | 104 cm | 112 cm | 112 cm |
| Altezza minima telaio | 16 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm |
| Lunghezza totale | 102 cm | 120 cm | 140 cm | 165 cm | 178 cm | 178 cm |
| Larghezza totale | 58 cm | 65 cm | 69 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
| Portata massima | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg |
| Peso a vuoto | 12 kg | 14,5 kg | 17 kg | 19,5 kg | 21,5 kg | 21,7 kg |
| Registrazione ministeriale | 1386009/R | | | | | |

* con supporto sella standard / ** con supporto sella a T



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda
d'ordine.



follow me momo.

Vieni con me al lago?



Sono il tuo kit tandem. Così puoi fare le escursioni anche tu! Con me infatti la tua **momo a 3 ruote** può essere attaccata alla bicicletta dei tuoi genitori. Tramite un adattatore si attacca a quasi ogni bicicletta e una volta montato, posso fermare la tua carrozzina senza l'uso di attrezzi – anche durante una gita, quando sei stanco oppure quando il traffico ti rende insicuro. E dopo una breve pausa puoi ricominciare nuovamente a pedalare da solo!



Preparazione del triciclo
(da effettuare una sola volta).



Con me ti attacchi in sicurezza alla bicicletta dei tuoi genitori, se sei stanco, non hai più forza per pedalare, oppure quando il traffico diventa troppo pericoloso.



follow me momo.



Peso ridotto

per un trasporto facile e leggero
attaccato alla bicicletta dei tuoi
genitori.

Disponibilità di vari adattatori

consentono il montaggio a quasi tutti i tipi di
biciclette.

Telaio

si adatta a tutte le ruote
da 26" e 28".

Piastra di aggancio

può essere regolata facilmente
alla dimensione della tua ruota.

Staffa principale

per fissare gli attacchi
e l'altezza da terra

Snodo

serve alla tua sicurezza. Così le due biciclette
possono inclinarsi indipendentemente.





| Dati tecnici | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Ruote della bicicletta trainante | 26" - 28" | 26" - 28" | 26" - 28" |
| Ruote del triciclo | 12" (16" e 20" in opzione) | 16" + 20" | 24" + 26" |
| Portata massima (peso utilizzatore) | 40 kg | 60 kg | 80 kg |
| Peso | 5,1 kg | 5,1 kg | 8,7 kg |

bicicletta momo.

Sicuro in sella.

GMFCS
Level I-V

kg
max. 100



30-95 cm

16-23 cm

Sono la tua bicicletta per stimolare il tuo equilibrio.

Quando il tempo è buono e ti invita a fare un giro intorno al lago, io ci sono. Ma una gita con me può essere molto di più: a seconda di quanto tu ti senta sicuro, è possibile regolare le rotelle da rigide a flessibili. Così puoi allenare il tuo equilibrio un po' alla volta. Inoltre sono proprio bellina: non mi distingui quasi da una classica bicicletta senza funzionalità aggiuntive.





bicicletta momo.

Manubrio
sono disponibili diverse versioni.

Tipo di cambio
da rapporto fisso al cambio a 7 marce fino alla versione elettrica.

Sella
disponibile in diverse forme e dimensioni.

Freni
dalla misura 16"
sono di serie i freni a tamburo.

Pedale
possono essere configurati a piacere.

Rotelle
si possono regolare da rigide a molto morbide.


Telaio ribassato
consente un accesso facilitato.

Un ricco catalogo accessori
per il supporto ottimale e la personalizzazione, trovi ulteriori informazioni a pag. 52.

Hai scelta! Tra molti manubri, selle, pedivelle, poggiatesta e tipi di cambio – da rapporto fisso fino a 3 marce con retromarcia!



Colore telaio 12"

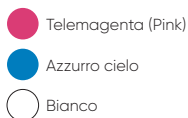

Colore telaio 16" e 20"



Colore telaio 24" e 26"






**Con me puoi sviluppare il tuo equilibrio,
la tua coordinazione e la tua resistenza.**



Rotelle dinamiche

sono regolabili a seconda delle tue capacità. Regolate fisse, per darti la massima sicurezza e fiducia, nel corso della terapia possono essere regolate fino a diventare molto morbide.

Sono un sostegno in curva e nelle strade sconnesse offrono una buona trazione.

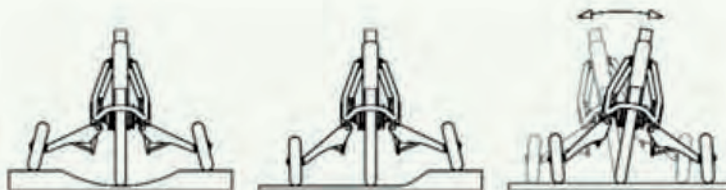

| Dati tecnici | 12" | 16" | 20" | 24" | 26" |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Distanza tra pedali e sella* | 30 - 38 cm | 42 - 57,5 cm | 50 - 64,5 cm | 59 - 76,5 cm | 71,5 - 87,5 cm |
| Distanza tra pedali e sella** | 33 - 41 cm | 45 - 60 cm | 52 - 68 cm | 61 - 84 cm | 73 - 95 cm |
| Distanza dal supporto sella al telaio anteriore | 33 cm | 39 cm | 45 cm | 53 cm | 58 cm |
| Interasse | 64 cm | 76 cm | 89 cm | 104 cm | 112 cm |
| Lunghezza totale | 99 cm | 122 cm | 148 cm | 168 cm | 178 cm |
| Altezza minima telaio | 16 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 23 cm |
| Ingombro in larghezza | 43 cm | 52 cm | 62 cm | 71 cm | 76 cm |
| Portata massima | 35 kg | 50 kg | 65 kg | 100 kg | 100 kg |
| Peso | 10,5 kg | 13 kg | 15 kg | 18 kg | 20 kg |
| Registrazione ministeriale | 1386008/R | | | | |

* con supporto sella standard / ** con supporto sella a T



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda d'ordine.



accessori momo. Una scelta variegata.



Manubrio ovale con
leva freno ad anello



Limitatore di
sterzo



Protunga per manubrio



Standard



Al Gel



Con guide per le cosce



Per monoruota



Per motorino

| | Dati tecnici | Mis. 1 | Mis 2. | Mis. 3 |
|------------------------|-----------------|---------|---------|--------|
| Standard | Larghezza | 15 cm | 15 cm | 18 cm |
| | Lunghezza | 21 cm | 24 cm | 26 cm |
| Al Gel | Larghezza post. | 19 cm | 24 cm | - |
| | Larghezza ant. | 4 cm | 7 cm | - |
| | Lunghezza | 24 cm | 27 cm | - |
| Con guide per le cosce | Larghezza post. | 20,5 cm | 24 cm | - |
| | Larghezza ant. | 4 cm | 4 cm | - |
| | Lunghezza post. | 9,5 cm | 9,5 cm | - |
| | Lunghezza tot. | 14,5 cm | 14,5 cm | - |

| | Dati tecnici | Mis. 1 |
|---------------|------------------|--------|
| Per monoruota | Larghezza post. | 11 cm |
| | Larghezza centro | 6 cm |
| | Larghezza ant. | 8 cm |
| | Lunghezza | 25 cm |
| Per motorino | Larghezza post. | 26 cm |
| | Larghezza ant. | 9,5 cm |
| | Lunghezza post. | 12 cm |
| | Lunghezza tot. | 25 cm |



Riduttore regolabile



Riduttore



Snodo per contratture
al ginocchio



| | Mis. 1 | Mis 2. | Mis. 3 |
|--------------|---------|---------------|---------------|
| Standard | Per 12" | Per 16" | Per 20" - 26" |
| A forma di T | Per 12" | Per 16" + 20" | Per 24" + 26" |



Staffa di supporto
in 4 misure

con relativo attacco

| | Mis. 1 | Mis. 2. | Mis. 3 | Mis. 4 |
|------------------|--------|---------|--------|--------|
| Altezza massima* | 20 cm | 30 cm | 37 cm | 53 cm |
| Profondità | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |

* misurata dalla sella Standard alla estremità superiore della pelotta

Classic **Touring** **Tondo** **Multifunzione**

| | Dati tecnici | Mis. 1 | Mis 2. | Mis. 3 | Mis. 4 |
|----------------------|--------------|---------|--------|--------|--------|
| Classic | Larghezza | 47 cm | 49 cm | 52 cm | 58 cm |
| | Profondità | - | - | - | - |
| Touring | Larghezza | 55 cm | 58 cm | - | - |
| | Profondità | 17 cm | 17 cm | - | - |
| Tondo | Larghezza | 40 cm | 43 cm | - | - |
| | Profondità | 17 cm | 25 cm | - | - |
| Multifunzione | Larghezza | 61,5 cm | - | - | - |
| | Profondità | 16,5 cm | - | - | - |



accessori momo. Un'ampia scelta.



Pedale da corsa



Ciclette



Sandalo



Sandalo con supporto caviglia



Sandalo con supporto caviglia dinamico

Supporti per la schiena e il bacino dinamici e regolabili in larghezza



| | Dati tecnici | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| Supporto per la schiena dinamico | Larghezza | 20 - 30 cm | 25 - 35 cm | 30 - 40 cm |
| Supporto per il bacino dinamico | Larghezza | 20 - 28 cm | 25 - 33 cm | 30 - 36 cm |
| Supporto per la schiena regolabile in larghezza | Larghezza | 20 - 28 cm | 25 - 33 cm | 30 - 36 cm |
| Supporto per il bacino regolabile in larghezza | Larghezza | 20 - 28 cm | 25 - 33 cm | 30 - 36 cm |

Supporto per la mano



Cinghia per il tronco



Pettorina



| | Dati tecnici | Mis. 0 | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 |
|-----------------------|---------------------|--------|---------|---------|---------|
| Supporto per la mano | Larghezza anteriore | 8,5 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm |
| Cinghia per il tronco | Larghezza | - | 5 cm | 6,5 cm | 7 cm |
| | Lunghezza | - | 18,5 cm | 25,5 cm | 30,5 cm |
| Pettorina | Larghezza interna | - | 8 cm | 9 cm | 12 cm |
| | Larghezza totale | - | 25 cm | 30 cm | 34 cm |
| | Altezza del lato | - | 10 cm | 12 cm | 16 cm |
| | Altezza totale | - | 28 cm | 30 cm | 35 cm |



Maniglia di spinta



**Guida per accompagnatore
tramite tiranti**



**Kit di rotelle per biciclette
standard**

(Larghezza di aggancio min. 120 mm)



motore elettrico momo. Veloce come il vento.

Lo sapevi già, che la tua bicicletta o triciclo momo può essere dotata di un motore elettrico? Il supporto elettrico ti aiuta nella pedalata, quando fai fatica a partire o quando hai problemi alla muscolatura.

I nostri motori sono installati nella ruota anteriore e ti forniscono fino a 250 Watt per aiutarti quando stai per partire. Le possibilità di programmazione sono molte e una chiara formulazione dell'obiettivo che si vuole conseguire permette di trovare la configurazione più utile.

Alcuni sistemi funzionano tramite sensori di movimento, che riconoscono immediatamente la pressione sui pedali e si attivano nella modalità prevista. In alternativa si possono utilizzare sensori di forza, che non riconoscono il movimento bensì si attivano quando rilevano il superamento della forza minima prevista. E' possibile programmare parametri come lo sviluppo della forza

impressa, la modalità di partenza, il supporto e la velocità massima. Il supporto viene quindi erogato a seconda della forza impressa.

La scelta degli elementi di comando è altrettanto ampia e il sistema può essere personalizzato a piacimento. Che si tratti di manopole o tasti, attivazione tramite te o tramite un accompagnatore, la tecnica offre molteplici soluzioni. Le più moderne soluzioni per gli accumulatori e di elettronica di controllo forniscono una funzionalità eccezionale.

I motori elettrici di supporto sono il completamento ideale per il tuo **triciclo momo**, e la tua **bicicletta momo**, e ti aiutano ad arrivare dove tu vuoi.

Per una consulenza personalizzata siamo volentieri a disposizione.

La potenza erogata dal motore può essere variata, in modo da avere differenti programmi.



Display

installabile sul manubrio o sul portapacchi.





boris. Una cosa pulita.

GMFCS
Level III-V

kg
max. 150



26-46 cm

31-48 cm

(-5°-30°)



Sono la tua confortevole sedia da doccia e da bagno

Che si tratti di lavarsi i denti o di farsi la doccia, la mia basculazione si adatta ad ogni situazione. La superficie anatomica del mio guscio ti dà il necessario appoggio, stabilizza il tuo tronco e può essere regolato in altezza. E se vuoi stare ancor più comodo ci sono le imbottiture, che sono rimovibili e possono essere lavate molto facilmente. Sono stata realizzata in un materiale estremamente robusto, per poterti aiutare per tanti anni. Lo sapevi che sono disponibile in 5 misure e che posso portare fino a 150 Kg?



**Sull'imbottitura rimovibile
opzionale**
puoi stare veramente comodo.



**Supporto per le braccia
rotante**
per darti ulteriore stabilità.



Poggiatesta

può essere regolato in altezza e inclinazione.

Poggiabraccia

imbottito, sfilabile.

Imbottitura rimovibile

per ridurre i picchi di pressione.

Guscio

di forma anatomica. Fornisce supporto al bacino e stabilizza il tronco.

Telaio super robusto

in acciaio inox.

Pedale per la basculazione

consente un'inclinazione da -5° a 30° in continuo.

Pedane


sono ribaltabili per favorire i passaggi.

**Vaso rimovibile**

per poterla utilizzare come sedia da bagno.

Nelle misure 2-4

l'apertura è maggiorata come nella figura a lato.

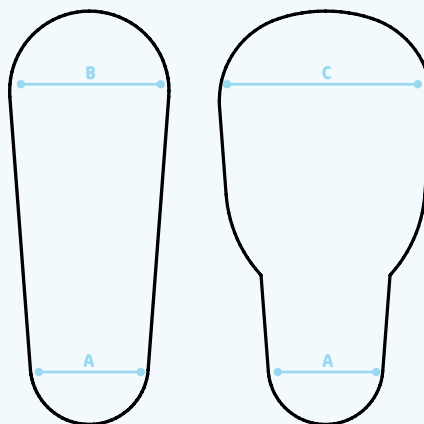



| Dati tecnici | | Mis. 0 | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 | Mis. 4 |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Larghezza seduta anteriore | | 31 cm | 36 cm | 41 cm | 46 cm | 51 cm |
| Larghezza seduta posteriore | | 26 cm | 31 cm | 36 cm | 41 cm | 46 cm |
| Profondità di seduta | | 31 cm | 36 cm | 41 cm | 46 cm | 48 cm |
| Altezza schienale | | 49 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 65 cm |
| Basculazione | | (-)5° - 30° | (-)5° - 30° | (-)5° - 30° | (-)5° - 30° | (-)5° - 30° |
| Altezza minima da terra | | 47 - 57 cm | 45 - 55 cm | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm |
| Ingombro in larghezza | | 56 cm | 61 cm | 63 cm | 71,5 cm | 74 cm |
| Ingombro in profondità | | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 70 cm | 70 cm |
| Lunghezza gambe | | 38 cm | | | 48 cm | |
| Distanza da inizio foro WC al muro | | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm |
| Larghezza anteriore dell'apertura | A | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Larghezza posteriore dell'apertura | B | 12 cm | 12 cm | 13,5 cm | 13,5 cm | 13,5 cm |
| Larghezza posteriore dell'apertura* | C | - | - | 18,5 cm | 18,5 cm | 18,5 cm |
| Portata massima | | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 100 kg | 150 kg |
| Peso | | 28 kg | 30 kg | 33 kg | 35 kg | 38 kg |

* vale solo per le misure 2 b, 3 b e 4 b



Ulteriori informazioni su accessori
sono disponibili nella scheda
d'ordine.



L'ausilio per l'igiene molto facile.

GMFCS
Levels III-V



Sono la tua sedia per doccia e WC e un assoluto fan dell'acqua!

Con le mie tante basi diverse, ti accompagno con tutto ciò che vuoi fare in bagno - che sia il trasferimento, se usato come sedia da toilette o sotto la doccia. L'angolo del mio schienale può essere regolato esattamente su di te, in modo che tu possa piegarti in avanti e indietro. Dato che sono molto versatile con le mie diverse basi, posso adattarmi a qualsiasi stanza e supportarti alla perfezione.

I pulsanti e le leve blu

ti mostrano i punti dove puoi regolare l'altezza, la profondità o l'inclinazione dello schienale e senza l'utilizzo di attrezzi.

Basculazione regolabile ad ogni altezza.
(base telescopica)





Staffa di fissaggio

che consente l'installazione della seduta su ogni WC.

La staffa può rimanere permanentemente montata senza limitarne l'utilizzo.



Diverse basi (4 tipi)

regolabili in altezza per ogni tipo di ambiente



Base a ruote



Base a puntali



Base per vasca da bagno



Base telescopica

Reclinazione schienale
regolabile da -6° a 18° .

Pelotte toracali
offrono più stabilità.

Imbottitura seduta
in 2 possibili varianti. Disponibile
anche in versione chiusa.

Base
regolabile in altezza e
basculazione.

Ruotine
consentono spostamenti
più agevoli e scorrevoli.

Poggiatesta
regolabile in altezza
profondità e angolo.

Imbottiture rimovibili
facili da pulire.

Unità seduta multifunzionale
regolabile in profondità..

Braccioli
offrono un appoggio sicuro.

Guide per il bacino
forniscono il supporto necessario.

Cuneo di abduzione
guida le gambe.

Pedana
pieghevole per un facile
trasferimento.



Tavolino estraibile

con piano di appoggio addominale
imbottito per aiutarti quando vai in
bagno.



Secchio WC

grazie a me sei indipendente,
anche senza un WC..



Kit da viaggio hts.

prendimi con te quando vai
in viaggio.



Colore telaio Bianco



| | | Dati tecnici | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 |
|---|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Larghezza | Base a ruote | | 53 cm | 53 cm | 57 cm |
| | Base fissa | | 51 cm | 51 cm | 53 cm |
| | Base telescopica | | 67 cm | 67 cm | 71 cm |
| Altezza seduta | Base a ruote | | 39 - 55 cm | 39 - 55 cm | 44 - 58 cm |
| | Base fissa | | 33 - 43 cm | 36 - 44 cm | 38 - 48 cm |
| | Base telescopica | | 51 - 78 cm | 51 - 78 cm | 51 - 78 cm |
| Larghezza seduta | | | 20* / 25* / 30 cm | 25* / 30* / 36 cm | 33* / 38* / 43 cm |
| Profondità seduta | | | 20 / 23 / 25 / 28 cm | 29 / 32 / 34 / 37 cm | 37 / 40 / 42 / 44 cm |
| Altezza braccioli | | | 13.5 cm | 17 cm | 20 cm |
| Larghezza schienale | | | 29 cm | 34 cm | 41 cm |
| Lunghezza gambe | | | 22 - 34 cm | 27 - 39 cm | 34 - 44 cm |
| Altezza schienale | | | 42 cm | 50 cm | 62 cm |
| Altezza max. WC | Base a ruote | | 52 cm | 52 cm | 52.5 cm |
| | Base fissa | | 38 cm | 38 cm | 42 cm |
| Lunghezza | Base a ruote | | 74 cm | 74 cm | 81 cm |
| | Base fissa | | 71 cm | 71 cm | 74 cm |
| | Base telescopica | | 84 cm | 84 cm | 87 cm |
| Lunghezza da parte ant. foro seduta all'estremità posteriore della base | | | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Reclinazione schienale | | | (-)6°, 6°, 18° | (-)6°, 6°, 18° | (-)6°, 6°, 18° |
| Basculazione | | | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° |
| | | | (-)15° - 15° | (-)15° - 15° | (-)15° - 15° |
| Portata massima | | | 34 kg | 68 kg | 113 kg |
| Numero di registrazione Ministero | | | 2036437/R | | |

* regolabile tramite pelotte per il bacino



Uno sguardo nuovo.

GMFCS
Level IV-V



Sono il tuo nuovo stabilizzatore supino.

Con me, il tuo trasferimento dalla posizione sdraiata alla posizione eretta è sicuro e confortevole, anche se non sei coinvolto attivamente. Con le mie varie opzioni di regolazione, mi adatto in modo molto preciso al tuo corpo, dalla testa ai piedi. In tal modo ti sostengo, ti offro sicurezza e ti aiuto a trasferire il peso. Con me hai una nuova prospettiva; sei all'altezza degli occhi dei tuoi amici e puoi essere spinto, rendendo così possibile la tua partecipazione alle attività di gruppo. Stare in piedi regolarmente ha un effetto positivo sulle strutture e funzioni del corpo e promuove le attività e la crescita.

new

Mis.
3 & 4



Supporto reclinabile
offre una superficie di contatto
confortevole regolabile.

Pelotte per il tronco e il bacino
regolabili, facilitano la posizione
eretta dando stabilità e
supporto.

Angolo delle ginocchia
regolabile in continuo fino a 65°.

Pedane
con guide per i talloni
regolabili in continuo.


Poggiatesta
regolabile in continuo.

Pettorina regolabile
fornisce supporto ed è realizzata
di materiale elastico e traspirante.

Cinghia pelvica
dà sicurezza e avvolge il bacino.

Supporti per le ginocchia
regolabili in continuo, possono
essere ruotate di 15°
in ogni direzione.

5 ruote
offrono grande
stabilità e facili trasferimenti.

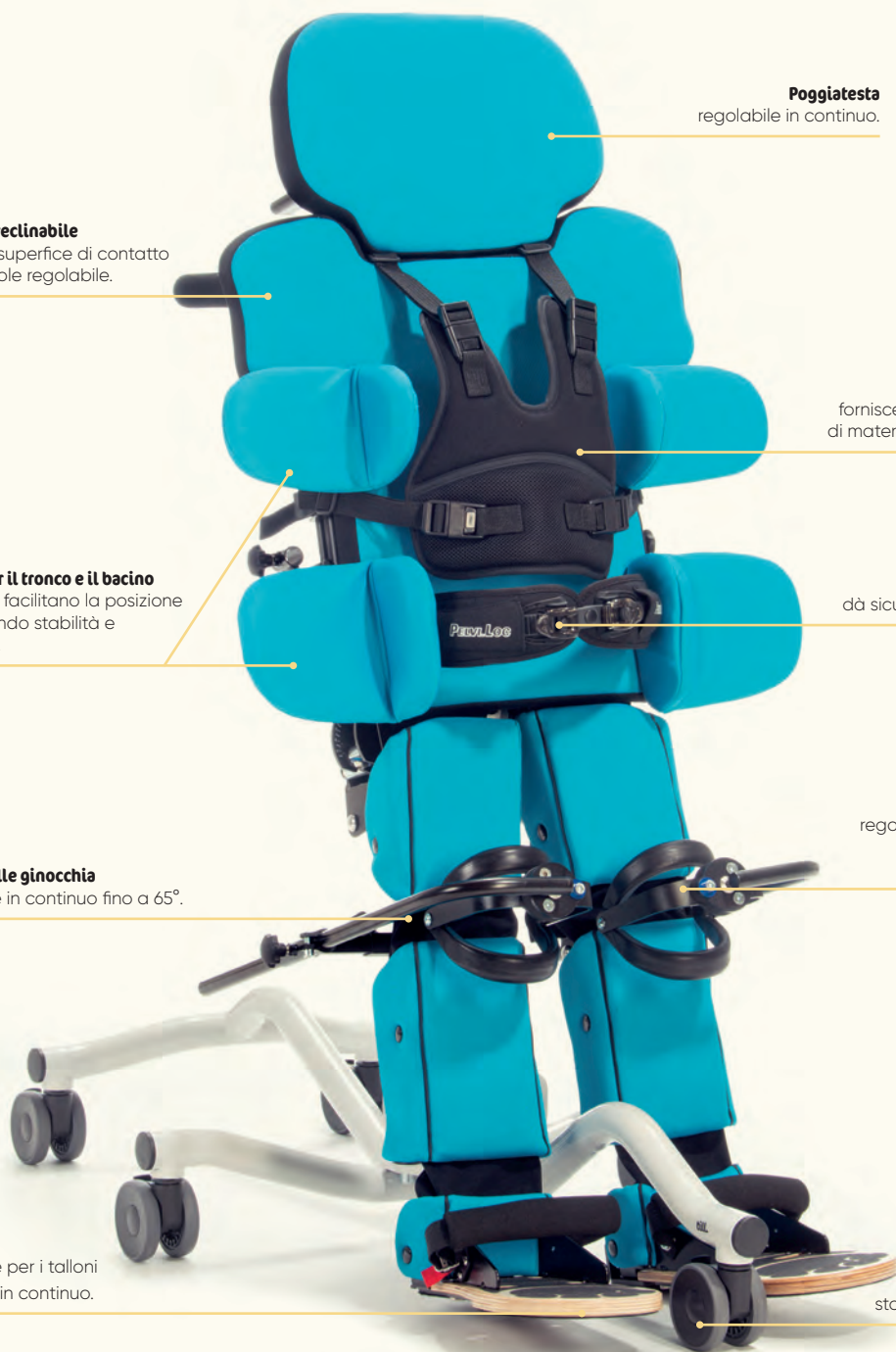





Posso essere regolato in altezza e inclinazione in modo molto semplice. Così posso facilmente portarti all'altezza di tua sorella.



Inclinazione precisa del piano
possibile da 0-90° tramite
una molla a gas.



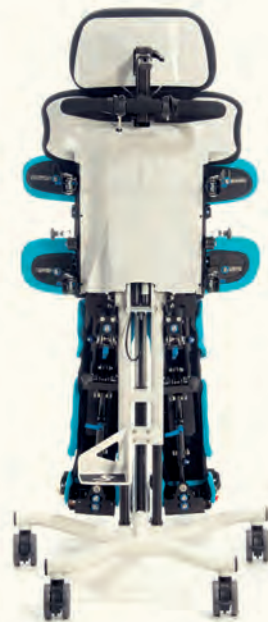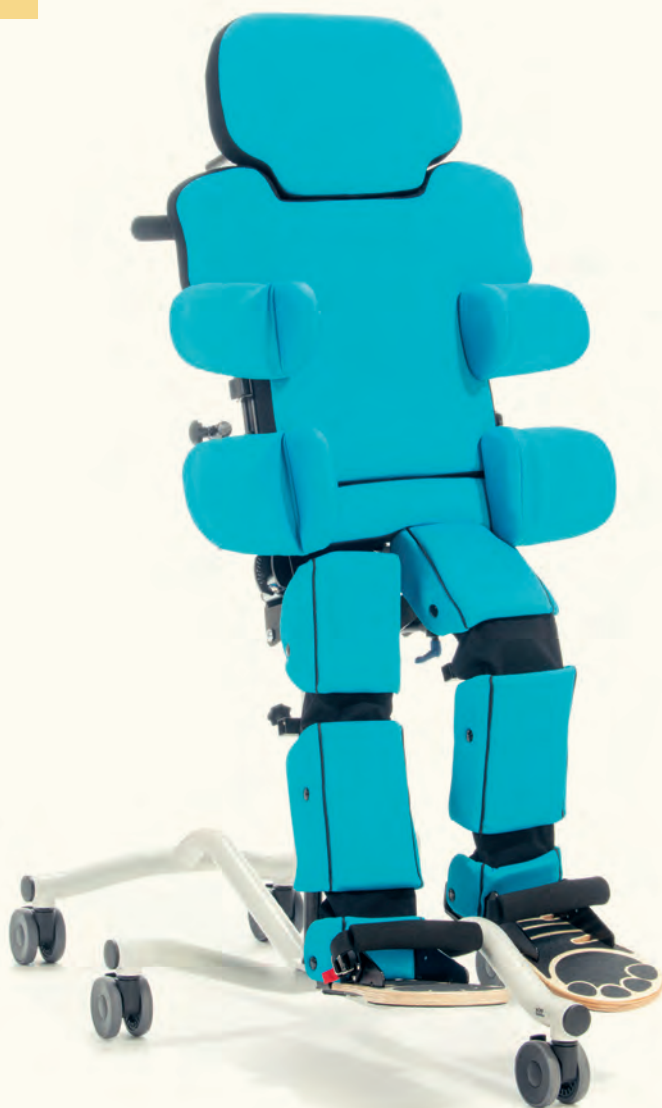


Posizione ottimale dei piedi
tramite la regolazione
nelle 3 direzioni.



Guida perfetta per le gambe
resa possibile dalla regolazione in
lunghezza e angolo.



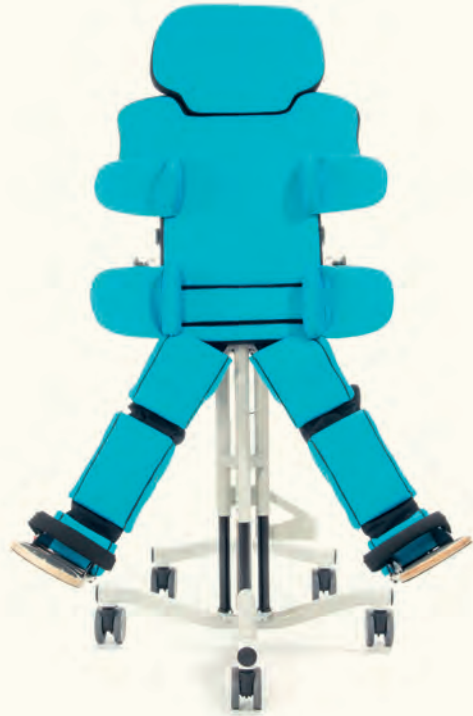

Abduzione precisa delle gambe
da 0-30°
tramite vite di regolazione

| Dati tecnici | | Mis. 1 | Mis. 2 | Mis. 3 | Mis. 4 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Schiena | Altezza | 75 - 115 cm | 100 - 135 cm | 120 - 160 cm | 145 - 185 cm |
| | Larghezza | 16 - 26 cm | 20 - 30 cm | 20 - 37 cm | 27 - 46 cm |
| | Altezza | 30,5 - 43 cm | 38 - 48 cm | 49 - 61 cm | 58 - 69 cm |
| Gambe | Suola - ginocchia | 20,5 - 30,5 cm | 27,5 - 37 cm | 32,5 - 45 cm | 42 - 54 cm |
| | Ginocchia - cavallo | 12 - 18,5 cm | 16,5 - 24 cm | 20 - 29,5 cm | 24,5 - 34 cm |
| | Angolo ginocchia | 0° - 65° | | | |
| | Angolo bacino | 0° - 45° | | | |
| | Abduzione | 0° - 30° | | | |
| | Compensazione in altezza | 0 - 5 cm | | | |
| Piedi | Estensione | 0° - 20° | | | |
| | Pronazione | 0° - 15° | | | |
| | Intra extra rotazione | 0° - 15° per direzione | | | |
| Altezza piano orizzontale (per trasferimenti) | | 53,5 - 73,5 cm | 60 - 85 cm | 71,5 - 93,5 cm | 82,5 - 104,5 cm |
| Inclinazione | | 0° - 90° | | | |
| Dimensioni di trasporto (Lu x La x H) | | 95 x 51 x 75 cm | 105 x 61 x 85 cm | 125 x 76 x 97 cm | 152 x 77 x 110 cm |
| Portata massima | | 30 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg |
| Peso | | 30 kg | 35 kg | 80 kg | 90 kg |



en