




Pompe à insuline t:slim X2

à technologie **Control-IQ+**

Eviola
diagnostic reçu en 2012



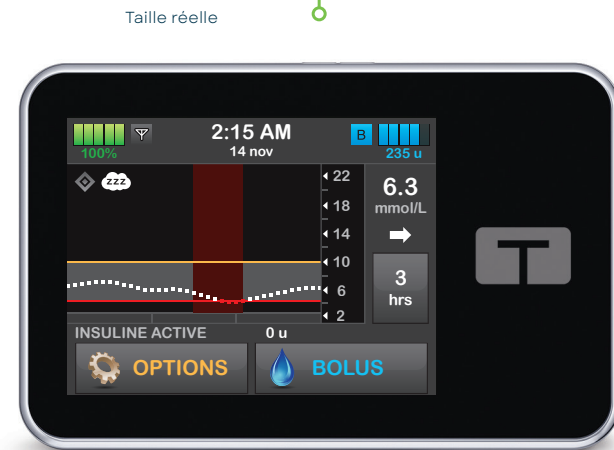

Pompe à insuline
t:slim X2

Control-IQ+

Testée. Fiable. Meilleure.


La pompe à insuline t:slim X2 fonctionne avec la technologie Control-IQ+, le meilleur algorithme à ce jour de Tandem Diabetes Care et le seul Système d'administration automatisée d'insuline (AAI) avec AutoBolus capable de vous maintenir dans la plage cible.

79
%

Temps dans la cible

Moyenne du temps passé dans la plage avec la technologie Control-IQ+ sans augmentation de l'hypoglycémie*.

Nolan
diagnostic reçu en 2017

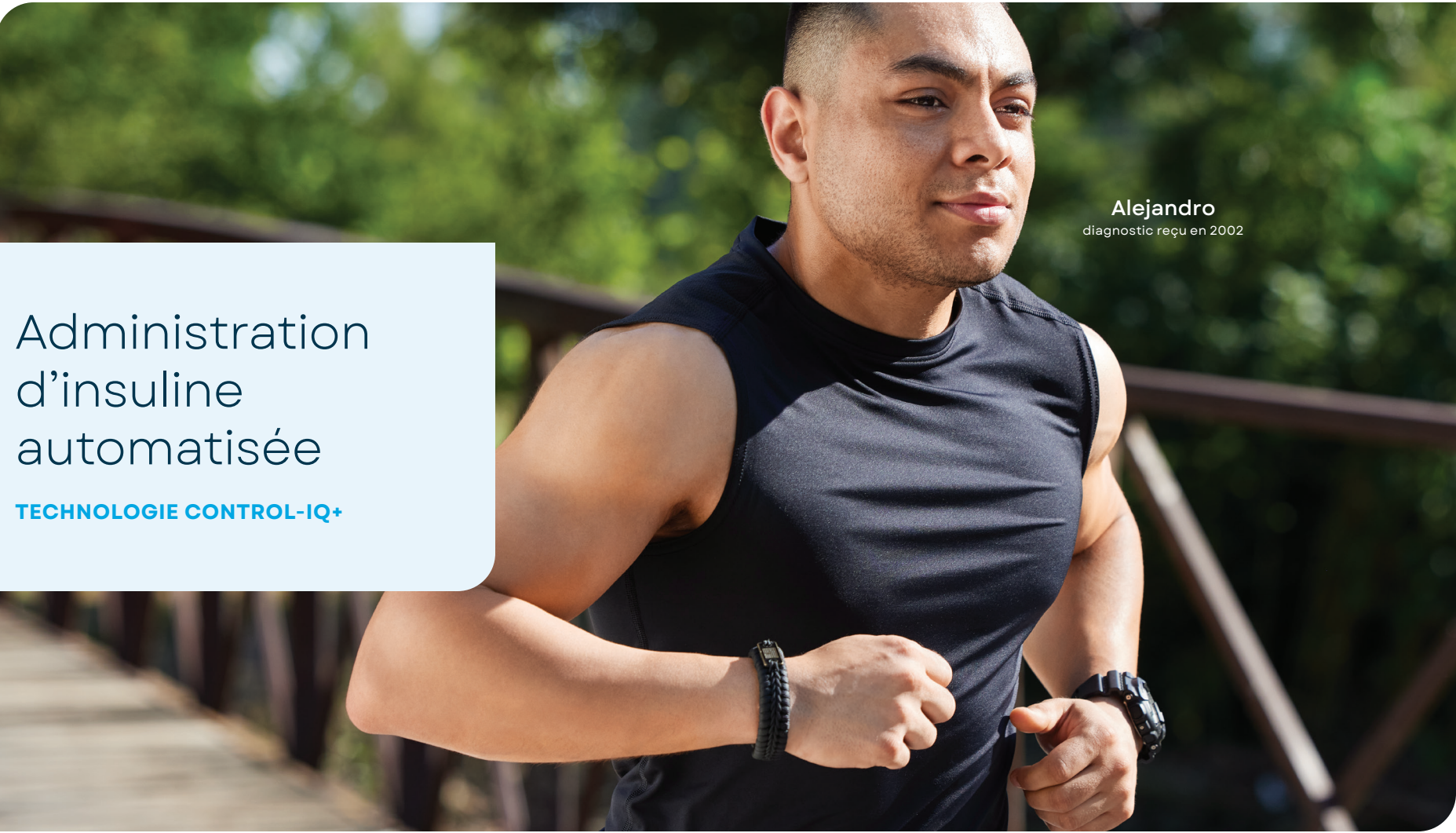

Alejandro
diagnostic reçu en 2002

Administration d'insuline automatisée

TECHNOLOGIE CONTROL-IQ+

Prédit les taux de glycémie

La pompe t:slim X2 fonctionne avec la technologie Control-IQ+ qui utilise les valeurs des capteurs de SGC pour prédire les taux de glycémie 30 minutes à l'avance et ajuster automatiquement la dose d'insuline selon les besoins.



Contribue à prévenir l'hyperglycémie

Augmente l'insuline basale et administre les AutoBolus[†] si la glycémie prédite par le capteur est élevée.

ET



Contribue à prévenir l'hypoglycémie

Diminue ou arrête l'insuline basale si la glycémie prédite par le capteur est basse.



La technologie Control-IQ+ est le seul Système avec AutoBolus.



Ont affirmé qu'elle
est facile à utiliser

Pourcentage
d'utilisateurs
de la technologie
Control-IQ+ et
participants à l'étude
ayant affirmé qu'elle
était simple d'emploi².



Temps dans la cible durant la nuit
Tel que rapporté par les participants à l'étude³.

ADMINISTRATION D'INSULINE AUTOMATISÉE

Réglages des activités

La technologie Control-IQ+ comprend des réglages d'activité optionnels qui réduisent la plage des valeurs de traitement.



Taille réelle



Activité Sommeil

Utilise une plage de valeurs de traitement plus basse pour contribuer à prévenir les épisodes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie pendant le sommeil.




Activité Exercice

Utilise une plage de valeurs de traitement plus élevée pour contribuer à prévenir les épisodes d'hypoglycémie pendant l'exercice physique.

Réglage de l'administration d'insuline

Le seul Système avec AutoBolus qui signale les bolus repas manqués et contribue à prévenir l'hyperglycémie. Les icônes (ci-dessous) montrent quand l'administration d'insuline basale est en cours d'ajustement ou si un AutoBolus (💧) est administré.

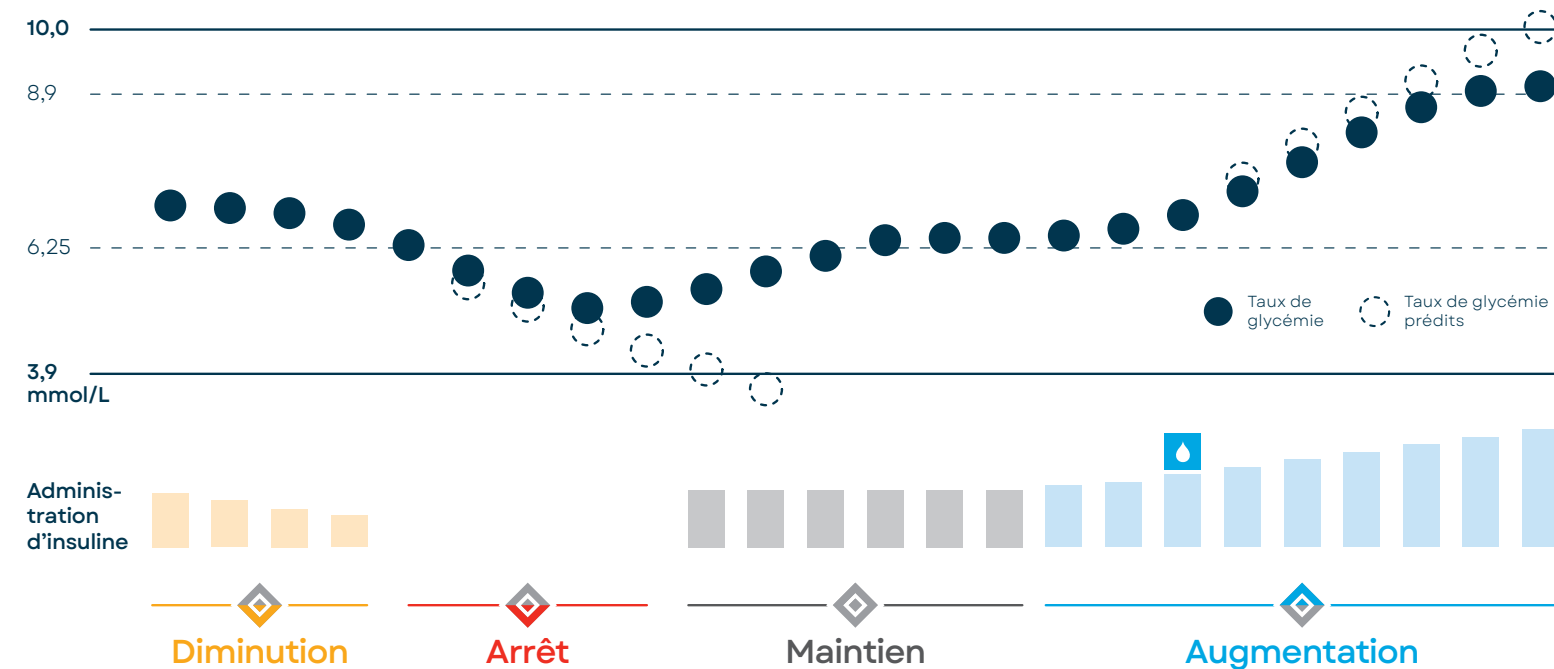

Fonctionnement des pompes à insuline

Tout comme un pancréas sain, une pompe à insuline administre un seul type d'insuline qui s'écoule dans un dispositif de perfusion par l'intermédiaire d'une tubulure souple. De là, elle est administrée sous la surface de la peau.



Dosage simple

Une pompe administre une dose précise d'insuline (débit basal) toutes les 5 minutes pour répondre à vos besoins changeants, 24 h/24, 7 j/7. La pompe vous permet également d'administrer l'insuline aux repas (bolus).




Choix de l'ensemble

Choisir le bon ensemble de perfusion joue un rôle important dans la réussite d'un traitement par pompe à insuline. La pompe à insuline t:slim X2 est compatible avec différents ensembles de perfusion, ce qui vous permet de choisir la longueur de tubulure, l'angle d'insertion et le matériau les mieux adaptés à votre style de vie.



Liberté de déconnecter

Il est facile de déconnecter temporairement un ensemble de perfusion de votre pompe à insuline pour la douche, le spa ou les sports de contact. Le reconnecter est tout aussi simple!

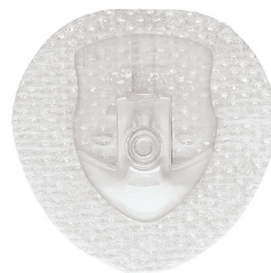

Avantages de la thérapie par pompe à insuline



Meilleur contrôle de la glycémie qu'avec des injections quotidiennes et dose totale quotidienne d'insuline moins importante^{4,5,6}.



La pompe t:slim X2 offre un suivi précis et détaillé de toute l'insuline administrée.



Diminution des périodes d'hyperglycémie, sans augmentation des épisodes d'hypoglycémie grave⁶.

1460
injections par
seringue/an*



122
insertions d'un
ensemble de
perfusion/an*

Intégration de la SGC

Même si vous mesurez souvent votre glycémie par prélèvement au bout du doigt, cette information n'est pas toujours suffisante.



Le meilleur contrôle glycémique

Combinaison de la SGC avec une méthode d'administration d'insuline automatisée, telle que la technologie Control-IQ+, offre le meilleur contrôle glycémique global par rapport aux injections quotidiennes multiples ou à une thérapie par pompe à insuline standard⁷.



Michael
diagnostic reçu en 1972

POMPE À INSULINE T:SLIM X2

Le choix n° 1 pour les nouveaux utilisateurs et ceux qui remplacent leur pompe⁸



Capacité d'insuline

Grâce à son réservoir plat innovant, la pompe t:slim X2 compacte peut contenir jusqu'à 300 unités d'insuline.



Écran tactile couleur

La pompe t:slim X2 est facile à lire et intuitive. Elle s'intègre facilement dans votre vie tout comme un appareil intelligent moderne et sophistiqué.



Boîtier résistant

Cette pompe est munie d'un boîtier léger, ultrasolide et en verre résistant au bris. De plus, elle est étanche[^].





Bolus rapide

Vous permet d'administrer l'insuline à la pression d'un bouton sans devoir détacher votre pompe ou la sortir de votre poche.



Balayez le code
Testez l'interface de la pompe à insuline t:slim X2 avec votre téléphone intelligent.

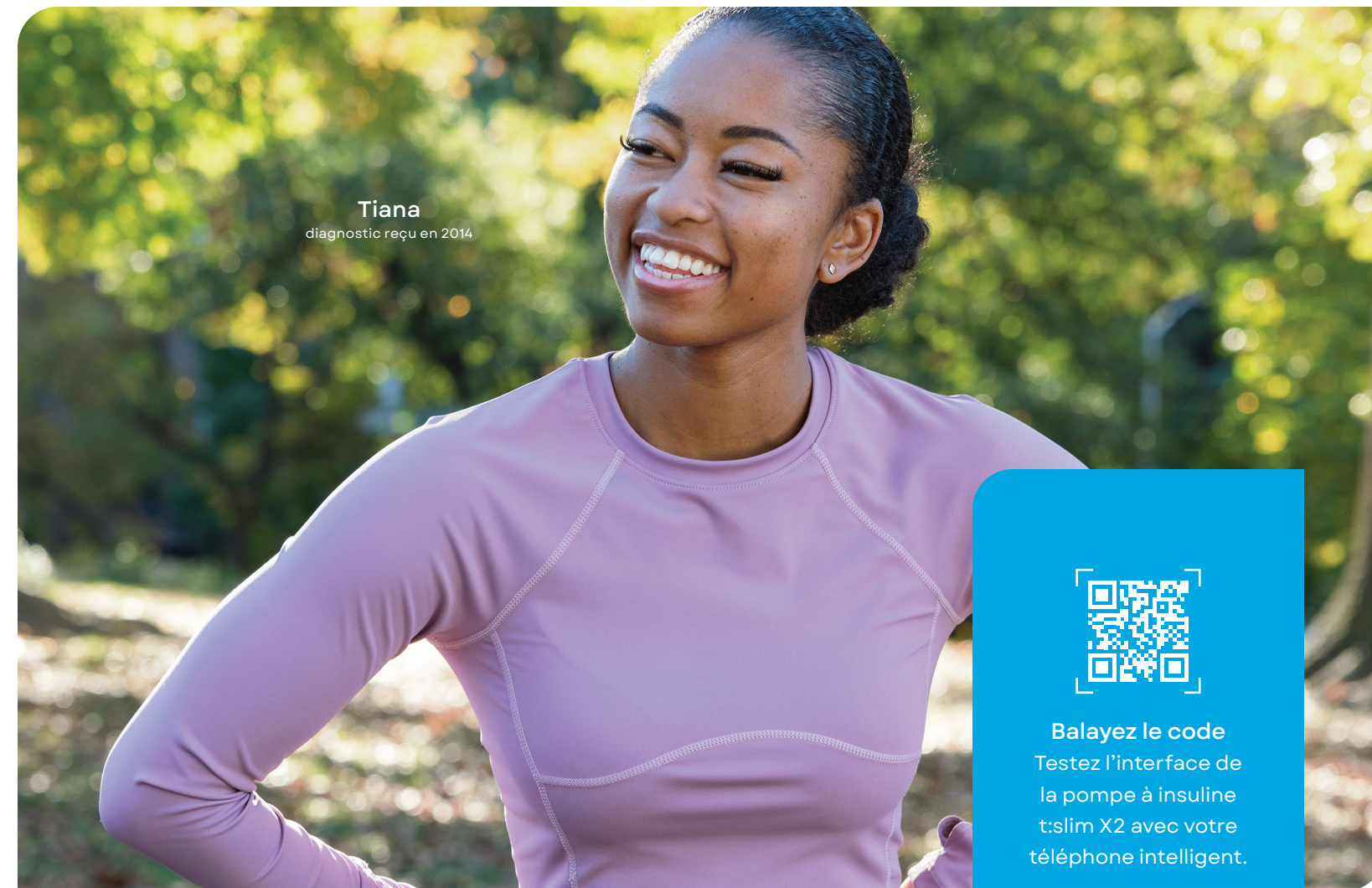

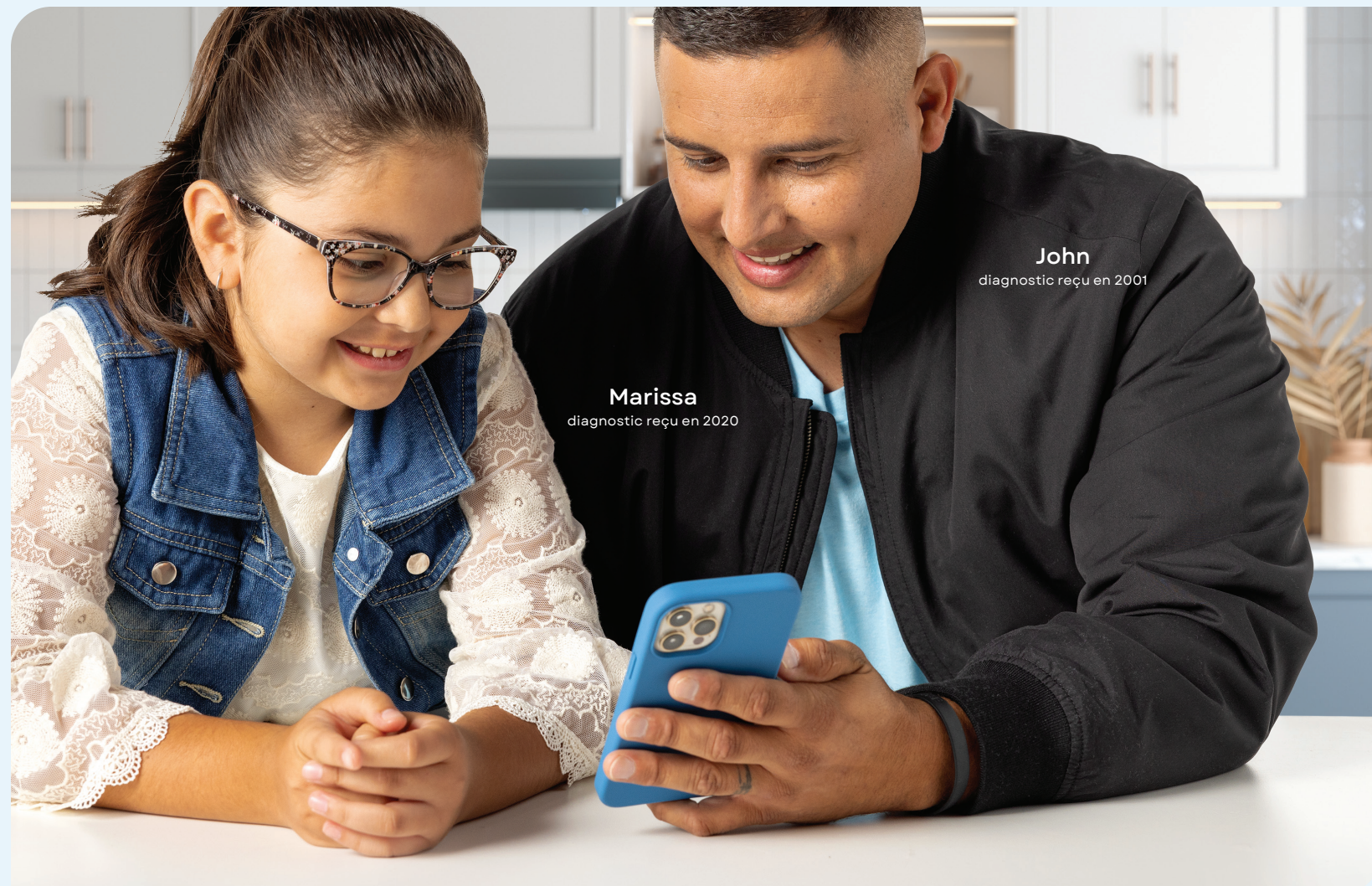



John
diagnostic reçu en 2001

Marissa
diagnostic reçu en 2020



Bolus administré directement depuis votre téléphone intelligent

L'application mobile Tandem t:slim vous permet d'administrer facilement vos bolus depuis votre téléphone intelligent** sans devoir toucher votre pompe t:slim X2.

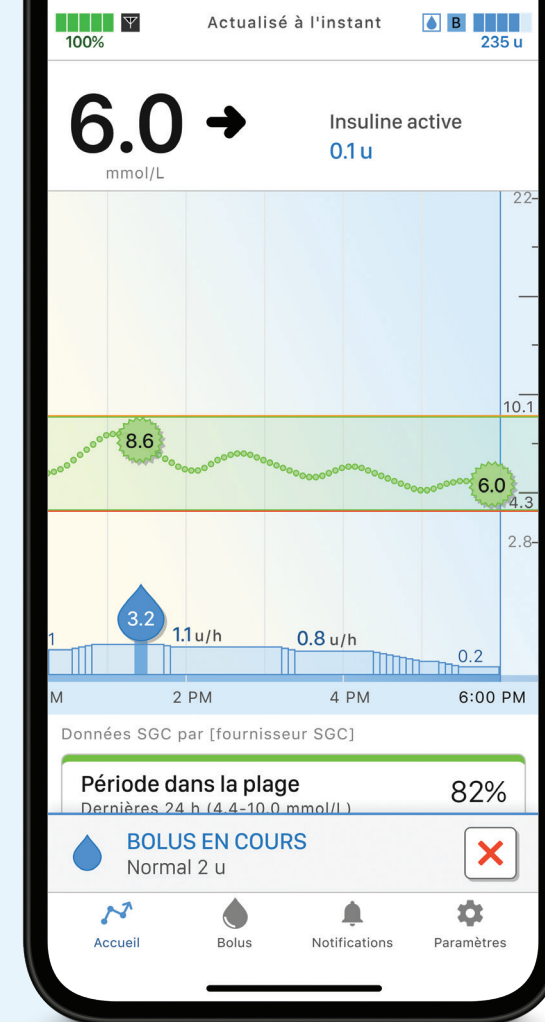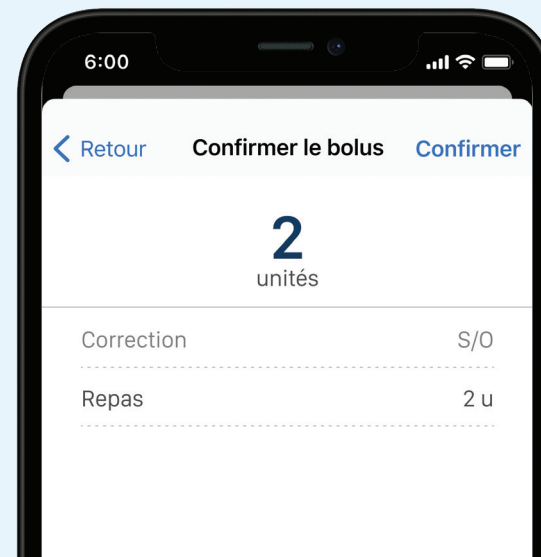

La flexibilité accrue vous permet de porter votre pompe à des endroits du corps plus nombreux et de gérer plus facilement votre diabète.



Consultez votre insuline active et les glucides, réglages actuels, alertes et état directement sur votre téléphone intelligent**.

PLATEFORME DE GESTION DU DIABÈTE

Plateforme Tandem Source



Informations significatives

Visualisez facilement les données de votre pompe et de la SGC avec votre professionnel de la santé afin de pouvoir mieux comprendre et gérer votre diabète.



Rapports simples

Le fait de pouvoir accéder à l'ensemble de vos données de traitement sur une seule plateforme peut faciliter la prise en charge du diabète. Il n'est plus nécessaire de consulter différents tableaux de bord et sites Web.

Aperçu


Offre une vue d'ensemble des données de traitement de votre pompe.

Calendrier journalier

Indique les valeurs de glycémie, l'administration d'insuline basale et les bolus.

Paramètres de la pompe

Affiche les réglages de la pompe, y compris les profils personnels.

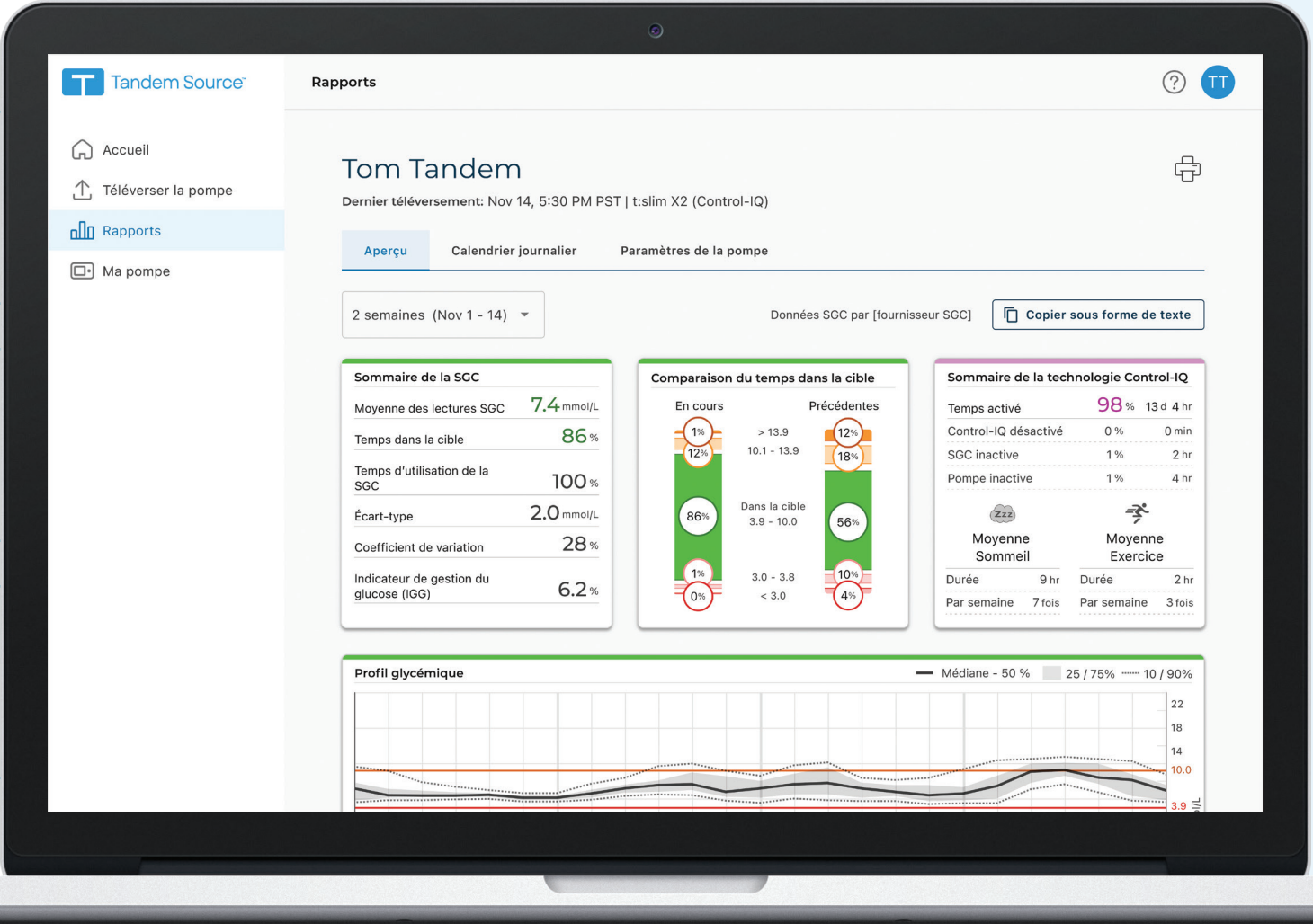

Tandem Source me permet, ainsi qu'à mon endocrinologue, de comparer mes résultats de glycémie des deux dernières semaines à ceux des périodes précédentes. Je vois à quel point mes taux de glycémie se sont améliorés.



Kiersten

diagnostic reçu en 1994

Remarque : Les symptômes, situations, circonstances et résultats individuels peuvent varier.

+ Fonctionnalités supplémentaires d'une pompe moderne



Calculateur de bolus
Utilisez un calculateur intégré pour administrer votre insuline aux repas (bolus). Laissez Tandem faire les calculs.




Téléversement des données

À chaque visite chez votre professionnel de la santé, vous pouvez partager vos données par une connexion sans fil, sans devoir brancher votre pompe**.



Réglages personnalisés

Créez plusieurs profils avec diverses plages horaires pour tenir compte de vos besoins changeants en insuline.

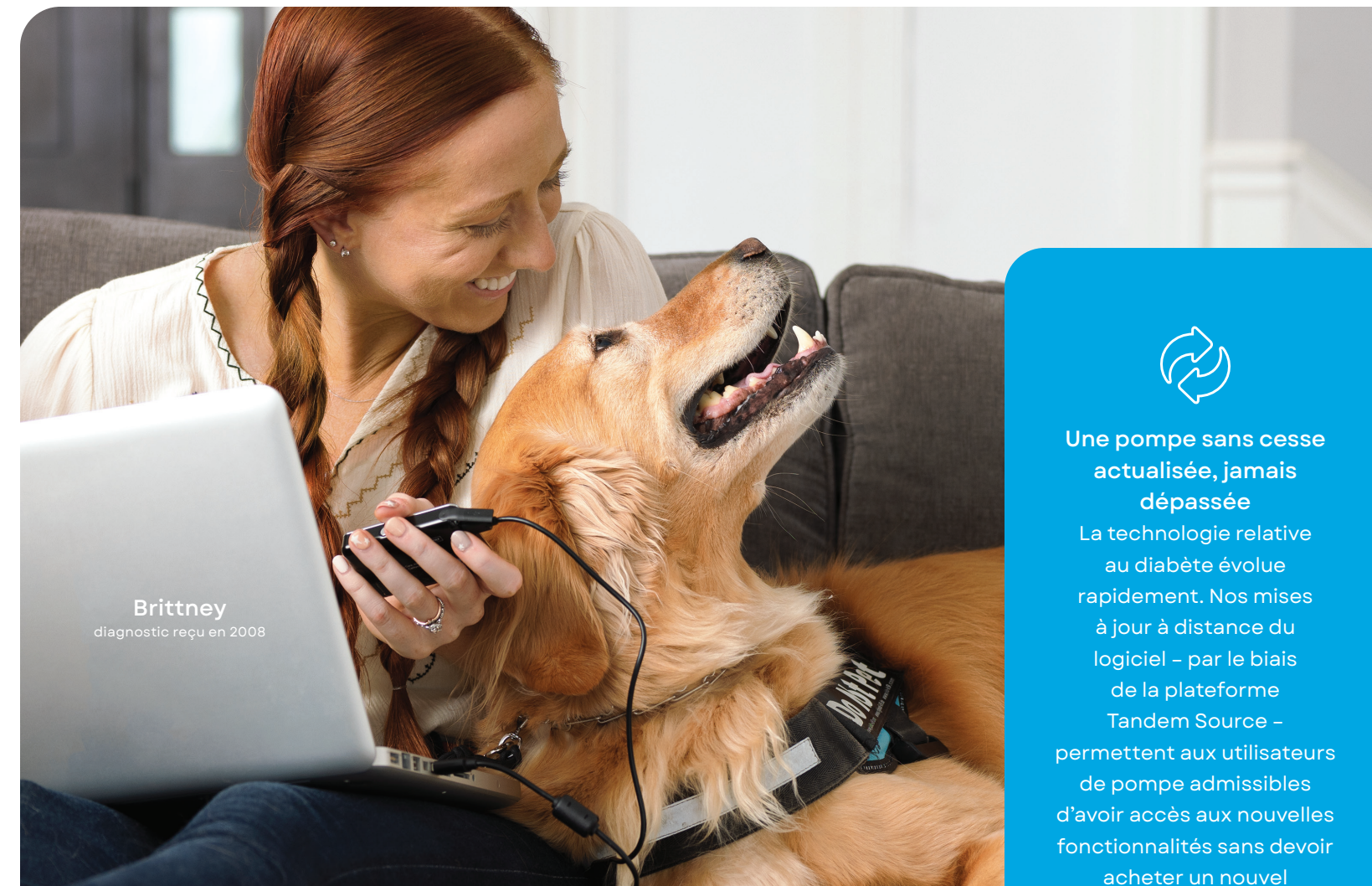

Brittney
diagnostic reçu en 2008



Une pompe sans cesse actualisée, jamais dépassée

La technologie relative au diabète évolue rapidement. Nos mises à jour à distance du logiciel – par le biais de la plateforme Tandem Source – permettent aux utilisateurs de pompe admissibles d'avoir accès aux nouvelles fonctionnalités sans devoir acheter un nouvel appareil⁹⁸.

Comparer les options

Voici en quoi la pompe à insuline t:slim X2 se distingue des autres systèmes de boucle fermée hybrides (HCL).

	Tandem Pompe à t:slim X2	Medtronic MiniMed 780G	Insulet Système Omnipod 5	My Life Système Ypso
Dosage automatisé de l'insuline	•	•	•	•
AutoBolus†	•			
Bolus prolongé dans le HCL	•			
Débit basal temporaire dans le HCL	•			
Profils personnels multiples dans le HCL	•			
Activités Exercice et Sommeil dédiées	•			
Bolus depuis votre téléphone/pompe**	•			•
Intégration du capteur Dexcom G7 dans le Système de SGC [§]	•		•	
Pompe dotée d'un bouton pour l'administration de bolus	•			•



Marian
diagnostic reçu en 1990

“

Ma pompe Tandem est ma meilleure amie. Lorsque je me retourne pendant la nuit, elle se retourne avec moi. Grâce à elle, je me sens en bonne santé.



Jessica
diagnostic reçu en 2003

“

Avant la technologie Control-IQ+, j'avais toujours l'impression d'être un pas en retard sur mon diabète. Maintenant, j'ai toujours l'impression d'avoir une longueur d'avance.



Tristan
diagnostic reçu en 1997

“

La technologie Control-IQ+ met mon diabète en arrière-plan et me permet de me concentrer sur ce qui est important.



Kathryn
diagnostic reçu en 2018

“

Que je sois en train de chanter sur scène pendant 2 heures et demie lors d'un opéra, d'enseigner ou de voyager, la technologie Control-IQ+ m'aide au quotidien.

Remarque : Les symptômes, situations, circonstances et résultats individuels peuvent varier.

REJOIGNEZ LA FAMILLE TANDEM

Créer de nouvelles possibilités pour les personnes vivant avec le diabète

Kristy
diagnostic reçu en 1995



Assistance locale

Un représentant Tandem et un spécialiste clinique de formation en diabète sont à votre disposition dans votre région.



Politique de retour

Même si nous nous portons garants de la qualité de nos pompes, il est encore plus important que nous soyons à vos côtés si vous n'êtes pas 100 % satisfait dans les 90 jours suivant votre achat**.



Vérification de votre couverture d'assurance
Nous vous accompagnerons tout au long du processus de vérification et nous efforcerons d'obtenir pour vous le paiement direct le plus bas possible.



Formation avec un spécialiste

Nous proposons des services personnalisés d'éducation, de formation et de dépannage pour tous les produits Tandem.



Garantie limitée de 5 ans

Nous sommes là pour vous aider! Nous pouvons remplacer rapidement votre pompe à insuline pour minimiser toute perturbation de votre traitement.



Assistance client
En plus de l'assistance technique 24 h/24, 7 j/7, nous offrons divers autres services pour faciliter autant que possible l'utilisation de votre pompe.



Programme d'accès à la pompe

Notre programme d'accès à la pompe permet aux utilisateurs de pompes autres que Tandem et toujours sous garantie de passer à la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ pour la durée restante de la garantie de leur pompe actuelle.

Pour en savoir plus sur l'admissibilité au programme, notamment sur les conditions générales, veuillez visiter le site tandemdiabetes.com/upgrade

FAITES LE PREMIER PAS

Commencez à utiliser une pompe Tandem dès aujourd'hui

Nous collaborerons avec votre professionnel de la santé pour remplir les documents nécessaires et déterminer votre couverture d'assurance. Pour commencer le processus, suivez simplement les étapes ci-dessous.



Balayez le code

Voyez comme il est facile de se lancer!



tandemdiabetes.com/getstarted



(833) 509-3598



(833) 509-3599




Vérification

Un représentant de Tandem vous contactera dans les deux jours ouvrables pour confirmer vos renseignements.



Finalisez la commande

Nous vous aiderons tout au long du processus de commande et vous informerons régulièrement de son état d'avancement.

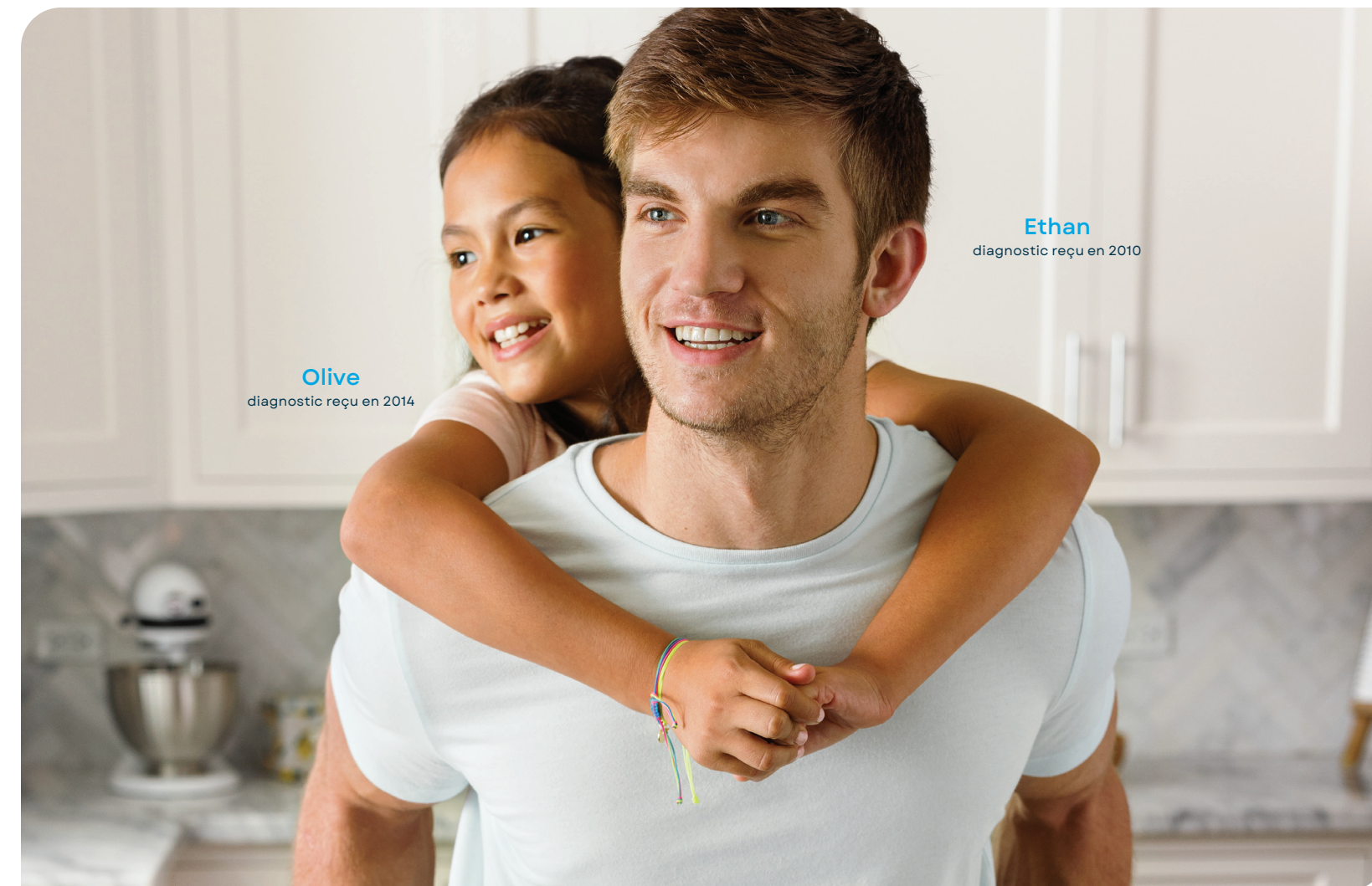

Olive

diagnostic reçu en 2014

Ethan

diagnostic reçu en 2010

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

* Avec facteur de correction optimisé basé sur la « règle de moins de 88/DTQ ». † Si les valeurs de glucose prédites sont supérieures à 10,0 mmol/L, la technologie Control-IQ+ calcule un AutoBolus à partir des paramètres du profil personnel et d'une cible de 6,1 mmol/L, puis administre 60 % de cette valeur. ‡ Basé sur quatre injections par jour pour les seringues et un changement de site tous les trois jours pour les pompes. § Dispositif de SGC vendu séparément. ^ Testé à 0,91 m (3 pieds) pendant 30 minutes (classe IP27). ** L'administration des bolus depuis l'application mobile Tandem t:slim nécessite un modèle de téléphone intelligent et un Système d'exploitation compatibles, une mise à jour de l'application, une mise à jour à distance du logiciel sur la pompe t:slim X2 et une formation supplémentaire. †† Les alertes et alarmes doivent être arrêtées depuis la pompe t:slim X2 seulement, et non pas depuis l'application, après quoi elles disparaissent également de l'application mobile. ‡‡ Les téléversements vers la plateforme Tandem Source ne sont pas effectués en temps réel. Les professionnels de la santé, les utilisateurs de la pompe ou les aidants ne doivent pas s'y fier pour assurer le monitoring du patient à distance. Les tarifs de données standard peuvent s'appliquer. Téléphone intelligent vendu séparément. §§ Les autres mises à jour de fonctionnalités peuvent ne pas être actuellement disponibles pour la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ et doivent être approuvées par Santé Canada. Une formation supplémentaire peut être nécessaire pour avoir accès à certaines mises à jour logicielles à venir. Les mises à jour logicielles ne sont offertes qu'aux clients dont la pompe est sous garantie au moment où elles sont effectuées. Des frais peuvent s'appliquer. Il est possible que les mises à jour futures de certains ou de tous les produits Tandem ne soient pas développées et ne soient pas offertes partout. Tandem peut, à sa discrétion, cesser d'utiliser certains logiciels et certaines fonctionnalités au fil du temps. ^^ Le retour du produit nécessite un motif médical valable et de bonne foi, confirmé par le professionnel de la santé du client. Consultez la politique de retour à tandemdiabetes.com/fr-ca/legal/returned-goods pour plus de détails.

Remarque : Des études ont été menées à l'aide de la pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ et le dispositif de SGC Dexcom G6.

Références

1. Messer LH, Breton M. *Diabetes Technol Ther*. 2023;25(12):877-882. 2. Kudva YC, et al. *Diabetes Technol Ther*. 2021;23(10):673-683. 3. Breton MD, Kovatchev BP. *Diabetes Technol Ther*. 2021;23(9):601-608. 4. Brown SA, et al. *N Engl J Med*. 2019;381(18):1701-1717. 5. Bode BW, et al. *Diabet Metab Res Rev*. 2002;18(S1):S14-S20. 6. Hoogma RPLM, et al. *Diabet Med*. 2005;23(2):141-147. 7. Nørgaard K, et al. *Diabetes Care*. 2023;dc231137. 8. Q&A Canada Patient Voice H2 2025

Il est possible que ce produit ne réponde pas à vos besoins. Lisez l'étiquette et suivez toujours les instructions.

Renseignements importants sur la sécurité

La pompe à insuline t:slim X2 avec la technologie Control-IQ+ (le Système) se compose de la pompe à insuline t:slim X2, qui comprend la technologie Control-IQ+, de l'application mobile Tandem t:slim et d'un dispositif de surveillance du glucose en continu (SGC) compatible (vendu séparément).

La pompe à insuline t:slim X2 est conçue pour l'administration sous-cutanée d'insuline, à des débits fixes et variables, pour la prise en charge du diabète chez

les personnes ayant besoin d'insuline. La pompe est en mesure de communiquer de manière fiable et sécuritaire avec des appareils compatibles et connectés numériquement. La pompe à insuline t:slim X2 ne peut être utilisée que pour l'administration continue d'insuline et comme composante du Système. La pompe est destinée à des personnes âgées de deux (2) ans et plus. La pompe est conçue pour un usage individuel. Control-IQ+ est conçue pour être utilisée avec un SGC compatible et la pompe à insuline t:slim X2 pour augmenter, diminuer et arrêter automatiquement l'administration d'insuline basale en fonction des lectures de la SGC et des valeurs de glycémie prédites. La technologie peut également administrer des bolus de correction lorsqu'il est prédit que la valeur de glycémie dépassera un seuil prédéfini. Control-IQ+ est conçue pour la prise en charge du diabète de type 1 chez les personnes âgées d'au moins deux (2) ans. Control-IQ+ est conçue pour un usage individuel.

Avertissement : La technologie Control-IQ+ ne doit pas être utilisée chez des personnes de moins de deux ans. Elle ne doit pas non plus être utilisée chez les patients qui nécessitent une dose d'insuline totale quotidienne de moins de 5 unités ou qui pèsent moins de 9 kilogrammes (20 livres), car ce sont les valeurs minimales requises pour que la technologie Control-IQ+ fonctionne en toute sécurité.

Le Système n'a pas été évalué pour l'utilisation chez les femmes enceintes, les personnes en dialyse ou les utilisateurs gravement malades. N'utilisez pas le Système en cas de prise d'hydroxyurée.

Les utilisateurs de la pompe et du Système doivent : être aptes et disposés à utiliser la pompe à insuline, la SGC et tous les autres composants du Système conformément à leur mode d'emploi respectif; vérifier leur taux de glycémie selon les recommandations d'un professionnel de la santé; démontrer des compétences adéquates en matière de calcul des glucides; posséder des compétences suffisantes en matière de prise en charge autonome du diabète; consulter régulièrement un professionnel de la santé; et avoir une bonne acuité visuelle et additive pour reconnaître toutes les fonctions de la pompe, y compris les alertes, les alarmes et les rappels. Si les alertes et les mesures du SGC ne correspondent pas à vos symptômes, mesurez votre glycémie à l'aide d'un indicateur de glycémie, même si votre capteur n'indique pas de taux dans la plage haute ou basse. Si les mesures de votre application mobile Tandem t:slim ne correspondent pas à vos symptômes, vérifiez l'écran de la pompe et assurez-vous que celle-ci a établi une connexion Bluetooth® avec votre téléphone intelligent. La pompe t:slim X2 doit être retirée avant toute radio, IRM, tomographie à émission de positrons ou TEP. Visitez le site tandemdiabetes.com/safetyinfo pour de plus amples renseignements importants sur la sécurité.

Application mobile Tandem t:slim : Les fonctionnalités disponibles dans l'application mobile t:slim dépendent de la version du logiciel de la pompe, ainsi que du modèle et du Système d'exploitation (SE) du téléphone intelligent compatible.

• Les fonctionnalités **Affichage et Téléversement des données** fournissent un affichage secondaire de données relatives à la pompe et à la surveillance du glucose en continu (SGC), y compris l'affichage des alertes et alarmes de pompe, et elles permettent le téléversement sans fil des données de la pompe et de la SGC vers le nuage Tandem par le biais d'une connexion de données sans fil ou Internet. Les tarifs de données standard peuvent s'appliquer.

- Les fonctionnalités **Administration de bolus plus Affichage et Téléchargement des données** permettent en outre aux utilisateurs de demander, arrêter et annuler un bolus sur la pompe à partir de l'application mobile Tandem t:slim. Au moins un paramètre de sécurité doit être activé sur le téléphone intelligent pour que vous puissiez utiliser la fonctionnalité d'administration du bolus de l'application mobile Tandem t:slim.
- **AVERTISSEMENT :** Basez-vous toujours sur votre pompe pour prendre des décisions relatives au traitement si vous utilisez un téléphone intelligent non compatible avec la fonctionnalité d'administration du bolus.
- **PRÉCAUTIONS :** Basez-vous toujours sur votre pompe pour prendre des décisions relatives au traitement si vous utilisez un téléphone intelligent non compatible, si le téléphone intelligent est perdu ou endommagé, ou si le téléphone intelligent perd la connectivité Bluetooth® avec la pompe. Les alertes et alarmes importantes de la pompe ne sont transmises sous forme de notifications que lorsque cette fonctionnalité est activée et que l'application est active ou fonctionne en arrière-plan.

La plateforme Tandem Source est destinée à être utilisée par des personnes atteintes de diabète sucré qui utilisent des pompes à insuline Tandem Diabetes Care, ainsi que par leurs aidants et leurs professionnels de la santé, à domicile et en milieux hospitaliers. La plateforme Tandem Source prend en charge la gestion du diabète en affichant et analysant les données téléversées à partir des pompes à insuline Tandem. Tandem Source est autorisé à la vente par Santé Canada.

Ces ensembles de perfusion sont destinés à la perfusion sous-cutanée d'insuline administrée par la pompe t:slim X2 pour le traitement du diabète. Ils sont indiqués pour un usage unique. Pour consulter les contre-indications, les avertissements, les précautions et d'autres renseignements importants, veuillez vous reporter au mode d'emploi accompagnant les ensembles de perfusion.

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care, les logos Tandem, Control-IQ, Control-IQ+, t:slim X2, Tandem Source et t:slim sont des marques déposées ou des marques de commerce de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 et tous les logos et dessins de marque connexes sont des marques déposées ou des marques de commerce de Dexcom, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. La lettre de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par Tandem Diabetes Care, Inc. fait l'objet d'une licence. Toutes les autres marques de tierces parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MAT-0779_2