




Tener los dientes
más blancos le da
la confianza a sus
pacientes para
sonreír más.

Una sonrisa más blanca puede iluminar su mundo

Opalescence™
tooth whitening systems



LA HISTORIA OPALESCENCE™

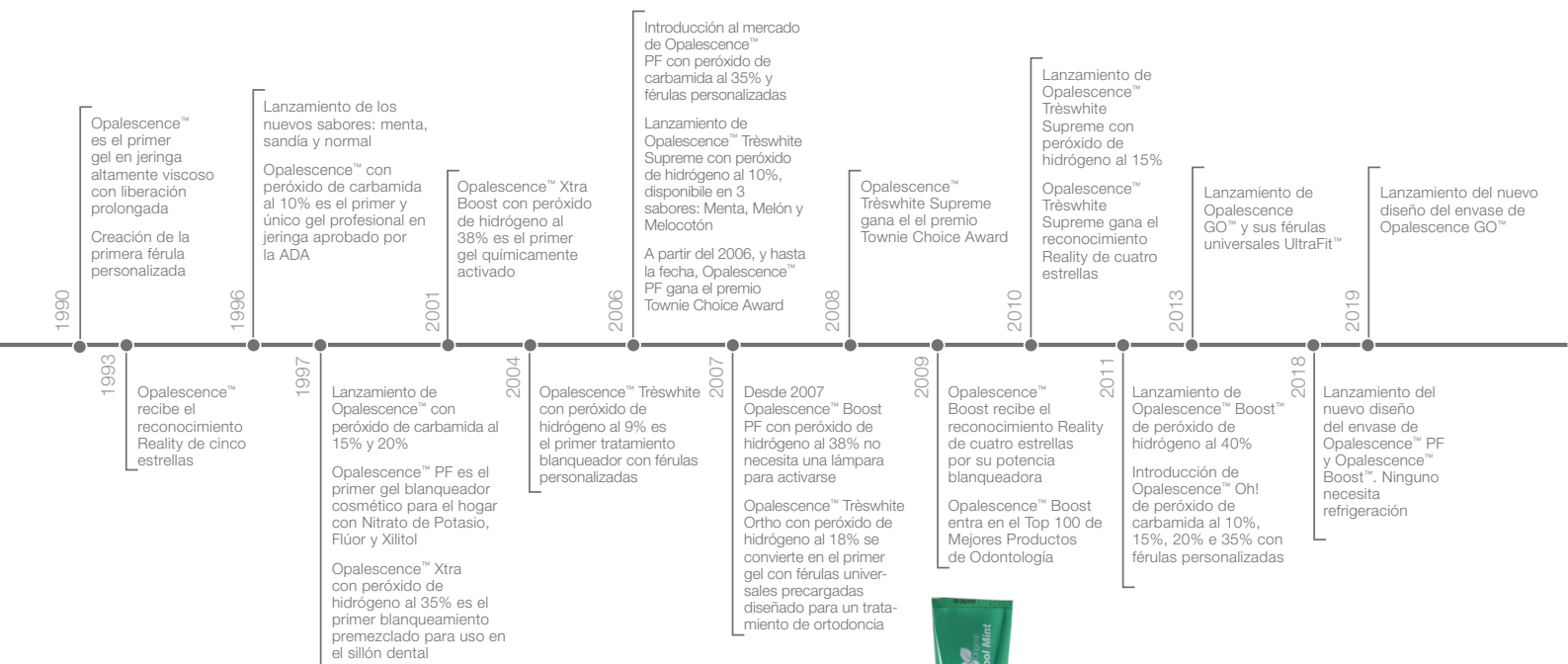

BLANQUEE LAS SONRISAS DE SUS PACIENTES

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL BLANQUEAMIENTO DENTAL

Opalescence™
tooth whitening systems



Son muchos los motivos por los que pueden aparecer manchas en los dientes. Algunas manchas afectan a todo el arco: estas decoloraciones suelen estar ocasionadas por la comida, las bebidas y el tabaco; son manchas y colores que migran al esmalte.

¿Cómo funciona el blanqueamiento?

Los geles de blanqueamiento Opalescence™ contienen un ingrediente de blanqueamiento activo, o bien peróxido de carbamida o bien peróxido de hidrógeno. Los geles de peróxido se descomponen en agua, oxígeno y moléculas de oxígeno reactivo. Estas moléculas de oxígeno reactivo tratan tanto el esmalte como la dentina, oxidando los enlaces de las moléculas de manchas de decoloración. Al cambiar las moléculas manchadas, el diente se hace más claro.¹

Las moléculas de oxígeno reactivo permean todo el diente, por lo que no es necesario que toda la superficie del diente esté en contacto con el agente blanqueante para que se blanquee todo el diente.

¿El blanqueamiento afecta a la fuerza de adhesión?

Aunque los agentes de blanqueamiento liberan oxígeno en los dientes, los adhesivos no se debilitan.

Nota: Deje pasar de 7 a 10 días entre el blanqueamiento y la aplicación de cualquier resina. La alta concentración de oxígeno en el diente podría afectar de forma negativa y significativa a la polimerización de las resinas.

¿Cuánto tiempo dura el blanqueamiento?

Los resultados del blanqueamiento son muy estables. No obstante, dependiendo de su alimentación y sus hábitos, es posible que el procedimiento deba repetirse de forma periódica. Debido a la seguridad de los agentes de blanqueamiento, esto no debería ser motivo de preocupación.

¿El blanqueamiento causa sensibilidad en los dientes?

Puede que el blanqueamiento produzca sensibilidad. Si se produce, será pasajera y desaparecerá una vez completado el tratamiento de blanqueamiento. Para los tratamientos de desensibilización, recomendamos el gel desensibilizador UltraEZ™ o el barniz de flúor Enamelast. Opalescence™ Whitening Toothpaste Relief también puede

utilizarse para prevenir o reducir la sensibilidad en caso de que se produzca.


¿El blanqueamiento debilitará el esmalte del diente?

No. No se ha demostrado que el blanqueamiento debilite el esmalte del diente.^{2,3,4}

IMPORTANTE:

¡La supervisión del dentista es la mejor forma de blanqueamiento!

Los tratamientos de blanqueamiento dental son eficaces y seguros si se usan adecuadamente y con los materiales correctos. Esto incluye un examen exhaustivo, información sobre el procedimiento de blanqueamiento elegido y supervisión del paciente durante la fase de tratamiento. El tratamiento por parte del paciente con productos de venta sin receta a menudo no da los resultados esperados y deja al paciente sin opciones para solucionar la posible sensibilidad u otros problemas.

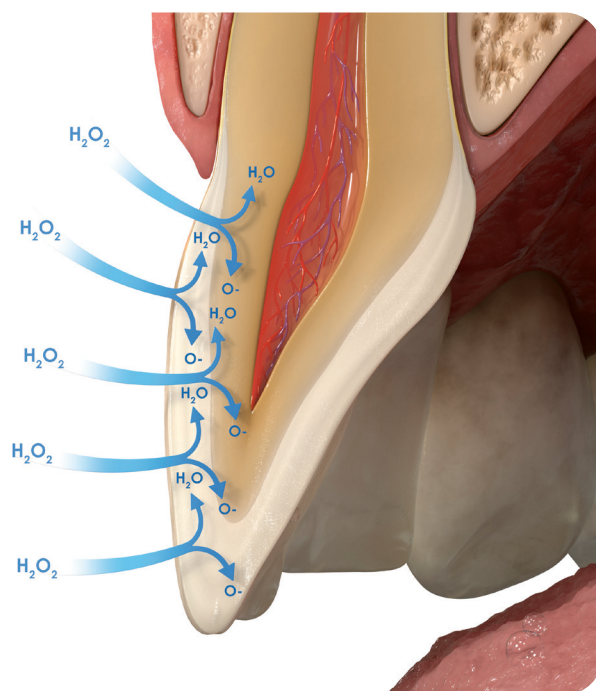

1. Kwon SR, Wertz PM. Review of the Mechanism of Tooth Whitening. J Esthet Restor Dent. 2015 Sep-Oct;240-57.

2. Metz MJ, Cochran MA, Matis BA, Gonzalez C, Platt JA, Pund MR. Clinical evaluation of 15% carbamide peroxide on the surface microhardness and shear bond strength of human enamel. Oper Dent. 2007;32(5):427-436. doi:10.2341/06-142

3. Cadenaro M, Navarra CO, Mazzoni A, et al. An in vivo study of the effect of a 38 percent hydrogen peroxide in-office whitening agent on enamel. J Am Dent Assoc. 2010;141(4):449-454. doi:10.14219/jada.archive.2010.0198

4. Cadenaro M, Breschi L, Nucci C, et al. Effect of two in-office whitening agents on the enamel surface in vivo: a morphological and non-contact profilometric study. Oper Dent. 2008;33(2):127-134. doi:10.2341/07-89

PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE BLANQUEAMIENTO

Recomendamos seguir los siguientes procedimientos para una evaluación y un tratamiento profesional de blanqueamiento.

1. Consulta de la anamnesis del paciente

Evalúe el origen de las manchas dentales y compruebe las restauraciones que podrían afectar al resultado final (use Rx en caso necesario). Evalúe la intención del sistema de blanqueamiento (cosmético para la decoloración del “día a día” o con una concentración superior para dientes con decoloración por enfermedad, lesión o tratamiento médico). Considere modificar su historial médico periódico añadiendo alguna pregunta sobre la satisfacción del paciente con su estética oral. Explíquelo al paciente que las restauraciones no se blanquearán, y hágale de la posibilidad de necesitar nuevas restauraciones tras el blanqueamiento.

Comprobar si existe alguna sensibilidad dental y realizar un tratamiento adecuado antes de iniciar un procedimiento de blanqueamiento. El blanqueamiento dental no está recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Se recomienda a los pacientes con enfermedades graves consultar con su médico antes de someterse a un tratamiento.

Los tratamientos de blanqueamiento dental cosmético no están permitidos a menores de 18 años.

2. Realice un examen dental

Determine el origen de las manchas, evalúe la salud gingival y dental. Compruebe las restauraciones de la zona estética que no serán del mismo color tras el blanqueamiento. Hable sobre la posibilidad de cambiarlas o revestirlas tras el tratamiento.

3. Expectativas del paciente

Explíquelo las posibilidades y las limitaciones del tratamiento blanqueador en el entorno específico de su situación individual y ayúdele a establecer unas expectativas realistas.

4. Tratamiento higiénico

Proceda a aplicar el tratamiento higiénico. Utilice pasta pulidora para eliminar toda la placa. En el caso de los pacientes con sensibilidad conocida, aplique el barniz de flúor Enamelast™ después de pulir.

5. Identificación del color inicial

Determine el color inicial de los dientes usando un colorímetro. Haga una foto con la muestra de color tras realizar el tratamiento de higiene.

6. Dé instrucciones para el paciente

Los resultados del blanqueamiento pueden durar un año o más.^{1,2} Dependiendo de la alimentación y los hábitos del paciente, es posible que el procedimiento deba repetirse de forma periódica para mantener su aspecto. Indique al paciente cómo usar los productos de blanqueamiento elegidos y responda a cualquier duda o pregunta.

7. Elabore un plan del tratamiento de blanqueamiento

Puede utilizar varios productos de blanqueamiento Opalescence™ como parte del plan del tratamiento blanqueador para ayudar al paciente a conseguir los resultados que espera.

Si el paciente tiene antecedentes de sensibilidad dental, añada un protocolo de desensibilización antes del tratamiento de blanqueamiento y plantéese la posibilidad de usar una menor concentración de gel o reducir el tiempo de aplicación. Los pacientes también pueden utilizar Opalescence™ Whitening Toothpaste Sensitivity Relief antes y durante el tratamiento blanqueador. Además, si el paciente tolera el tratamiento de blanqueamiento sin sensibilidad, considere aumentar la concentración de gel para acelerar los resultados.

8. Consiga el consentimiento del paciente

Procure que el paciente firme un consentimiento informado que describa el tratamiento de blanqueamiento y los costos derivados.

9. Determinación del tono final

Identifique el tono final usando el colorímetro. Haga una foto con la muestra de color inicial y final. El cambio de tono definitivo solo puede ser registrado algunos días después del tratamiento, ya que es posible que el diente se siga blanqueando tras finalizarlo.

10. Ofrezca soluciones para la sensibilidad en caso necesario

Algunos pacientes pueden sentir una sensibilidad persistente. Recomendamos el gel desensibilizador UltraEZ™ o el barniz de flúor Enamelast™. Opalescence™ Whitening Toothpaste Sensitivity Formula también puede utilizarse para minimizar la sensibilidad.

1. de Geus JL, de Lara MB, Hanzen TA, et al. One-year follow-up of at-home bleaching in smokers before and after dental prophylaxis. J Dent. 2015;43(11):1346-1351.

2. Wiegand A, Drebenstedt S, Roos M, Magalhães AC, Attin T. 12-month color stability of enamel, dentine, and enamel-dentine samples after bleaching. Clin Oral Investig. 2008;12(4):303-310.

OPALESCENCE™ BLANQUEAMIENTO DENTAL COSMÉTICO



Opalescence™ PF 10%



Blanqueamiento domiciliario
con férulas individuales



Tiempo
de aplicación:
8-10
horas/día

Ingrediente activo:
10% de peróxido de carbamida
(≈ 3,6% H₂O₂)

Contiene:
Nitrato de Potasio, Fluor y Xilitol



Sabores:
Menta, melón y normal



Opalescence™ PF 16%



Blanqueamiento domiciliario
con férulas individuales



Tiempo
de aplicación:
4-6
horas/día

Ingrediente activo:
16% de peróxido de carbamida
(≈ 5,8% H₂O₂)

Contiene:
Nitrato de Potasio, Fluor y Xilitol



Sabores:
Menta, melón y normal



Opalescence Go™ 6%



Tiempo de
aplicación:
60-90 min/día

Blanqueamiento domiciliario
con férula universal

Ingrediente activo:
6% de peróxido de hidrogeno
(H₂O₂)

Contiene:
Nitrato de Potasio, Fluor y Xilitol



Sabores:
Menta y melón

Opalescence™
whitening toothpaste



Para hacer
brillar la sonrisa
de tus pacientes*

Pasta dentífrica Opalescence de la marca número 1 del mundo de blanqueamiento dental profesional

* Por blanqueamiento se entiende la eliminación de manchas superficiales y no hace referencia a un tratamiento de blanqueamiento profesional. Este dentífrico no contiene peróxido.

BLANQUEAMIENTO DENTAL COSMÉTICO PROFESIONAL

OPALESCEENCE™ PF 10% Y 16%

TRATAMIENTO DOMICILIARIO CON FÉRULAS PERSONALIZADAS

Gracias a su consistencia altamente viscosa, el gel blanqueador Opalescence™ no se escapa de la férula como ocurre con otros agentes blanqueadores,² lo que permite mantener la férula en su sitio con total seguridad y comodidad. El gel Opalescence™ PF contiene nitrato de potasio y flúor. En comparación con otros productos blanqueadores, Opalescence™ es eficaz para reducir la recidiva de la decoloración.³ El gel blanqueador Opalescence™ contiene al menos un 20% de agua, lo que ayuda a prevenir la deshidratación. Un estudio realizado por una universidad estadounidense demuestra que el gel permanece activo durante 8–10 horas durante el blanqueamiento nocturno.⁴ Esto significa que el paciente ve resultados rápidamente y se siente motivado a continuar con el tratamiento. El gel Opalescence™ está disponible en distintas concentraciones, sabores y kits, para satisfacer todas las necesidades de blanqueamiento de los pacientes.

- Blanqueamiento dental cosmético con férulas personalizadas
- Los geles blanqueadores Opalescence™ PF contienen PF (nitrato potásico y flúor)
- El gel blanqueador cosmético Opalescence™ PF está diseñado para maximizar la comodidad del paciente
- Gel altamente viscoso que no migra hacia los tejidos blandos y permite que la férula se mantenga en su sitio
- Formulado para prevenir la deshidratación y la recidiva de la decoloración
- Disponible en dos concentraciones para adaptarse a cada necesidad
- Sabores disponibles: **menta**, **melón** y **normal**
- Aplicación diurna o nocturna

USO

- Blanqueamiento profesional domiciliario con férulas personalizadas para blanquear todo el arco dental.
- El gel Opalescence está recomendado para blanquear los dientes antes de la aplicación de composites, carillas o coronas de forma que el dentista pueda cumplir el deseo del paciente de tener unos dientes y unas restauraciones de un color más claro.^{2,4}

CASO CLÍNICO

Dr. Stephan Hoefler



Antes



Al cabo de ocho días de tratamiento con el gel de blanqueamiento Opalescence™ PF 16%, todos los días durante 3 horas.

Dr. Robert Nixon



Antes



Arcada superior tras cinco noches de tratamiento con gel de blanqueamiento Opalescence™ PF 10%, aproximadamente 40 horas.



INSTRUCCIONES DE USO

FABRICACIÓN DE LAS FÉRULAS



1. Vierta la impresión con yeso de fraguado rápido o escayola odontológica. Vierta el alginato inmediatamente después de tomar la impresión para garantizar la precisión. Se necesita recortar menos si la cantidad de escayola se mantiene al mínimo. La zona del paladar y la lengua no debe llenarse o debe quitarse cuando el yeso está duro. Deje secar el modelo durante dos horas.




2. A fin de crear reservorios, aplique una capa de Ultradent LC Block-Out Resin de aprox. 0,5 mm de espesor sobre las superficies labiales y fotopolimerice. Guarde una distancia de 1,5 mm aprox. respecto del margen gingival. **NO** extienda la capa hasta bordes incisales o superficies oclusales. Fotopolimerice con la lámpara de polimerización VALO™ durante 5 segundos. Retire la capa de inhibición de oxígeno.



3. Caliente el material de la férula Sof-Tray™ Classic con una estampadora hasta que se combe de aproximadamente 5 a 15 mm (1/4 a 1/2 pulgada) para las láminas de 0,9 mm, y 25 mm para 1,5 mm y 2,0 mm. Adapte el plástico sobre el modelo. Enfríe y extraiga el modelo de la estampadora.



4. Utilice las tijeras táctiles Ultradent Ultra-Trim Scalloping Scissors para recortar con precisión y cuidado la férula por una línea bien definida a la altura gingival. Festonee los bordes para evitar el contacto con el tejido gingival.

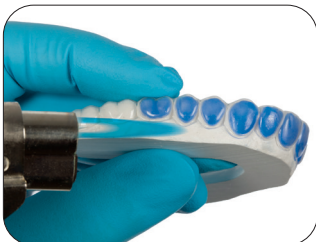

5. Ponga la férula en el modelo y compruebe las extensiones de la férula. Con un soplete de butano de calor suavemente, adapte los bordes de la férula de cuadrante en cuadrante. Mientras sigue la férula caliente, con un dedo húmedo y protegido con el guante, empuje rápida y firmemente toda la férula contra el modelo, durante al menos tres segundos, obtendrá así la mejor adaptabilidad. Si con esta acción el material de la férula queda demasiado fino, fabrique una nueva.



INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE



1. Pidale al paciente que se cepille los dientes antes de cargar e introducir la férula. Revise junto con el paciente las instrucciones del kit de blanqueamiento. Explíquelo el proceso de carga de la férula. Dispense el gel desde el borde incisal del lado facial de la férula, de molar a molar. Aclare que debe utilizarse de un tercio a la mitad de la jeringa.



2. Coloque la férula sobre los dientes. Presiónela suavemente para desplazar el gel a su lugar. Si se presiona demasiado fuerte, el gel saldrá de la férula.




3. Si se ha aplicado demasiado gel o si este ha salido de la férula, retire suavemente el gel sobrante con un cepillo de dientes blando.



4. Limpie la férula con un cepillo blando y agua fría. Guárdela en su funda cuando no la use. Recuérdele al paciente que siga las instrucciones del plan de blanqueamiento establecido.

¡PERMANECE ACTIVO TODA LA NOCHE!

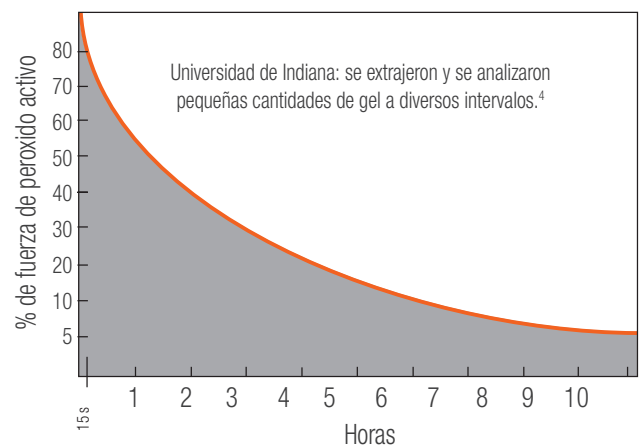

¹ realityesthetics.com.

² Caughman WF, DMD, Frazier KB, Haywood, VB. Carbamide peroxide whitening of nonvital single discolored teeth: Case reports. Quintessence Int. 1999;30(3):155-61.

³ Grobler, S.R., et al. A Clinical Study of the Effectiveness of Two Different 10% Carbamide Peroxide Bleaching Products: A 6-Month Follow-up; Int J Dent. May 5, 2011: 167525; doi: 10.1155/2011/167525.

⁴ Matis BA, Gaiao U, Blackman D, Schultz FA, Eckert G. In vivo degradation of bleaching gel used in whitening teeth. J Am Dent Assoc. 1999;130(2):227-35.

BLANQUEAMIENTO DENTAL COSMÉTICO PROFESIONAL

OPAESCENCE GO™ 6%

TRATAMIENTO DOMICILIARIO CON FÉRULA UNIVERSAL PREDOSIFICADA

Opalescence Go™ es un blanqueamiento domiciliario con peróxido de hidrógeno al 6%, listo para su uso. Las exclusivas férulas predosificadas UltraFit™ se adaptan fácilmente a cada arcada dental con su cobertura de molar a molar y su extraordinaria adaptabilidad, garantizando el contacto máximo entre el gel y los dientes durante todo el tratamiento.

- Blanqueamiento dental cosmético con férulas precargadas
- Exclusivas férulas precargadas UltraFit™, cómodas y se adaptan con facilidad a cada arcada
- Cobertura de molar a molar que mejora el contacto del gel con los dientes posteriores
- El gel blanqueador cosmético Opalescence GO™ está diseñado para maximizar la comodidad del paciente
- Férulas precargadas listas para usar: se extraen directamente del blíster
- Cantidad de gel perfectamente dosificado, fácil de retirar tras la aplicación
- Tiempo de aplicación: 60–90 minutos
- El gel blanqueador Opalescence GO™ contiene PF (nitrato potásico y flúor)
- Sabores: **menta** y **melón**



USO

- Tratamiento de blanqueamiento domiciliario con férulas de gel precargadas para todo el arco dental. No necesita impresiones ni modelos de yeso.
- Ideal como tratamiento completo, como introducción al blanqueamiento o como mantenimiento después de un blanqueamiento en la clínica.



CASO CLÍNICO



Antes



Después



Antes



Después

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE



1. Extraer el producto del envase.
"U": Cubeta blanqueadora arco superior
"L": Cubeta blanqueadora arco inferior



2. Colocar la cubeta superior sobre los dientes y cerrar la boca firmemente. A continuación, succionar la cubeta durante 2 segundos.




3. Quite la cubeta exterior de color verde y deje la férula interior de color blanco en los dientes. Repita el proceso con la cubeta inferior.



4. Una vez transcurrido el tiempo de aplicación indicado, extraiga las férulas de blanqueamiento y cepílese los dientes.

¡BLANQUEAMIENTO
PROFESIONAL
EFICAZ Y
LISTO PARA
USAR!

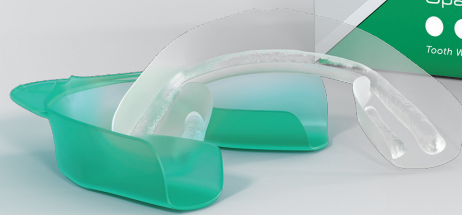

Opalescence
go
UltraFit™, antes de la aplicación



Opalescence
go
UltraFit™, tras haber estado 10 minutos en la boca

OPALESCENCE™ BLANQUEAMIENTO DENTAL MÉDICO

MÉDICO



Opalescence™ Boost™ PF 40%

Blanqueamiento médico de aplicación directa en el sillón dental



Tiempo de aplicación: dos/tres tratamientos de 20 minutos, por visita

Ingrediente activo:
40% de peróxido de hidrógeno (H_2O_2)

Contiene:
Nitrato de potasio y fluor



Opalescence™ Quick PF 45%



Blanqueamiento médico en el sillón dental, o en la sala de espera con férulas personalizadas



Tiempo de uso: 30 minutos supervisados por el dentista


Ingrediente activo:
Peróxido de carbamida al 45% ($\approx 15\% H_2O_2$)

Contiene:
Nitrato de potasio y fluor



Opalescence™ Endo 35%

Blanqueamiento médico para la técnica "Walking Bleach" en dientes no vitales

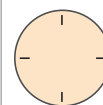

Tiempo de aplicación: 1-5 días

Ingrediente activo:
Peróxido de hidrógeno al 35% (H_2O_2)

Opalescence™
tooth whitening systems



#1

Líder mundial en blanqueamiento dental profesional¹



Más de 100 millones de sonrisas brillantes²



Disponible en más de 125 países

1. Datos de archivo. 2. Datos de archivo.

En algunos países de la Comunidad Europea, los dispositivos médicos para el blanqueamiento dental no están disponibles. Para más información, consulte con su distribuidor.

BLANQUEAMIENTO DENTAL - MÉDICO

OPALESCEENCE™ BOOST™


TRATAMIENTO MÉDICO EN LA CLÍNICA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 40%



Opalescence™ Boost™ es un tratamiento de blanqueamiento médico con pH neutro que garantiza resultados excelentes en menos de una hora en el sillón odontológico. La activación química de peróxido de hidrógeno al 40% garantiza que no hay necesidad de utilizar lámparas o láseres.



- Blanqueamiento dental médico
- ¡NO ES NECESARIO USAR LÁMPARAS!
- No requiere conservación en nevera
- Gel con una alta concentración de peróxido de hidrógeno al 40%
- De dos a tres aplicaciones de 20 minutos durante un total de 40–60 minutos; no más de 3 aplicaciones por sesión
- El gel blanqueador médico Opalescence™ Boost™ está diseñado para maximizar la comodidad del paciente
- Aplicación precisa
- Fácilmente visible durante la aplicación y la retirada
- La mezcla de jeringa a jeringa garantiza la máxima eficacia
- El gel blanqueador Opalescence™ Boost™ contiene PF (nitrato potásico y flúor)

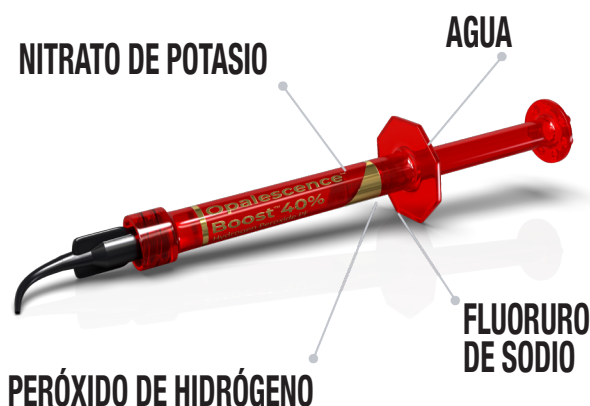

USO

- Opalescence™ Boost es un método conservador alternativo para el tratamiento de los dientes oscuros y con decoloración interna (en comparación con coronas, carillas, etc.) consecuencia de enfermedades, lesiones o tratamiento médico como factores congénitos, sistémicos, metabólicos, farmacológicos, traumáticos o iatrogénicos, como fluorosis dental, ictericia, tetraciclina y manchas de minociclina en adultos, porfiria, trauma y eritroblastosis fetal.

BLANQUEAMIENTO DENTAL - MÉDICO

CASO CLÍNICO

Hombre de 20 años con decoloración en la zona central de la pieza 21. El blanqueamiento dental se inició tras completar un tratamiento ortodóncico. La pieza 21 tiene un punto opaco marrónáceo en el centro de la superficie facial.



1. Antes del tratamiento de blanqueamiento dental con Opalescence™ Boost™.



2. Deje reposar el gel en los dientes 20 minutos por aplicación.




3. Después de dos aplicaciones de 20 minutos del tratamiento blanqueador Opalescence™ Boost™.


NOTA IMPORTANTE: Tras la mezcla, el gel Opalescence™ Boost™ se conserva en el frigorífico durante 10 días. Antes de desechar las jeringas, aspire agua con ellas y expulse el líquido por el desagüe. Repítalo varias veces antes de tirar la jeringa. Asegúrese de enjuagar con agua las gasas.

Atención: Tanto el odontólogo como su asistente y el paciente, deben utilizar protección ocular con protección lateral durante la mezcla y la aplicación de Opalescence™ Boost™ en la clínica.


INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVACIÓN DE LA JERINGA

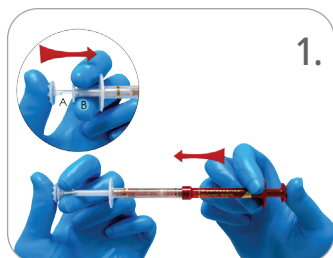


1. Compruebe que las jeringas estén bien aseguradas. Empuje el émbolo transparente pequeño (A) dentro de la jeringa pequeña transparente (B) para que rompa la membrana interna y combine el agente blanqueador con el activador. Presione el émbolo de la jeringa roja en la jeringa transparente más grande.

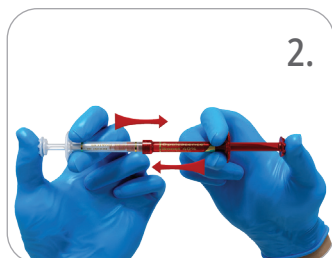

2. Introduzca de nuevo el contenido de la jeringa transparente en la jeringa roja. Mezcle bien y con rapidez el contenido presionando de forma constante de atrás hacia delante y mezcle un mínimo de 50 veces (25 veces en cada lado).

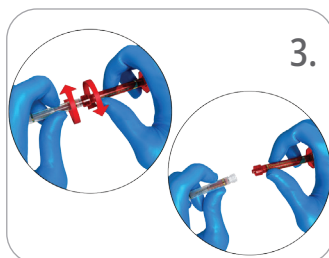

3. Introduzca todo el gel mezclado en la jeringa ROJA y separe las dos jeringas.

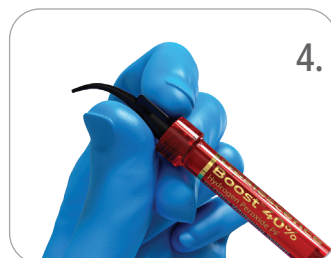

4. Acople la punta Black Mini en la jeringa roja. Compruebe el flujo en una gasa de algodón o una loseta de mezcla antes de su uso intraoral. Si encuentra resistencia, cambie la punta y vuelva a comprobar el flujo.



¹ realityesthetics.com.

² Bruzell EM, Johnsen B, Aalerud TN, Dahl JE, Christensen T. In vitro efficacy and risk for adverse effects of light-assisted tooth bleaching. Photochem Photobiol Sci. 2009;8(3):377-85.

BLANQUEAMIENTO DENTAL - MÉDICO

OPALESCEENCE™ QUICK

TRATAMIENTO PARA LA SALA DE ESPERA CON FÉRULA
PERSONALIZADA - PERÓXIDO DE CARBAMIDA

Tratamiento de blanqueamiento médico que se realiza en clínica bajo la supervisión del profesional dental, con férulas personalizadas a base de peróxido de carbamida al 45%.

Tras la toma de impresiones, se fabrican las férulas personalizadas, se rellenan con el gel de peróxido de carbamida al 45% ($\approx 15\% \text{H}_2\text{O}_2$), y se aplican sobre los dientes. Durante el tiempo de aplicación (unos 30 minutos), el paciente puede permanecer en la sala de espera de la clínica.

El gel, altamente viscoso, no se desborda, sino que permanece dentro de la férula, blanqueando los dientes pigmentados.



- Blanqueamiento dental médico
- Peróxido de carbamida al 45%
- El gel blanqueador Opalescence™ Quick PF contiene PF (nitrato de potasio y flúor)
- Para el tratamiento intensivo de discromías intrínsecas
- No es necesario el aislamiento del campo con dique
- Resultados visibles tras solo 30 minutos de tratamiento
- En clínica, pero sin ocupar el sillón dental

USOS

- Blanqueamiento médico para realizar en la sala de espera
- Indicado para tratar de forma eficaz discromías intrínsecas, como por ejemplo las causadas por tetraciclinas

OPALESCEENCE™ ENDO

BLANQUEAMIENTO DE DIENTES NO VITALES CON LA TÉCNICA
“WALKING BLEACH” – PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 35%

El gel de blanqueamiento médico para dientes no vitales Opalescence™ Endo está formulado específicamente para el blanqueamiento de dientes tratados endodónticamente mediante la técnica “Walking Bleach”.



- Blanqueamiento dental médico
- Peróxido de hidrógeno al 35%
- Fácil de aplicar en la cámara pulpar
- Tratamiento de 1 a 5 días

USO

- Recomendado para blanqueamiento médico en clínica, realizado en el sillón dental
- Utilizar Opalescence™ Endo para el tratamiento de dientes no vitales o con discromías

Nota: No indicado para su uso en traumas, signos de reabsorción cervical o tras múltiples intentos de blanqueamiento
Asegurarse de no aplicar el gel blanqueador sobre los márgenes, ya que podría comprometer la adhesión de la resina provisional

BLANQUEAMIENTO DENTAL

OPALUSTRE™

PASTA DE ABRASIÓN QUÍMICA Y MECÁNICA



Opalustre™ es una pasta viscosa de ácido clorhídrico al 6,6% que contiene micropartículas de carburo de silicio. Esta combinación permite la eliminación química de las manchas junto con una suave abrasión mecánica. OpalCups™ son copas abrasivas para contraángulo con cepillo interno que se emplean con la técnica de microabrasión con pasta Opalustre™ para lograr una acción más agresiva y minimizar las salpicaduras. Las copas de acabado OpalCups™ se emplean con pasta Opalustre™ para el micropulido de la superficie del esmalte recién tratado.



- Eliminación permanente de las manchas superficiales del esmalte
- Tratamiento permanente mínimamente invasivo
- Puede ayudar a mejorar el aspecto de las manchas leves por fluorosis
- El ácido clorhídrico en baja concentración (6,6%) favorece la eliminación química de las manchas
- Las micropartículas de carburo de silicio generan una suave abrasión mecánica
- Las copas OpalCups minimizan las salpicaduras

USO

- Remoción de manchas blancas y marrones superficiales
- Para eliminar rápidamente los defectos invisibles de descalcificación del esmalte con una profundidad inferior a 0,2 mm
- Tratamiento permanente mínimamente invasivo para la fluorosis

CASO CLÍNICO




Dr. Rich Tuttle

Descalcificación del esmalte corregida tras una aplicación de pasta Opalustre™ utilizando OpalCups™ abrasivas y una pieza de mano con reducción de marcha de 10:1 y una presión firme.



INSTRUCCIONES - DIQUE DE GOMA

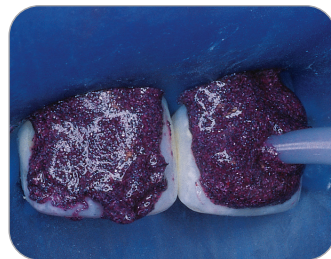

Dr. Ted Croll

1. Antes
2. Tras colocar el dique de goma, aplique pasta Opalustre™ con la jeringa sobre el esmalte decolorado.
3. Utilice OpalCups™ Bristle para aplicar la pasta Opalustre™ sobre la superficie dental aplicando una presión de media a fuerte. Succione la pasta de los dientes y a continuación aclare, evalúe y repita según sea necesario. Acabe el tratamiento puliendo con OpalCups™ Finishing.
4. Después de la microabrasión del esmalte y de 21 días con el gel de blanqueamiento Opalescence™.

PREVENCIÓN E HIGIENE ORAL

PASTA DENTÍFRICA BLANQUEADORA* OPALESCENCE™

ORIGINAL COOL MINT Y SENSITIVITY RELIEF



La línea de productos para el blanqueamiento Opalescence™ es líder en tratamientos blanqueadores. Esta línea incluye el dentífrico Opalescence™⁶, desarrollado por un dentista. Elimina de forma activa las manchas superficiales y, gracias a su exclusiva formulación de sílice, su acción suave es apta para su uso diario.

- Resultados en solo una semana¹
- Elimina las manchas superficiales para blanquear los dientes hasta dos tonalidades en solo 2 semanas cuando se usa a diario²
- Contiene sílice hidratada, de eficacia probada en la eliminación de manchas¹
- Suave con las encías¹
- Seguro para el uso diario a largo plazo
- Contiene fluoruro de sodio, que ayuda a prevenir las caries y fortalece el esmalte³
- Excelente absorción de flúor⁴
- Valor de abrasividad RDA 785
- Fórmula sin triclosán ni TiO₂
- Vegano: no contiene productos de origen animal
- Tres variedades de menta se combinan en un sabor fresco y limpio
- Endulzado con xilitol, reduciendo el riesgo de caries
- Nuestra fórmula Sensitivity Relief ofrece todos los beneficios de Original, con el añadido de la acción del nitrato de potasio al 5%



* Por blanqueamiento se entiende la eliminación de manchas superficiales y no hace referencia a un tratamiento de blanqueamiento profesional. Este dentífrico no contiene peróxido.

¹ Çakmakçioğlu O, Yılmaz P, Topbaşı BF. Clinical evaluation of whitening effect of whitening toothpastes: A pilot study. OHDMBMC. 2009;8(4):613.

² Dursun MN, Ergin E, Tekce AU, Gurgan S. Which whitening toothpaste with different contents is more effective on colour and bond strength of enamel?. J Esthet Restor Dent. 2023;35(2):397-405.doi:10.1111/jerd.12968

³ Sivapriya E, Sridevi K, Periasamy R, Lakshminarayanan L, Pradeepkumar AR. Remineralization ability of sodium fluoride on the microhardness of enamel, dentin, and dentinoenamel junction: An in vitro study. J Conserv Dent. 2017;20(2):100-104. doi:10.4103/JCD.JCD_353_16.

⁴ Schemehorn, BR. Enamel Fluoride Uptake 09-107. Dati in archivio.

⁵ Attin, T. Assessment of relative dentin abrasion (RDA) of two toothpastes from Ultradent Products, Inc., Universität Zurich: Zurich, Switzerland. 2021. Dati in archivio.

⁶ Questo dentífrico non contiene Perossido.

⁷ Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening efficacy of a whitening toothpaste creme [IADR abstract 2747]. J Dent Res. 1998;77(suppl 2):975.



PREVENCIÓN E HIGIENE ORAL

ULTRAEZ™

GEL DESENSIBILIZADOR CON NITRATO DE POTASIO Y FLÚOR

UltraEZ™ es un gel desensibilizador con nitrato de potasio al 3% con fluor de liberación sostenida (0,25 % NaF neutro). Esta formula de liberación sostenida elimina rápidamente la sensibilidad de la abrasión del cepillo de dientes, los cambios térmicos y químicos, el blanqueamiento dental y la exposición radicular.

- Resultados inmediatos
- Reduce y/o elimina la sensibilidad
- Gel insaboro disponible en jeringas o cubetas desechables

USO

- Recomendado para el tratamiento de la sensibilidad dental



SENSIBILIDAD DENTAL

ANTES DEL BLANQUEAMIENTO DENTAL

1. Compruebe si el paciente sufre de sensibilidad dental.
2. Sugiera una visita de pre-tratamiento al paciente al menos dos semanas antes del tratamiento de blanqueamiento.
3. Recomiende al paciente cepillarse los dientes con la pasta dentífrica Opalescence™ para dientes sensibles durante dos semanas.
4. Aplicar el barniz de fluoruro Enamelast™. El tratamiento de blanqueamiento puede comenzar al día siguiente.
5. Sugerir al paciente comenzar el tratamiento de blanqueamiento con un producto de baja concentración que contenga nitrato de potasio y flúor.

DURANTE EL BLANQUEAMIENTO DENTAL

1. En caso de sensibilidad sugerir al paciente comenzar el tratamiento de blanqueamiento con un producto de baja concentración.
2. Sugiera al paciente reducir el tiempo de aplicación.
3. Sugiera al paciente que se salte uno o más días de tratamiento.
4. Indique al paciente que use la cubeta desensibilizante desechable precargada UltraEZ™ durante 15-60 minutos antes o después del tratamiento de blanqueamiento.
5. En caso de irritación gingival, verifique que el paciente haya insertado la cantidad correcta de gel blanqueador dentro de la férula personalizada. Si es necesario, el paciente puede usar analgésicos de venta libre.
6. En caso de sensibilidad persistente, interrumpir el tratamiento blanqueador.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Ultradent™ LC Block-Out Resin

Resina espaciadora fotopolimerizable

- Óptima viscosidad para una aplicación adecuada
- Pigmentación azul para una buena visibilidad durante la aplicación
- Excelente resina utilitaria con múltiples usos



Estuches para férulas Opalescence™

Estuches para férulas

- Protege las férulas mientras no se usan
- Diseño plano de bolsillo
- Dimensiones interiores: 7,5 x 7 x 1,5 cm



Sof-Tray™ Classic

Planchas para la fabricación de férulas al vacío

- Seleccione la de 0,9 mm para la mayoría de las férulas de blanqueamiento
- Disponible en un ancho de 1,5 mm o de 2,0 mm para los pacientes con bruxismo



OpalDam™ e OpalDam™ Green

Barreras de resina fotopolimerizable

- Protege el tejido blando con un sello impermeable
- De fácil remoción
- Aplicación directa



Ultra-Trim Ultradent™

Tijeras para recortar férulas

- Use para recortar con precisión los bordes alrededor de la papila interdental
- Diseño con resorte que minimiza el cansancio de los dedos
- Agarra el material de la férulas con facilidad
- Fabricadas en acero inoxidable duradero




Umbrella™

Abrebocas

- El nuevo abre bocas Umbrella™ para lengua, labios y mejillas, ha sido desarrollado para ofrecer la máxima comodidad al paciente asegurando al mismo tiempo un aislamiento efectivo del campo operatorio
- Disponible en las medidas Medium y Large
- Desechable



EL MARKETING DE LOS BLANQUEAMIENTOS

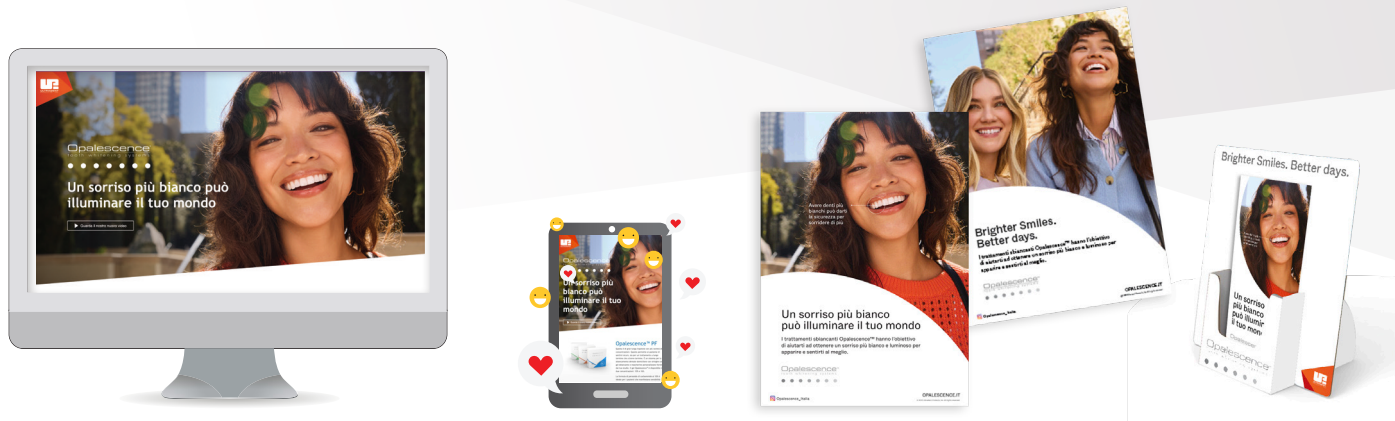

A continuación, algunas ideas sobre cómo promover los tratamientos de blanqueamiento Opalescence™ en su clínica:

Material de marketing para la clínica

• Gadgets/productos Opalescence™

Usar las bandanas Opalescence™, utilizar nuestro bolígrafo o nuestro bálsamo labial puede ser una buena forma de atraer la atención de los pacientes.

• Vídeo Opalescence™

Reproducir el vídeo Opalescence™ en la sala de espera es una manera simple y eficaz para informar a sus pacientes y mejorar su experiencia en su clínica.

• Soporte de Opalescence™ en sus redes sociales

Disponible imágenes y vídeos para que comparta con sus pacientes, además de interactuar y comunicarse con ellos también a través de las redes sociales de la clínica.

Consejos de marketing para la clínica

- Asegúrese de que todo el personal de la clínica tenga dientes muy blancos. Sus compañeros serán la mejor publicidad para los pacientes y, si es necesario, podrán contar directamente su experiencia con el blanqueamiento dental.
- Confíe a uno de los miembros de la clínica el título de “especialista en blanqueamiento”. Por lo tanto, habrá un único punto de contacto para responder las preguntas de los pacientes.
- Antes de realizar el tratamiento de blanqueamiento, identifique y muestre al paciente el color de inicio de los dientes. Estará más satisfecho con los resultados obtenidos.



Únete ahora mismo

PROGRAMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL OPALESCENCE™

Soporte continuo y gratuito para Profesionales Dentales.

TELÉFONO GRATUITO 910 499 941



Los materiales de marketing Opalescence™ pueden cambiar durante el año para garantizarle contenidos y herramientas siempre actualizados.

REFERENCIAS DE PRODUCTO

TRATAMIENTO COSMÉTICO DOMICILIARIO

Opalescence™ PF Kit para el Paciente		Opalescence™ PF Kit para el Doctor		Opalescence™ PF Repuestos	
10%	16%	10%	16%	10%	16%
5364 (Menta)	4480 (Menta)	5379 (Menta)	4483 (Menta)	5394 (Menta)	4486 (Menta)
5365 (Melón)	4481 (Melón)	5380 (Melón)	4484 (Melón)	5395 (Melón)	4487 (Melón)
5366 (Normal)	4482 (Normal)	5381 (Normal)	4485 (Normal)	5396 (Normal)	4488 (Normal)
8 jeringas Opalescence™ de 1,2 ml (1,50 g); 1 pasta dentífrica Opalescence™ (20ml), accesorio		8 jeringas Opalescence™ de 1,2 ml (1,50 g); 1 jeringa Ultradent LC Block-Out Resin de 1,2 ml (1,38 g); 1 pasta dentífrica Opalescence™ (20ml), accesorio		40 jeringas Opalescence™ PF de 1,2 ml	

Opalescence GO™ 6%

Kit paciente	Kit Paciente Six Pack	Mini Kit	Mini Kit 12 Pack
4634 (Menta)	4639 (Menta)	4644 (Menta)	4649 (Menta)
3592 (Melón)	3593 (Melón)	3599 (Melón)	3600 (Melón)
Cada kit contiene 10 paquetes de blisters con una cubeta superior y una inferior, 1 pasta dentífrica Opalescence™ (20ml)	Cada kit contiene 6 Kits Paciente y 1 pasta dentífrica Opalescence™ (20ml)	Cada kit contiene 4 paquetes de blisters con una cubeta superior y una inferior	Cada kit contiene 12 Mini kits

TRATAMIENTO MÉDICO

Opalescence™ Boost 40%			Opalescence™ Quick PF 45%		Opalescence™ Endo 35%	
Intro Kit	Kit paciente	Repuesto Econo	Repuesto	Repuesto Econo	Kit	Mini Refill
4750	4751	4754	5346	5348	1270	1323
4 jeringas Opalescence™ Boost™/ Activador de 1,2 ml; 2 jeringas OpalDam™ Green de 1,2 ml; accesorio	2 jeringas Opalescence™ Boost™/ Activador de 1,2 ml; 1 jeringa OpalDam™ Green de 1,2 ml; accesorio	20 jeringas Opalescence™ Boost™/Activador de 1,2 ml	4 jeringas de Opalescence™ Quick de 1,2 ml	20 jeringas de Opalescence™ Quick de 1,2 ml	2 jeringas de Opalescence™ Endo de 1,2 ml; accesorio	2 jeringas de Opalescence™ Endo de 1,2 ml

BLANQUEAMIENTOS- PREVENCIÓN E HIGIENE

Opalustre™		UltraEZ™				Dentífrico Blanqueador* Opalescence™			
Kit	Repuesto	Repuesto	Repuesto Econo	Combo	Mini Kit	Original	Original	Sensibilidad	Sensibilidad
5554	555	1008	1007	5721	5743	402	401	3472	3470
2 jeringas Opalustre™ de 1,2 ml; accesorio	4 jeringas Opalustre™ de 1,2 ml; accesorio	4 jeringas UltraEZ™ de 1,2 ml	20 jeringas UltraEZ™ de 1,2 ml	Cada kit contiene 10 blisters con una cubeta superior y una inferior	Cada kit contiene 4 blisters con una cubeta superior y una inferior	24 tubos de 20 ml	12 tubos de 100 ml	24 tubos de 20 ml	12 tubos de 100 ml

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Ultradent™ LC Block-Out Resin			Planchas Sof-Tray™			Tijeras Ultra-Trim Ultradent™	Estuches para férulas Opalescence™
Kit	Repuesto	Econo Kit	Regular (0,9 mm)	Medium (1,5 mm)	Heavy (2,0 mm)		
240	241	242	226	227	284	605	707
4 jeringas Ultradent™ LC Block-Out Resin de 1,2 ml; accesorio	4 jeringas Ultradent™ LC Block-Out Resin de 1,2 ml	20 jeringas Ultradent™ LC Block-Out Resin de 1,2 ml; accesorio	25 láminas Soft-Tray	20 láminas Soft-Tray	20 láminas Soft-Tray	1 unidad	20 estuches

Umbrella™

4870 (M) - 5256 (L)	4871 (M) - 5257 (L)	5162 (M) - 5258 (L)
5 abrebocas - tamaño medio	20 abrebocas - tamaño medio	40 abrebocas - tamaño medio

OpalDam™ & OpalDam™ Green

OpalDam™ Kit	OpalDam™ Repuesto	OpalDam™ Econo Repuesto	OpalDam™ Green Kit	OpalDam™ Green Repuesto	OpalDam™ Green Econo Repuesto
324	325	326	1824	1825	1826
4 jeringas OpalDam™ de 1,2 ml; accesorio	4 jeringas OpalDam™ de 1,2 ml	20 jeringas OpalDam™ de 1,2 ml	4 jeringas OpalDam™ Green de 1,2 ml; accesorio	4 jeringas OpalDam™ Green de 1,2 ml	20 jeringas OpalDam™ Green de 1,2 ml

En algunos países de la Comunidad Europea no están disponibles los dispositivos médicos para el blanqueamiento dental. Para más información, consulte con su distribuidor.
* Por blanqueamiento se entiende la eliminación de manchas superficiales y no se refiere a un tratamiento de blanqueamiento profesional. Este dentífrico no contiene peróxido.

Brighter
Smiles.
Better
Days.

Opalescence™
tooth whitening systems

