

# Innovative Produkte und ihre Anwendung

# KATALOG 2026



**Dr. Dan Fischer**  
Gründer, Ultradent Products, Inc.





# ÜBER ULTRADENT PRODUCTS



1976, nach seinem Abschluss an der Loma Linda University und der Eröffnung seiner eigenen Praxis, erfand Dr. Dan Fischer seine bahnbrechende Blutstillungslösung Astringedent™ – als Antwort auf die Notwendigkeit eines Tissue-Management-Produkts, mit dem eine schnellere, stabilere Hämostase erzielt werden kann. Das Astringedent Hämostatikum mit dem Metal Dento-Infusor™ Tip und der Ultrapak™ Faden bildeten die Grundlage für das chemische Tissue Management System von Ultradent. Zum ersten Mal konnten Zahnärzte schnell und vorhersagbar eine stabile Hämostase erreichen. Der Erfolg der Blutstillungslösung Astringedent bestärkte Dr. Fischer, weitere innovative und fortschrittlichere Lösungen zu entwickeln. Dies inspirierte ihn zur Gründung von Ultradent Products, Inc. Inzwischen befindet sich das international tätige Unternehmen seit 45 Jahren in Familienbesitz und verfolgt weiter seine Vision: die Verbesserung der Mundgesundheit durch die Entwicklung optimierter Dentalprodukte, die neue Branchenstandards setzten. Dr. Fischer ist Inhaber zahlreicher Patente.

Derzeit werden von Ultradent Products mehr als 500 Materialien, Geräte und Instrumente erforscht, entwickelt, hergestellt und vertrieben, die Zahnärzte auf der ganzen Welt verwenden. Dazu gehören das renommierte, branchenführende Opalescence™ Zahnaufhellungssystem und das bahnbrechende, professionelle Zahnaufhellungssystem Opalescence Go™ für zu Hause. Zu Ultradents Produktfamilie zählen auch die preisgekrönte VALO™ LED-Polymerisationsleuchte, der Fissurenversiegler UltraSeal XT™ hydro und das Ätzmittel Ultra-Etch™.

Ultradent Products wurde als „Small Business Administration's Exporter of the Year“ und „Direct Distributor of the Year“ ausgezeichnet. Zuletzt erhielt Ultradent den „Health Care Heroes“ Preis in der Kategorie „Corporate Achievement“. Anerkennung erhielten Ultradent Products und Dr. Fischer für ihre außergewöhnlichen Leistungen und ihren entscheidenden Beitrag für die Fachwelt. Im Jahr 2013 wurde Dr. Fischer vom Wirtschaftsförderungsamt des Gouverneurs des US-Bundesstaates Utah aufgrund seines Beitrags zu nachhaltigen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen dem Bundesstaat Utah und der Europäischen Union zum „International Man of the Year“ ernannt.

Dr. Fischer ist stets darum bemüht, die Mundgesundheit global zu verbessern. Außerhalb der Dentalbranche spendet Ultradent Produkte für humanitäre Hilfe auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Des Weiteren sponsert Ultradent Products eine gemeinnützige Organisation, die Diversity Foundation, deren fortschrittliches Programm vor Ort der Prävention von Hassverbrechen und Intoleranz verpflichtet ist. Dieses Programm fördert Vielfalt und das multikulturelle Bewusstsein von Personen unterschiedlichster Herkunft.

Dr. Fischer lebt nach denselben Werten, die Ultradent Products leiten: Integrität, Qualität, Fleiß, Innovation und Achtsamkeit. In seiner Freizeit widmet er sich der Pflege seines Gartens und verbringt Zeit mit seiner Frau, seinen Kindern und zahlreichen Enkelkindern.

**Folgen Sie uns in den sozialen Medien! Scannen Sie den QR-Code, um Ultradent auf Facebook, Instagram und LinkedIn zu folgen und keine Angebote und Neuigkeiten mehr zu verpassen!**

Facebook



Instagram



LinkedIn







## ZAHNAUFHELLUNG • 3–26

Home-Whitening mit individueller Tiefziehschiene  
Vorgefüllte UltraFit Trays  
Ausblock-Kunststoff  
Tiefziehfolien

Zubehör  
In-Office Whitening  
Walking Bleach  
Mikroabrasionspaste  
Zubehör



## ZEMENTE • 77–82

Eugenolfreie provisorische Zemente auf Polycarboxylat- und Kunststoffbasis  
Provisorischer Zement für Veneers  
Dualhärtendes Komposit für Befestigung und Aufbauten



## PROPHYLAXE & HYGIENE • 27–34

Fissurenversiegler  
Trocknungsmittel  
Natriumfluoridlack

Desensibilisierungslack  
Zahncremes zur Zahnaufhellung



## FINISH • 83–94

Einweg-Polierer  
Scheiben zum Konturieren und Finieren  
Original Komposit-Polierer-System  
Natural Komposit-Polierer-System  
Natural Universal Keramik-Polierer-System  
Universal Keramik-Polierer-System

Polierbürsten  
Polierpaste  
Trocknungsmittel  
Finierstreifen  
Kompositversiegler



## VORBEREITUNG • 35–44

Kariesindikator  
Zungen-, Lippen- und Wangenhalter  
Kofferdam  
Zahnschutzbänder

Abdichten und Ausblocken  
Teilmatrizensysteme  
Einwegmatrizenhalter



## GERÄTE • 95–114

Polymerisationsleuchten-Zubehör  
LED-Polymerisationsleuchte  
Diodenlaser

Schutzbrillen  
Scheren



## TISSUE MANAGEMENT • 45–56

Eisensulfat-Gel  
Aluminiumchlorid-Gel  
Eisensulfat-Lösung

Reinigungslösung  
Gestrückter Faden  
Fadenlegeinstrumente



## ENDODONTIE • 115–130

Mineral-Trioxid-Aggregat-Reparaturzement  
MTA-Reparaturmaterial  
Feilen-Gleitmittel  
Calciumhydroxidpaste

Citric Acid  
Tips – Endodontie  
Stifte  
Lichthärtendes provisorisches Restaurationsmaterial



## ADHÄSIVTECHNIK • 57–66

Self-Etch-System („No-Rinse“)  
Total-Etch-System („Etch and Rinse“)  
Phosphorsäuregel  
Selbstätzender Primer  
Bondingmaterial  
Lichthärtendes Adhäsiv

Keramikätzung  
Flusssäuregel  
Silanlösung  
Calciumhydroxid-Unterfüllungsmaterial



## APPLIKATION • 131–139

Tips – Restauration  
Tips – Endodontie

Spritzen und Spritzenhüllen  
Zubehör



## KOMPOSITE • 67–76

Universalkomposit  
Fließfähiges Komposit

Composite Wetting Resin  
Kompositversiegler



Begeistern Sie Ihre Patienten mit Marketingmaterialien, die speziell für Ihre Praxis entworfen wurden.

## Opalescence™ Patientenbroschüren: Informationen rund um das Thema Zahnaufhellung **10 Stk.**

Die Opalescence Patientenbroschüren für Ihr Wartezimmer sind nicht nur ansprechend, sondern auch leicht verständlich. Kurz und knackig bringen sie Ihren Patienten alles Wissenswerte rund um das Thema Zahnaufhellung näher und begeistern sie von den verschiedenen Möglichkeiten, ein strahlenderes Lächeln zu erlangen.



UPP 213-DE



UPP 215-DE

## Opalescence™ Patientenbroschüren: Handhabung von Opalescence und Ablauf einer Zahnaufhellung **10 Stk.**

Diese Broschüren informieren Ihre Patienten über den Ablauf einer Zahnaufhellung zu Hause sowie die Handhabung von Opalescence PF oder Opalescence Go.



UPP 228-DE



UPP 230-DE

## Opalescence™ Display **1 Stk.**

Die optimale Präsentationsmöglichkeit für die Patientenbroschüren UPP 213 und UPP 215: Platzieren Sie die Opalescence Displays in Ihrem Eingangsbereich, an der Rezeption oder in Ihren anderen Praxisräumen.



UPP 244-DE

## Opalescence™ Poster 420 x 594 mm **1 Stk.**

Lenken Sie alle Blicke auf das Thema Zahnaufhellung – mit attraktiven Postern im Warteraum oder in Ihren anderen Praxisräumen.



UPP 240-DE



UPP 241-DE



UPP 247-DE

## Opalescence™ Terminkärtchen **5 Stk. à 50 Blatt**

Erinnern Sie Ihre Patienten auf charmante Weise an alle Termine, bei denen Sie ihnen zu einem strahlenden Lächeln verhelfen!



UPP 243-DE

## Opalescence™ Broschüre **1 Stk.**

Allgemeine Informationen über Zahnaufhellung und die Behandlung von Verfärbungen mit Opalescence für kosmetische und medizinische Zahnaufhellung. Diese Broschüre informiert das gesamte Praxisteam, ist aber auch bei Gesprächen mit Patienten hilfreich.



UPP 260-DE

## Opalescence™ Video für Ihr Wartezimmer

Sie möchten in Ihrem Wartezimmer ein Video zum Thema Zahnaufhellung mit Opalescence zeigen? Gerne! Um auf die YouTube-Version zuzugreifen, scannen Sie einfach den QR-Code ein.

Die Videodatei können Sie per Mail über [infoDE@ultradent.com](mailto:infoDE@ultradent.com) anfordern.





DEREK HATCH – Bell Canyon Reservoir

# ZAHNAUFHELLUNG

Fragen rund um die Zahnaufhellung  
Zahnaufhellungsprotokoll  
Opalescence Zahnaufhellung – Übersicht  
KOSMETISCHE ZAHNAUFHELLUNG  
Home-Whitening mit individueller Tiefziehschiene  
Vorgefüllte UltraFit Trays  
Ausblock-Kunststoff  
Tiefziehfolien  
Zubehör  
MEDIZINISCHE ZAHNAUFHELLUNG  
In-Office Whitening  
Walking Bleach  
Mikroabrasionspaste  
Zubehör





## ZEIGEN SIE IHR LÄCHELN – Fragen rund um die Zahnaufhellung

Zahnverfärbungen können viele Ursachen haben. Bestimmte Arzneimittel, Zahntraumata, Restaurationmaterialien und Lebensmittel und Getränke können im Laufe der Zeit zu einer Verfärbung der Zähne führen.

Einige Verfärbungen sind oberflächlicher Natur, während andere innerlich sind. Beide können mit Erfolg zahnärztlich behandelt werden.

Die professionelle Zahnaufhellung ist der beste Weg, verfärbte Zähne sicher aufzuhellen.

Die Aufhellung dieser Verfärbungen ist kosmetisch und kann mit bewährten kosmetischen Produkten wie unseren Opalescence™ PF Zahnaufhellungsgelen erreicht werden. Sie werden mit individuellen Tiefziehschienen oder in unseren vorgefüllten Einmal-Schienen verwendet, wie dem neuen UltraFit Tray bei Opalescence Go™. Das Resultat ist ein helleres, weißeres Lächeln. Werden die Zähne wieder etwas dunkler, stellt eine kurze Nachbehandlung das perfekte Lächeln wieder her.


Andere Arten von Verfärbungen können als Folge von Erkrankungen, Verletzungen oder medizinischer Behandlung von innen in Schmelz und Dentin eindringen, z. B. durch angeborene, systemische, metabolische, pharmakologische, traumatische oder iatrogene Faktoren wie etwa Verfärbungen bei Dentalfluorose, Gelbsucht, Tetracyclin und Minozyclin bei Erwachsenen, Porphyrie, Trauma und fetaler Erythroblastose. Zur Behandlung dieser Ursachen wird ein medizinisches In-Office-Zahnaufhellungssystem benötigt. In vielen Fällen kann eine solche intensive Zahnaufhellung Füllungen, Veneers oder Kronen unnötig machen oder sie für lange Zeit hinausschieben.

Die professionelle Zahnaufhellung ist der beste und am wenigsten invasive Weg, verfärbte Zähne sicher aufzuhellen.

### WIE FUNKTIONIEREN ZAHNAUFHELLUNGEN?

Opalescence Zahnaufhellungsgel enthält einen leistungsstarken zahnaufhellenden Bestandteil – entweder Carbamidperoxid oder Wasserstoffperoxid. Peroxidgele zerfallen in Wasser, Sauerstoff und reaktive Sauerstoffmoleküle. Diese reaktiven Sauerstoffmoleküle oxidieren die Bindungen der für Verfärbungen verantwortlichen Farbstoffmoleküle. Durch die Veränderung der Farbstoffmoleküle wird der Zahn heller.<sup>1</sup>

Reaktive Sauerstoffmoleküle durchdringen den gesamten Zahn. Es ist also nicht notwendig, dass jede Zahnfläche mit dem Aufhellungswirkstoff in Kontakt kommt, damit der gesamte Zahn aufgehellt wird.

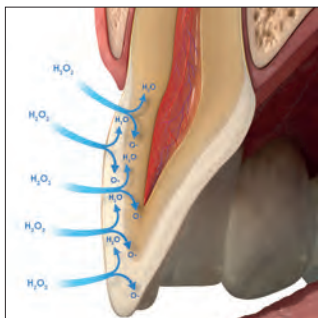

### BEEINTRÄCHTIGEN ZAHNAUFHELLUNGEN DIE ADHÄSIVTECHNIK?

Obwohl die Wirkstoffe eine große Menge Sauerstoff im Zahn freisetzen, werden vorhandene Adhäsivschichten nicht geschwächt.

**Hinweis:** Vor jeglichen Bonding-Verfahren<sup>2,4</sup> und Kompositversorgungen 10 Tage warten. Die hohe Sauerstoffkonzentration im Zahn könnte sonst die Polymerisation von Adhäsiven und Kompositen stark beeinträchtigen.

### WIE LANGE HALTEN DIE ERGEBNISSE EINER ZAHNAUFHELLUNG?

Die Ergebnisse einer Zahnaufhellung sind sehr stabil. Es hängt allerdings von der Ernährung und den Lebensgewohnheiten Ihres Patienten ab, ob die Aufhellung regelmäßig wiederholt werden sollte. Da die Aufhellungswirkstoffe jedoch ungefährlich sind, brauchen Sie keinerlei Bedenken zu haben.

### VERURSACHT EINE ZAHNAUFHELLUNG ZAHNEMPFFINDLICHKEIT?

Während einer Zahnaufhellung können Zahnempfindlichkeiten auftreten. Sollten sie auftreten, sind sie nur vorübergehend und verschwinden nach dem Abschluss der Zahnaufhellungsbehandlung. Wenn desensibilisierende Behandlungen erwünscht sind, empfehlen wir die Verwendung des UltraEZ™ Desensibilisierungsgels oder des Enamelast™ Fluoridlacks. Opalescence™ Zahncreme für empfindliche Zähne kann ebenfalls verwendet werden, um Zahnempfindlichkeiten vorzubeugen oder sie ggf. abzuschwächen.

### SCHWÄCHT DIE ZAHNAUFHELLUNG MIT OPALESCENCE ZAHNAUFHELLUNGSPRODUKTEN DEN ZAHNSCHMELZ?

Nein. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Opalescence Zahnaufhellung den Zahnschmelz schwächt.<sup>5-7</sup>

### WICHTIG: AM BESTEN LASSEN SICH ZÄHNE UNTER ZAHNÄRZTLICHER AUFSICHT AUFHELLEN!

Opalescence Zahnaufhellungen sind wirksam und sicher, wenn sie richtig und mit den richtigen Materialien durchgeführt werden. Dazu gehören eine umfassende Untersuchung, eine Einweisung in die gewählte Zahnaufhellung und die Überwachung des Patienten während der Behandlungsphase. Die Selbstbehandlung durch den Patienten mit frei verkäuflichen Produkten liefert oft nicht die gewünschten Ergebnisse und bietet dem Patienten keine Möglichkeit, eventuell auftretende Sensibilitäten oder andere Probleme zu behandeln.

1. Kwon SR, Wertz PM. Review of the Mechanism of Tooth Whitening. *J Esthet Restor Dent.* 2015 Sep-Oct;240-57.  
2. Da Silva Machado J, et al. The influence of time interval between bleaching and enamel bonding. *J Esthet Restor Dent.* 2007;19(2):111-8; discussion 19. 3. Spyrides GM, et al. Effect of whitening agents on dentin bonding. *J Esthet Restor Dent.* 2000;12(5):264-70. 4. Unlu N, Cobankara FK, Ozer F. Effect of elapsed time following bleaching on the shear bond strength of composite resin to enamel. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater.* 2008 Feb;84(2):363-8. 5. Metz MJ, Cochran MA, Matis BA, Gonzalez C, Platt JA, Pund MR. Clinical evaluation of 15% carbamide peroxide on the surface microhardness and shear bond strength of human enamel. *Oper Dent.* 2007;32(5):427-436. doi:10.2341/06-142 6. Cadenaro M, Navarra CO, Mazzoni A, et al. An in vivo study of the effect of a 38 percent hydrogen peroxide in-office whitening agent on enamel. *J Am Dent Assoc.* 2010;141(4):449-454. doi:10.14219/jada.archive.2010.0198 7. Cadenaro M, Breschi L, Nucci C, et al. Effect of two in-office whitening agents on the enamel surface in vivo: a morphological and non-contact profilometric study. *Oper Dent.* 2008;33(2):127-134. doi:10.2341/07-89



## Zahnaufhellungsprotokoll

Für eine professionelle Beurteilung und Behandlung empfehlen wir die folgenden Schritte.

### 1. ANAMNESE DES PATIENTEN

Ermitteln Sie die Ursache der Zahnverfärbung und prüfen Sie auf Behandlungsbedarf, der das Ergebnis beeinflussen könnte (ggf. auch durch Röntgenaufnahmen). Beurteilen Sie die Zielsetzung des Aufhellungssystems (Kosmetikprodukte für allgemeine „alltägliche“ Verfärbungen; Medizinprodukte für durch Erkrankung, Verletzung oder medizinische Behandlung verfärbte Zähne). Denken Sie daran, Ihre regelmäßige Patientenanamnese zu aktualisieren, indem Sie eine Frage nach der Zufriedenheit des Patienten mit seiner Zahnästhetik hinzufügen. Erklären Sie dem Patienten, dass vorhandene Restaurationen nicht heller werden, und besprechen Sie die mögliche Notwendigkeit neuer Restaurationen nach der Zahnaufhellung. Überprüfen Sie vorhandene Zahnempfindlichkeiten und führen Sie eine geeignete Behandlung durch, bevor Sie mit einem Zahnaufhellungsverfahren beginnen. Schwangere oder stillende Frauen sollten keine Zahnaufhellung durchführen lassen.

Patienten mit ernststen gesundheitlichen Problemen sollten vor der Behandlung mit ihrem Hausarzt sprechen. Bei Personen unter 18 Jahren dürfen keine kosmetischen Zahnaufhellungen durchgeführt werden.

### 2. ZAHNÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG

Bestimmen Sie die Ursache der Verfärbung und bewerten Sie die Zahnfleisch- und Zahngesundheit. Überprüfen Sie, ob es in der ästhetischen Zone Restaurationen gibt, die nach der Zahnaufhellung möglicherweise farblich nicht mehr passen. Besprechen Sie, ob sie nach der Zahnaufhellung ausgetauscht oder korrigiert werden sollen.

### 3. ERWARTUNGEN DES PATIENTEN

Besprechen Sie mit ihm die Möglichkeiten und Grenzen der Zahnaufhellung in seinem speziellen Fall und helfen Sie ihm dabei, realistische Erwartungen zu entwickeln.

### 4. MUNDHYGIENEBEHANDLUNG

Führen Sie als Nächstes eine Mundhygienebehandlung durch. Verwenden Sie Polierpaste, um alle Beläge zu entfernen. Tragen Sie bei Patienten mit Zahnempfindlichkeit nach dem Polieren Enamelast™ Fluoridlack auf.

### 5. BESTIMMUNG DER VORHANDENEN ZAHNFARBE

Ermitteln Sie vor Behandlungsbeginn die Zahnfarbe mit einem Farbschlüssel. Nehmen Sie auch ein Foto mit dem Farbmuster auf.

### 6. EMPFEHLUNGEN FÜR DEN PATIENTEN

Die Ergebnisse der Zahnaufhellung können ein Jahr oder länger anhalten.<sup>1,2</sup> Je nach Ernährung und Lebensstil des Patienten können regelmäßige Auffrischungsbehandlungen nötig sein, um das gewünschte Aussehen aufrechtzuerhalten. Unterweisen Sie den Patienten in der Anwendung der gewählten Aufhellungsprodukte und beantworten Sie alle Fragen und Bedenken.

### 7. BEHANDLUNGSPLAN FÜR DIE ZAHNAUFHELLUNG

Im Rahmen des Behandlungsplans können mehrere Opalescence™ Zahnaufhellungsprodukte verwendet werden, damit der Patient die gewünschten Ergebnisse erreicht. Wenn der Patient früher Zahnempfindlichkeiten hatte, führen Sie vor, während und nach der Aufhellungsbehandlung eine Desensibilisierungsbehandlung durch und verwenden Sie eine niedrigere Gelkonzentration und/oder reduzieren Sie die Tragezeit. Patienten können vor und während der Aufhellungsbehandlung auch Opalescence™ Zahncreme für empfindliche Zähne verwenden. Falls der Patient die Aufhellungsbehandlung verträgt, ohne dass Zahnempfindlichkeiten auftreten, können Sie darüber hinaus eine höhere Gelkonzentration anwenden, um schnellere Ergebnisse zu erzielen.

### 8. PATIENTENVEREINBARUNG

Lassen Sie den Patienten eine Einverständniserklärung für die Zahnaufhellung unterschreiben, in der die Zahnaufhellung und die dabei entstehenden Kosten erläutert werden.

### 9. DIE ERZIELTE ZAHNFARBE

Ermitteln Sie die erzielte Zahnfarbe mit dem Farbschlüssel und vermerken Sie sie in der Patientenakte. Nehmen Sie mit dem ersten und dem endgültigen Farbmuster ein Foto auf. Die endgültige Veränderung der Farbe sollte erst einige Tage nach Ende der Behandlung festgestellt werden, da die Zähne nach der letzten Aufhellungsbehandlung weiter aufhellen können.

### 10. BEHANDLUNG EVENTUELLER ZAHNEMPFFINDLICHKEIT

Bei einigen Patienten kann es zu einer anhaltenden Zahnempfindlichkeit kommen. Wir empfehlen die Verwendung des UltraEZ™ Desensibilisierungsgels oder des Enamelast™ Fluoridlacks. Opalescence™ Zahncreme für empfindliche Zähne kann ebenfalls verwendet werden, um Zahnempfindlichkeiten zu minimieren.

1. de Geus JL, de Lara MB, Hanzen TA, et al. One-year follow-up of at-home bleaching in smokers before and after dental prophylaxis. *J Dent.* 2015;43(11):1346-1351. 2. Wiegand A, Drebenstedt S, Roos M, Magalhães AC, Attin T. 12-month color stability of enamel, dentine, and enamel-dentine samples after bleaching. *Clin Oral Investig.* 2008;12(4):303-310.





## Opalescence™ Zahnaufhellung – Übersicht

\*In einigen Ländern der Europäischen Union sind keine Medizinprodukte zur Zahnaufhellung erhältlich.  
Fragen Sie bitte bei Ihrem Dentalhändler nach.

| PRODUKTBEZEICHNUNG | INHALTSSTOFFE | ANWENDUNGSGEBIETE |
|--------------------|---------------|-------------------|
|--------------------|---------------|-------------------|

### Kosmetische Zahnaufhellung



**Opalescence™ PF 10 %**

Kaliumnitrat,  
Fluorid und Xylitol

**KOSMETISCH, FÜR ZU HAUSE**  
Für Patienten mit bestehender  
Zahnpflichtigkeit; kann tagsüber  
oder nachts getragen werden



**Opalescence™ PF 16 %**

Kaliumnitrat,  
Fluorid und Xylitol

**KOSMETISCH, FÜR ZU HAUSE**  
Schnellere Zahnaufhellung; kann  
tagsüber getragen werden



**Opalescence Go™ 6 %**

Kaliumnitrat,  
Fluorid und Xylitol

**KOSMETISCH, FÜR ZU HAUSE**  
Jederzeit gebrauchsfertig, eine  
Alternative zu frei verkäuflichen  
Produkten

### Medizinische Zahnaufhellung\*



**Opalescence™ Quick PF 45 %**

Kaliumnitrat,  
Fluorid und Xylitol

**MEDIZINISCH,  
VOM ZAHNARZT ÜBERWACHT**  
Unter Aufsicht in der Praxis durch-  
geführte Aufhellung von dunklen,  
intern verfärbten Zähnen



**Opalescence™ Endo**

—

**MEDIZINISCH,  
VOM ZAHNARZT ÜBERWACHT**  
Interne Aufhellung endodontisch  
behandelter, devitaler Zähne



**Opalescence™ Boost™ 40 %**

Kaliumnitrat  
und Fluorid

**MEDIZINISCH,  
VOM ZAHNARZT ÜBERWACHT**  
Schnelle Chairside-Behandlung

### Andere Behandlungen



**Opalustre™  
Mikroabrasionspaste**

—

**VOM ZAHNARZT DURCHFÜHRT**  
Chairside-Behandlung zur  
Entfernung oberflächliche  
Schmelzfehler



**UltraEZ™  
Desensibilisierungsgel**

Kaliumnitrat  
und Fluorid

**FÜR ZU HAUSE**  
Behandlung von  
Überempfindlichkeitsreaktionen

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



Hinweis: Um die Wasserstoffperoxid-Konzentration zu ermitteln, den angegebenen Carbamidperoxid-Wert durch drei teilen.  
Eine Carbamidperoxid-Konzentration von 45 % entspricht beispielsweise einer Wasserstoffperoxid-Konzentration von etwa 15 %.  
Dies sollte beachtet werden, um die Intensität eines Zahnaufhellungspräparats korrekt einordnen zu können.

| GESCHMACKS-<br>RICHTUNGEN | TRAGEZEIT | AKTIVER BESTANDTEIL | <div> <div></div> Wasserstoffperoxid vs.           <div></div> Carbamidperoxid-Konzentrationen         </div> |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                     |                        |                                                                                    |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 % Mint<br>10 % Melone<br>10 % Neutral | 8 – 10 Stunden/Tag  | 10 % Carbamidperoxid   | <div> <div>~ 3 % Wasserstoffperoxid</div> <div>10 % Carbamidperoxid</div> </div>   |
| 16 % Mint<br>16 % Melone<br>16 % Neutral | 4 – 6 Stunden/Tag   | 16 % Carbamidperoxid   | <div> <div>~ 5,8 % Wasserstoffperoxid</div> <div>16 % Carbamidperoxid</div> </div> |
| 6 % Mint<br>6 % Melone                   | 60 – 90 Minuten/Tag | 6 % Wasserstoffperoxid | <div> <div>6 % Wasserstoffperoxid</div> </div>                                     |

|           |                                                                                        |                         |                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 45 % Mint | 15 – 30 Minuten/Tag                                                                    | 45 % Carbamidperoxid    | <div> <div>~ 15 % Wasserstoffperoxid</div> <div>45 % Carbamidperoxid</div> </div> |
| —         | 1 – 5 Tage pro Behandlung                                                              | 35 % Wasserstoffperoxid | <div> <div>35 % Wasserstoffperoxid</div> </div>                                   |
| —         | Zwei bis drei 20-minütige Anwendungen<br>Pro Termin NICHT mehr als dreimal applizieren | 40 % Wasserstoffperoxid | <div> <div>40 % Wasserstoffperoxid</div> </div>                                   |

|   |                     |                                              |
|---|---------------------|----------------------------------------------|
| — | Praxistermin        | 6,6 % Salzsäure<br>Siliziumkarbid            |
| — | 15 – 60 Minuten/Tag | 3 % Kaliumnitrat und<br>0,25 % neutrales NaF |



## Die Kosmetikverordnung zur Zahnaufhellung

EU Kosmetikverordnung 76/768/EWG – seit November 2012.

### Was beinhalten diese Regelungen der Kosmetikverordnung?

- Zahnaufhellungs-Präparate mit einem Gehalt von 0,1 - 6% Wasserstoffperoxid ( $H_2O_2$ ) sind Kosmetika.
- Diese kosmetischen Zahnaufhellungs-Präparate dürfen nur an Zahnärzte abgegeben werden.
- Die erste Anwendung ist stets dem Zahnarzt vorbehalten oder hat unter seiner direkten Aufsicht zu erfolgen. Anschließend dürfen diese Produkte an den Patienten zur häuslichen Weiterbehandlung weitergegeben werden.
- Eine Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahre darf nicht erfolgen.

Damit wird nicht nur der Schutz des Patienten betont, sondern gleichzeitig die Position und Kompetenz der Zahnarztpraxis für die Zahnaufhellung hervorgehoben und erheblich gestärkt. Durch sie wird die Behandlung professionell und sicher ausgeführt.

### Die Auswirkungen der Kosmetikverordnung auf das Sortiment von Ultradent Products

Das Zahnaufhellungssortiment von Ultradent Products ist nach wie vor das umfassendste Produktprogramm im Markt. Sie finden es eingeteilt in kosmetische und medizinische Produkte hier in diesem Katalog. Zahnaufhellungsprodukte über 6% werden in der Kosmetikverordnung nicht erwähnt. Sie bleiben Medizinprodukte, die für die medizinische Zweckbestimmung ausschließlich in der zahnärztlichen Praxis einzusetzen sind.

### Chancen für Praxis, Patienten, Zahngesundheit!

Nehmen Sie deshalb Zahnaufhellung in Ihr Behandlungsspektrum auf – es lohnt sich in vielerlei Hinsicht:

- Zahnaufhellung ist die zahnärztliche Behandlung, die echt begeistert: Patienten werden ihre hellen Zähne lieben, und eben diese Patienten sind die beste Visitenkarte für Ihre Praxis.
- Erfahrungen aus vielen Praxen zeigen: Patienten mit aufgehellten Zähnen sind künftig aufmerksamer, was Zähne angeht – sie lassen sich gern in Prophylaxe-Recall-Systeme einbinden und sind offen und bereit für Unterweisungen. Sie betreiben eine bessere Mundhygiene, sind treu und kommen regelmäßig – die Mundgesundheit profitiert!
- Für kosmetische und medizinische Zahnaufhellungen ist zwar der Zahnarzt der Letztverantwortliche, aber viele Behandlungsschritte sind an Mitarbeiter delegierbar. So können diese Behandlungen für Praxis und Patient wirtschaftlich durchgeführt werden.

### Wir unterstützen Ihre Aktivitäten!

Unsere Botschaft, dass hellere Zähne auch zu „besseren“, prophylaxebewussteren Patienten führen, kommt an. Damit Sie Ihre Patienten auf schöne weiße Zähne aufmerksam machen können, stellen wir Ihnen umfangreiche Marketingmaterialien kostenlos zur Verfügung: z.B. Poster, Patienten-Broschüren, Terminkärtchen, Wartezimmervideo etc. (siehe S. 2). Oder vereinbaren Sie ein kostenloses „UP-Date“ in Ihrer Praxis! Unsere Mitarbeiter weisen Ihr Praxisteam professionell in die Behandlungsmethoden mit Opalescence ein.

### OPALESCENCE.DE – Die Website zur Zahnaufhellung für Ihre Patienten!

Alle Themen zur Zahnaufhellung werden mit vielen Fotos und Grafiken sowie Videos veranschaulicht. Die Website macht Patienten neugierig und verweist sie auf die zahnärztliche Praxis und damit auf Sie – die Fachleute für die Zahnaufhellung und schöne Zähne.

Ihre Praxis bietet Zahnaufhellung mit Opalescence an? Zeigen Sie Ihr Engagement für die Zahnaufhellung und gewinnen Sie neue Patienten.

[Registrieren Sie sich gratis für den integrierten Zahnarztfinder.](#)





# KOSMETISCHE Zahnaufhellung

## Für ein strahlendes, weißes Lächeln!

Weißere Zähne zu haben, ist einer der ältesten Träume der Menschheit. In früheren Zeiten versuchte man es mit vielen Wirkstoffen und Techniken, meist vergeblich oder mit dem Nachteil schwerer Schäden an den Zähnen. Heute sind wir in der Lage, Zähne ohne negative Auswirkungen effektiv aufzuhellen. Doch dafür sind zwei Grundvoraussetzungen notwendig: Sie brauchen die richtigen Materialien – wie unsere Opalescence-Gele, die die PF-Formel (Kaliumnitrat – potassium nitrate – und Fluorid) enthalten, die die Gesundheit des Zahnschmelzes während des Aufhellungsprozesses erhält. Auf der anderen Seite ist die korrekte Handhabung entscheidend.

Die Änderung der EU-Kosmetikrichtlinie\* fordert ein Verfahren, das wir schon immer praktiziert haben: die Beteiligung eines Zahnarztes am kosmetischen Zahnaufhellungsprozess. Demnach wird die gesamte Behandlung unter der Aufsicht eines Zahnarztes durchgeführt, und die Zähne des Patienten sind in sicheren Händen.

„Für jeden Anwendungszyklus gilt, dass die erste Anwendung nur von einem Zahnarzt oder unter dessen direkter Überwachung durchgeführt wird, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach kann das Produkt dem Patienten für den verbleibenden Anwendungszyklus bereitgestellt werden.“\*



Dr. Dan Fischer  
Gründer, Ultradent Products, Inc.

| PRODUKTBEZEICHNUNG          | ANWENDUNGSGEBIETE                                                                                                               | AKTIVER BESTANDTEIL    | <div> <div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> Wasserstoffperoxid vs.           <div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-left: 5px;"></div> Carbamidperoxid-Konzentrationen         </div> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opalescence™ PF 10 %</b> | KOSMETISCH, FÜR ZU HAUSE<br>Für Patienten mit bestehender<br>Zahnpflichtigkeit;<br>kann tagsüber oder nachts<br>getragen werden | 10 % Carbamidperoxid   | <div> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> ~ 3 % Wasserstoffperoxid           <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-left: 5px;"></div> 10 % Carbamidperoxid         </div>          |
| <b>Opalescence™ PF 16 %</b> | KOSMETISCH, FÜR ZU HAUSE<br>Schnellere Zahnaufhellung;<br>kann tagsüber getragen<br>werden                                      | 16 % Carbamidperoxid   | <div> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> ~ 5,8 % Wasserstoffperoxid           <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-left: 5px;"></div> 16 % Carbamidperoxid         </div>        |
| <b>Opalescence Go™ 6 %</b>  | KOSMETISCH, FÜR ZU HAUSE<br>Jederzeit gebrauchsfertig,<br>eine Alternative zu frei<br>verfügbaren Produkten                     | 6 % Wasserstoffperoxid | <div> <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 20px; background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 6 % Wasserstoffperoxid         </div>                                                                                                                                                                                       |

\* Richtlinie 2011/84/EU des Rates

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



# KOSMETISCHE Zahnaufhellung



## Opalescence™ PF 10 % und 16 % CARBAMIDPEROXID MIT KALIUMNITRAT UND FLUORID

- Kosmetische Zahnaufhellung mit individuellen Tiefziehschienen
- Opalescence PF Zahnaufhellungsgele enthalten Kaliumnitrat und Fluorid (PF)
- Opalescence PF Gel für die kosmetische Zahnaufhellung bietet maximalen Patientenkomfort
- Klebriges, visköses Gel fließt nicht auf das Weichgewebe heraus und stellt sicher, dass die Schiene sicher fixiert bleibt<sup>2</sup>
- Seine Formulierung schützt vor Dehydrierung und Nachdunklung des Farbtons
- Zwei Konzentrationen für eine flexible Behandlung
- Erhältlich in den Geschmacksrichtungen **Mint**, **Melone** und **Neutral**
- Kann tagsüber oder nachts getragen werden

Die klebrige, visköse Formulierung von Opalescence Gel läuft nicht aus der Schiene wie andere Aufhellungsmittel<sup>2</sup>, und das klebrige Gel hält die komfortable Schiene sicher an Ort und Stelle. Opalescence PF Gel enthält Kaliumnitrat und Fluorid. Im Vergleich zu den Aufhellungsprodukten von Mitbewerbern schützt Opalescence wirksam vor einem Rückgang des Farbtons.<sup>3</sup> Opalescence Zahnaufhellungsgel besteht zu mindestens 20 % aus Wasser, was einer Dehydrierung vorbeugt. Eine Universitätsstudie weist nach, dass das Gel bei der Zahnaufhellung über Nacht 8 – 10 Stunden aktiv bleibt,<sup>4</sup> was bedeutet, dass Patienten schnell Ergebnisse sehen und sich dadurch die Mitarbeit verbessert. Opalescence Gel ist in einer Vielzahl von Konzentrationen, Formulierungen, Geschmacksrichtungen und Kitkonfigurationen für die Wünsche aller Ihrer Patienten erhältlich.

Opalescence Gel wird für die Aufhellung verfärbter Zähne vor der Restauration mit Komposit, Veneers und/oder Kronen empfohlen. Es behandelt wirksam innere Zahnverfärbungen, die auf angeborene, systemische, pharmakologische, traumatische und andere Faktoren sowie auf Alterung zurückzuführen sind. Es ist erfolgreich bei Fluorose und sogar bei Tetracyklin-Verfärbungen.<sup>2</sup>




Bestes kosmetisches Home-Whitening-System



Das erste haftende, visköse Gel  
mit einer optimalen Kombination von Kaliumnitrat und Fluorid

### BLEIBT DIE GANZE NACHT AKTIV!

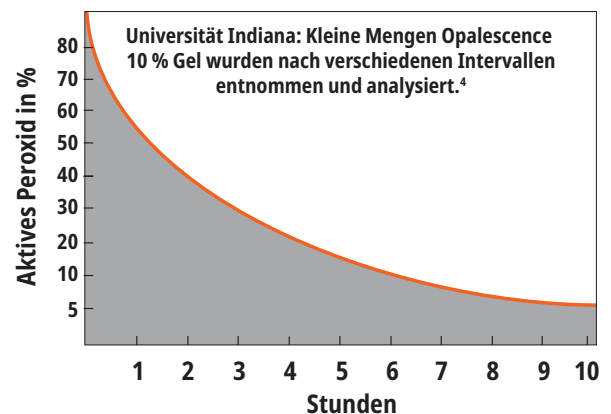

1. realityesthetics.com. 2. Caughman WF, DMD, Frazier KB, Haywood, VB. Carbamide peroxide whitening of non-vital single discolored teeth: Case reports. *Quintessence Int.* 1999;30(3):155-61. 3. Grobler, S.R., et al. A Clinical Study of the Effectiveness of Two Different 10% Carbamide Peroxide Bleaching Products: A 6-Month Follow-up; *Int J Dent.* May 5, 2011; 167525; doi: 10.1155/2011/167525. 4. Matis BA, Gaiao U, Blackman D, Schultz FA, Eckert G. In vivo degradation of bleaching gel used in whitening teeth. *J Am Dent Assoc.* 1999;130(2):227-35.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## VORHER UND NACHHER

Foto von Dr. Robert Nilson



Vor der Zahnaufhellung.



Oberkieferzähne nach 5 Nächten Behandlung mit Opalescence PF 10 % Zahnaufhellungsgel, etwa 40 Stunden.

Foto von Dr. Stephan Hoefler



Vor der Zahnaufhellung.



Nach 8 Tagen Behandlung mit Opalescence PF 16 % Zahnaufhellungsgel, jeden Tag für 3 Stunden.

Foto von Dr. Stephan Hoefler



Vor der Zahnaufhellung; neue Restaurationen sind geplant.



Nach 6 Tagen Behandlung mit Opalescence PF 10 % Zahnaufhellungsgel, jede Nacht für 8 Stunden. Neue Kompositfüllungen in situ.

Foto von Carol Jent, Dentalhygienikerin



Vor der Zahnaufhellung.



Nach einem Monat Zahnaufhellung.

Foto von Ultradent Products, Inc.



Moderate bis fortgeschrittene Tetracyclin-Verfärbungen.



Verbesserung innerhalb von 2 Wochen. Bei Tetracyclin-Verfärbungen kann eine Behandlungsdauer von 2 bis 6 Monaten erforderlich sein.<sup>1</sup>

## ANWENDUNG FÜR DEN PATIENTEN



1. Weisen Sie den Patienten an, die Zähne zu putzen, bevor die Schiene befüllt und eingesetzt wird. Gehen Sie mit dem Patienten die Anweisungen durch, die im Aufhellungskit enthalten sind. Erklären Sie, wie die Schiene befüllt wird: Einen fortlaufenden Gelstrang etwa in halber Höhe ab der Schneidekante auf die Vestibulärfläche legen, von Molar bis Molar. Erklären Sie, dass dabei nicht mehr als 1/3 bis 1/2 Spritze verbraucht werden sollte.



2. Schiene über die Zähne legen. Schiene vorsichtig andrücken, um das Zahnaufhellungsgel richtig zu verteilen. Wird die Schiene zu fest angedrückt, tritt das Gel aus der Schiene aus.



3. Falls zu viel Gel aufgetragen wurde oder Gel aus der Schiene gedrückt wurde, den Überschuss sanft mit einer Zahnbürste entfernen.



4. Die die Schiene mit einer Zahnbürste und kaltem Wasser reinigen. Die Schiene in der dafür bestimmten Box aufbewahren, wenn sie nicht gebraucht wird. Erinnern Sie den Patienten daran, das von Ihnen festgelegte Zahnaufhellungsprotokoll zu befolgen.

<sup>1</sup> Haywood VB, Leonard RH, Dickinson GL. Efficacy of six months of nightguard vital bleaching tetracycline-stained teeth. *J Esthet Dent.* 1997;9(1):13-19



## ANWENDUNG\*




1. Abdruck mit schnellhärtendem Modellgips oder Stone-Gips ausgießen. Alginat kurz nach der Abformung ausgießen, um Genauigkeit zu gewährleisten. Das Trimmen ist weniger arbeitsaufwendig, wenn so wenig Gips wie möglich verwendet wird. Gaumen- und Zungenbereiche werden nicht ausgegossen oder sollten nach dem Aushärten des Gipses entfernt werden. Lassen Sie das Modell zwei Stunden trocknen.



2. Für Reservoirs Ultradent™ LC Block-Out Resin etwa 0,5 mm dick auf die Labialflächen auftragen, dabei etwa 1,5 mm Abstand zum Gingivarand einhalten. NICHT auf die Inzisalkanten oder Okklusalfächen ausdehnen. Jeden Zahn 5 Sekunden mit einer VALO™ Polymerisationsleuchte lichterhärten. Die Sauerstoff-Inhibitionsschicht entfernen.



3. Verwenden Sie ein Tiefziehgerät, um das Sof-Tray™ Classic Schienenmaterial zu erwärmen, bis es für die 0,9 mm (0,035 ") Folien etwa 5 bis 15 mm (0,25 bis 0,5 ") bzw. für die 1,5 mm (0,060 ") und die 2,0 mm (0,080 ") Folien etwa 25 mm (1 ") durchhängt. Die Kunststoffolie dem Modell anformen. Abkühlen lassen und Modell aus dem Tiefziehgerät entfernen.

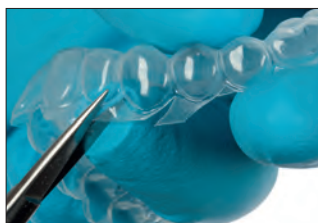

4. Mit einer kleinen Schere (Ultra-Trim Federschere) die Schiene vorsichtig und präzise bis zu der auf Gingivahöhe befindlichen transparenten Linie zuschneiden. Lassen Sie die Ränder girlandenförmig verlaufen, um Kontakt mit dem Zahnfleischgewebe zu vermeiden.



5. Schiene auf das Modell zurücksetzen; auf abstehende Schienenränder überprüfen. Bei Bedarf die Kanten behutsam und quadrantenweise durch Abflammen mit einem Butanbrenner polieren. Während die Schiene noch warm ist, halten Sie den Rand jedes Segments sofort drei Sekunden lang mit einem wassergetränkten behandschuhten Finger fest gegen das Modell. Stellen Sie eine neue Schiene her, wenn das Schienenmaterial dadurch zu dünn wird.



## Opalescence PF Patient Kits



| Geschmacksrichtung | 10 % | 16 % |
|--------------------|------|------|
| Mint               | 5364 | 4480 |
| Melone             | 5365 | 4481 |
| Regular            | 5366 | 4482 |

8 x 1,2 ml (1,50 g) Spritzen  
1 x 20 ml (28 g) Opalescence Zahncreme  
1 x Aufbewahrungsbox  
1 x Farbschlüssel

## Opalescence PF Doctor Kits



| Geschmacksrichtung | 10 % | 16 % |
|--------------------|------|------|
| Mint               | 5379 | 4483 |
| Melone             | 5380 | 4484 |
| Regular            | 5381 | 4485 |

8 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF Spritzen  
1 x 1,2 ml (1,38 g) Spritze Ultradent LC Block-Out Resin  
2 x Sof-Tray Folien 0,9 mm  
1 x Black Mini Tip  
1 x 20 ml (28 g) Opalescence Zahncreme  
1 x Aufbewahrungsbox  
1 x Farbschlüssel

## Opalescence PF Refill Kit 40 St.



| Geschmacksrichtung | 10 % | 16 % |
|--------------------|------|------|
| Mint               | 5394 | 4486 |
| Melone             | 5395 | 4487 |
| Regular            | 5396 | 4488 |

40 x 1,2 ml (1,50 g) Spritzen

\*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.





Ein strahlendes Lächeln gibt Ihren Patienten das Selbstvertrauen, häufiger zu lachen.

# Ein weißeres Lächeln lässt Deine Welt erstrahlen

Opalescence verleiht Ihren Patienten nicht nur ein strahlend weißes Lächeln, sondern auch ein blendendes Aussehen und ein positives Gefühl. Damit werden schöne Tage noch schöner. Als weltweiter Marktführer im Bereich der professionellen Zahnaufhellung<sup>1</sup> hat Opalescence bereits über 100 Millionen Lächeln aufgeheitert.<sup>1</sup> Das sind eine Menge schöner Tage!

Opalescence™  
tooth whitening systems



Erfahren Sie mehr über Opalescence Zahnaufhellung auf [ultradentproducts.com/brighterworld](http://ultradentproducts.com/brighterworld) und lassen Sie Ihre Patienten strahlen.

1. Daten liegen vor.







# KOSMETISCHE Zahnaufhellung



Leistungsstarke,  
professionelle  
Zahnaufhellung  
„to go“!

## Opalescence Go™ 6 %

VORGEFÜLLTE AUFHELLUNGSSCHIENEN  
MIT WASSERSTOFFPEROXID



- Kosmetische Zahnaufhellung mit vorgefüllten Trays
- Das einzigartige UltraFit™ Material bietet einen besonders komfortablen Sitz und passt sich dem individuellen Zahnbogen des Patienten an
- Reicht von Molar zu Molar, damit kommt das Gel auch mit den Seitenzähnen in Kontakt
- Opalescence Go Gel für die kosmetische Zahnaufhellung bietet maximalen Patientenkomfort
- Praktische vorgefüllte Trays direkt aus der Packung nehmen und tragen
- Optimale Gel-Menge, nach der Aufhellung leicht zu entfernen
- Tragezeit 60 – 90 Minuten pro Schiene
- Opalescence Go Zahnaufhellungsgel enthält Kaliumnitrat und Fluorid (PF)
- Angenehmer **Mint-** und **Melone-**Geschmack

Opalescence Go ist für viele Patienten ein empfehlenswerter Einstieg in die professionelle Zahnaufhellung oder eine Alternative zu frei verkäuflichen Zahnaufhellungsprodukten. Abformungen, Modelle oder Labor-Arbeitsgänge sind nicht notwendig, sodass sich Opalescence Go auch perfekt für eine häusliche Weiterbehandlung nach einer Zahnaufhellung in der Praxis eignet.



Äußere Schiene nur für Einbringen und Platzierung



UltraFit Tray vorher.



Nach 10 Minuten im Mund.

1. realityesthetics.com.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## ANWENDUNG\*



1. Produkt aus der Verpackung nehmen.  
„U“ – Tray für OK [upper tray]  
„L“ – Tray für UK [lower tray]



2. Das OK-Tray auf den Zähnen positionieren.



3. Fest zubeißen; dann 2 Sekunden lang die Schiene ansaugen.



4. Das farbige äußere Tray entfernen und das weiße innere Tray auf den Zähnen belassen. Den Vorgang für das UK-Tray wiederholen.



5. Nach der angegebenen Tragezeit die Trays herausnehmen und die Zähne putzen.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN

## Opalescence Go Patient Kits



| Geschmacksrichtung | 6 %  |
|--------------------|------|
| Mint               | 4634 |
| Melone             | 3592 |

Jedes Kit enthält 10 Blisterpackungen mit je 1 Tray für OK und UK  
1 x 20 ml (28 g) Opalescence Zahncreme

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN

## Opalescence Go Mini Kits



| Geschmacksrichtung | 6 %  |
|--------------------|------|
| Mint               | 4644 |
| Melone             | 3599 |

Jedes Kit enthält 4 Blisterpackungen mit je 1 Tray für OK und UK



## BETTER DENTISTRY THROUGH KNOWLEDGE

Besuchen Sie den Ultradent Products-Blog, um spannende Einblicke in die Welt der Zahnmedizin zu erhalten.



Den QR-Code scannen, um den Ultradent Products Blog zu besuchen



## Sof-Tray™ Folien

FOLIEN FÜR TIEFZIEHSCHIENEN



Wählen Sie die 0,9 mm für die meisten Aufhellungsschienen und die 1,5 mm oder die 2,0 mm für Patienten mit Bruxismus.



Verwenden Sie ein Tiefziehgerät, um das Sof-Tray™ Classic Schienenmaterial zu erwärmen, bis es für die 0,9 mm (0,035") Folien etwa 5 bis 15 mm (0,25 bis 0,5") bzw. für die 1,5 mm (0,060") und die 2,0 mm (0,080") Folien etwa 25 mm (1") durchhängt. Die Kunststoffolie dem Modell anformen. Abkühlen lassen und Modell aus dem Tiefziehgerät entfernen.

**226 – Sof-Tray Folien Regular**  
25 x 0,9 mm (0,035") – 127 x 127 mm

0,9 mm stark

**227 – Sof-Tray Folien Medium**  
20 x 1,5 mm (0,060") – 127 x 127 mm


1,5 mm stark

**284 – Sof-Tray Folien Heavy**  
20 x 2,0 mm (0,080") – 127 x 127 mm

2,0 mm stark

## Ultradent™ Ultra-Trim Federschere

- Zum präzisen Zuschneiden der Ränder um die Interdentalpapillen
- Mit Federmechanismus zur Entlastung der Finger
- Gezahnte Schneiden – ideal für das Schienenmaterial
- Aus haltbarem Edelstahl

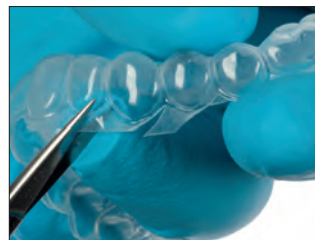

605 – Ultradent Ultra-Trim Federschere 1 St.

## Opalescence™ Aufbewahrungsboxen



- Schützen Schienen, wenn sie nicht im Einsatz sind
- Flaches Design, passt in jede Tasche
- Innenmaße: 7,5 x 7 x 1,5 cm

**707 – Aufbewahrungsboxen (farblich sortiert) 20 St.**  
6 x blau; 7 x grün; 7 x melone





## Ultradent™ LC Block-Out Resin

LICHTHÄRTENDER AUSBLOCK-KUNSTSTOFF



Black Mini™ Tip


- Gezielte Applikation dank optimaler Viskosität
- Blaue Farbe gut sichtbar während der Applikation
- Vielseitig nutzbarer Kunststoff

Ultradent LC Block-Out Resin bildet Reservoirs für Aufhellungsschienen und ist auch bei anderen Laborarbeiten wie Modell- und Stumpfpreparaturen hilfreich. Ultradent LC Block-Out Resin kann mit dem Black Mini Tip schnell und effizient appliziert werden. Es muss lichtgehärtet werden; nicht für intraorale Anwendung vorgesehen.

### INDIKATIONEN\*



Für Reservoirs Ultradent LC Block-Out Resin etwa 0,5 mm dick auf die Labialflächen auftragen (dabei etwa 1,5 mm Abstand zum Gingivarand einhalten) und lichthärten. Nicht auf Inzisalkanten und Okklusalfächen ausdehnen.

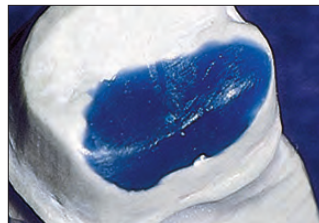

Ultradent LC Block-Out Resin ist ein lichthärtendes, stabiles und hartes Material zum Ausblocken von Unterschnitten an Stümpfen und Auffüllen von Fehlstellen.

„Ultradent LC Block-Out Resin ist der originale Ausblock-Kunststoff für die extraorale Anwendung – und nach wie vor der beste!“ – REALITY RATINGS

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



### 240 – Ultradent LC Block-Out Resin Kit

4 x 1,2 ml (1,38 g) Spritzen  
20 x Black Mini Tips



### 242 – Ultradent LC Block-Out Resin Econo Kit

20 x 1,2 ml (1,38 g) Spritzen  
20 x Black Mini Tips



### 241 – Ultradent LC Block-Out Resin Refill

4 x 1,2 ml (1,38 g) Spritzen



Verwendung für Reservoirs.



Auch für die parodontale Schienung geeignet.



## MEDIZINISCHE Zahnaufhellung



Dr. Dan Fischer  
Gründer, Ultradent Products, Inc.

Verfärbungen können viele Ursachen haben. Wenn die Verfärbungen durch Erkrankung, Verletzung oder medizinische Behandlung verursacht wurden und vom Inneren des Zahns in das Dentin und den Schmelz gewandert sind, brauchen Sie spezielle medizinische Strategien, um solche Zähne aufzuhellen – und spezielle medizinische Produkte.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Produkte für medizinische Aufhellungsbehandlungen mit stärkeren, hoch intensiven Wirkstoffen. Opalescence Boost ist zum Beispiel ein Gel mit 40 % Wasserstoffperoxid. Trotzdem ist es pH-neutral und enthält die PF-Formel, die die Gesundheit des Zahnschmelzes während des Aufhellungsprozesses erhält.

Es wird chemisch aktiviert – es ist also keine Lampe notwendig. Opalescence Endo und Opalescence Quick werden für andere spezielle medizinische Fälle verwendet. Mithilfe dieser Materialien lassen sich die meisten Verfärbungen auf minimal-invasive Weise korrigieren, selbst in schwierigen Fällen. Zur Behandlung dunkler Zähne werden keine Restaurationen, Veneers oder Kronen mehr benötigt. Restaurationen, Veneers oder Kronen werden nicht mehr benötigt, um dunkle Zähne zu behandeln.



| PRODUKTBEZEICHNUNG                | ANWENDUNGSGEBIETE                                                                                                                         | AKTIVER BESTANDTEIL     | <div> <div></div> Wasserstoffperoxid vs.           <div></div> Carbamidperoxid-Konzentrationen         </div> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opalescence™ Quick PF 45 %</b> | <b>MEDIZINISCH, VOM ZAHNARZT ÜBERWACHT</b><br>Unter Aufsicht in der Praxis durchgeführte Aufhellung von dunklen, intern verfärbten Zähnen | 45 % Carbamidperoxid    | <div> <div>~ 15 % Wasserstoffperoxid</div> <div>45 % Carbamidperoxid</div> </div>                             |
| <b>Opalescence™ Endo</b>          | <b>MEDIZINISCH, VOM ZAHNARZT ÜBERWACHT</b><br>Interne Aufhellung endodontisch behandelter, devitaler Zähne                                | 35 % Wasserstoffperoxid | <div> <div>35 % Wasserstoffperoxid</div> </div>                                                               |
| <b>Opalescence™ Boost™ 40 %</b>   | <b>MEDIZINISCH, VOM ZAHNARZT ÜBERWACHT</b><br>Schnelle Chairside-Behandlung                                                               | 40 % Wasserstoffperoxid | <div> <div>40 % Wasserstoffperoxid</div> </div>                                                               |

In einigen Ländern der Europäischen Union sind keine Medizinprodukte zur Zahnaufhellung erhältlich. Fragen Sie bitte bei Ihrem Dentalhändler nach.



## Opalescence™ Endo

„WALKING BLEACH“ FÜR DEVITALE ZÄHNE  
– 35 % WASSERSTOFFPEROXID



Black Mini™ Tip

- Medizinische Zahnaufhellung
- 35 % Wasserstoffperoxid
- Einfaches Einbringen in die Pulpakammer
- 5-tägige Behandlung

Opalescence Zahnaufhellungsgel für devitale Zähne wurde speziell zur medizinischen Aufhellung endodontisch behandelter, devitaler Zähne nach der „Walking-Bleach“-Technik formuliert.

### VORHER UND NACHHER

Foto von Dr. Rich Tuttle.



Vorher.



Nachher.



Vorher.



Nachher.

Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.



Vorher.



Nachher.

Foto von Dr. Arno Schoeler.



Vorher.



Nachher.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



## 1270 – Opalescence Endo Kit

2 x 1,2 ml (1,45 g) Spritzen  
20 x Black Mini Tips

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



## 1323 – Opalescence Endo Mini Refill Kit

2 x 1,2 ml (1,45 g) Spritzen



## J-Temp™

LICHTHÄRTENDES PROVISORISCHES  
RESTAURATIONS-MATERIAL

PROVISORISCHE RESTAURATION:  
„WALKING-BLEACH“-TECHNIK



1. Pulpakammer gemäß Gebrauchsanweisung beurteilen, präparieren und versiegeln.



2. Pulpakammer mit Zahnaufhellungsgel füllen, dabei 3–5 mm Platz für das provisorische Restaurationsmaterial J-Temp lassen (keine Barriere zwischen Zahnaufhellungsgel und J-Temp erforderlich).



3. Das provisorische Restaurationsmaterial J-Temp schrittweise in Schichten von 2–3 mm applizieren.



4. Zwischen den Schichten lichterhärten.



5. Das provisorische Restaurationsmaterial J-Temp kann leicht entfernt und vor jeder weiteren Zahnaufhellung erneut appliziert werden.



Lichthärtendes provisorisches  
Restaurationsmaterial,  
4 Indikationen in 1,  
siehe Seite 130

**HINWEIS:** Achten Sie darauf, das Zahnaufhellungsgel nicht an die Ränder zu drücken, da dies die provisorische Versiegelung beeinträchtigen könnte.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.





## Opalescence™ Boost™

ZAHNAUFHELLUNG IN DER PRAXIS  
– 40 % WASSERSTOFFPEROXID



Black Mini™ Tip

- Medizinische Zahnaufhellung
- KEIN LICHT ERFORDERLICH!
- Keine Kühlung erforderlich
- Hochintensives Gel mit 40 % Wasserstoffperoxid
- Zwei bis drei 20-minütige Anwendungen bei einer Behandlungszeit von insgesamt 40 – 60 Minuten, nicht mehr als 3 Anwendungen pro Termin
- Opalescence Boost Gel für die medizinische Zahnaufhellung bietet maximalen Patientenkomfort
- Präzise Applikation
- Gut sichtbar für leichte Einbringung und Entfernung
- Mischen von Spritze zu Spritze am Behandlungsstuhl gewährleistet maximale Wirksamkeit
- Opalescence Boost Zahnaufhellungsgel enthält Kaliumnitrat und Fluorid (PF)


Opalescence Boost (für medizinische Behandlungen) ist ein chemisch aktiviertes Zahnaufhellungsgel, bei dem kein Licht erforderlich ist. Tatsächlich haben einige Untersuchungen sogar ergeben, dass die Verwendung von Licht zur Zahnaufhellung schädlich für die Lippen und das Zahnfleisch sein kann.<sup>2</sup> Das Mischen von Spritze zu Spritze aktiviert das Produkt erst unmittelbar vor der Applikation. Das aktivierte Gel mit 40 % Wasserstoffperoxid wird bequem über eine Spritze abgegeben und zur Aufhellung auf die Zähne aufgetragen.

Opalescence Boost ist eine alternative, konservative Methode zur Behandlung dunkler, innerer Verfärbungen (im Vergleich zu Kronen, Veneers etc.) als Folge von Erkrankungen, Verletzungen oder medizinischer Behandlung, wie z. B. durch angeborene, systemische, metabolische, pharmakologische, traumatische oder iatrogene Faktoren wie etwa Verfärbungen bei Dentalfluorose, Gelbsucht, Tetrazyklin und Minocyclin bei Erwachsenen, Porphyrie, Trauma und fetaler Erythroblastose. Mit Opalescence Boost können Zahnärzte Verfärbungen auf sehr gezielte und effektive Weise behandeln.


## ANWENDUNG\*



1. Überprüfen, ob die Spritzen fest miteinander verschraubt sind. Den kleinen durchsichtigen Kolben (A) in die mittlere kleine durchsichtige Spritze (B) drücken, um die innere Membran zu durchbrechen und Aufhellungswirkstoff und Aktivator zu kombinieren. Den Kolben der roten Spritze in die größere durchsichtige Spritze drücken.

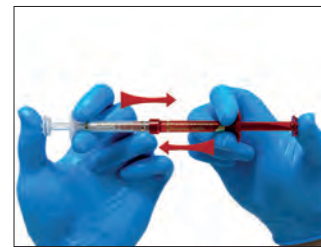

2. Den Inhalt der durchsichtigen Spritze zurück in die rote Spritze drücken. Um die Inhalte gründlich und schnell zu mischen, die Kolben kontinuierlich mit den Daumen hin und her drücken und mindestens 50 Mal (25 Mal pro Seite) schnell mischen.

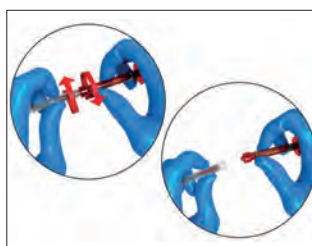

3. Das gesamte gemischte Gel in die ROTE Spritze drücken, und die beiden Spritzen trennen.



4. Den Black Mini™ Tip auf die rote Spritze schrauben. Materialfluss vor der intraoralen Applikation auf einem Tupfer oder einem Mischblock prüfen. Bei Widerstand den Tip austauschen und den Fluss erneut prüfen.

## VORHER UND NACHHER

Foto von Dr. Jörg Weiler



1. Vor der Zahnaufhellungsbehandlung mit Opalescence™ Boost™. 20-jähriger Mann mit Verfärbung im mittleren Bereich des Zahns 21. Die Zahnaufhellung wurde nach einer abgeschlossenen kieferorthopädischen Behandlung begonnen. Zahn 21 hat einen opaken bräunlichen Fleck in der Mitte der facialen Fläche.



2. Das Gel pro Anwendung 20 Minuten lang auf den Zähnen belassen.



3. Nach zwei 20-minütigen Anwendungen von Opalescence™ Boost™.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com. 2. Bruzell EM, Johnsen B, Aalerud TN, Dahl JE, Christensen T. In vitro efficacy and risk for adverse effects of light-assisted tooth bleaching. *Photochem Photobiol Sci.* 2009;8(3):377-85.

**WICHTIGER HINWEIS:** Nach dem Anmischen ist Opalescence™ Boost™ Zahnaufhellungsgel gekühlt 10 Tage lang verwendungsfähig. Vor der Entsorgung von Spritzen Wasser in die Spritze einsaugen und die Flüssigkeit in den Abfluss herausdrücken. Den Vorgang mehrmals wiederholen, bevor die Spritze entsorgt wird. Darauf achten, dass die verwendeten Gazetupfer mit Wasser gespült werden.

**WARNUNG:** Zahnarzt, Assistent und Patient müssen während des Mischens und Applizierens des Opalescence Boost Zahnaufhellungsgels in der Praxis eine Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.



#### 4750 – Opalescence Boost 40 % **Intro Kit**

4 x 1,2 ml (1,49 g) Boost/Aktivator Spritzen  
2 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green Spritzen  
2 x Ultradent Luer Vacuum Adapter  
2 x Farbschlüssel  
2 x IsoBlocks  
2 x SST Tips  
20 x Black Mini Tips



#### 4751 – Opalescence Boost 40 % **Patient Kit**

2 x 1,2 ml (1,49 g) Boost/Aktivator Spritzen  
1 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green Spritze  
1 x Farbschlüssel  
1 x IsoBlock  
10 x Black Mini Tips



#### 4754 – Opalescence Boost 40 % **Refill Kit**

20 x 1,2 ml (1,49 g) Boost/Aktivator Spritzen

**VALO™ X**  
BROADBAND LED CURING LIGHT




**WELCHE NEUE  
FARBE PASST  
ZU IHNEN?**

Siehe Seite 100 – 102.



# FARBE BEKENNEN

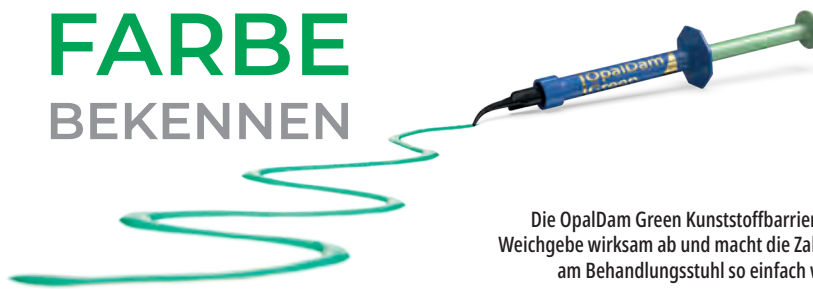

Die OpalDam Green Kunststoffbarriere deckt orale Weichgebe wirksam ab und macht die Zahnaufhellung am Behandlungsstuhl so einfach wie nie zuvor.

## OpalDam™ und OpalDam™ Green

LICHTHÄRTENDE ABDECKUNGS-KUNSTSTOFFE



Black Mini™ Tip

Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tip

- Schützt die Gingiva durch zuverlässige Abdichtung
- Einfach zu entfernen
- Direkte Applikation

Die lichthärtende OpalDam Kunststoffbarriere ist eine passiv adhäsive (versiegelnde) Kunststoffbarriere auf Methacrylatbasis zur Isolation von Weichgewebe, das an aufzuhellende Zähne angrenzt. Bei einer Einzelzahnaufhellung kann sie auch zum Schutz benachbarter Zähne verwendet werden. Die OpalDam Kunststoffbarriere ist lichtreflektierend, um während der Aushärtung Hitzeentwicklung und Gewebeempfindlichkeit zu minimieren. Die OpalDam Green Kunststoffbarriere gewährleistet jederzeit eine sichere, kontrastreiche Abdeckung.

### ANWENDUNG\*



1. OpalDam Kunststoffbarriere bis zu etwa einer Höhe von 5 – 10 mm auftragen. Approximalräume versiegeln. Lassen Sie den Kunststoff zur Abdichtung auf den trockenen Schmelz etwa 2 – 3 mm überlappen. Der Kunststoff sollte sich einen Zahn über den letzten aufzuhellenden Zahn hinaus erstrecken. 20 Sekunden mit einer entlangführenden Bewegung lichthärten.

2. Ausgehärteten Kunststoff schnell und einfach in einem Stück oder in einigen großen Stücken entfernen. Approximalräume auf Kunststoffreste überprüfen. Lässt sich einfach aus Zahnzwischenräumen und Unterschnitten entfernen.



### 324 – OpalDam Kit

4 x 1,2 ml (1,34 g) Spritzen

10 x Black Mini Tips


10 x Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tips



### 325 – OpalDam 4 St.

### 326 – OpalDam 20 St.

1,2 ml (1,34 g) Spritzen

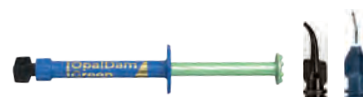

### 1824 – OpalDam Green Kit

4 x 1,2 ml (1,34 g) Spritzen

10 x Black Mini Tips

10 x Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tips



### 1825 – OpalDam Green 4 St

### 1826 – OpalDam Green 20 St

1,2 ml (1,34 g) Spritzen

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.





## Opalescence™ Quick PF 45 % ZAHNAUFHELLUNG IM WARTEZIMMER – CARBAMIDPEROXID



- Medizinische Zahnaufhellung
- 45 % Carbamidperoxid-Gel
- Opalescence Quick PF Zahnaufhellungsgele enthalten Kaliumnitrat und Fluorid (PF)
- Zur intensiven Behandlung von internen Verfärbungen
- Kein Gingivaschutz erforderlich
- Resultate schon nach 30 Minuten Behandlung
- In der Praxis, aber ohne Zeit auf dem Behandlungsstuhl

Für medizinische Zahnaufhellung, mit individuellen Schienen. Diese Methode eignet sich besonders, wenn interne Verfärbungen intensiv behandelt werden müssen, z. B. nach Anwendung von Tetrazyklin. Nach der Abformung werden individuelle Schienen hergestellt, mit 45 % Carbamidperoxid-Gel ( $\approx 15\% \text{H}_2\text{O}_2$ ) gefüllt und auf die Zähne gesetzt. Während der Behandlungszeit (etwa 30 Min.) kann der Patient im Wartezimmer der Zahnarztpraxis bleiben. Das hoch viskose Gel läuft nicht aus, sondern bleibt in der Schiene und hellt die verfärbten Zähne auf.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



**5346 – Opalescence Quick PF Refill**  
4 x 1,2 ml (1,50 g) Spritzen  
4 x Applikationsansätze

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



**5348 – Opalescence Quick Econo Refill**  
20 x 1,2 ml (1,45 g) Spritzen  
20 x Applikationsansätze

## VORHER UND NACHHER

Dr. Stephan Höfler



Vorher: Die Zähne mit Dentinogenesis imperfecta haben ein graues Aussehen.



Nach 4 Sitzungen mit Opalescence Quick sind die Zähne deutlich heller.



Vorher: Dieser schwere Tetrazyklin-Fall erfordert eine längere Behandlung. Doch die Alternative wären ziemlich opake Kronen, für die viel Zahnschubstanz geopfert werden müsste.



Nach einem halben Jahr und etwa 18 Sitzungen mit Opalescence Quick: Es wurde ein gefälliges ästhetisches Resultat erreicht; dafür musste keine Zahnschubstanz abgeschliffen werden!

## Ultradent E-Newsletter

Melden Sie sich für den kostenlosen E-Newsletter von Ultradent an, um laufend über neue Produkte, Veranstaltungen und vieles mehr informiert zu werden.



Scannen Sie den QR-Code,  
um sich noch heute anzumelden!

1. realityesthetics.com.



## Opalustre™ und OpalCups™

CHEMISCHE UND MECHANISCHE ABRASIIONSPASTE



White Mac™ Tip



OpalCups  
Bürstenkelche

OpalCups  
Finierkelche

- Entfernt oberflächliche Schmelzfehlbildungen
- Bietet minimalinvasive Behandlung
- Kann das Erscheinungsbild bei leichten bis mäßigen Verfärbungen durch Fluorose verbessern<sup>2</sup>
- Geringe Salzsäurekonzentration von 6,6 % unterstützt die chemische Entfernung oberflächlicher Schmelzfehlbildungen
- Siliziumcarbid-Mikropartikel sorgen für eine sanfte mechanische Abrasion
- OpalCups minimieren Verspritzen

Opalustre Paste mit 6,6 % Salzsäure enthält Carbidpartikel, um durch sanfte mechanische Abrasion und chemische Mittel oberflächliche Schmelzfehlbildungen zu behandeln. OpalCups Bürstenkelche mit Winkelstückchaft werden mit der Opalustre-Mikroabrasionstechnik verwendet, um eine aggressivere Wirkung zu erzielen und Verspritzen zu minimieren. OpalCups Finierkelche werden mit Opalustre Paste zur Mikropolitur der frisch behandelten Schmelzoberfläche verwendet.

Verwenden Sie Opalustre Paste und OpalCups zur schnellen Entfernung unansehnlicher Schmelzfehlbildungen von maximal 0,2 mm Tiefe. Opalustre beseitigt wirksam milde Fluorose und Verfärbungen in der oberflächlichen Schmelzschicht.<sup>3</sup> Wir empfehlen, zunächst eine Zahnaufhellungsbehandlung mit den Opalescence Produkten durchzuführen, da in einigen Fällen auf den Einsatz der Opalustre Abrasionspaste verzichtet werden kann. Bitte beachten Sie zudem, dass es notwendig ist, nach einer Aufhellungsbehandlung 7 – 10 Tage mit dem Bondingverfahren zu warten, da der reaktive Sauerstoff vor dem Bonding im Zahn abgebaut werden muss.<sup>4–6</sup>

## VORHER UND NACHHER

Foto von Dr. Bahrat Agrawal



Mäßige Verfärbungen durch Fluorose lassen sich mit wenigen Anwendungen von Opalustre™ Paste beseitigen oder deutlich reduzieren. Applikation mit OpalCups Bürstenkelch und 10:1 Untersetzungswinkelstück, mit festem Druck.

Foto von Dr. Rich Tuttle




Diese Schmelz-Dekalkifikation wurde mit Opalustre™ Paste unter Verwendung eines OpalCups Bürstenkelches und eines 10:1 Untersetzungswinkelstücks mit festem Druck behandelt.

Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop




Leichte bis mäßige Entkalkungen lassen sich mit wenigen Anwendungen von Opalustre™ Paste beseitigen oder deutlich reduzieren.

Foto von Dr. Renato Herman Sundfeld

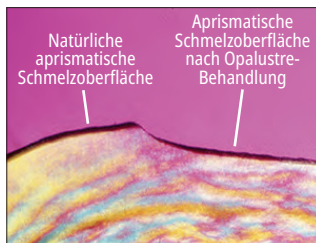

Chemische und mechanische Mikroabrasion erzeugt eine natürlich wirkende Oberfläche.

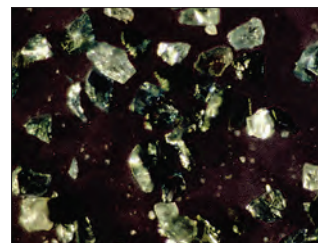

Siliziumcarbid-Mikropartikel, die in der Opalustre Paste enthalten sind.

1. realityesthetics.com. 2. da Cunha Coelho ASE, Mata PCM, Lino CA, et al. Dental hypomineralization treatment: A systematic review. *J Esthet Restor Dent.* 2019;31(1):26-39. doi:10.1111/jerd.12420 3. Celik EU, Yazkan B, Yildiz G, Tunac AT. Clinical performance of a combined approach for the esthetic management of fluorosed teeth: three-year results. *Niger J Clin Pract.* 2017;20(8):943-951. 4. Da Silva Machado J, Cândido MS, Sundfeld RH, et al. The influence of time interval between bleaching and enamel bonding. *J Esthet Restor Dent.* 2007;19(2):111-119. doi:10.1111/j.1708-8240.2007.00077.x. 5. Spyrides GM, Perdigão J, Pagani C, Araújo MA, Spyrides SM. Effect of whitening agents on dentin bonding. *J Esthet Dent.* 2000;12(5):264-270. doi:10.1111/j.1708-8240.2000.tb00233. 6. Unlu N, Cobankara FK, Ozer F. Effect of elapsed time following bleaching on the shear bond strength of composite resin to enamel. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater.* 2008 Feb;84(2):363-368.




## ANWENDUNG\* – KOFFERDAM

Foto von Dr. Ted Croll.



1. Vorher.

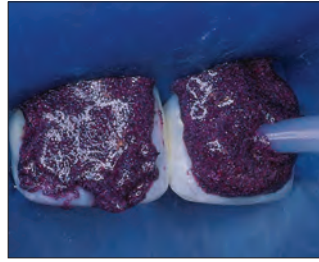

2. Nach dem Legen des Kofferdams wird die Opalustre Paste mit der Spritze auf den verfärbten Schmelz appliziert.



3. Verwenden Sie einen OpalCups™ Bürstenkelch, um die Opalustre Paste mit mittlerem bis starkem Druck auf die Zahnoberfläche zu pressen. Saugen Sie die Paste von den Zähnen ab; dann abspülen, beurteilen und bei Bedarf wiederholen. Zum Abschluss der Behandlung mit OpalCups™ Finierkelchen polieren.



4. Nach Mikroabrasion des Schmelzes sowie 21 Tagen Opalescence™ Zahnaufhellungsgel.



### 5554 – Opalustre Kit

2 x 1,2 ml (1,87 g) Spritzen  
je 5 x OpalCups Bürsten- und Finierkelche  
10 x White Mac Tips



### 554 – Opalustre Kit

4 x 1,2 ml (1,87 g) Spritzen  
je 10 x OpalCups Bürsten- und Finierkelche  
20 x White Mac Tips



### 555 – Opalustre Refill

4 x 1,2 ml (1,87 g) Spritzen

## ANWENDUNG\* – ISOLATION MIT OPALDAM

Foto von Dr. Ted Croll.




1. Fleckige Zähne mit OpalDam (Kunststoffbarriere) isolieren. Die Opalustre Paste direkt aus der Spritze mit einem White Mac™ Tip applizieren.



2. Den Kelch langsam laufend gegen die Oberfläche pressen.



3. Die Opalustre Paste mit einem Wasser-Luft-Spray entfernen. Dabei auf eine sorgfältige Absaugung achten. Prüfen, ob eine Wiederholung der Behandlung nötig ist. Anschließend OpalCups Finierkelche verwenden.

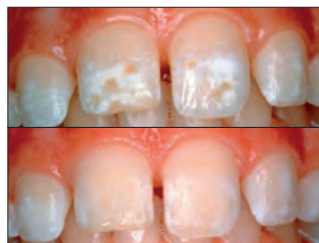

4. Das Ergebnis der Opalustre-Behandlung. Oben: vorher. Unten: nachher.



### 5800 – OpalCups Bürstenkelche 20 St.



### 5799 – OpalCups Finierkelche 20 St.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.





## UltraEZ™

DESENSIBILISIERUNGSGEL  
MIT KALIUMNITRAT UND FLUORID



- Entwickelt zur schnellen und wirksamen Reduzierung von Zahnpflichtigkeiten<sup>2,3,4</sup>
- Behandelt Dentinempfindlichkeit
- In Spritzen oder Einmal-Trays erhältlich

UltraEZ Gel ist ein Desensibilisierungsgel mit 3 % Kaliumnitrat und Fluorid (0,25 % neutrales NaF) und nachhaltiger Wirkstoffabgabe. Diese Formulierung behandelt schnell Zahnpflichtigkeiten durch Zahnaufhellung, Zahnbürsten-Abrasionen, freiliegende Zahnhälsen und thermische oder chemische Einflüsse.<sup>2,3,4</sup>



**1008 – UltraEZ Refill 4 St.**  
**1007 – UltraEZ Econo Refill 20 St.**  
1,2 ml (1,48 g) Spritzen



Mit dem UltraFit™ Tray

**5743 – UltraEZ Mini KombiTray 4 St.**  
je 4 x OK-/UK-Trays



Mit dem UltraFit™ Tray

**5721 – UltraEZ KombiTray 10 St.**  
je 10 x OK-/UK-Trays



## IsoBlock™

AUFBISSHILFE



- Komfortabel für den Patienten
- Bietet beidseitige Abstützung und Abhalten der Zunge

Diese IsoBlock Einweg-Aufbisshilfen entspannen die Lippen und Wangen und ermöglichen vollen Zugang zu fazialen und bukkalen Flächen für Zahnaufhellung in der Praxis, Klasse-V-Füllungen, Veneers, Zementieren usw.



**331 – IsoBlock 10 St.**

1. realityesthetics.com. 2. Ozen T, Orhan K, Avsever H, et al. Dentin hypersensitivity: a randomized clinical comparison of three different agents in a short-term treatment period. *Oper Dent.* 2009;34(4):392-398. 3. Leonard RH Jr, Smith LR, Garland GE, Caplan DJ. Desensitizing agent efficacy during whitening in an at-risk population. *J Esthet Restor Dent.* 2004;16(1):49-56. 4. Ibrahim PE, Ezzat MA, Ibrahim AH, Shaalan OO. Efficacy of fluoride varnish containing xylitol coated calcium phosphate or potassium nitrate gel versus conventional fluoride varnish in management of hypersensitivity of exposed root surfaces in adult patients: A randomized clinical trial. *Int J Health Sci.* 2022;2760-2776.



Zungen-, Lippen- und Wangenhalter, Seite 37.

## Umbrella™

ZUNGEN-, LIPPEN- UND WANGENHALTER

- Natürliche, sanfte Öffnung des Mundes – ganz ohne Ziehen oder Dehnen der Lippen
- Dank des innovativen Designs liegt die Zunge bequem hinter dem Zungenschutz und damit fern des Arbeitsfeldes
- Die anatomisch geformten Halter bieten eine Ablagemöglichkeit für die Arbeitshand, ohne für den Patienten unbequem zu sein.



WADE SMITH – Zion National Park

# PROPHYLAXE UND HYGIENE

Fissurenversiegler  
Trocknungsmittel  
Natriumfluoridlack  
Desensibilisierungslack  
Zahncremes zur Zahnaufhellung



## UltraSeal XT™ hydro™

HYDROPHILER FISSURENVERSIEGLER




Inspiral™ Brush Tip

- Der selbstadhäsive Fissurenversiegler ist vor dem Aushärten hydrophil und nach dem Aushärten hydrophob
- Weiterentwickelte Adhäsivtechnologie
- Fluoresziert unter Schwarzlicht, um zu überprüfen, dass der Versiegler noch vorhanden ist
- Hoch gefülltes Komposit – 53 %
- Thixotrop, ideale Viskosität und Fließfähigkeit<sup>2</sup>
- Zwei Farben: Opaque White und Natural


Der hydrophile Fissurenversiegler UltraSeal XT hydro ist ein lichthärtender, röntgensichtbarer, fluoridhaltiger Fissurenversiegler. Es ist als Komposit mit 53 % Fülleranteil stabiler und abrasionsbeständiger und hat eine geringere Polymerisationsschrumpfung als Mitbewerberprodukte.<sup>3</sup> Bei Verwendung mit dem Inspiral™ Brush Tip verdünnt sich der hydrophile UltraSeal XT Fissurenversiegler aufgrund seiner thixotropen Eigenschaft beim Ausbringen aus dem Tip und kann so tief in Grübchen und Fissuren eindringen. Das Komposit wird standfest, wenn es nicht mehr fließt und das Einbringen abgeschlossen ist,<sup>2</sup> wodurch ein Weglaufen vor der Lichthärtung vermieden wird. Die fortschrittliche, hydrophile Zusammensetzung wirkt, wenn alle sichtbare Feuchtigkeit entfernt wurde. UltraSeal XT hydro Fissurenversiegler ist toleranter gegenüber Feuchtigkeit in Grübchen und Fissuren.

## VORHER UND NACHHER


Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.

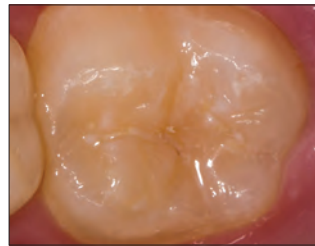

Vorher.

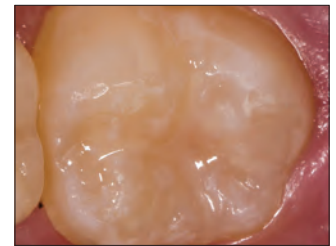

Nachher.

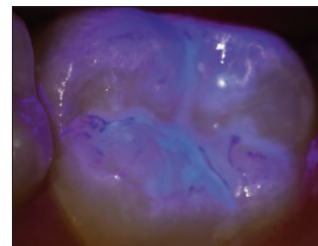

Nach dem Einbringen eines Versieglers ist es oft schwierig, die Ränder und die Haftung zu überprüfen. UltraSeal XT hydro Fissurenversiegler löst dieses Problem mit zusätzlichen Fluoreszenzeigenschaften. Der durch die Fluoreszenz unter Schwarzlicht vollständig sichtbare Versiegler ermöglicht es, seine Unversehrtheit gleich nach dem Einbringen und bei nachfolgenden Terminen zu überprüfen.

## VIER EINFACHE SCHRITTE\*



1. 30 Sekunden lang auf unbeschleunigtem Schmelz, 15 Sekunden auf beschleunigtem Schmelz ätzen. Abspülen.



2. Sichtbare Feuchtigkeit entfernen.



3. Den Fissurenversiegler UltraSeal XT hydro applizieren.



4. 3 Sekunden mit der VALO™ LED-Polymerisationsleuchte im Xtra-Power-Modus oder 10 Sekunden im Standard-Modus lichthärten.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage. 3. Daten liegen vor, auf Anfrage.


Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.






## MARGINALE HAFTUNG UND MIKROSPALTBILDUNG<sup>1</sup>

### UltraSeal XT hydro Fissurenversiegler

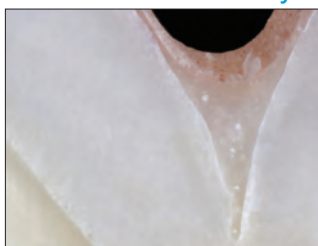


Kein Mikrospace.

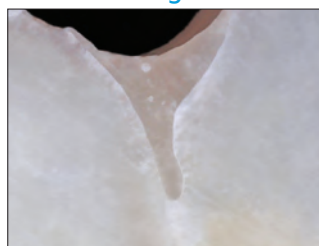

Versiegelte Ränder.

### Hydrophiler Versiegler von Mitbewerber

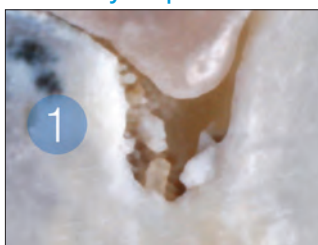

Mikrospace.



Ablösen von Rändern.



### UltraSeal XT hydro Kits

| Farbe        | Kit  |
|--------------|------|
| Opaque White | 3532 |
| Natural      | 3533 |

1 x 1,2 ml (2,04 g) UltraSeal XT hydro Spritze  
 1 x 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch Spritze  
 20 x Blue Micro Tips  
 20 x Inspirat Brush Tips




### UltraSeal XT hydro Refills

| Farbe        | 4 St. | 20 St. |
|--------------|-------|--------|
| Opaque White | 3534  | 3536   |
| Natural      | 3535  | —      |


1,2 ml Spritzen (2,04 g)

## WASSERAUFNAHME<sup>2</sup>

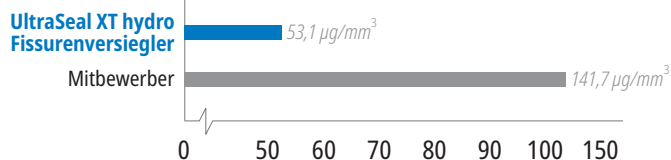

Eine ausgewogene Wasseraufnahme ermöglicht Toleranz in feuchten Umgebungen, ohne dass es zu einem Abbau kommt.

## ABBAU<sup>2</sup>

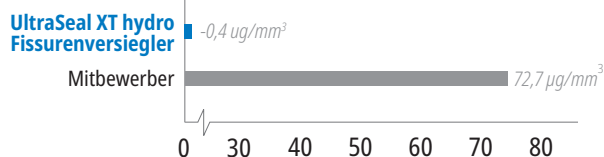

Kein Abbau durch ausgewogene Wasseraufnahme.

1. Daten liegen vor, auf Anfrage. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## UltraSeal XT™ plus


HYDROPHOBER FISSURENVERSIEGLER



Inspiral™ Brush Tip

- Versiegler auf Kunststoffbasis haben hohe Retentionsraten<sup>2</sup>
- Direkte Applikation in schwer zugängliche Bereiche
- Applikation ohne zu tropfen
- Hoch gefülltes Komposit – 58 %
- Dringt in tiefste Grübchen und Fissuren ein<sup>3</sup>
- Thixotrop, ideale Viskosität und Fließfähigkeit<sup>3</sup>
- Vier Farben: Opaque White, Clear, A1 und A2

Der hydrophobe Fissurenversiegler UltraSeal XT plus ist ein lichthärtender, röntgensichtbarer Fissurenversiegler mit Fluorid. Die durchschnittliche Partikelgröße beträgt 1,4 µ und der Versiegler verfügt über einen Füllanteil von 58 %.<sup>4</sup> UltraSeal XT plus Fissurenversiegler weist eine geringere Polymerisationsschrumpfung als Mitbewerberprodukte auf.<sup>5</sup> Bei Verwendung mit dem Inspiral™ Brush Tip verdünnt sich der UltraSeal XT plus Fissurenversiegler aufgrund seiner thixotropen Eigenschaft beim Ausbringen aus dem Tip und kann so tief in Grübchen und Fissuren eindringen. Das Komposit wird standfest, wenn es nicht mehr fließt und das Einbringen abgeschlossen ist,<sup>3</sup> wodurch ein Weglaufen vor der Lichthärtung vermieden wird. Die Verwendung von PrimaDry™ Trocknungsmittel mit dem Fissurenversiegler UltraSeal XT plus ermöglicht das Eindringen in Grübchen und Fissuren durch die restlose Entfernung von Feuchtigkeit, die sonst zu Misserfolgen bei hydrophoben Versieglern führen kann.

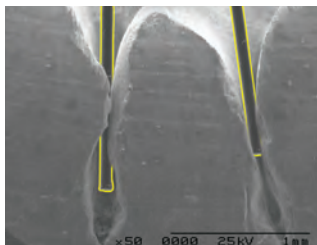

Mit seinen flexiblen Fasern und dem Spiralkanal eignet sich der Inspiral™ Brush Tip perfekt für die Applikation der UltraSeal XT Fissurenversiegler.

Die Bilder von Borste und Zahn (rechts) wurden mit derselben Vergrößerung aufgenommen und dann übereinander gelegt.

\*\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com. 2. Alirezai M, Bagherian A, Sarraf Shirazi A. Glass ionomer cements as fissure sealing materials: yes or no?: A systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2018; 149(7):640-649.e9. doi:10.1016/j.adaj.2018.02.001 3. Daten liegen vor, auf Anfrage. 4. Daten liegen vor, auf Anfrage. 5. Daten liegen vor, auf Anfrage. 6. Reality Ratings. Reality. Reality Publishing Company 1998-2017.

## VORHER UND NACHHER

Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.



Vorher.



Nach UltraSeal XT plus Fissurenversiegler.



Vorher.



Nach UltraSeal XT plus Fissurenversiegler.

## FÜNF EINFACHE SCHRITTE\*\*



1. 30 Sekunden lang auf unbeschleunigtem Schmelz, 15 Sekunden auf beschleunigtem Schmelz ätzen. Abspülen.



2. Sichtbare Feuchtigkeit entfernen. PrimaDry™ Trocknungsmittel trocknet aus.



3. PrimaDry Trocknungsmittel 5 Sekunden lang mit dem Black Micro™ FX™ Tip applizieren, dann lufttrocknen.



4. UltraSeal XT plus Fissurenversiegler applizieren.




5. 3 Sekunden mit der VALO™ LED-Polymerisationsleuchte im Xtra-Power-Modus oder 10 Sekunden im Standard-Modus lichthärten.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.




## VERGLEICH PHYSIKALISCHER EIGENSCHAFTEN

### SCHERKRAFT<sup>1</sup>

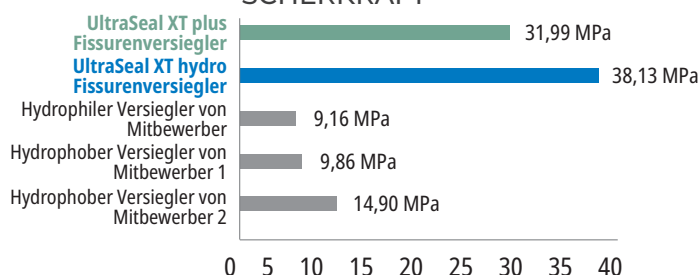


Hohe Scherhaftfestigkeit ist entscheidend für die Haftung des Versieglers bei normalem Gebrauch.

### HÄRTE<sup>1</sup>

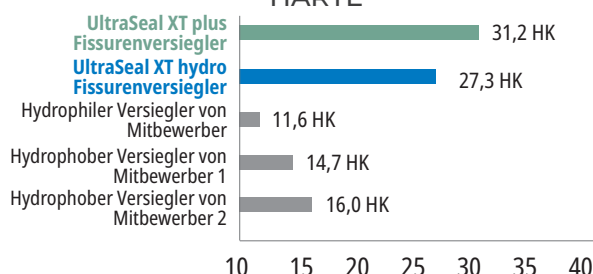

Hohe Härte weist auf einen starken, haltbaren Versiegler hin, der nicht abbricht oder abnutzt.

### SCHRUMPUNG<sup>1</sup>

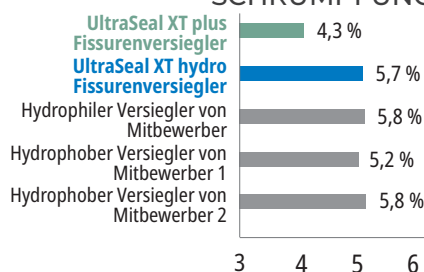

Geringe Schrumpfung reduziert das Risiko von Randspalten, die zu Mikroleakage führen können.

1. Daten liegen vor, auf Anfrage.



### UltraSeal XT plus Refills

| Farbe        | 4 St. | 20 St. |
|--------------|-------|--------|
| Opaque White | 726   | 727    |
| Clear        | 565   | —      |
| A1           | 1289  | —      |
| A2           | 734   | —      |

1,2 ml (2,04 g) Spritzen

## PrimaDry™

TROCKNUNGSMITTEL



Black Micro™ FX™ Tip

- Zur Verwendung mit UltraSeal XT plus Fissurenversiegler
- Reduziert Mikroleakage bei hydrophoben Fissurenversiegler

Das Trocknungsmittel PrimaDry eignet sich optimal für die Trocknung von Grübchen und Fissuren vor dem Einbringen hydrophober Fissurenversiegler. Es enthält 99 % organische Lösungsmittel und 1 % Primer. Das Trocknungsmittel PrimaDry entfernt nach dem Abspritzen des Ätzmittels mit Wasser und der Lufttrocknung schnell die Feuchtigkeit aus Grübchen und Fissuren. Der hauchfeine Primerfilm ermöglicht es dem UltraSeal XT plus Fissurenversiegler, perfekt in jede Fissur einzufliessen.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



716 – PrimaDry Spritze Refill  
4 x 1,2 ml (0,95 g) Spritzen





## Enamelast™ FLUORIDLACK

MEHR ALS NUR  
GROSSARTIGER GESCHMACK!



SoftEZ Tip



Neutral



Cool Mint



Caramel



Orange Cream



Bubble Gum



Walterberry

- Patentiertes adhäsionsförderndes System für bessere Haftung
- Hervorragende Fluoridabgabe und -aufnahme<sup>2</sup>
- Glatte, feine Konsistenz
- Fast unsichtbar
- Nuss- und glutenfrei

Enamelast Fluoridlack ist ein mit Xylitol gesüßter 5 %iger Natriumfluoridlack mit Harzen als Träger. Seine einzigartige Formel sorgt für eine bessere Haftung und ermöglicht eine hervorragende Fluoridabgabe und -aufnahme.<sup>2</sup> Erhältlich als Spritze in der Geschmacksrichtung **Walterberry™** und als Unit-Dose in den Geschmacksrichtungen **Walterberry, Orange Cream, Cool Mint, Bubble Gum, Caramel** sowie **Neutral**.

Enamelast Fluoridlack bewirkt einen mechanischen Verschluss der Dentintubuli bei der Behandlung von Zahnhypersensibilität.<sup>3</sup> Die AAPD empfiehlt Fluoridlack für die Anwendung als präventives Hilfsmittel zur Reduzierung des Kariesrisikos.<sup>4</sup> Die Verwendung von Fluoridlack zur Kariesprävention wurde auch von der ADA empfohlen.<sup>5</sup>

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. 1. realityesthetics.com 2. Daten liegen vor, auf Anfrage. 3. Daten liegen vor, auf Anfrage. 4. American Academy of Pediatric Dentistry. Grundsatzerklärung zur Verwendung von Fluorid. Angenommen 1967. Bekräftigt 1977. Revidiert 2018. Verfügbar unter [http://www.aapd.org/media/Policies\\_Guidelines/P\\_FluorideUse.pdf](http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/P_FluorideUse.pdf). 5. American Dental Association Council on Scientific Affairs. Professionally applied topical fluoride: evidence-based clinical recommendations. J Am Dent Assoc. 2006;137(8):1151-9. 6. McClure H. Fluoride Uptake into Sound Enamel Substrate Provided by Fluoride Varnishes and Resultant Surface Microhardness Effects via a Combination in Vitro Flow Model & PH Cycling Treatment Regimen Study Number 24-562. Therametric Technologies, Inc. Dental Product Testing Division; 2025. 7. McClure H. Fluoride Uptake into Sound Enamel Substrate Provided by Fluoride Varnishes and Resultant Surface Microhardness Effects via a Combination in Vitro Flow Model & PH Cycling Treatment Regimen Study Number 24-522. Therametric Technologies, Inc. Dental Product Testing Division; 2024. 8. Daten liegen vor, auf Anfrage. \*\* Die Testergebnisse wurden mit der Geschmacksrichtung Walterberry erzielt.



## VORHER UND NACHHER



Vor Enamelast Fluoridlack.





Unmittelbar nach der Applikation von Enamelast Fluoridlack.

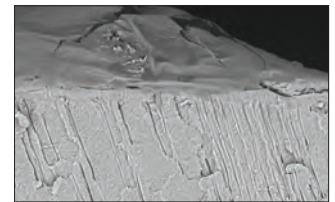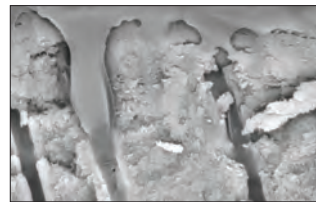

Enamelast Fluoridlack bewirkt einen mechanischen/chemischen Verschluss der Dentintubuli bei der Behandlung von Zahnhypersensibilität.<sup>3</sup> Dadurch eignet er sich ideal für den Einsatz vor oder nach einer Zahnaufhellung, um Beschwerden im Zervikalbereich zu lindern.

## FLUORIDAUFNAHME 4 STD. (ppm)<sup>6,7</sup>

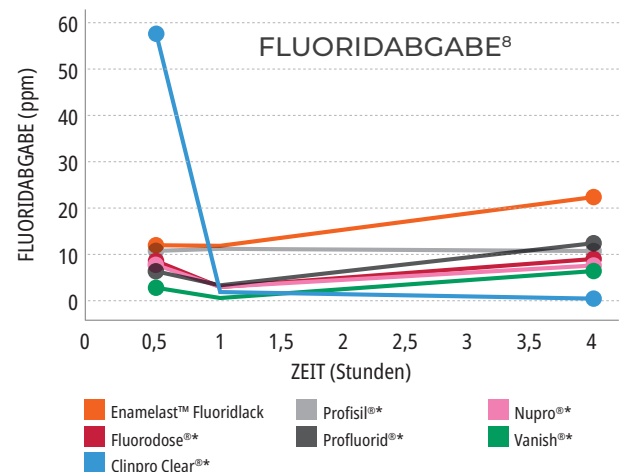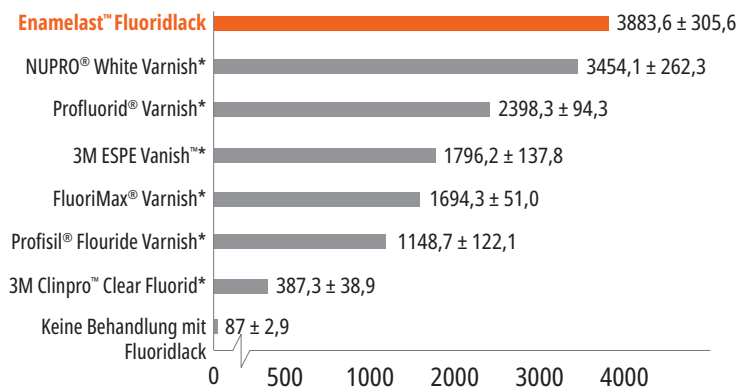

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## 4521 – Enamelast **Walterberry Spritzen-Kit**

2 x 1,2 ml (1,23 g) Spritzen  
4 x SoftEZ Tips



## 4523 – Enamelast **Walterberry Spritzen Econo Kit**

20 x 1,2 ml (1,23 g) Spritzen

## Enamelast **Unit-Dose 0,4 ml** (0,41 g)

| Geschmacksrichtung  | 50 St.      | 200 St.     |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Walterberry</b>  | <b>4518</b> | <b>4528</b> |
| <b>Orange Cream</b> | <b>4344</b> | <b>4343</b> |
| <b>Cool Mint</b>    | <b>4353</b> | <b>4352</b> |
| <b>Bubble Gum</b>   | <b>4363</b> | <b>4362</b> |
| <b>Caramel</b>      | <b>4819</b> | <b>4822</b> |
| <b>Neutral</b>      | <b>5188</b> | <b>5187</b> |



## Ultradent™ Universal Dentin Sealant

LACK ZUR DESENSIBILISIERUNG




Black Mini™ Brush Tip

- Schnelle Applikation — einbürsten und trocknen
- Hervorragendes Hilfsmittel für Dentalhygieniker
- Ideal nach Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung
- Vorübergehende Blockierung der Dentintubuli

Ultradent Universal Dentin Sealant ist ein biokompatibles, nicht polymerisierendes Harz von hohem Molekulargewicht in einem leichtflüchtigen organischen Lösungsmittel.

Decken Sie empfindliche Wurzeln mit Ultradent Universal Dentin Sealant ab, um die Dentinkanälchen zu verschließen und Beschwerden<sup>1</sup> nach Scaling und Wurzelglättung zu reduzieren.

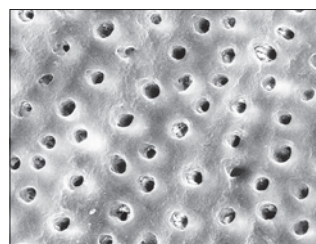

Ultradent Universal Dentin Sealant deckt das Dentin mit einer schützenden Versiegelung. Beide Oberflächen wurden 20 Sekunden mit Phosphorsäure konditioniert; REM rechts wurde vorher mit Ultradent Universal Dentin Sealant versiegelt.<sup>2</sup>



## 266 – Universal Dentin Sealant **Refill**

4 x 1,2 ml (1,08 g) Spritzen

**HINWEIS:** Ultradent Universal Dentin Sealant ist KEIN Bonding-Präparat. Für unübertroffene Bonding-Präparate siehe Seite 60. Wenn eine Unterfüllung oder ein Liner notwendig ist, verwenden Sie den Ultra-Blend™ plus Liner, Seite 66.

1. Millia E, Castelli G, Bortone A, et al. Short-term response of three resin-based materials as desensitizing agents under oral environmental exposure. Acta Odontol Scand. 2013;71(3-4):599-609. doi:10.3109/00016357.2012.700 063.  
2. Daten liegen vor, auf Anfrage.



## VORHER UND NACHHER



Ergebnisse bereits innerhalb von nur einer Woche<sup>1</sup>

## Opalescence™ Zahncreme

ORIGINAL & FÜR EMPFINDLICHE ZÄHNE



- Hellt Zähne in nur 2 Wochen um bis zu 2 Farbtöne auf<sup>2</sup>
- Enthält hydratisierte Kieselsäure, die nachweislich Verfärbungen beseitigt<sup>1</sup>
- Sanft zum Zahnfleisch<sup>1</sup>
- Sicher für die langfristige tägliche Anwendung
- Enthält Natriumfluorid zum Kariesschutz und zur Stärkung des Zahnschmelzes<sup>3</sup>
- Außergewöhnliche Fluoridaufnahme<sup>4</sup>
- 78 RDA<sup>5</sup>
- Triclosan- und TiO<sub>2</sub>-freie Formel
- Vegan – ohne Verwendung tierischer Inhaltsstoffe

Opalescence™ ist der Marktführer im Bereich der professionellen Zahnaufhellungssysteme.<sup>6</sup> Zur Produktfamilie gehört auch die von einem Zahnarzt entwickelte Opalescence™ Zahncreme. Sie entfernt aktiv oberflächliche Verfärbungen<sup>2</sup> und ist dank ihrer einzigartigen Mischung aus drei Kieselsäuren sanft genug, um täglich<sup>5</sup> verwendet zu werden.

- Drei Arten exotischer Minze werden zu einem reinen, frischem und kühlen Geschmack vermischt
- Gesüßt mit Xylitol, was das Risiko von Karies reduzieren kann
- Unsere Formel für empfindliche Zähne hat alle Vorteile des Originals, mit dem zusätzlichen Vorteil der maximalen Kraft von 5 % Kaliumnitrat



| 20 ml (28 g)       | 24 St. |
|--------------------|--------|
| Original           | 402    |
| Sensitivity Relief | 3472   |



| 100 ml (133 g)     | 12 St. |
|--------------------|--------|
| Original           | 401    |
| Sensitivity Relief | 3470   |

1. Çakmakcioğlu O, Yılmaz P, Topbaşı BF. Clinical evaluation of whitening effect of whitening toothpastes: A pilot study. *OHDMBMC*. 2009;8(4):613. 2. Dursun MN, Ergin E, Tekce AU, Gurgan S. Which whitening toothpaste with different contents is more effective on colour and bond strength of enamel? *J Esthet Restor Dent*. 2023;35(2):397-405.doi:10.1111/jerd.12968 3. Sivapriya E, Sridevi K, Periasamy R, Lakshminarayanan L, Pradeepkumar AR. Remineralization ability of sodium fluoride on the microhardness of enamel, dentin, and dentinoenamel junction: An in vitro study. *J Conserv Dent*. 2017;20(2):100-104. doi:10.4103/JCD.JCD\_353\_16. 4. Daten liegen vor, auf Anfrage. 5. Daten liegen vor, auf Anfrage. 6. Daten liegen vor, auf Anfrage. 7. Diese Zahncreme enthält kein Peroxid.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.





DARREN BECKSTEAD – Grafton

# VORBEREITUNG

Kariesindikator  
Zungen-, Lippen- und Wangenhalter  
Kofferdam  
Zahnschutzbänder  
Abdichten und Ausblocken  
Teilmatrixsysteme  
Einwegmatrixenhalter



## Sable™ Seek™ KARIESINDIKATOR




Black Mini™ Brush Tip

- Färbt kariöses und demineralisiertes Dentin
- Bietet präzise, saubere Applikation
- Die dunkelgrüne Farbe ist ideal für pulpannahe Arbeiten

Sable Seek Kariesindikator enthält FD&C-Farbstoffe zur Anfärbung von kariösem und demineralisiertem Dentin. Er kann sehr nützlich für schwer einsehbare Stellen sein – z. B. bei unterschlagenden Stellen von Präparationen, dunklem Dentin und Bereichen entlang der Schmelz-Dentin-Grenze. Die grüne Farbe von Sable Seek Kariesindikator hilft bei der Visualisierung tiefer Karies und trägt so zur Vermeidung einer Pulpaeröffnung bei.

## ANWENDUNG\*

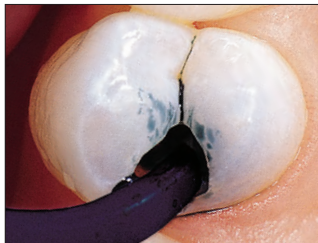

1. Sable Seek Indikator mit Black Mini Brush Tip applizieren.



2. Mit Luft/Wasser abspülen und absaugen. Kariöses Dentin ist leicht zu erkennen.



3. Grün-schwarze Farbe (kariöses Dentin) mit langsam laufendem Rosenbohrer oder Handexkavator entfernen. Zur Vermeidung von Überexkavation in Pulpanähe letzte Kariesreste mit einem Handexkavator entfernen.



4. Erneut auftragen. Spülen und prüfen, ob die vollständige Kariesentfernung gelungen ist.



**233 – Sable Seek Kit**  
4 x 1,2 ml (1,22 g) Spritzen  
20 x Black Mini Brush Tips



**234 – Sable Seek Refill**  
4 x 1,2 ml (1,22 g) Spritzen



**1805 – Sable Seek Econo Refill**  
20 x 1,2 ml (1,22 g) Spritzen



## J-Temp™

LICHTHÄRTENDES  
PROVISORISCHES  
RESTAURATIONS-MATERIAL



HALT FÜR KOFFERDAM-  
KLAMMERN UND BARRIERE FÜR  
ENDODONTISCHE SPÜLLÖSUNGEN\*



1. Die unzureichende Zahnschubstanz lässt das Legen einer Klammer und eines Kofferdams nicht zu.



2. Um die fehlende Zahnschubstanz wiederherzustellen, J-Temp in 2 – 3 mm dicken Schichten applizieren und zwischen den Schichten lighthärten. Ggf. mit dem Bohrer anpassen.



3. Jetzt kann der Kofferdam sicher gelegt werden, um als Barriere für Spüllösungen zu fungieren.

Lichthärtendes provisorisches Restaurationsmaterial,  
4 Indikationen in 1, siehe Seite 130.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## Umbrella™

ZUNGEN-, LIPPEN- UND WANGENHALTER



- Entwickelt für ein übersichtliches Behandlungsfeld und hohen Patientenkomfort
- Einfache Platzierung
- Einwegartikel
- Natürliche, sanfte Öffnung des Mundes – ganz ohne Ziehen oder Dehnen der Lippen
- Dank des innovativen Designs liegt die Zunge bequem hinter dem Zungenschutz und damit fern des Arbeitsfeldes
- Die anatomisch geformten Halter bieten eine Ablagemöglichkeit für die Arbeitshand, ohne für den Patienten unbequem zu sein
- Sorgt für Entspannung und Komfort bei sensiblen Patienten – da es bei den meisten keinen Würgereiz hervorruft
- Kann während der Bisskontrolle in Position verbleiben

Der Umbrella Wangenhalter ist ideal geeignet für eine Vielzahl an Verfahren, für die ein übersichtlicher Zugang erforderlich ist, ohne den Patientenkomfort zu beeinträchtigen, etwa bei der Zahnaufhellung in der Praxis, Frontzahnrestaurationen, klassischer und digitaler Abformung, Bissregistraten oder chirurgischen Eingriffen.


### WOHER WEISS ICH, WELCHE GRÖSSE DIE RICHTIGE IST?

- Wenn Sie für den Patienten einen Abformlöffel der Größe XS, S oder M verwenden würden, nehmen Sie einen Wangenhalter der Größe Medium.
- Wenn Sie für den Patienten einen Abformlöffel der Größe L oder XL verwenden würden, nehmen Sie einen Wangenhalter der Größe Large.
- Im Zweifelsfall die größere Variante wählen.


### ANWENDUNG\*



1. Zur Vorbereitung auf das Einsetzen im Mund drücken Sie die Laschen des Umbrella™ Zungen-, Lippen und Wangenhalters zusammen. Achten Sie darauf, dass die Pfeile der oberen Lasche aufwärts gerichtet sind.

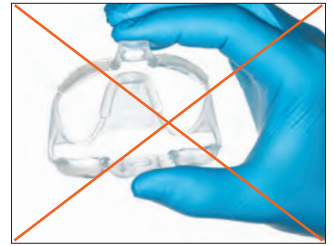

Den Wangenhalter NICHT umgedreht einsetzen.

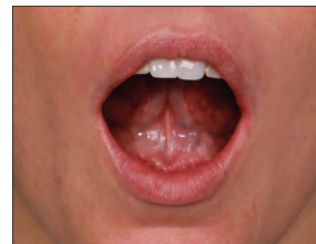

2. Bitten Sie den Patienten, die Zungenspitze am Gaumen anzulegen.



3. Führen Sie Umbrella zuerst auf einer Seite des Mundes und danach ganz bequem auf der anderen Seite ein.



4. Mithilfe der Laschen zentrieren Sie den Wangenhalter im Mund des Patienten.



5. Überprüfen Sie, ob die Zunge des Patienten bequem hinter dem Zungenschutz liegt und ein einfacher Zugang gewährleistet ist.



Positionieren Sie den Zungenschutz NICHT auf der Zunge des Patienten.

- 4870 – Umbrella Wangenhalter **Medium** 5 St.
- 4871 – Umbrella Wangenhalter **Medium** 20 St.
- 5162 – Umbrella Wangenhalter **Medium** 40 St.
- 5256 – Umbrella Wangenhalter **Large** 5 St.
- 5257 – Umbrella Wangenhalter **Large** 20 St.
- 5258 – Umbrella Wangenhalter **Large** 40 St.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.





## DermaDam™ Synthetic

KOFFERDAM – LATEXFREI



DermaDam Synthetic Kofferdam wird nicht mit Naturlatex hergestellt, ist jedoch genauso elastisch und haltbar wie Kofferdam, der aus Naturlatex besteht.

### Keine sensibilisierenden Proteine



299 – DermaDam **Medium Synthetic 0,20 mm 20 St.**

330 – DermaDam **Medium Synthetic 0,20 mm 60 St.**

15 cm x 15 cm

## DermaDam™

KOFFERDAM



- Niedriges Dermatitisrisiko
- Stabil und reißfest
- Puderfrei zur Reduzierung allergischer Reaktionen

DermaDam Kofferdam wird aus reinem Latexgummi hergestellt und ist puderfrei, was das Risiko allergischer Reaktionen reduziert. Die Qualitätsfertigung gewährleistet einen geringen Gehalt an Oberflächenproteinen.



311 – DermaDam **Medium 0,20 mm 36 St.**

314 – DermaDam **Heavy 0,25 mm 36 St.**

15 cm x 15 cm

## InterGuard™

ZAHNSCHUTZBÄNDER



Die InterGuard Zahnschutzbänder schützen benachbarte Zähne vor iatrogenen Beschädigungen.<sup>2,3</sup> Die stabilen, gerollten Enden halten die keilförmigen Approximalräume frei zugänglich. Die 0,1016 mm dicken InterGuard Zahnschutzbänder aus Edelstahl eignen sich hervorragend für Tunnelpräparationen und zum Schutz der benachbarten Zähne bei der Arbeit mit Pulverstrahlgeräten.



So einsetzen, dass die gerollten Enden zum präparierten Zahn zeigen. Zahnseide wie dargestellt durch das Loch fädeln, um zu verhindern, dass der Patient das InterGuard Zahnschutzbänder verschluckt.



**3097 – InterGuard Kit**

je 5 x 4,0 mm und 5,5 mm

### InterGuard Refills

| Größe  | 10 St. | 50 St. |
|--------|--------|--------|
| 4,0 mm | 4016   | 4011   |
| 5,5 mm | 4017   | 4012   |



1. realityesthetics.com.

1. realityesthetics.com. 2. Lenters M, van Amerongen WE, Mandari GJ. Iatrogenic damage to the adjacent surfaces of primary molars, in three different ways of cavity preparation. *Eur Arch Paediatr Dent.* 2006;1(1):6-10. 3. de la Peña VA, García RP, García RP. Sectional matrix: Step-by-step directions for their clinical use. *Br Dent J.* 2016;220(1):11-14.



## OraSeal™

ABDICHTEN UND AUSBLOCKEN



White Mac™ Tip



Black Mini™ Tip



- Haftet unter Wasser und Speichel
- Schützt das Zahnfleisch vor Peroxid und Flusssäure
- Ideal zur Ausblockung unerwünschter Lücken bei Abformungen
- Haftet wirksam auf feuchtem Kofferdam, Gewebe, Zähnen und Metall
- OraSeal Putty-Material hat eine festere Konsistenz als das Caulking-Material, was einige Zahnärzte bevorzugen

Verwenden Sie OraSeal Caulking-Material (dickflüssig), wenn eine adäquate Abdichtung bei tiefzerstörten Zähnen oder Wurzeln schwer zu erreichen ist. Es kann auch zur Reparatur von Undichtigkeiten bei Kofferdam verwendet werden. Es versiegelt den Kofferdam bei einer Keramikreparatur und schützt die Gingiva vor Flusssäure. Das Einbringen in Unterschnitte und unter Implantatstege, Präzisionsgeschiebe etc. verhindert Reste von Kaltpolymerisat oder Abformmaterial in Hohlräumen. Durch Füllen von Zahnzwischenräumen bei Schienen und Brücken wird die Entfernung von Zementüberschüssen erleichtert.



OraSeal Caulking-Material kann undichte Stellen im Kofferdam verschließen, selbst wenn diese mit Wasser oder Speichel bedeckt sind. Zunächst entlang des Randes applizieren, dann kreuzweise über die Öffnung verteilen, bis diese vollständig versiegelt ist.

## ANWENDUNG\*

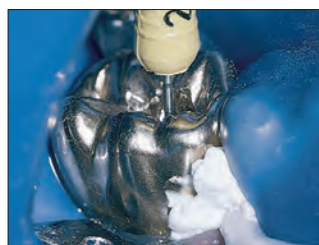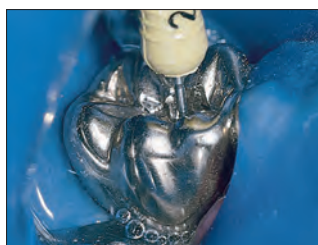

Applizieren Sie OraSeal Caulking-Material mit den Black Mini™ oder White Mac Applikationsansätzen, um eine Undichtigkeit von Kofferdam während der Behandlung zu vermeiden.<sup>2</sup> Die Behandlung kann nun in einem sauberen und trockenen Arbeitsfeld erfolgen.

## INDIKATIONEN\*



Zur Abdichtung des Kofferdams bei der Verwendung starker Peroxide zur Zahnaufhellung vitaler Zähne oder von Flusssäure zur Keramikätzung.




Ausblocken von Unterschnitten unter und um prothetische Halteelemente. Die flexible Komponente des Haltelements wird mit Putty abgedeckt, damit sich das Element beim Einsetzen und Herausnehmen biegen kann.



Sichere Feuchtigkeitskontrolle beim Kleben kieferorthopädischer Brackets im UK. Versiegelung mit Caulking oder Putty, um zu verhindern, dass Speichel durch den Interdentalraum gelangt und den Bereich kontaminiert.



Ausblocken großer Approximalbereiche zur leichten und verformungsfreien Entfernung der Abformung.

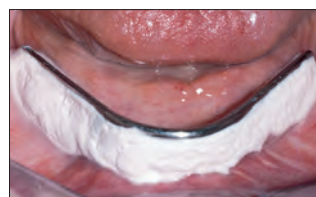

Verwendung vor der Abformung unter festsitzenden Teilprothesen oder Implantatstegen.



Verwendung als Ausblockmittel bei der Befestigung von Anker, Geschieben etc. mit kalthärtendem Kunststoff.



### 352 – OraSeal Kit

- 2 x 1,2 ml (1,28 g) OraSeal Caulking Spritzen
- 2 x 1,2 ml (1,44 g) OraSeal Putty Spritzen
- 4 x Black Mini Tips
- 20 x White Mac Tips



### OraSeal Refills

| 1,2 ml Spritze    | 4 St. | 20 St. |
|-------------------|-------|--------|
| Caulking (1,28 g) | 351   | 354    |
| Putty (1,44 g)    | 353   | 355    |

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung 1. realityesthetics.com.  
2. Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp. 7th ed. St. Louis, MO: Mosby-Year Book; 1998:123-124.



## Halo™

### TEILMATRIZENSYSTEM



Durch die Kraft des Nitinolrings und die aktive Verkeilung der speziell konzipierten Keile wird eine maximale Zahnseparation erreicht. Dieses optimale Separationssystem ermöglicht es Ihnen, einzelne oder mehrere nebeneinander liegende Zähne mühelos zu versorgen. Das anatomisch konturierte Design des Halo Rings und die aktive Verkeilung mit den speziell konzipierten Keilen sorgen dafür, dass das Band vollständig an die Präparation angepasst wird – vom Gingivarand bis zur Randleiste. Auch bei großen Präparationen bleibt die Form erhalten. Dies hilft Ihnen dabei, anatomisch geformte Restaurationen herzustellen. Sobald die Kontaktpunkte stimmen und sich die Bänder an die anatomische Form angepasst haben, reduziert sich der Zeitaufwand für Konturierung und Politur. Mit dem Halo System klappt das bei jeder einzelnen Restauration.



Das anwenderfreundliche Teilmatrizensystem ermöglicht Ihnen die Herstellung funktionell und ästhetisch ansprechender und anatomisch konturierter Kompositrestaurationen in kürzerer Zeit.



#### 4831 – Halo Original Bänder mit Instrumenten – Kit

je 2 x Universal Ringe  
je 25 x Original Matrizen  
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm und 7,5 mm  
je 25 x Keile in den Größen *klein*, *mittel* und *groß*  
1 x Halo Karussellsponder  
1 x Pinzette  
1 x Zange



#### 4832 – Halo Original Bänder – Kit

je 2 x Universal Ringe  
je 25 x Original Matrizen  
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm und 7,5 mm  
je 25 x Keile in den Größen *klein*, *mittel* und *groß*  
1 x Halo Karussellsponder

#### 4835 – Halo Original Bänder – Mini Kit

je 2 x Universal Ringe  
je 5 x Original Matrizen  
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm und 7,5 mm  
je 5 x Keile in den Größen *klein*, *mittel* und *groß*  
1 x Halo Karussellsponder

#### 4833 – Halo Feste Bänder mit Antihaftbeschichtung – Kit

je 2 x Universal Ringe  
je 20 x Feste Matrizen mit Antihaftbeschichtung  
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm und 7,5 mm  
je 25 x Keile in den Größen *klein*, *mittel* und *groß*  
1 x Halo Karussellsponder

#### 4834 – Halo Firm Bänder – Kit

je 2 x Universal Ringe  
je 25 x Feste Bänder 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm und 7,5 mm  
je 25 x Keile in den Größen *klein*, *mittel* und *groß*  
1 x Halo Karussellsponder





## Halo™ Matrizen

### MATRIZENBÄNDER

- Anatomische Form für ideale Kontakte
- Rundung an der Randleiste sorgt für optimale okklusale Approximalräume und reduziert den Finieraufwand
- Pinzettenlöcher für einfache Platzierung
- Biegbare Lasche für bessere Sichtbarkeit und einfache Platzierung und Entfernung
- Optionale Farbkodierung nach Größe für einfache Auswahl (Dicke der Beschichtung aus Teflon™: 0,013 mm)
- Die bleitoten Original Bänder ermöglichen eine leichtere Anpassung und bessere Brünierung, während die festeren Bänder formstabiler und besonders für enge Approximalräume geeignet sind
- Original und feste Matrizenbänder aus ultradünne Edelstahl (0,038 mm)



| Original | 50 St. | 100 St. |
|----------|--------|---------|
| 3,5 mm   | 5448   | 5449    |
| 4,5 mm   | 5450   | 5451    |
| 5,5 mm   | 5452   | 5453    |
| 6,5 mm   | 5454   | 5455    |
| 7,5 mm   | 5456   | 5457    |



| Fest   | 50 St. | 100 St. |
|--------|--------|---------|
| 3,5 mm | 5059   | —       |
| 4,5 mm | 5062   | 5063    |
| 5,5 mm | 5064   | 5065    |
| 6,5 mm | 5066   | 5067    |
| 7,5 mm | 5068   | —       |



| Fest, mit Antihaftbeschichtung | 50 St. | 100 St. |
|--------------------------------|--------|---------|
| 3,5 mm                         | 5049   | —       |
| 4,5 mm                         | 5051   | 5052    |
| 5,5 mm                         | 5053   | 5054    |
| 6,5 mm                         | 5055   | 5056    |
| 7,5 mm                         | 5057   | —       |



## Halo™ Pinzette

### KREUZ-PINZETTE

- Passives Halten von Keilen und Matrizenbändern
- Vereinfachte Platzierung und Entfernung von Halo Matrizen
- Kugelspitze zum Brünieren
- Spezielles Design für sicheren Griff
- Formschlüssige mechanische Verbindung für sicheren Griff und eine optimale Handhabung



5048 – Halo Pinzette 1 St.

## Halo™ Nitinolringe

### UNIVERSAL RINGE

- Superelastisches Nitinol mit hoher Separationskraft während der Verwendung bei geringer Ermüdung
- Mehr als 1.000 Anwendungen pro Ring<sup>1</sup>
- Glasfaserverstärkte Nylonfüße verringern die Bruchgefahr und verhindern ein Einbrechen in die Präparation und dadurch unzureichend konturierte Restaurationen
- Die Ringkonturen sichern das Band in einer natürlichen und anatomischen Form, tragen zur Verringerung von Überschuss bei und reduzieren so den Finieraufwand<sup>2</sup>
- Stapelbares Design zur Verwendung bei MOD-Füllungen und anderen Klasse-II-Restaurationen
- Ideale Separation bei nebeneinander liegenden Restaurationen



| Größe     | 1 St. | 2 St. |
|-----------|-------|-------|
| Universal | 5008  | 5009  |



## Halo™ Wedges



- Der feste Keil gewährleistet eine vollständige Anpassung des Matrizenbandes an den Gingivarand mit geringerem Trauma für die Interdentalpapillen
- Hohle Unterseite für einfache Platzierung und erforderlichenfalls Stapelung mehrerer Keile
- Einfach zu unterscheidende Farben erleichtern die Auswahl der Keile
- Nachgebender Mittelbereich ermöglicht anatomische Anpassung des Matrizenbands

| Größe  | 100 St. |
|--------|---------|
| Klein  | 5042    |
| Mittel | 5043    |
| Groß   | 5044    |



## Halo™ Zange

### ZANGE FÜR PLATZIERUNG DER RINGE

Die Verriegelungsfunktion und die angewinkelten Griffe der Halo Zange sorgen für maximale Stabilität des Halo Rings bei der Platzierung – sowohl mesial als auch distal.



5047 – Halo Zange 1 St.

1. Daten liegen vor, auf Anfrage. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## WIESO EIN TEILMATRIZENSYSTEM?



- Großer Zwischenraum für Essensreste
- Die Restauration hat keine anatomische korrekte Form im Approximalraum
- Schwacher Kontakt an der Randleiste
- Höheres Risiko von Brüchen, einer okklusalen Interferenz, einer wiederkehrenden Karies und Zahnfleischerkrankung



- Anwenderfreundliches System
- Natürliche Konturen
- Enge, anatomisch korrekte Kontaktpunkte auf der richtigen Höhe der Kontur

## KLINISCHER FALL – OKKLUSAL-DISTALE FÜLLUNG



1. Vor dem Eingriff.



2. Kavität mit dem Halo System.



3. Nach dem Eingriff.

## KLINISCHER FALL – OKKLUSAL-DISTALE FÜLLUNG



1. Vor dem Eingriff.



2. Kavität mit dem Halo System.




3. Nach dem Eingriff.


## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG\*



1. Entsprechend der benötigten okklusogingivalen Höhe ein passendes Matrizenband wählen. Mit der Pinzette die Lasche des Matrizenbands greifen und wie benötigt biegen, dann approximal platzieren. Die konkave Oberfläche zeigt dabei in Richtung des zu restaurierenden Zahns.

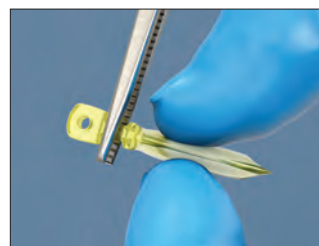

2. Einen Keil auswählen, mit dem sich das Matrizenband möglichst optimal an den gingivalen Bereich der Präparation anpassen lässt. Keil mit einer gebogenen Pinzette greifen.

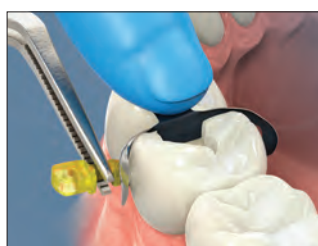

3. Eventuell muss mit dem Finger ein leichter Druck auf das Matrizenband ausgeübt werden, um es während der Platzierung des Keils in Position zu halten.



4. Bei Bedarf kann ein weiterer Keil verwendet werden, um eine bessere Anpassung an den gingivalen Rand der Kavität zu erreichen.



5. Den Halo Ring vorsichtig mit der Ringzange platzieren.



6. Der Ring sollte so tief wie möglich platziert werden. Die Füße an den Enden des Rings sollten sich an jeder Seite des Zahns über den Keil erstrecken.



7. Matrizenband, Keil und Position des Rings überprüfen, um sicherzustellen, dass das Matrizenband gut an die Ränder der Kavität angepasst ist und eng am Nachbarzahn anliegt.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.




# RESTORATIVE SOLUTION

## Das Rundum-System für Ihre HOCHWERTIGEN RESTAURATIONEN

### Halo™

Die Halo Matrizenbänder sind anatomisch geformt, sorgen für ideale Kontakte und verkürzen den zeitlichen Aufwand für Konturierung und Finierung einer Kompositrestauration. Mit der restaurativen Lösung von Ultradent erhalten Sie alles, was Sie für wunderschöne und langlebige Restaurationen brauchen – und zwar für jeden Arbeitsschritt.

ERFAHREN SIE MEHR UNTER  
[ULTRADENTPRODUCTS.COM](http://ULTRADENTPRODUCTS.COM)


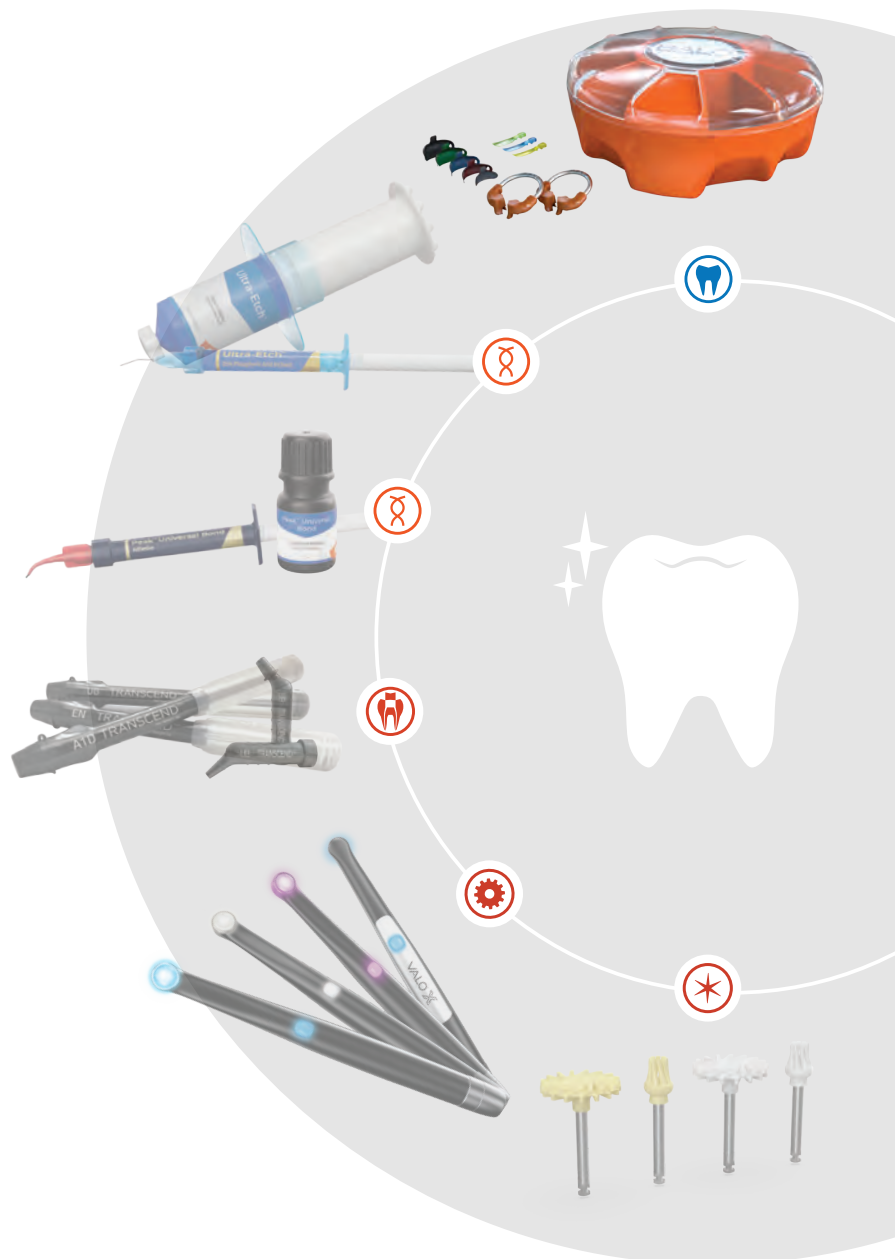






## Omni-Matrix™

EINWEGMATRIZENHALTER

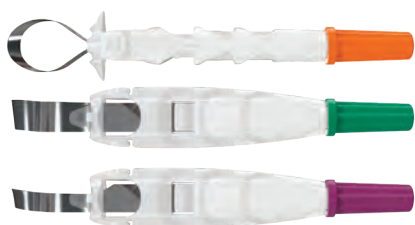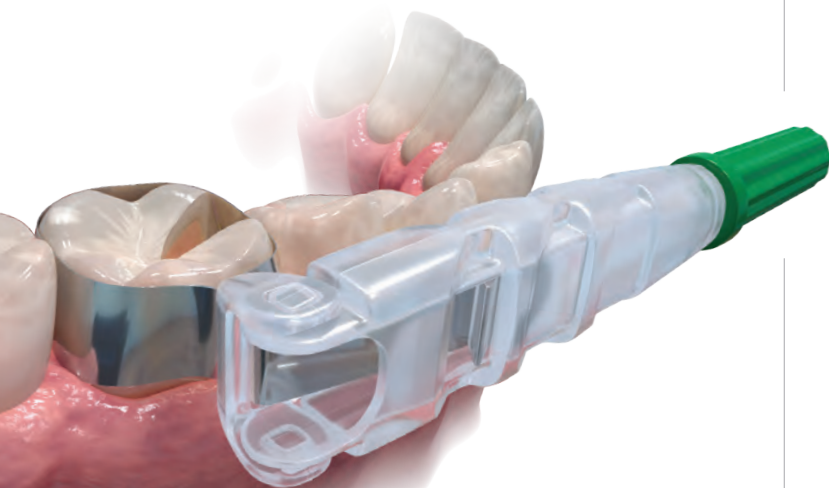


- Die innovative Form sorgt für Sicht bei der Behandlung und Patientenkomfort<sup>2</sup>
- Der ultradünne, formbare Edelstahl passt sich an alle Präparationen an<sup>3</sup>
- Die einzigartigen Ausführungen mit oder ohne Flügel werden individuellen Behandlungsanforderungen gerecht
- Einwegartikel, spart Zeit und Geld


Die Omni-Matrix Einwegmatrizen sind eine hervorragende Lösung zirkulärer Matrizenbänder. Dieses einfache Restaurationswerkzeug lässt sich perfekt an jede Präparation anpassen. Der Umfang des Bandes lässt sich durch einfaches Drehen des Griffs leicht einstellen, und mit dem schwenkbaren Kopf ist es möglich, jeden beliebigen Quadranten des Mundes zu erreichen. Nach Fertigstellung der Restauration kann Omni-Matrix leicht entfernt werden, ohne die Restauration zu beschädigen.




OHNE FLÜGEL  
● ● ●

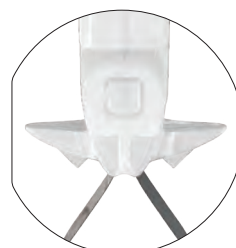


MIT FLÜGEL  
● ● ●

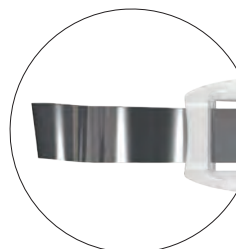

UNIVERSAL  
● ●

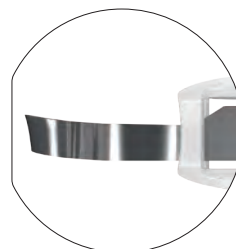

SCHMAL  
●

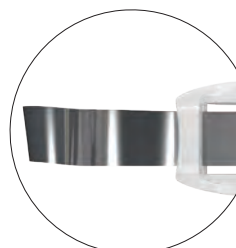

EDELSTAHL  
● ● ●

| Edelstahl       | Ohne Flügel 48 St. | Mit Flügel 48 St. |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 6,5 mm-0,025 mm | 7701               | 8801              |
| 6,5 mm-0,038 mm | 7702               | 8802              |
| 5,2 mm-0,038 mm | 7704               | 8804              |

1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage. 3. Daten liegen vor, auf Anfrage.



GRANT BAUMAN – Great Salt Lake

# TISSUE MANAGEMENT

Eisensulfat-Gel  
Aluminiumchlorid-Gel  
Eisensulfat-Lösung  
Reinigungslösung  
Gestrickter Faden  
Fadenlegeinstrumente





## FÜR EINE STABILE HÄMOSTASE



### Tissue Management

Das einzigartige Tissue Management beginnt mit schneller, stabiler Hämostase. Seit über 40 Jahren vertrauen Zahnärzte auf das Tissue Management System von Ultradent Products: Unmittelbare Hämostase, detaillierte Darstellung von Präparationsgrenzen und Beherrschung von Blutungen und Sulkusflüssigkeit sind seine Stärke.

### FÜR DIE BLUTSTILLUNG UND KONTROLLE DER SULKUSFLÜSSIGKEIT

Unser umfassendes Sortiment an Problemlösungen ist zum Standard für optimal kontrolliertes, vorhersagbares Arbeiten geworden – dem Zahnarzt stehen damit Produkte zum schnellen, wirksamen und wirtschaftlichen Arbeiten zur Verfügung.

Kein Hersteller bietet eine umfangreichere Palette an Produkten zur kontinuierlichen Kontrolle von Blutung und Sulkusflüssigkeit.



Reduzieren Sie Kreuzkontamination und notwendige Desinfektion durch Befüllen von Einmal-Spritzen mit der gewünschten Dosis direkt aus der IndiSpense™-Spritze.





Reiben Sie die Hämostatika Viscostat™, Astringent™ oder Astringent™ X fest gegen das verletzte blutende Gewebe, um eine Hämostase zu erreichen.

### EISENSULFAT – AKTIVE HÄMOSTASE\*



1. Reiben Sie das Hämostatikum mit dem Dento-Infusor™ Tip kräftig in das blutende Gewebe ein, bis die Blutungen stehen.

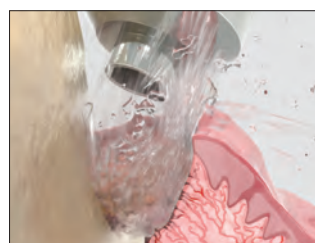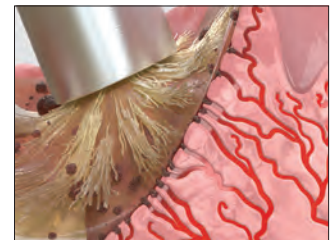

2. Reinigen Sie mit kräftigem Luft-/Wasserspray, um verbliebenes Koagulum zu entfernen und auf stabile, solide Hämostase zu testen. Bei anhaltender Blutung wiederholen.



3. Nach vollständiger Hämostase wird durch Verwendung des gestrickten Ultrapak™ Fadens eine hervorragende Retraktion erreicht. Der Faden wird mit dem Ultrapak Legeinstrument platziert.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.






## FÜR INDIREKTE RESTAURATIONEN (BEFESTIGUNG)\*

### PROVISORIUM ENTFERNT




1. Gut abgeheilte Gewebe 2 Wochen nach der Präparation.

### KONTAMINATION

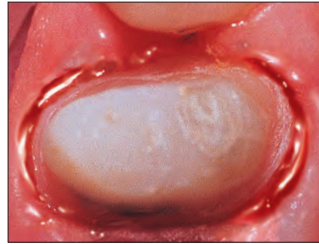

2. Sulcusflüssigkeiten und Blut kontaminieren zu bondende Oberflächen.

### VERSIEGELN/ TROCKNEN

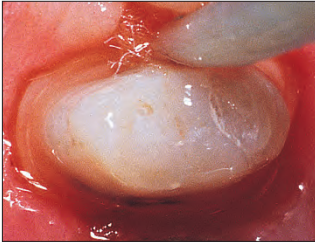

3. Hämostatika wie Eisensulfate und Aluminiumchlorid reduzieren die Blutung oder unterstützen die Versiegelung des Epithels und schützen so vor dem Eindringen von Sulcusflüssigkeit.

### ABSPÜLEN/ TROCKNEN



4. 2 – 3 Sekunden ätzen, dann abspülen/trocknen und mit dem Bonding-/Befestigungsverfahren fortfahren.

### RESTAURATION EINSETZEN



5. Gebondete/befestigte endgültige Krone.

**Hinweis: Eine vollständige Beherrschung des Sulcus-Fluid-Flusses ist unverzichtbar, wenn Bonding und Befestigen gingivanah durchgeführt werden.<sup>1</sup>**

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. Bailey JH, Fischer DE. Procedural hemostasis and sulcular fluid control: a prerequisite in modern dentistry. *Pract Periodontics Aesthet Dent*. 1995;7(4):65-75; quiz 76.

## FÜR DIREKTE RESTAURATIONEN\*

### MIKROSPALT



Foto von Dr. Dan Fischer.

1. Undichtigkeit bei vor Kurzem gebondetem Komposit.

### VERFÄRBUNG



2. Wird ein Teil des Komposits entfernt, zeigt sich das Ausmaß der Undichtigkeit deutlicher. Es ist zu einer Kontamination gekommen und die Dichtigkeit ist nicht mehr gegeben. Hämostatika, Blut, Sulcusflüssigkeit, Speichel und Stoffwechselprodukte anaerober Bakterien kommen als Grund für die Kontamination infrage. Eine erneute Behandlung ist erforderlich.

### ISOLIERUNG



3. Isolieren Sie die Gewebe mit in hämostatischer Lösung getränktem Ultrapak™-Faden. Fahren Sie mit dem Bondingverfahren fort.

### RESTAURATION



4. Reparierte Restauration.

### KONTROLLE



Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.

1. Bei Restaurationen sind das Hämostatikum Astringedent™ X und Ultrapak-Fäden ideal für die Kontrolle von Blut und Sulcusflüssigkeit. Sie können das Gewebe außerdem vor Bohren schützen. Überschüssige blutstillende Lösung mit kräftigem Spraystrahl entfernen.

### BOND



2. Erfolgreich gebondete Restauration.

## RETRAKTION FÜR INDIREKTE VENEERS



1. Ein gelegter Ultrapak-Faden verdrängt schnell die Gingiva und verbessert den Zugang für das Kleben von indirekten Veneers.



## BEI ABFORMUNGEN\*


Ein Adstringens ist eine Substanz, die die Durchlässigkeit von Epithel für Gewebeflüssigkeit unterdrückt. Das Resultat ist ein trockenes Arbeitsfeld – ein wichtiger Meilenstein im Tissue Management. Eine optimale Abformung für erfolgreiche Kronen- und Brückenversorgungen sowie Veneers erfordert die klare Darstellung der Präparationsgrenzen. Nur zuverlässige Blutstillung und Retraktion der Gingiva kann dies sicherstellen.

### BLUTUNG



1. Subgingivale Präparation mit Blutung.

### HÄMOSTASE

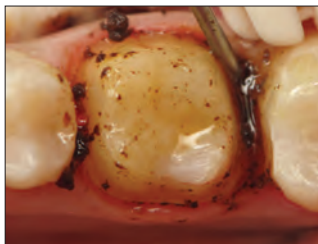

2. Das Hämostatikum Astringedent™ X mit einem Metal Dento-Infusor™ Tip kräftig in das blutende Gewebe einreiben.

### REINIGUNG/TEST



3. Kräftiges Wasserspray entfernt das Restkoagulum und testet das Gewebe auf stabile, solide Hämostase.

### RETRAKTION



4. Einen gestrickten Ultrapak™ Faden mit dem Hämostatikum Astringedent™ X tränken, legen und 5 Minuten belassen.

### TROCKNEN/TEST




5. Der gestrickte Ultrapak-Faden wird entfernt, die Präparation mit kräftigem Spraystrahl gereinigt und getrocknet.

### ABFORMUNG



6. Abformmaterial applizieren.

### RESULTAT

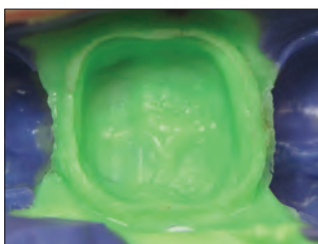


7. Abformungen in vorhersagbarer Qualität.

„Wir haben viele Produkte und Verfahren in der Zahnheilkunde, die techniksensibel sind – das gilt besonders für Tissue Management. Richtig gemacht, ist es fantastisch! Sie sehen fast unmittelbar das Ergebnis. Wenn es falsch gemacht wird, hört die Blutung nicht auf, und zum Schluss haben Sie überall diese schrecklichen Blutkoagula.“ – DR. DAN FISCHER

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

## PULPOTOMIE BEI VITALEN MILCHZÄHNEN\*

### PULPA-DEBRIDEMENT

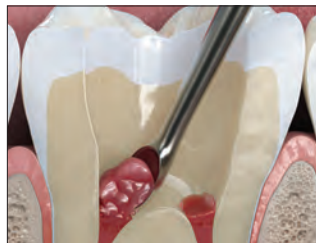

1. Mechanische Entfernung von Pulpa-gewebe.

### HÄMOSTASE



2. Blutung stillen. Dazu einen Dento-Infusor Tip mit ViscoStat oder Astringedent™ Hämostatikum<sup>1</sup> verwenden. Bei diesem Verfahren steriles Wasser verwenden.

### SCHUTZ



3. Eine dünne Schicht MTAFlow™ White Reparaturzement über die Wurzelkanalöffnung applizieren.

### UNTERFÜLLUNG



4. Eine dünne Schicht Ultra-Blend™ plus Liner auftragen.

### ÄTZEN



5. Ultra-Etch™ Phosphorsäure oder Peak™ SE Primer applizieren.

### BOND



6. Peak™ Universal Bond Adhäsiv applizieren. Verwenden Sie für die endgültige Restauration das von Ihnen bevorzugte Restaurationsmaterial.

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. Fuks AB, Eidelman E, Cleaton-Jones P, Michaeli Y. Pulp response to ferric sulfate, diluted formocresol and IRM in pulpotomized primary baboon teeth. ASDC J Dent Child. 1997;64(4):254-259.





## FÜR SCHWIERIGE FÄLLE\*



1. Alte, frakturierte Amalgamfüllung. Der Patient hat monatelang auf den Fragmenten gekaut; dadurch hat sich die Schleimhaut entzündet.



2. Altes Amalgam entfernen. Liegt die Pulpa frei, wird Karies zunächst als „Schutzschicht“ belassen.



3. Den Gingivalrand der Restauration freilegen, bevor der Kofferdam angebracht wird. Ggf. zu Schritt 4 übergehen, um die Sichtbarkeit zu verbessern.



4. Eine stabile Blutstillung wird ggf. durch das Einbürsten von ViscoStat<sup>®</sup> oder Astringedent<sup>®</sup> X mit dem Metal Dento-Infusor<sup>™</sup> Tip erreicht.



5. Kofferdam legen, anschließend die verbliebene Karies entfernen. Freiliegende Pulpa falls nötig behandeln. Bei Anwendung der Total-Etch-Technik, Ätzmittel und dann Peak<sup>™</sup> Universal Bond Adhäsiv applizieren. Wird die Selective-Etch-Technik bevorzugt, erst Peak<sup>™</sup> SE Primer und dann Peak<sup>™</sup> Universal Bond Adhäsiv applizieren.





6. Matrizenband NICHT verkeilen, bevor die erste Kompositschicht gelegt ist.



7. Das Matrizenband zuerst legen, um den gingivalen Bereich darzustellen. Nach dem Anbringen des Matrizenbandes ätzen und bonden, anschließend die erste Kompositschicht legen.



8. Nach der ersten Schicht verkeilen. Matrizenband lockern und so formen, dass ein guter Approximalkontakt erzielt wird. Eine erste Schicht mit dem fließfähigen PermaFlo<sup>™</sup> Komposit auftragen und die Kavität mit einem unserer hochwertigen Komposite füllen.

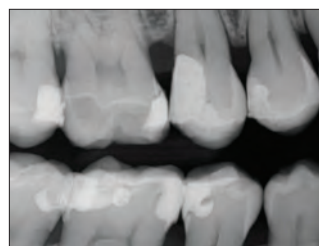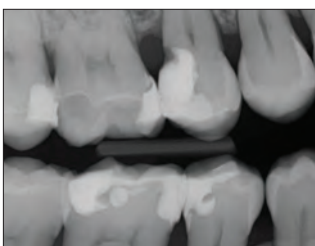

## Dento-Infusor<sup>™</sup> Tips



Die Verwendung des richtigen Applikationsansatzes ist entscheidend, um eine stabile, verlässliche Hämostase und Kontrolle der Sulkusflüssigkeit zu erreichen.

Hämostatische Wirkstoffe sind nur so gut wie ihre Applikationssysteme. Dento-Infusor Tips infundieren Hämostatika in blutende Kapillaren. Das weiche Bürstenende „reibt“ den Wirkstoff in die Kapillaren ein und entfernt gleichzeitig Restkoagulum. Das Resultat ist eine saubere, trockene und für die Abformung bereite Präparation.

Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.



Zunächst muss die Blutung unter Kontrolle gebracht werden, erst dann kann eine direkte adhäsive Maßnahme erfolgen.



Eine stabile Blutstillung wurde erreicht, die Präparation ist für eine Restauration bereit.

In der Regel ist der Metal Dento-Infusor die beste Wahl in Verbindung mit ViscoStat<sup>™</sup>, ViscoStat<sup>™</sup> Clear, Astringedent<sup>™</sup> und Astringedent<sup>™</sup> X Hämostatika. Er soll mit ausreichendem Druck verwendet werden, damit das Hämostatikum in die Kapillaren infundiert werden kann. Ist lediglich die Kontrolle der Sulkusflüssigkeit erforderlich, ist bei der adhäsiven Befestigung subgingivaler Restaurationen die Verwendung des jeweiligen Hämostatikums mit dem weichen Ende der Blue Mini<sup>™</sup> Dento-Infusor<sup>™</sup> Tips eventuell besser geeignet, da es gerade erst verheiltes Epithel schont.

Beide Tips ermöglichen ein sparsames und gezieltes Einreiben des Hämostatikums, das mit anderen Hilfsmitteln, wie Wattepellets, Microbrushes und speziellen Pinseln, nicht möglich wäre.



Der Tip „infundiert“ den blutstillenden Wirkstoff (Eisensulfatlösung) unter Bildung eines korkartigen Stopfens in die Kapillaren und wischt dann das Koagulum weg.



Bei der Verwendung des Hämostatikums ViscoStat Clear ermöglicht die stumpfe Kanüle des Metal Dento-Infusor<sup>™</sup> Tips mit ihren weichen Borsten es dem Hämostatikum (Aluminiumchlorid), die Kapillarenden durch ein Anschwellen des umgebenden Gewebes temporär zu verschließen.

Dento-Infusor Tips, siehe Seite 133.


\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.





## ViscoStat™

VISKÖSES KOAGULIERENDES HÄMOSTATIKUM  
20 %IGES EISENSULFAT

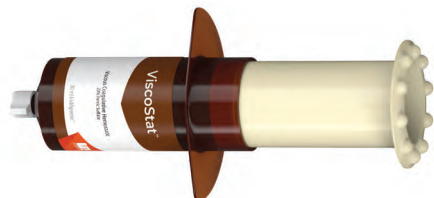

Metal Dento-Infusor™ Tip mit  
Comfort Hub™ Funktion



- Liefert eine stabile Hämostase
- Stoppt moderate Blutungen
- Spart Behandlungszeit
- Beeinträchtigt nicht die Hart- oder Weichgewebeheilung
- Eliminiert Kontamination durch Sulkusflüssigkeit für optimales Bonding
- Vermeidet teure Wiederholungsabformungen

Das Hämostatikum ViscoStat ist ein blutstillendes 20 %iges Eisensulfat-Äquivalent in einer viskösen, wässrigen Lösung. Es enthält eine pyrogene Kieselsäure zur Begrenzung der Säureaktivität, wodurch es schonend zu Hart- und Weichgewebe ist.

Das hämostatische Gel ViscoStat eignet sich für eine Vielzahl zahnärztlicher und oralchirurgischer Verfahren zur Stillung kapillarer Blutungen. Zu diesen Verfahren gehören festsitzende Prothetik-, restaurativ-operative, parodontale und andere Behandlungen. Das Hämostatikum ViscoStat wird auch empfohlen bei retrograden Wurzelfüllungen, impaktierten Eckzähnen, Gingivektomien und als „Fixiermittel“ für Pulpotomien.

**Tipp:** Vermeiden Sie bei direkten Bondingverfahren Undichtigkeiten durch die Kontamination mit Sulkusflüssigkeit. Tränken Sie einen gestrickten Ultrapak™ Faden in Hämostatikum und isolieren Sie die Gewebe. Anschließend mit kräftigem Spraystrahl absprayen.

**! Hinweis:** Niemals epinephrinhaltige Präparate zusammen mit Eisensulfatpräparaten (ViscoStat, Astringedent, Astringedent X) verwenden: Blau-schwarze Ablagerungen wären die Folge.

1. realityesthetics.com.



### 3093 – ViscoStat Clear Dento-Infusor Spritzen-Kit

4 x 1,2 ml (1,47 g) Spritzen  
20 x Metal Dento-Infusor Tips



### 647 – ViscoStat Dento-Infusor IndiSpense™ Spritzen-Kit

1 x 30 ml (36,69 g) IndiSpense Spritze  
20 x Metal Dento-Infusor Tips  
20 x 1,2 ml-Leerspritzen



### 645 – ViscoStat IndiSpense Spritze 1 St.

30 ml (36,69 g) Spritze



### 1278 – Applikationsspritze für Hämostatika 20 St.

1,2 ml-Leerspritzen

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## ViscoStat™ Clear

VISKÖSES HÄMOSTATISCHES GEL  
25 % IGES ALUMINIUMCHLORID



Metal Dento-Infusor™ Tip mit  
Comfort Hub™ Funktion




- Verfärbt nicht das Zahnfleisch
- Stoppt kleinere Blutungen<sup>2</sup>
- Einfach abzuspülen<sup>2</sup>
- Visköses Gel
- Keine Beeinträchtigung von Bonding-Verfahren<sup>3</sup>

ViscoStat Clear ist ein hämostatisches Gel mit 25 % Aluminiumchlorid in einer viskösen, wässrigen Lösung. Seine patentierte gewebefreundliche Formulierung mit Kieselsäure beseitigt temporär kleinere Blutungen. Es wird kein Koagulum gebildet, und es haften keine Reste an der Präparation, was in der „ästhetischen Zone“ besonders wichtig ist. ViscoStat Clear verfärbt die Hart- oder Weichgewebe nicht.

ViscoStat Clear ist bei der Retraktion des Sulkus vor der Anfertigung einer Abformung und zur Kontrolle von Blutungen und Sulkusflüssigkeit bei restaurativen und operativen Zahnbehandlungen anzuwenden. Es ist mit oder ohne Ultrapak Retraktionsfäden und/oder dem Dento-Infusor Tip anzuwenden. Das Gel erleichtert das Legen von Fäden in den Sulkus.

### 6409 – ViscoStat Clear Dento-Infusor Spritzen-Kit

4 x 1,2 ml (1,42 g) Spritzen  
20 x Metal Dento-Infusor Tips

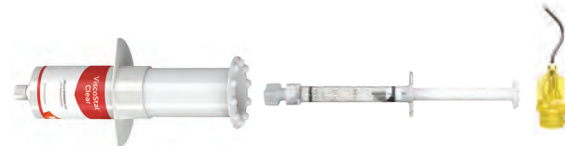

### 6407 – ViscoStat Clear Dento-Infusor IndiSpense™ Spritzen-Kit

1 x 30 ml (38,52 g) IndiSpense Spritze  
20 x Metal Dento-Infusor Tips  
20 x 1,2 ml-Leerspritzen

### 6410 – ViscoStat Clear Spritze 20 St.

1,2 ml (1,54 g) Spritzen



### 6408 – ViscoStat Clear IndiSpense Spritze 1 St.

30 ml (38,52 g) Spritze

1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage. 3. Daten liegen vor, auf Anfrage.

## ANWENDUNG\*



1. Subgingivale Präparation und blutender Sulkus.



2. Das Hämostatikum mit dem Dento-Infusor Tip kräftig in das blutende Gewebe einreiben. Das transparente Gel sorgt für leichte Sichtbarkeit und lässt sich rasch abspülen.



3. Den getränkten Ultrapak™ Faden in den Sulkus einbringen. 5 Minuten belassen.



4. Faden entfernen. Mit 35 % Phosphorsäure reinigen. Kräftig absprayen. Ermöglicht eine problemlose, hervorragende Kontrolle in der ästhetischen Zone – ohne Zahnfleischfärbung.



5. Fertige Restauration 2 Wochen später.




\*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## Astringedent™

KOAGULIERENDES HÄMOSTATIKUM  
15,5 %IGE EISENSULFATLÖSUNG

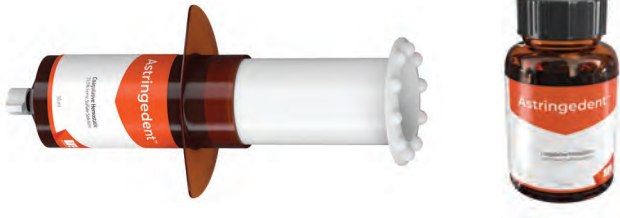

- Das „klassische“ Hämostatikum für eine stabile Hämostase
- Stoppt Blutung in Sekundenschnelle
- Eliminiert Kontamination durch Sulkusflüssigkeit für optimales Bonding
- Vermeidet teure Wiederholungsabformungen

Das Hämostatikum Astringedent ist eine wässrige blutstillende Lösung mit 15,5 % Eisensulfat und einem pH-Wert von ~1,0.

Die Blutstillungslösung Astringedent eignet sich gut für eine Vielzahl zahnärztlicher und oralchirurgischer Verfahren zur Blutungsstillung. Das Hämostatikum Astringedent kann verwendet werden, um durch Kontamination mit Sulkusflüssigkeit bei direkten Bondingverfahren verursachte Undichtigkeiten zu verhindern.

Aufgeführt als „UNVERZICHTBARES“ Produkt von einem prominenten unabhängigen Forschungsinstitut.<sup>2</sup>


Hinweis: Die Hämostatika ViscoStat™ und Astringedent sollten mit einem Metal Dento-Infusor™ Tip verwendet werden. Der Blue Mini™ Dento-Infusor Tip aus Kunststoff sollte mit dem bevorzugtem Hämostatikum verwendet werden, wenn Sie es mit frisch abgeheiltem Epithel zu tun haben, da die weichere Spitze etwas schonender ist.



111 – Astringedent **Flasche 1 St.**  
686 – Astringedent **IndiSpense™ Spritze 1 St.**  
30 ml (34,41 g)

## Astringedent™ X

KOAGULIERENDES HÄMOSTATIKUM  
12,7 % LÖSUNG ZWEIER EISENSULFATE

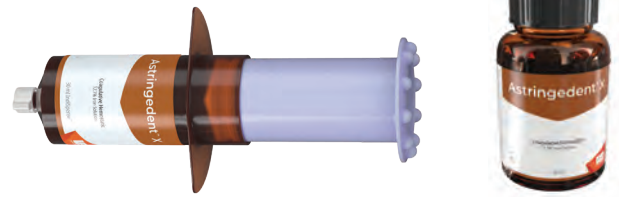


- Das bewährte Hämostatikum für alle klinischen Fälle
- Das schnellste und leistungsstärkste Hämostatikum von Ultradent<sup>1</sup>
- Stoppt kleinere bis schwere Blutungen

Das Hämostatikum Astringedent X ist eine in wenigen Sekunden wirkende, wässrige Lösung mit 12,7 %igen Eisensulfaten.<sup>2,3</sup> Es enthält zu gleichen Teilen Eisensulfat und Eisensubdisulfat. **Hinweis: Verdünntes Astringedent X Hämostatikum ist nicht gleichzusetzen mit den Hämostatika ViscoStat oder Astringedent.**

Astringedent X wird für alle Behandlungsfälle empfohlen, wo ein stärkeres, potenteres Hämostatikum notwendig ist und wo das Erreichen einer soliden Hämostase schwieriger ist, z. B. bei schwer zu stillenden, starken Blutungen.


Foto von Dr. Bruce LeBlanc.

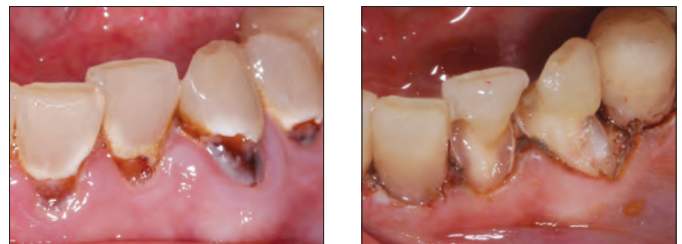

Das Hämostatikum Astringedent X und der Metal Dento-Infusor Tip erleichtern eine stabile Blutstillung auch bei schwierigen Fällen.



5881 – Astringedent X **Spritze 20 St.**  
1,2 ml (1,63 g) Spritzen

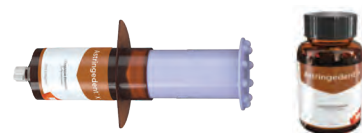

112 – Astringedent X **Flasche 1 St.**  
690 – Astringedent X **IndiSpense™ Spritze 1 St.**  
30 ml (40,71 g)

1. realityesthetics.com 2. "Can't Live Without" Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997.

1. Daten liegen vor, auf Anfrage. 2. Bandi M, Mallineni SK, Nuwula S. Clinical applications of ferric sulfate in dentistry: A narrative review. J Cons Dent. 2017 Jul-Aug;20(4):278-281. DOI: 10.4103/jcd.jcd\_259\_16. 3. Spera S. Keeping blood under control in restorative procedures. Dent Prod Rep. 2023;57(10):32-33.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.





## Ultrapak™ GESTRICKTER FADEN



Bestes Material für die gingivale Retraktion



- Der original gestrickte Faden
- Sorgt für eine optimale Gewebeverdrängung und detaillierte Darstellung der Präparationsgrenze für qualitativ hochwertige Abformungen
- Erleichtert das Legen und bleibt besser an Ort und Stelle als jeder gedrehte oder geflochtene Faden
- Wird beim Legen komprimiert und dehnt sich dann zur optimalen Retraktion aus

Ultrapak-Fäden bestehen aus 100 % Baumwolle und sind mit Tausenden kleiner Maschen gestrickt, die lange, ineinandergreifende Ketten bilden. Sobald die Hämostase erreicht ist, übt der einzigartige gestrickte Faden nach dem Legen einen sanften, kontinuierlichen Druck aus, indem sich die gestrickten Maschen zu öffnen versuchen. Eine optimale Retraktion oder Gewebeverdrängung erfolgt in 5 Minuten.

Der Ultrapak®-Faden kann auch für das subgingivale Einbringen von Eisensulfatlösungen zur Kontrolle der Sulkusflüssigkeit verwendet werden. Ultrapak wurde im Zusammenhang mit den Tissue-Management-Techniken entwickelt, bei denen die Hämostatika ViscoStat™ oder Astringedent™ eingesetzt werden. Konventionelle Techniken mit Aluminium, Aluminiumchlorid etc. werden bei Verwendung mit ungetränkten gestrickten Ultrapak-Fäden ebenfalls verbessert, die deutlich größere Mengen an blutstillender Lösung aufnehmen können als herkömmliche Fäden.




THE ONE WITH THE STRIPE!™  
(DER MIT DEM STREIFEN!)

Mit dem einfachen Legen, der hervorragenden Absorption und außergewöhnlichen Retention ist das proprietäre gestrickte Design des Ultrapak-Fadens seit Jahren die bevorzugte Wahl.

Aufgeführt als „UNVERZICHTBARES“ Produkt von einem prominenten unabhängigen Forschungsinstitut.<sup>2</sup>

### ULTRAPAK FADEN UND MITBEWERBER – ABSORPTIONSVERGLEICH

Absorptionsvermögen von gestricktem Ultrapak™ Faden vs. Fäden führender Mitbewerber.<sup>3</sup>

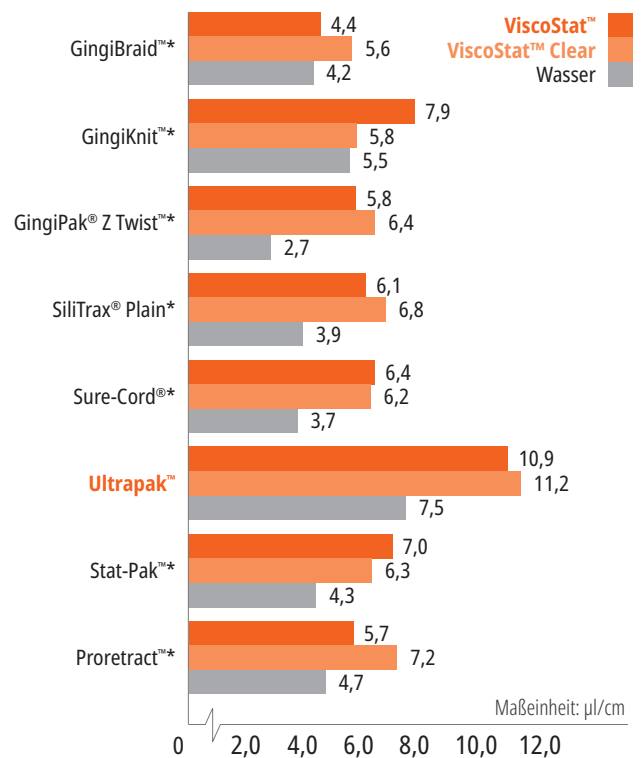

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. 1. realityesthetics.com. 2. "Can't Live Without" Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997. 3. Daten liegen vor, auf Anfrage.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## PRE-PACKING-TECHNIK


Verwenden Sie während der Präparation einen Faden, der dick genug ist, um genug Retention zu haben und um fest im Sulkus platziert werden zu können.

### „PRE-PACK“



1. Legen Sie den mit hämostatischer Lösung getränkten gestrickten Ultrapak™ Faden. Verwenden Sie zur sicheren Retention des Fadens eine Fadengröße, die zu dick erscheint. Mit dem dünnen Ultrapak™ Legeinstrument drückt man den Faden schnell in seine Position. Das spezielle Design des gestrickten Fadens (ineinander greifende Maschen) erleichtert das einfache Legen und lässt ihn sicher am Platz bleiben.

### PRÄPARATION

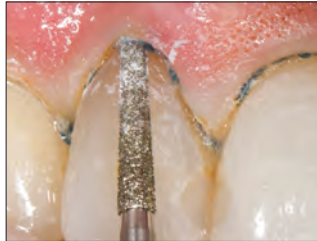

2. Dehnen Sie die Präparationsgrenze subgingival aus, indem Sie teilweise in den gestrickten Faden präparieren, der sich nicht im Diamantschleifer verfängt. Entfernen Sie den restlichen Faden mit einer Sonde oder einem anderen Instrument. Die Blutung ist, wenn überhaupt, minimal. Ein kleiner Anteil nicht präparierter Zahnschubstanz oberhalb des gingivalen Attachments bleibt zur besseren Sichtbarkeit in der Abformung erhalten. Wenn eine zusätzliche Retraktion erforderlich ist, nochmals einen Faden in geeigneter Größe legen. Abspülen, mit Luft trocknen und die Abformung durchführen.

## FÜR DIGITALE ABFORMUNGEN – KOMPLETTE HÄMOSTASE

### HÄMOSTASE



1. Für den möglichst exakten Randschluss jeder Restauration ist eine komplette Hämostase entscheidend, vor allem bei digitaler Abformung.

### SAUBERES ARBEITSFELD



2. Nach der Blutstillung und Retraktion des Gewebes ist die Präparation bereit für die digitale Abformung.

## DOPPELFADENTECHNIK

Die häufigsten Herausforderungen für Abformungen von hoher Qualität sind eine angemessene Geweberetraktion und ausreichende Feuchtigkeitskontrolle. Probieren Sie eine Technik mit doppeltem Retraktionsfaden in Kombination mit effektiven blutstillenden Mitteln, um beides zu vereinfachen.

### ERSTER FADEN



1. Legen Sie nach erreichter Hämostase vorsichtig einen einzelnen Faden, wie etwa den gestrickten Ultrapak™ Faden #0, #00 oder #000, auf den Boden des Sulkus. Verwenden Sie zur korrekten und einfachen Platzierung Fischers Ultrapak-Legeinstrumente.

### ZWEITER FADEN



2. Legen Sie einen mit einem Hämostatikum getränkten zweiten, dickeren Faden, um das Gewebe seitlich zu verdrängen.

### ABSPÜLEN/TROCKNEN




3. Den Bereich gut abspülen, leicht trocknen und die Abformung durchführen.

### GEFLOCHTEN



### ULTRAPAK

Der gestrickte Ultrapak-Faden besteht aus Tausenden kleiner, ineinandergreifender Maschen und kann daher einfacher als andere Fäden komprimiert werden und sich wieder ausdehnen. Die Fasern aus 100 % Baumwolle sorgen für eine hohe Absorption<sup>1</sup> von Hämostatika und Sulkusflüssigkeiten.

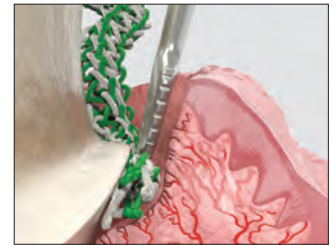

Der Ultrapak-Faden wird beim Legen komprimiert und dehnt sich dann zur optimalen Gewebeverdrängung aus.



Mit Blutstillungslösung getränkter Ultrapak-Faden kontrolliert Blutungen und Sulkusflüssigkeit bei gingivanahen und subgingivalen Präparationen.

<sup>1</sup> Daten liegen vor, auf Anfrage.



Das Ultrapak CleanCut Design besitzt eine Klinge in der Verschlusskappe für effizientes Schneiden. Eine spezielle Dosieröffnung verhindert das Zurückfallen des Fadens in die Flasche.

**Jede Flasche enthält  
244 cm Faden.**

# TISSUE MANAGEMENT



## VERGLEICHSTABELLE DER FÄDEN

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>#000</b> – 0,889 mm |
|  | <b>#00</b> – 1,041 mm  |
|  | <b>#0</b> – 1,143 mm   |
|  | <b>#1</b> – 1,245 mm   |
|  | <b>#2</b> – 1,422 mm   |
|  | <b>#3</b> – 1,6 mm     |

**9330 – Ultrapak Kit**  
je 1 x Faden #00, 0, 1 und 2  
1 x Ultrapak-Organisationsständer



### #000 – 0,889 mm

- Unterer Faden bei der Doppelfadentechnik
- Im Frontzahngebiet

**9331 – Ultrapak Faden #000 1 St.**



### #00 – 1,041 mm

- Präparieren und Zementieren von Veneers
- Restaurative Verfahren in der Nähe von dünnen, empfindlichen Geweben

**9332 – Ultrapak Faden #00 1 St.**



### #0 – 1,143 mm

- Im unteren Frontzahnbereich
- Beim Befestigen von gingivanahen und subgingivalen Veneers
- Klasse-III-, IV- und V-Restaurationen
- Oberer Faden bei der Doppelfadentechnik

**9333 – Ultrapak Faden #0 1 St.**



### #1 – 1,245 mm

- Nicht imprägnierte Größen 1 und 2 sind besonders effektiv für Gewebekontrolle und/oder -verdrängung, wenn sie vor und/oder nach Kronenpräparationen mit koagulierender hämostatischer Lösung getränkt werden
- Schützender Faden bei der Pre-Packing-Technik an Frontzähnen

**9334 – Ultrapak Faden #1 1 St.**



### #2 – 1,422 mm

- Oberer Faden bei der Doppelfadentechnik
- Schützender Faden bei der Pre-Packing-Technik

**9335 – Ultrapak Faden #2 1 St.**



### #3 – 1,6 mm

- Bei Molaren mit dicker, robuster Gingiva, bei denen eine beträchtliche Kraft erforderlich ist
- Oberer Faden bei der Doppelfadentechnik

**9336 – Ultrapak Faden #3 1 St.**



**Hinweis:** Niemals epinephrinhaltige Präparate zusammen mit Eisensulfatpräparaten wie etwa den Hämostatika ViscoStat, Astringedent und Astringedent X verwenden: Blau-schwarze Ablagerungen wären die Folge.






## Gezahnte Ultrapak™ Legeinstrumente

DÜNNE, GEZAHNTE LEGEINSTRUMENTE

#170 und #171 (45°-Winkel zum Griff)

#172 und #174 (90°-Winkel und 0°-Winkel zum Griff)

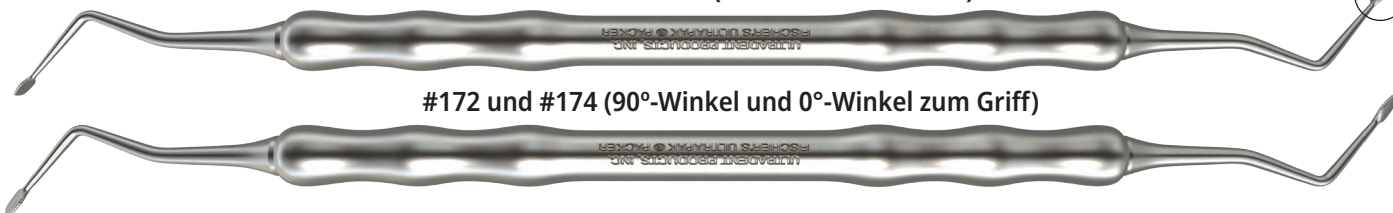

Diese speziell entwickelten Instrumente erleichtern das Legen von gestrickten Ultrapak™-Fäden. Ihre dünnen Enden und feinen Verzahnungen drücken in den Faden, wodurch ein Abrutschen verhindert und die Gefahr einer Verletzung des gingivalen Attachments vermieden wird.

**45° ZUM GRIFF:** Unsere populärsten Legeinstrumente, mit Arbeitsenden im 45°-Winkel zum Griff und drei Stopfseiten. Zirkuläres Legen um den präparierten Stumpf kann vollendet werden, ohne das Instrument ständig drehen zu müssen. Verwenden Sie die kleinen Legeinstrumente an unteren Frontzähnen und oberen seitlichen Schneidezähnen.

**90° UND PARALLEL ZUM GRIFF:** Gleiche Größe wie die Legeinstrumente mit 45° zum Griff, nur dass eines der Arbeitsenden parallel zum Schaft und das andere im rechten Winkel zum Schaft verläuft.

171 – Legeinstrument, klein – 45°-Winkel zum Griff 1 St.  
170 – Legeinstrument, normal – 45°-Winkel zum Griff 1 St.

174 – Legeinstrument, klein – 90°-Winkel zum Griff 1 St.  
172 – Legeinstrument, normal – 90°-Winkel zum Griff 1 St.



## RESTORATIVE SOLUTION

Das Rundum-System für Ihre  
**HOCHWERTIGEN  
RESTAURATIONEN**

ERFAHREN SIE MEHR UNTER [ULTRADENTPRODUCTS.COM](http://ULTRADENTPRODUCTS.COM)





AMY HIBBARD – Cedar Breaks National Monument

# ADHÄSIVTECHNIK

Self-Etch-System („No-Rinse“)  
Total-Etch-System („Etch and Rinse“)  
Phosphorsäuregel  
Selbstätzender Primer  
Bondingmaterial  
Lichthärtendes Adhäsiv  
Keramikätzung  
Flusssäuregel  
Silanlösung  
Calciumhydroxid-Unterfüllungsmaterial





Der Marktführer seit über 35 Jahren

## Ultra-Etch™

ETCH AND RINSE – ÄTZGEL



Blue Micro™ Tip




- Selbstlimitierend<sup>2</sup> im Dentin
- Dringt in feinste Fissuren ein und läuft an vertikalen Flächen nicht ab<sup>3</sup>
- Präzise applizierbar
- Ätzen und abspülen
- Leicht abzuspülen, hinterlässt keine Rückstände

Ultra-Etch Ätzel mit 35 % Phosphorsäure besitzt eine ideale Viskosität, die eine präzise Applikation und überlegene Kontrolle erleichtert. Es ist selbstlimitierend in seiner Ätztiefe (durchschnittliche Tiefe von 1,9 µm bei 15 Sekunden Ätzen)<sup>2</sup>, wobei ein Ätzmuster geschaffen wird, in das Adhäsive eindringen können, wodurch eine höhere Haftkraft erreicht wird. Studien zeigen, dass die einzigartige selbstlimitierende Chemie des Ätzmittels Ultra-Etch im Dentin eine optimale Oberfläche für die Aufnahme von Adhäsiven schafft.<sup>2,4,5</sup> Obwohl Ultra-Etch Ätzmittel viskös ist, kann es aufgrund physikalischer und chemischer Eigenschaften, die eine Kapillarwirkung fördern, in die kleinsten Fissuren oder Okklusalfächen eindringen. Seine ideale Viskosität sorgt für die Erhaltung einer ausreichend dicken Schicht, um ein vorzeitiges Eintrocknen zu verhindern.


Ultra-Etch Ätzmittel ist indiziert für das Ätzen von Dentin und Schmelz zur Schaffung optimaler Bondingflächen. Ultra-Etch Ätzmittel kann 5 Sekunden lang angewendet werden, um die Salze zu entfernen, die bei der Keramikätzung entstehen.

**Hinweis: Keine Phosphorsäure-Ätzmittel auf Metallen oder Zirkonoxid verwenden, da dies die Haftwerte reduziert.**

Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.

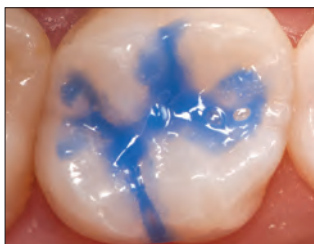

Klinische Erfahrungen und FE-REM-Untersuchungen zeigen, dass 15 Sekunden Ätzeit sowohl an Dentin als auch Schmelz für eine optimale Konditionierung beider Zahnschichten sorgen.<sup>2,4,5</sup>

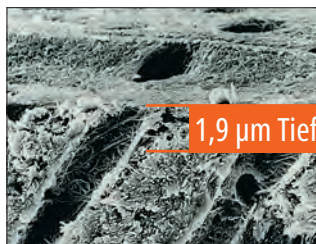

1,9 µm Tiefe

Ultra-Etch Ätzel mit Phosphorsäure ist nachweislich einzigartig selbstlimitierend in der Ätztiefe.<sup>2</sup> Säuren mit größerer Ätztiefe überschreiten den optimalen Wert und erhöhen die Gefahr einer unvollständigen Adhäsiv-Penetration.<sup>5,6</sup>

Seit über 20 Jahren aufgeführt als „UNVERZICHTBARES“ Produkt von einem prominenten unabhängigen Forschungsinstitut.<sup>7</sup>



**163 – Ultra-Etch Kit**  
4 x 1,2 ml (1,58 g) Spritzen  
20 x Blue Micro Tips

**167 – Ultra-Etch Econo Kit**  
20 x 1,2 ml (1,58 g) Spritzen  
40 x Blue Micro Tips



**383 – Ultra-Etch IndiSpense™ Spritzen-Kit**  
1 x 30 ml (39,60 g) IndiSpense Spritze  
20 x 1,2 ml-Leerspritzen  
20 x Blue Micro Tips



**164 – Ultra-Etch Spritze 4 St.**  
**168 – Ultra-Etch Spritze 20 St.**  
**1407 – Ultra-Etch Spritze 50 St.**  
1,2 ml (1,58 g) Spritzen



**685 – Ultra-Etch IndiSpense Spritze 1 St.**  
30 ml (39,60 g) Spritze



**129 – Ultra-Etch Leerspritze 20 St.**  
1,2 ml-Leerspritzen

1. realityesthetics.com. 2. Perdigão J, Lopes M. The effect of etching time on dentin demineralization. *Quintessence Int.* 2001;32(1):19-26 3. Daten liegen vor, auf Anfrage. 4. Daten liegen vor, auf Anfrage. 5. Perdigão J, Lambrechts P, Van Meerbeek B, Vanherle G. A FE-SEM study of the ultra-morphology of etched dentin. *J Dent Res* 75 (IADR Abstracts); 1996. 6. Daten liegen vor, auf Anfrage. 7. "Can't Live Without" Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## Peak™ SE Primer

NO RINSE ETCH



Black Mini™ Brush Tip

- Hohe Haftkraft in Kombination mit Peak Universal Bond Adhäsiv, nachgewiesen durch ein unabhängiges, gemeinnütziges zahnärztliches Produkt-Testinstitut<sup>2</sup>
- Liefert stets frischen, stabilen Primer
- Einfache Einschichttechnik
- Präzise und praktische Applikation
- Kein Abspülen erforderlich

Peak SE Primer ist ein selbstätzender Primer, der in der einzigartigen JetMix™ Spritze angemischt und daraus entnommen wird. Die JetMix Technologie trennt präzise Mengen von starker Säure (pH 1,2) und optimiertem Priming-Resin, um die hydrolytische Zersetzung zu verhindern, die bei anderen selbstätzenden Präparaten auftritt. Die Komponenten bleiben getrennt, bis der Zahnarzt sie aktiviert. Das angemischte Produkt ist stabil und kann 120 Tage lang verwendet werden. Peak SE Primer wird vor Peak Universal Bond Adhäsiv verwendet und erreicht unübertroffene Haftwerte.<sup>3</sup>

Ideal für alle lichtzugänglichen Bondungsverfahren. Das Peak Self-Etch-Adhäsivsystem, das den Peak SE Primer und das Peak Universal Bond Adhäsiv umfasst, kann auch für die sofortige Dentinversiegelung (IDS-Immediate Dentin Sealing) vor Abformungen und provisorischer Versorgung verwendet werden.

### FÜR INDIREKTE RESTAURATIONEN\*\*

Foto von Dr. Rich Tuttle.




1. Peak SE Primer 20 Sekunden auf der Präparation einwirken lassen.



2. 3 Sekunden verblasen/trocknen.



3. Eine satte Schicht Peak Universal Bond Adhäsiv auftragen und 10 Sekunden ins Dentin einmassieren.

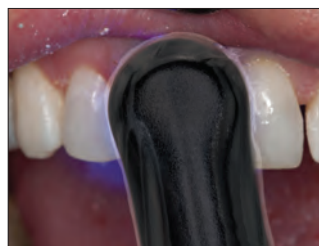

4. 10 Sekunden verblasen/trocknen und 10 Sekunden mit dem Standard-Modus der VALO™ Polymerisationsleuchte lichterhärten.

## Höchste Haftwerte an Dentin und Schmelz!<sup>3</sup>


VERGLEICH VON 3 SELBSTÄTZENDEN ADHÄSIVEN, UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF DENTISTRY<sup>4</sup>



REM von mit Peak SE Primer behandeltem beschliffenem Schmelz. Beachten Sie das schlüssellochförmige Aussehen der angeätzten Schmelzprismen.



REM von mit Clearfil® SE Bond\* behandeltem beschliffenem Schmelz.

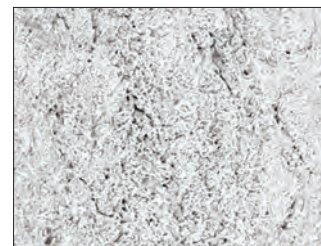

REM von mit Adper® Prompt L-Pop\* behandeltem beschliffenem Schmelz.



5135 – Peak SE Primer Refill 4 St.  
1,0 ml (0,993 g) Spritzen



4541 – Peak Universal Bond Self-Etch Bottle Kit  
1 x 4 ml (4,5 g) Peak Universal Bond Flasche  
4 x 1,0 ml (0,993 g) Peak SE Primer Spritzen  
40 x Black Mini Brush Tips  
50 x Mixing Wells  
50 x Micro Applicator Brush

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. \*\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityratings.com 2. Clinicians Report, Volume 5, Issue 8, August 2012. 3. Daten liegen vor, auf Anfrage. 4. Vargas M. Ultramorphological evaluation of the resin-dentin-enamel interface produced by three proprietary self-etching adhesive systems. 2007. Daten liegen vor, auf Anfrage.



## Peak™ Universal Bond


LICHTHÄRTENDES ADHÄSIV



- Mit der Dymetech™ Phosphatmonomer-Mischung von Ultradent für erhöhte Festigkeit und größere vielseitige Einsetzbarkeit
- Enthält Chlorhexidin (0,2 %), um Haftwerte langfristig zu sichern<sup>2,3</sup>
- Haftet auf allen Zahnschubstanzen
- Ideal für direkte und indirekte Restaurationen sowie Wurzelstift- und Stumpfaufbauverfahren
- Funktioniert mit Self-Etch- und Total-Etch-Technik
- Patienten berichten nach der Verwendung von Peak Universal Bond seltener über postoperative Sensibilitäten.<sup>4</sup>
- Erhältlich in Spritzen oder Flaschen

Die vielseitige Formulierung von Peak Universal Bond Adhäsiv ist ideal für direkte und indirekte Restaurationen sowie Wurzelstift- und Stumpfaufbauverfahren. Mit einer Mischung individuell synthetisierter Phosphatmonomere wurde die Viskosität für eine minimale Filmdicke und überlegene Festigkeit optimiert. Es enthält Ethylalkohol als Lösungsmittel und ist zu 7,5 % gefüllt. Es wird durch die meisten Polymerisationsleuchten, einschließlich LED's, ausgehärtet.

### VERGLEICH DER HAFTWERTE<sup>5</sup> (MPa)

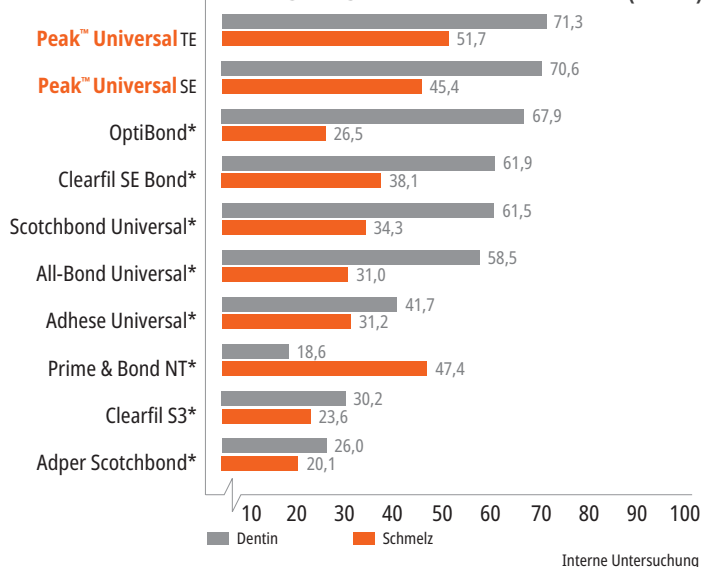

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. 1. realityesthetics.com 2. Breschi L, Maravic T, Comba A, et al. Chlorhexidine preserves the hybrid layer in vitro after 10-years aging. *Dent Mater.* 2020;36(5):672-680. doi:10.1016/j.dental.2020.03.009. 3. Yaghoor RB, Jamal H, Abed H, et al. Incorporation of MMP inhibitors into dental adhesive systems and bond strength of coronal composite restorations: A systematic review and meta-analysis of in vitro studies. *Jpn Dent Sci Rev.* 2022;58:298-315. doi:10.1016/j.jdsr.2022.09.004. 4. Daten liegen vor, auf Anfrage. 5. Daten liegen vor, auf Anfrage.



## MONOMER-MISCHUNG

Im Verlauf jahrzehntelanger Weiterentwicklung und Verbesserung hat das Forschungs- und Entwicklungsteam von Ultradent ein Adhäsiv entwickelt, das Produkte der Mitbewerber in den Schatten stellt.<sup>5</sup> Anstatt sich auf ein einzelnes Monomer wie 10-MDP zu beschränken, haben wir erkannt, dass eine präzise Kombination von Monomeren die bessere Lösung ist. Die Dymetech™ Phosphatmonomer-Mischung ist eine proprietäre Kombination aus drei Phosphatmonomeren und zwölf quervernetzenden Methacrylat-Gruppen, die bewährte Langzeitstabilität und Verbund auf nahezu allen Substraten bietet.<sup>5</sup> Sie ist die Kernkomponente des stärksten Haftvermittlers, den wir je getestet haben.<sup>5</sup>

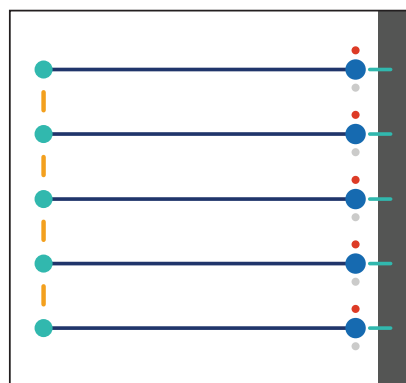


Abbildung 1. 10-MDP

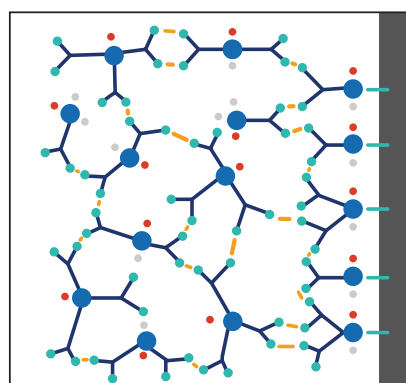


Abbildung 2. Dymetech Phosphatmonomer-Mischung


| ERLÄUTERUNG DER ABBILDUNG             |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <span style="color: green;">●</span>  | Methacrylat-Gruppen                   |
| <span style="color: blue;">●</span>   | Phosphatgruppen                       |
| <span style="color: black;">—</span>  | Andere organische Strukturkomponenten |
| <span style="color: orange;">—</span> | Bindungsinteraktionen                 |

Die Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und geben die Struktur echter Monomere unter Umständen nicht präzise wieder.

Das langkettige 10-MDP-Monomer (Abbildung 1) verfügt an einem Ende über eine Methacrylatgruppe und am anderen Ende über eine Phosphatgruppe. Dadurch kann die Anzahl der Bindungsinteraktionen begrenzt sein. Die Monomermischung von Dymetech (Abbildung 2) besitzt mehr funktionelle Gruppen (Phosphate und Monomere) als 10-MDP, was eine größere Anzahl von Bindungsinteraktionen ermöglicht.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

Dank der Dymetech Monomermischung haftet das Peak Universal Bond Adhäsiv an Dentin, Schmelz, Keramik, Zirkonoxid, Metall und Lithiumdisilikat. Es eignet sich ideal für direkte und indirekte Restaurationen sowie Wurzelstift- und Stumpfaufbauverfahren und funktioniert mit Self-Etch- und Total-Etch-Technik. Insgesamt bietet das Peak Universal Bond Adhäsiv höhere Haftwerte bei einer größeren Bandbreite an indirekten Restaurationsmaterialien als die Produkte der wichtigsten Mitbewerber.<sup>1</sup>

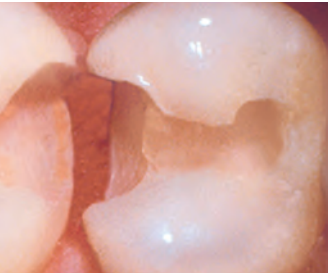

Dentin und Schmelz



Keramik




Zirkoniumdioxid



Komposit



Metall

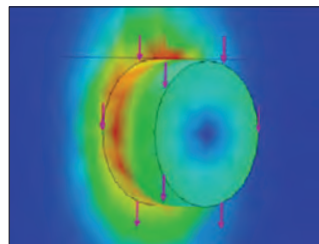

Ultradents Testverfahren für die Scherhaftfestigkeit wurde als ISO-Standard (ISO 29022) übernommen. Viele Forschungszentren nutzen jetzt dieses Verfahren, um präzise Haftwerte zu bestimmen.

<sup>1</sup> Siqueira F, Cardenas AM, Gutierrez MF, et al. Laboratory performance of universal adhesive systems for luting CAD/CAM restorative materials. *J Adhes Dent.* 2016;18(4):331-340. doi:10.3290/jjad.a36519.



## 4551 – Peak Universal Bond Total-Etch Spritzen-Kit

1 x 1,2 ml (1,35 g) Peak Universal Bond Spritze

1 x 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch Spritze

20 x Blue Micro Tips

20 x Inspirial Brush Tips



## 4542 – Peak Universal Bond Total-Etch Bottle Kit

1 x 4 ml (4,5 g) Peak Universal Bond Flasche

4 x 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch Spritzen

40 x Blue Micro Tips

50 x Mixing Wells

50 x Micro Applicator Brush



## 4553 – Peak Universal Bond Spritze Refill 4 St.

## 4552 – Peak Universal Bond Spritze Econo Refill 20 St.

1,2 ml (1,35 g) Spritzen



## 4543 – Peak Universal Bond Flasche 1 St.

4 ml (4,5 g) Flasche





**PQ1™**

EINKOMPONENTENBONDING





Inspiral™ Brush Tip

- Hohe Haftwerte<sup>2</sup> an Dentin für langlebigen Verbund
- Ideal für direkte Restaurationen
- Hochgefüllt für bequeme Applikation und mehr Anwenderkomfort
- Härtet mit allen dentalen Polymerisationsleuchten aus

PQ1 Bonding ist ein aus der Spritze zu applizierendes, lichthärtendes Einkomponentenbonding, das Ethylalkohol als Lösungsmittel verwendet. Es ist zu 40 % gefüllt und röntgensichtbar.

Die spezielle, patentierte chemische Formel von PQ1 Bonding haftet an Dentin/Schmelz, gegossenem Metall, Keramik und Komposit. PQ1 Bonding ist auch für indirekte Verfahren wirksam einsetzbar, bei denen eine Lichthärtung möglich ist.

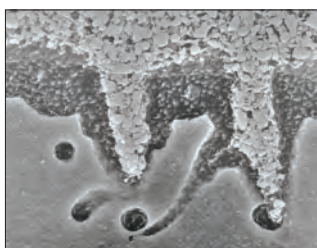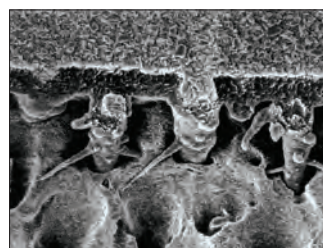

**Hinweis:** Beachten Sie die intensive Penetration der Füller für eine hohe Haftfestigkeit.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN

**641 – PQ1 Spritze Refill 4 St.****1806 – PQ1 Spritze Econo Refill 20 St.**

1,2 ml (1,67 g) Spritzen

<sup>1</sup>. realityesthetics.com. <sup>2</sup>. Vergleich der Scherhaftfestigkeit von PQ1 unmittelbar an Dentin. 2001. Daten liegen vor, auf Anfrage.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

# HALO™

## SECTIONAL MATRIX SYSTEM



## Effizient zu ästhetischen Ergebnissen


Das anwenderfreundliche Teilmatrizensystem ermöglicht Ihnen die Herstellung funktionell und ästhetisch ansprechender und anatomisch konturierter Kompositrestaurationen in kürzerer Zeit.

Siehe Seiten 40 – 42


## ZIRKONOXID/METALL-PRIMER – TECHNIK-ANLEITUNG




1. Die Präparation reinigen, abspülen und trocknen. Die Passung der Zirkonoxid- oder Metallprothese überprüfen.

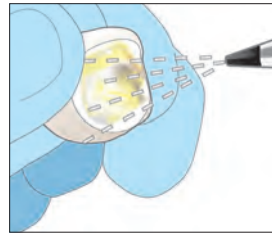

2. Die Innenfläche mit 50 µm AlO<sub>2</sub> mit einem Druck von 3,4–5,5 bar (50–80 psi) abstrahlen. Darauf achten, dass die Oberfläche gleichmäßig matt ist. Mit Luft reinigen und beiseite legen.  
**HINWEIS:** Verunreinigungen auf der Innenfläche der prothetischen Versorgung führen zu einer Abnahme der Haftfestigkeit. Halten Sie den Bereich sauber und frei von Phosphorsäure-Ätzel und Speichel.

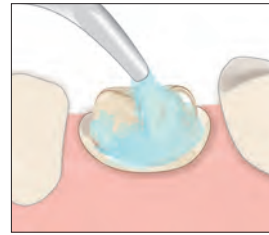


3. Die Zahnfläche mit einer öl- und fluoridfreien, antibakteriellen CHX-Polierpaste reinigen.

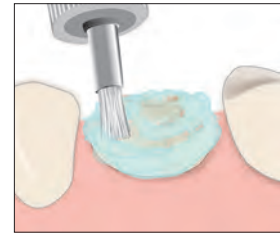

4. Zur Reinigung und zur Entfernung von Zementresten Polierpaste mit einem Mikro-Reinigungsbürstchen verwenden. Abspülen und dann mit Luft trocknen.

## WÄHLEN SIE

### TOTAL-ETCH-TECHNIK

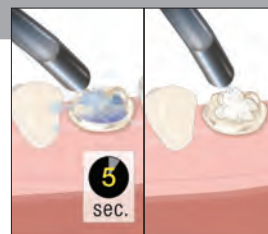


5. Ultra-Etch™ Ätzmittel 15 Sekunden einwirken lassen. 5 Sekunden abspülen, vorsichtig trocknen, leicht feucht lassen.  
**Empfehlung:** Antibakterielle Lösung auf die Präparation applizieren und Überschuss absaugen.

## ODER

### SELF-ETCH-TECHNIK




5a. Mit dem Black Mini™ Brush Tip 20 Sekunden lang Peak™ SE Primer applizieren.  
**Empfehlung:** Antibakterielle Lösung auf die Präparation applizieren und Überschuss absaugen.

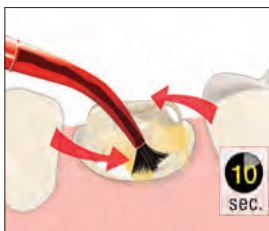

6. Eine satte Schicht Peak™ Universal Bond Adhäsiv 10 Sekunden bürstend applizieren.




7. Kräftig verblasen und absaugen.

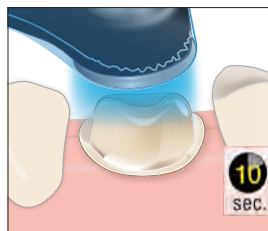

8. Peak™ Universal Bond Adhäsiv mit der VALO™ Polymerisationsleuchte im Standard-Modus 10 Sekunden lichterhärten.



9. Zirkonoxid/Metall-Primer 3 Sekunden lang auf die abgestrahlte prothetische Versorgung auftragen und nach Herstellerangaben verarbeiten.  
**HINWEIS:** Verwenden Sie bei der Befestigung mit einem Glasionomer- oder kunststoffverstärktem Glasionomerkement keinen Zirkonoxid-Primer.

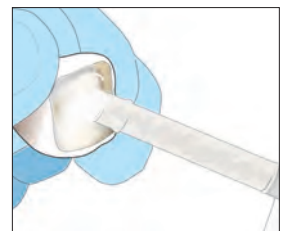

10. Eine dünne Schicht eines Zements auf Kunststoffbasis (PermaFlo™ DC Kunststoffzement) auf die prothetische Versorgung auftragen und fest einsetzen. Entsprechend den Anweisungen aushärten. Überschüssigen Zement entfernen.



## Ultradent™ Porcelain Etch und Silane

90 Sekunden Ätzen – 60 Sekunden Silane



Inspirall™ Brush Tip




Black Mini™ Brush Tip

- Ätzmittel ist einfach und kontrolliert zu applizieren
- Höchste Haftwerte zwischen Keramik und Kunststoff<sup>2</sup>
- Einkomponenten-Silane
- Zur Verwendung auf Feldspat- und Lithiumsilikat-Restaurationen (z. B. IPS e.max®\*)

Ultradent Porcelain Etch ist eine visköse, gepufferte 9 %ige Flusssäure. Silane ist eine Einkomponentenlösung.

Porcelain Etch wurde zum intra- oder extraoralen Ätzen von Feldspat- und Lithiumsilikatkeramik entwickelt. Verwenden Sie es zur Ätzung von indirekten Keramikrestaurationen wie etwa Veneers oder Inlays vor dem Einsetzen. Nach der Keramikätzung alle Rückstände 5 Sekunden mit Ultra-Etch™ Ätzmittel entfernen und gründlich abspülen; anschließend Silane applizieren. Studien haben gezeigt, dass Silane in Verbindung mit Porcelain Etch und einem qualitativ hochwertigen Bonding Resin im Vergleich zu anderen Keramik-Bondings die höchsten Haftwerte an Keramik erreicht.<sup>2</sup>

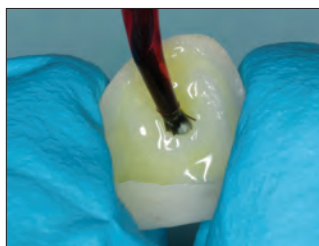

1. Nach der Anprobe Bonding-Fläche aus Keramik mit Porcelain Etch 90 Sekunden ätzen, abspülen und trocknen.




2. Ultra-Etch™ Ätzmittel kann für fünf Sekunden appliziert werden, um durch das Ätzen mit Flusssäure gebildete Keramiksätze und Rückstände zu entfernen.




3. Eine satte Schicht Silane 60 Sekunden auf der Innenfläche der prothetischen Versorgung applizieren, trocknen und beiseite legen. Nicht abspülen. Die prothetische Versorgung kann nun befestigt/zementiert werden.


Foto von Dr. Cornelis Pameijer.

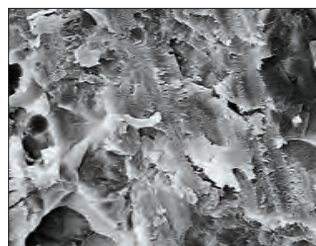


Mit Diamantschleifer bearbeitete Keramikoberfläche.

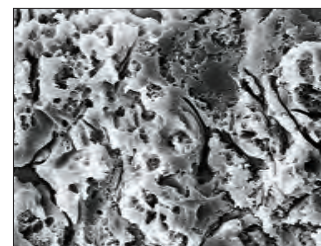

Gleiche Oberfläche nach 90 Sekunden Ätzung mit Ultradent Porcelain Etch.

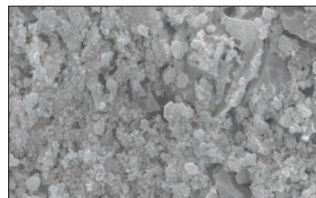

Reste von Quarzsätzen auf der Keramik, nach Flusssäure-Ätzung für 90 Sekunden mit Ultradent Porcelain Etch.

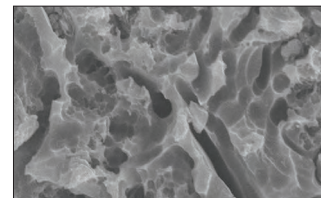

5 Sekunden mit Ultra-Etch Ätzmittel ätzen und abspülen, um alle Rückstände zu entfernen und eine saubere Oberfläche für das Bonding zu schaffen.



Porcelain Etch wird mit Inspirall Brush Tip auf die präparierte Keramik appliziert.



Soweit erforderlich die Keramiksätze mit Ultra-Etch entfernen, dann wird Ultradent™ Silane appliziert und getrocknet, anschließend folgt Peak™ Universal Bond Adhäsiv.



### 405 – Porcelain Etch Kit

2 x 1,2 ml (1,33 g) Porcelain Etch Spritzen  
2 x 1,2 ml (0,96 g) Silane Spritzen  
20 x Black Mini Brush Tips  
20 x Inspirall Brush Tips

### 1019 – Porcelain Etch Mini Kit

1 x 1,2 ml (1,33 g) Porcelain Etch Spritze  
1 x 1,2 ml (0,96 g) Silane Spritze  
10 Black Mini Brush Tips  
10 Inspirall Brush Tips



406 – Porcelain Etch Spritze 2 St.  
407 – Porcelain Etch Spritze 4 St.  
1,2 ml (1,33 g) Spritzen



410 – Silane Spritze 2 St.  
1,2 ml (0,96 g) Spritzen

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. 1. realityesthetics.com. 2. Pameijer CH, Louw NP, Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer Dent Assoc. 1996;127(2):203-9.



## Ultradent™ Keramikreparatur Kit

ÄTZGEL, SILANE, BONDING RESIN  
UND FLIESSFÄHIGES KOMPOSIT



- Enthält alle vor der Komposit-Applikation benötigten Materialien
- Höchste Haftwerte zwischen Keramik und Kunststoff<sup>2</sup>
- Sorgt für einfache, schnelle Reparaturen ohne Anmischen

Keramikreparaturen werden immer öfter durchgeführt. Die Reparatur einer abgeplatzten Keramikrestauration ist kostengünstiger und weniger invasiv als ihr Austausch. Das Ultradent Porcelain Repair Kit enthält alle Materialien und Tips, die erforderlich sind, um Komposit mit Keramik, Keramik mit Metall, Komposit mit Metall und Keramik mit Keramik zu verbinden.

Von einem namhaften unabhängigen  
Forschungsinstitut als hervorragend bewertet.<sup>3</sup>

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



### 1108 – Ultradent Keramikreparatur Spritzen-Kit

- 1 x 1,2 ml (2,30 g) PermaFlo Dentin Opaquer Spritze
- 1 x 1,2 ml (1,58 g) Ultra-Etch Spritze
- 1 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Spritze
- 1 x 1,2 ml (1,35 g) Peak Universal Bond Spritze
- 1 x 1,2 ml (1,33 g) Porcelain Etch Spritze
- 1 x 1,2 ml (0,96 g) Ultradent Silane Spritze
- 20 x Black Mini Brush Tips
- 20 x Blue Micro Tips
- 20 x Micro 20 ga (0,9 mm Ø) Tips
- 20 x Inspiral Brush Tips

## „STEP-BY-STEP“ – KERAMIKREPARATUR

Hinweis: Diese Kurzanleitung ist als Überblick gedacht; sie ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen der einzelnen Produkte. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformationen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Materialien einsetzen.

Ggf. Kofferdam legen und/oder mit der lichthärtenden Kunststoffbarriere OpalDam™ (mit Black Mini™ Tip) die umgebenden Zähne und die Gingiva abdecken. Mit der VALO™ Polymerisationsleuchte im Standard-Modus 10 Sekunden lichthärten.



↓  
Zu reparierende Stelle (Keramik und/oder Metall) mit Mikro-Sandstrahler und 50-µm-Aluminiumoxid-Strahlmittel mindestens 60 Sekunden lang aufrauen. Alternativ (jedoch nicht so effektiv) mit Diamantschleifer anrauen.

Optional: Porcelain Etch mit einem Inspiral™ Brush Tip auf Keramik-Bruchfläche auftragen.



↓  
Oberfläche 90 Sekunden ätzen, dann Gel absaugen und vorsichtig abspraysen.

Optional: Ultra-Etch™ Ätzmittel 5 Sekunden einwirken lassen, um Salze zu entfernen.



↓  
Die Bruchfläche abspülen und gründlich an der Luft trocknen lassen.

↓  
Silane mit einem Black Mini™ Brush Tip auf Keramik-Bruchfläche auftragen.



↓  
1 Minute verdunsten lassen und sanft mit Luftbläser vollständig trockenblasen.

↓  
Peak™ Universal Bond Adhäsiv mit Inspiral Brush Tip auf Bruchflächen auftragen. Sanft, aber gründlich verblasen. NICHT einmassieren.



↓  
Peak Universal Bond Adhäsiv 10 Sekunden mit einer VALO LED-Polymerisationsleuchte lichthärten.



↓  
Freiliegendes Metall mit einer dünnen Schicht PermaFlo™ Dentin Opaquer Komposit (mit einem Micro 20 ga Tip) abdecken, dann mit einer VALO™ Polymerisationsleuchte im Standard-Modus 10 Sekunden lichthärten. Bei Verwendung einer anderen Polymerisationsleuchte gemäß den Anweisungen des Herstellers lichthärten.



↓  
Bruchfläche schichtweise mit lichthärtendem Komposit aufbauen.



↓  
Reparaturstelle finieren und polieren.

1. realityesthetics.com. 2. Pameijer CH, Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer Dent Assoc. 1996; 127(2):203-209. 3. Clinical Research Associates Newsletter, Volume 24, Issue 11, November 2000.



## Ultra-Blend™ plus

DENTIN-LINER UND UNTERFÜLLUNGSMATERIAL




Black Micro™ Tip



- Bioaktives<sup>2</sup> Unterfüllungs- und Pulpaüberkappungsmaterial
- Überlegene Calciumabgabe<sup>3</sup>
- Lichthärtend
- Kontrollierte, präzise Applikation aus der Spritze
- Kein Anmischen erforderlich
- Keine allmähliche Resorption
- Röntgensichtbar
- Hoch gefüllt
- Zur Abdeckung von MTAFlow™ Reparaturzement bei Pulpenüberkappung vor der Restauration geeignet

Ultra-Blend plus Liner ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Unterfüllungsmaterial; es enthält Calciumhydroxid in einer biokompatiblen Urethan-Dimethacrylat(UDMA)-Basis. Es ist ideal geeignet für Pulpaüberkappungen und unterliegt keiner allmählichen Resorption. Ultra-Blend plus Liner ist hoch gefüllt, um die Schrumpfung minimal zu halten.

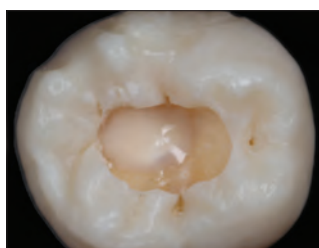


Zur Pulpaüberkappung verwendetes Ultra-Blend plus Unterfüllungsmaterial.




**416 – Ultra-Blend plus Dentin Spritze 4 St.**

**417 – Ultra-Blend plus Opaque White Spritze 4 St.**  
1,2 ml (1,64 g) Spritzen


## LICHTHÄRTENDES MATERIAL FÜR DIE PULPAÜBERKAPPUNG

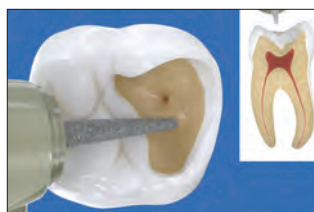

**1. Kleine Expositionen** – Ultra-Blend plus Liner für pulpanahe Bereiche (rosa durchschimmernd) und kleine, nichthyperämische Pulpaexpositionen verwenden. Falls die Pulpa stärker freiliegt und/oder eine hyperämische Pulpa vorliegt, sollte eine endodontische Behandlung in Erwägung gezogen werden.

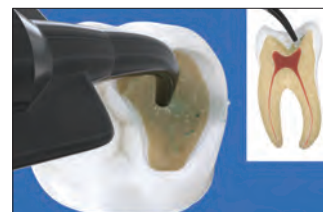


**2. Antibakterielle Lösung** – Mit einem Blue Mini™ Dento-Infusor™ Tip aus Kunststoff oder einem Black Mini™ Brush Tip für 60 Sekunden eine antibakterielle Lösung applizieren. Nicht einmassieren. Mit Luft trocknen.

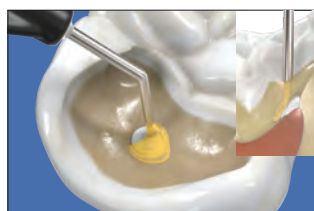

**3. MTAFlow™ Zement** – Optional: Wenn die Exposition größer ist als ein Nadeleinstich, MTAFlow™ Zement auf und etwas um die Pulpaexposition applizieren. Überschüssiges Material mit einem trockenen Wattepellet entfernen.



**4. Ultra-Blend plus Liner** – Mit einem Black Micro™ Tip Ultra-Blend plus Liner für direkte oder indirekte Pulpaüberkappungen auf das getrocknete Dentin auftragen und lichthärten. Die Dentinabdeckung minimieren, um über möglichst viel freiliegendes Dentin zu verfügen.

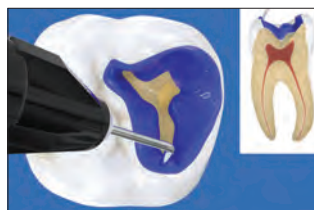

**5. Ultra-Etch Ätzmittel** – Ultra-Etch™ Ätzmittel mit 35 % Phosphorsäure 15 Sekunden einwirken lassen. Absaugen, abspülen und trocknen, bis es feucht ist. HINWEIS: Auf Wunsch vor dem Bonding antibakterielle CHX-Lösung auftragen, dann erneut für 60 Sekunden applizieren. Dentin trocknen, bis es nur noch leicht feucht ist, und mit dem Bonding-Präparat fortfahren.



**6. Dentin Bonding/Peak Universal Bond Adhäsiv** – Mit dem Inspiral™ Brush Tip Peak™ Universal Bond auf den Schmelz auftragen und 10 Sekunden ins Dentin einmassieren. 10 Sekunden bei halbem Druck verblasen und 10 Sekunden mit dem Standard-Modus der VALO™ Polymerisationsleuchte lichthärten. Mit einem hochwertigen Komposit restaurieren.



**415 – Ultra-Blend plus Spritzen-Kit**

2 x 1,2 ml (1,64 g) Dentin Spritzen  
2 x 1,2 ml (1,64 g) Opaque White Spritzen  
20 x Black Micro Tips  
20 x Black Mini Tips

**1016 – Ultra-Blend Plus Mini Kit**

1 x 1,2 ml (1,64 g) Dentin Spritze  
1 x 1,2 ml (1,64 g) Opaque White Spritze  
20 x Black Micro Tips

<sup>1</sup>. realityesthetics.com. <sup>2</sup>. Pameijer CH, Stanley HR. The disastrous effects of the "total etch" technique in vital pulp capping in primates [published correction appears in Am J Dent. 1998 Jun;11(3):148]. Am J Dent. 1998;11:45-54. <sup>3</sup>. Daten liegen vor, auf Anfrage.





BRICE TOLBERT – Big Cottonwood Canyon

# KOMPOSITE

Universalkomposit  
Fließfähiges Komposit  
Composite Wetting Resin  
Kompositversiegler





## Transcend™

UNIVERSALKOMPOSIT



- Die Farbe „Universal Body“ passt sich an nahezu alle Zahnfarben an
- Kein Opaker nötig
- Proprietäre Resin Particle Match™ Technologie
- Die Farbe „Universal Body“ passt sich sogar im Laufe einer Zahnaufhellung kontinuierlich an die umgebende Zahnfarbe an<sup>5</sup>
- Ausgezeichnete mechanische und optische Eigenschaften
- Ideale Verarbeitungskonsistenz, einfache Modellierbarkeit<sup>6</sup>
- Herausragende Polierbarkeit<sup>6</sup>
- Zusätzliche Schmelz- und Dentinfarben für ästhetisch anspruchsvollere Fälle im Frontzahnbereich mit Schichttechnik
- Mit der natürlichen Zahnschubstanz vergleichbare Fluoreszenz<sup>7</sup>

### RESIN PARTICLE MATCH™

Transcend Komposit ermöglicht es Ihnen, Restaurationen mit nur einer Kompositfarbe zu fertigen. Dank der Resin Particle Match Technologie von Ultradent sind die ausgewogenen Brechungsindizes zwischen Kunststoffmatrix und Füllkörpern so aufeinander abgestimmt, dass sich das Transcend Komposit an die optischen Eigenschaften der umgebenden Zahnfarbe anpasst.<sup>5</sup> Das bedeutet, dass Sie das Transcend Komposit in der Farbe „Universal Body“ praktisch überall im Mund einsetzen und damit natürliche und ästhetisch ansprechende Ergebnisse erzielen können – selbst bei größeren Restaurationen. Zudem zeichnet sich Transcend Komposit durch unkompliziertes Handling und einfache Formbarkeit aus.<sup>6</sup>

### PASST SICH DER UMGEBENDEN ZAHNSTRUKTUR AN



Nach Abschluss einer Aufhellungsbehandlung müssen zuvor mit Transcend Komposit restaurierte Zähne nicht neu versorgt werden, da sich die Farbe des Komposits dank seiner optischen Eigenschaften perfekt an die nun hellere Zahnfarbe der umgebenden Zähne anpasst.<sup>5</sup>

## RESTAURATIONEN MIT NUR EINER FARBE OHNE VERWENDUNG EINES OPAKERS

Foto von Dr. Yo-Han Choi.



Vorher.



Nachher.

Foto von Dr. Rafael Bealchi.



Vorher.



Nachher.

Foto von Dr. Gary Findley.



Vorher.



Nachher.

Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.



Vorher.




Nachher.

Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.




Vorher.

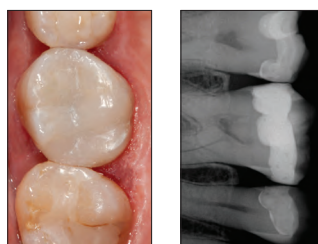

Nachher.

1. Dentistry Today (Award) 2024 Innovative Products Award Jan/Feb 2024 Issue, Volume 43, No 1, Page 40.
2. Dentistry Today (Award) 2024 Top 100 Products Award July/August 2024 Issue, Volume 43, No 6, Page 28.
3. Dentistry Today (Award) 2025 Innovative Products Award Jan/Feb 2025 Issue, Volume 44, No 1, Page 44.
4. Dentistry Today (Award) Top 25 Aesthetic Restorative Products Award – May 2025 Issue, Volume 44, No 4, Page 54.
5. Daten liegen vor, auf Anfrage. 6. Daten liegen vor, auf Anfrage. 7. Daten liegen vor, auf Anfrage.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

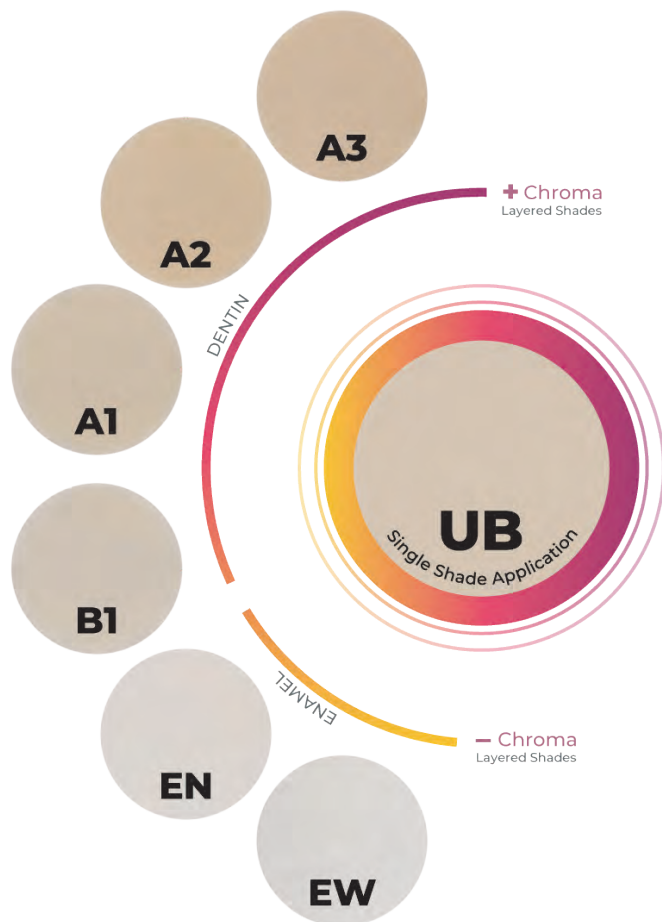

## Einfach schöne Ergebnisse FÜR JEDE RESTAURATION

Neben der Farbe „Universal Body“ ist Transcend Komposit auch für Fälle, bei denen die Schichttechnik sinnvoll eingesetzt werden kann. Es ist auch in vier Dentin- und zwei Schmelzfarben erhältlich.

Bei Frontzähnen mit deutlichen Unterschieden zwischen Zervikal- und Inzisalbereich (opake und transluzente Bereiche) und/oder bei größeren Restaurationen, z. B. bei gelegentlich vorkommenden sehr großen Kavitäten der Klassen III und IV, bei denen nur wenig Zahnstruktur vorhanden ist, an der sich die Farbe „Universal Body“ anpassen könnte, lassen sich durch die Schichtung der zusätzlichen Dentin- und Schmelzfarben überzeugende Ergebnisse erzielen.

## RESTAURATIONEN MIT MEHREREN FARBEN



Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.

Vorher.



Nachher.



Foto von Dr. Rafael Calixto.

Vorher.



Nachher.



Foto von Dr. Rafael Calixto.

Vorher.



Nachher.



Foto von Dr. Paulo Vinícius Soares.

Vorher.



Nachher.

## TECHNISCHE DATEN<sup>1</sup>

|                            | TRANSCEND UB |
|----------------------------|--------------|
| Druckfestigkeit            | 450,7 MPa    |
| Härte                      | 60,3 HK      |
| Biegefestigkeit            | 156,17 MPa   |
| Elastizitätsmodul          | 11,85 GPa    |
| Volumenschrumpfung         | 1,6 %        |
| Anfangsglanz               | 93,5 GU      |
| nach 10.000 Putzzyklen     | 91,2 GU      |
| Aushärtungstiefe           | 2,85 mm      |
| Röntgensichtbarkeit        | 3,2 mm Al    |
| Füllkörper Volumenprozent  | 60 – 61 %    |
| Füllkörper Gewichtsprozent | 79 %         |

1. Daten liegen vor, auf Anfrage.



## FARBE „UNIVERSAL BODY“



**4733 – Transcend UB Spritze 1 St.**  
1 x 4 g Spritze Farbe „Universal Body“

**4734 – Transcend UB Spritze 4 St.**  
4 x 4 g Spritzen Farbe „Universal Body“



**4757 – Transcend UB Singles 10 St.**  
10 x 0,2 g Singles Farbe „Universal Body“

**4817 – Transcend UB Singles 40 St.**  
40 x 0,2 g Singles Farbe „Universal Body“

**Tipp:** Das Modellieren und Konturieren von Kompositen wird durch den Einsatz von Composite Wetting Resin bei allen Ultradent Products Kompositen deutlich vereinfacht.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



**3059 – Composite Wetting Resin Spritze 2 St.**  
2 x 1,2 ml (1,85 g) Spritzen

## ZUSÄTZLICHE FARBEN



Transcend **Spritze 4 g**

| Dentin | 1 St. | Schmelz        | 1 St. |
|--------|-------|----------------|-------|
| A1D    | 4727  | Enamel Neutral | 4731  |
| A2D    | 4728  | Enamel White   | 4732  |
| A3D    | 4729  |                |       |
| B1D    | 4730  |                |       |

1 x 4 g Spritze



Transcend **Singles 0,2 g**

| Dentin | 10 St. | Schmelz        | 10 St. |
|--------|--------|----------------|--------|
| A1D    | 4744   | Enamel Neutral | 4748   |
| A2D    | 4745   | Enamel White   | 4749   |
| A3D    | 4746   |                |        |
| B1D    | 4747   |                |        |

10 x 0,2 g Singles



**4726 – Transcend Spritzen Intro Kit**  
1 x 4 g Spritze jeder Farbe:  
A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB



**4814 – Transcend Singles Intro Kit**  
10 x 0,2 g Singles jeder Farbe:  
A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB



## Mosaic™

UNIVERSALKOMPOSIT




- Glatte, plastische Konsistenz
- Lässt sich leicht schneiden und haftet nicht an Instrumenten
- Erweicht nicht und fließt nicht weg, nachdem es modelliert wurde
- Bietet reichlich Verarbeitungszeit bei Umgebungslicht

Mosaic Universalkomposit bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktion und Ästhetik für langlebige, natürlich wirkende Ergebnisse. Mosaic Komposit kann für alle restaurativen Zwecke verwendet werden: für einfache und anspruchsvolle Restaurationen. Seine Nanohybrid-Formel besteht aus Zirkondioxid-, Glaskeramik- und 20 nm Siliziumdioxidfüllkörper. Der Füllstoffanteil beträgt 68 Vol% bei Dentinfarben und 56 Vol% bei Schmelzfarben.<sup>2</sup> Die außergewöhnliche Handhabung, Ästhetik und hohe Haltbarkeit von Mosaic Komposit ermöglicht es Zahnärzten, Restaurationen höchster Qualität herzustellen.



Mosaic Komposit wird für direkte und indirekte Restaurationen (Inlays, Onlays und Veneers) sowohl im Frontzahn- als auch im Seitenzahnbereich verwendet.

## ZWANZIG INTUITIVE FARBOPTIONEN ERZEUGEN VORHERSAGBARE, NATÜRLICHE ERGEBNISSE.

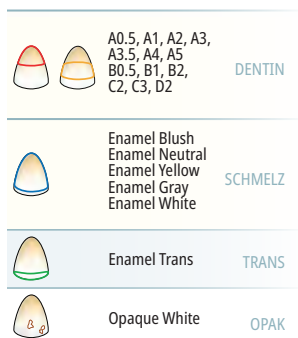

\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage.

## SEHR GUT MODELLIERBAR

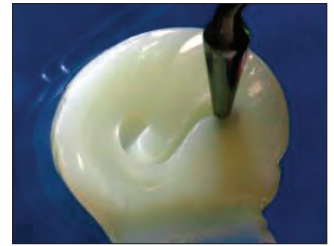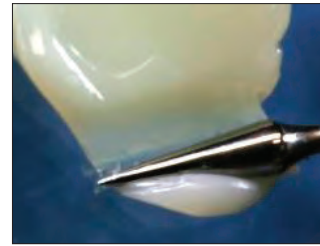

Volle Kontrolle bei der Modellation dank optimaler Verarbeitungseigenschaften.

## VORHER UND NACHHER



Foto von Dr. Rafael Beolchi.

Ästhetische Restauration mit Mosaic Kompositfarben: A4, A3, A2 und A1 von zervikal bis inzisal. Enamel White und Opaque White auf der Schneidekante. Universelle Anwendung für Klasse-I- bis Klasse-V-Restaurationen sowohl im Frontzahn- als auch im Seitenzahnbereich.

## ANWENDUNG\*



Foto von Dr. Gaetano Paolone.

1. Präoperative Klasse-II-Restauration.

2. Präparation mit platzierter Matrice.



3. Mit der Farbe Enamel Neutral aufgebaute Randleiste.

4. Für die erste Schicht wurde die Dentinfarbe A5 verwendet.



5. Die Farbe Enamel Neutral wurde für die letzte Schicht verwendet.

Klasse-II-Restauration mit dem Peak™ Universal Bond Adhäsivsystem mit Mosaic Kompositfarben A5 und Enamel Neutral.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.





## TECHNISCHE DATEN<sup>1</sup>


|                                    | DENTINFARBEN             | SCHMELZFARBEN            |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Schrumpfungsvolumen                | 2,6 %                    | 3,7 %                    |
| Schrumpfungstress                  | 3,9 MPa                  | 6,1 MPa                  |
| Druckfestigkeit                    | 486,4 MPa                | 447,6 MPa                |
| Härte                              | 66,9 HK                  | 65,4 HK                  |
| Biegefestigkeit                    | 166,1 MPa                | 176,7 MPa                |
| Elastizitätsmodul                  | 17,3 GPa                 | 11,7 GPa                 |
| Wassersorption                     | ≤ 40 µg/mm <sup>3</sup>  | ≤ 40 µg/mm <sup>3</sup>  |
| Wasserlöslichkeit                  | ≤ 7,5 µg/mm <sup>3</sup> | ≤ 7,5 µg/mm <sup>3</sup> |
| Röntgensichtbarkeit                | ≥ 2 mm Al (200 %)        | ≥ 2 mm Al (200 %)        |
| Verarbeitungszeit (Umgebungslicht) | 4:00 min                 | 4:00 min                 |
| Aushärtungstiefe                   | 2 mm                     | 2 mm                     |
| Füllkörper Volumenprozent          | 68 %                     | 56 %                     |

Die ausgewogenen Eigenschaften sorgen für funktionelle und ästhetische Langlebigkeit.


## VERGLEICH DER GLANZBESTÄNDIGKEIT<sup>1</sup>

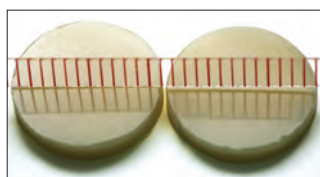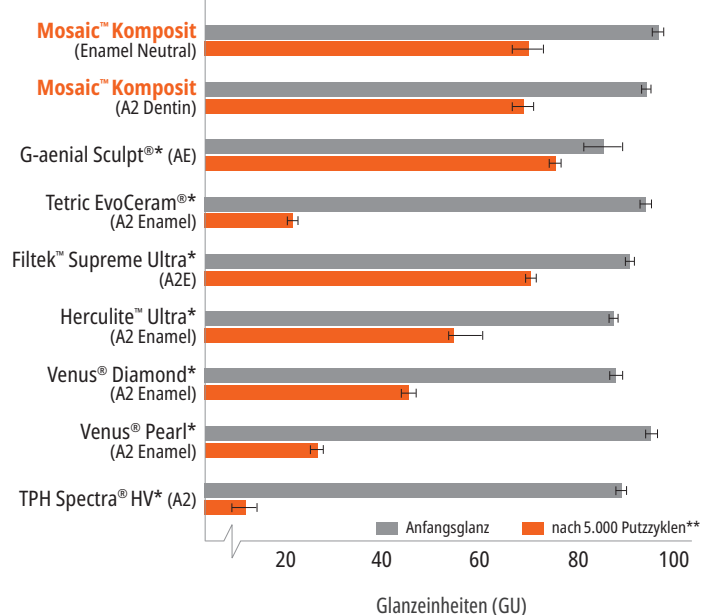


Mosaic Komposit, vor dem Bürsten poliert

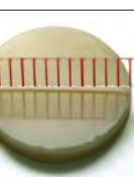

Mosaic Komposit nach 5.000 Putzzyklen<sup>1</sup>

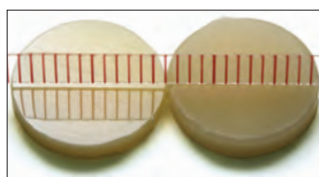

Komposit eines Mitbewerbers, vor dem Bürsten poliert

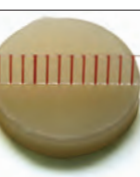

Komposit eines Mitbewerbers nach 5.000 Putzzyklen<sup>1</sup>



## 4803 – Mosaic Farbschlüssel – 20 Farben

A0.5, A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B0.5, B1, B2, C2, C3, D2, EY, EB, EG, EN, EW, OW, ET

## Mosaic™ Spritze 1 St. 4 g

| Dentin | 1 St. | Schmelz        | 1 St. |
|--------|-------|----------------|-------|
| A0.5   | 4760  | Enamel Yellow  | 4773  |
| A1     | 4761  | Enamel Blush   | 4774  |
| A2     | 4762  | Enamel Gray    | 4775  |
| A3     | 4763  | Enamel Neutral | 4776  |
| A3.5   | 4764  | Enamel White   | 4777  |
| A4     | 4765  | Enamel Trans   | 4779  |
| A5     | 4766  | Opaque White   | 4778  |
| B0.5   | 4767  |                |       |
| B1     | 4768  |                |       |
| B2     | 4769  |                |       |
| C2     | 4770  |                |       |
| C3     | 4771  |                |       |
| D2     | 4772  |                |       |



x 1

## Mosaic™ Singles 10 St. 0,2 g

| Dentin | 10 St. | Schmelz        | 10 St. |
|--------|--------|----------------|--------|
| A0.5   | 4799   | Enamel Yellow  | 4792   |
| A1     | 4780   | Enamel Blush   | 4793   |
| A2     | 4781   | Enamel Gray    | 4794   |
| A3     | 4782   | Enamel Neutral | 4795   |
| A3.5   | 4783   | Enamel White   | 4796   |
| A4     | 4784   | Enamel Trans   | 4798   |
| A5     | 4785   | Opaque White   | 4797   |
| B0.5   | 4786   |                |        |
| B1     | 4787   |                |        |
| B2     | 4788   |                |        |
| C2     | 4789   |                |        |
| C3     | 4790   |                |        |
| D2     | 4791   |                |        |



x 10

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. \*\* Definitiver Glanz gemessen nach 5.000 simulierten Putzzyklen in Glanzeinheiten (GU). 1. Daten liegen vor, auf Anfrage.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

## PermaFlo™

FLIESSFÄHIGES KOMPOSIT



Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tip



Black Mini™ Tip


- Hoch gefüllte, hoch fließfähige Formulierung
- Sehr gut röntgensichtbar<sup>2</sup>
- Fluorid-abgebende Formulierung<sup>3</sup>
- Hervorragende Polierbarkeit
- Stabil und abriebfest
- In 5 Farbtönen erhältlich

Das fließfähige Komposit PermaFlo ist ein lichthärtendes, röntgensichtbares Komposit auf Methacrylatbasis, das in 5 Farbtönen erhältlich ist. Seine thixotropen Eigenschaften verleihen ihm eine ideale Fließfähigkeit für verbesserte Adaptierung.


PermaFlo ist zu 67 – 68 % nach Gewicht und zu 42 – 44 % nach Volumen gefüllt,<sup>4</sup> mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von 0,7 µm.<sup>4</sup>

Verwenden Sie PermaFlo fließfähiges Komposit für Front- und Seitenzahnrestaurationen: Klasse I, II, III, IV und V. Es kann auch zur Rekonstruktion fehlender subgingivaler Zahnschubstanz vor endodontischen Verfahren verwendet werden („Donut-Technik“).


## MIKRO-RESTAURATIONEN

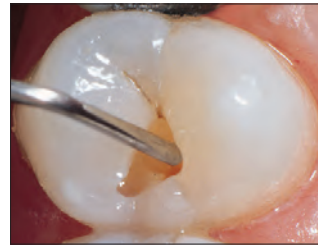

1. Kleine Klasse-I-Präparation, bereits mit Dentin Bonding Agent behandelt. Kavität mit fließfähigem PermaFlo™ Komposit durch den Micro 20 ga Tip füllen.


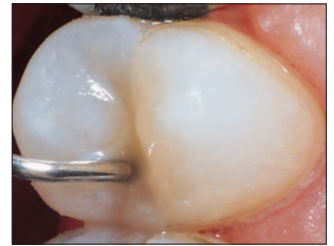


2. Das fließfähige Komposit bietet eine unübertroffene Adaptierung, da es die Präparation von unten nach oben füllt.

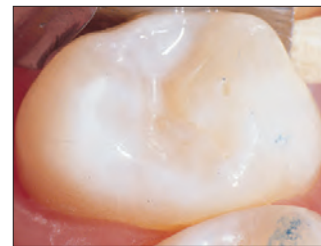


3. Fertige, röntgensichtbare 0,7 µm-Hybridkompositrestauration.

## OPAKER

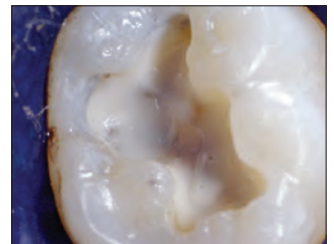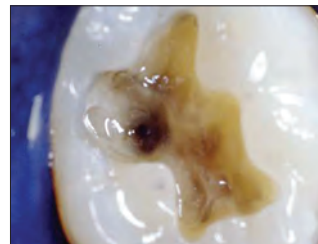


Durch die Maskierung von Verfärbungen mit PermaFlo Komposit lässt sich eine fantastische Ästhetik an der Oberfläche erreichen.

## METALLABDECKUNG

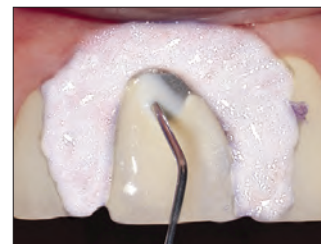

Freiliegendes Metall mit einer dünnen Schicht PermaFlo Dentin Opaquer abdecken und 10 Sekunden mit dem Standard-Modus einer VALO™ Polymerisationsleuchte lichthärten.

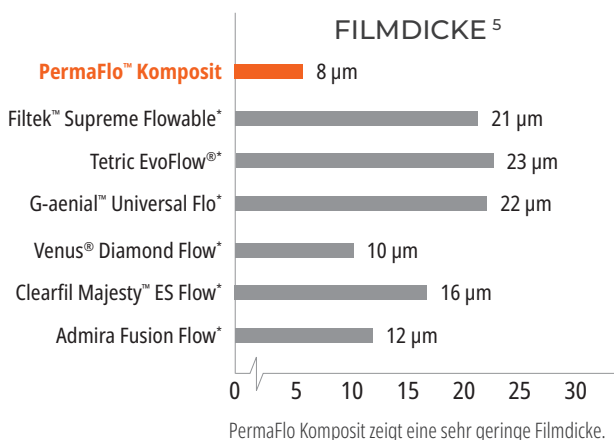


\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. 1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage. 3. Daten liegen vor, auf Anfrage. 4. Daten liegen vor, auf Anfrage. 5. Daten liegen vor, auf Anfrage.





## SUPERADAPTIVE INITIALE SCHICHT

Foto von Dr. Howard Strassler.

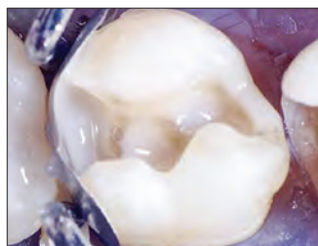


Nach dem Bonden eine dünne Schicht PermaFlo Komposit am Gingivarand, den axialen Rändern des Approximalkastens und an den inneren Kantenwinkeln auftragen, um die gute Adaptierung des Komposits sicherzustellen.

## MILCHZAHNFÜLLUNGEN




1. Ausgedehnte Karies bei einem Dreijährigen.

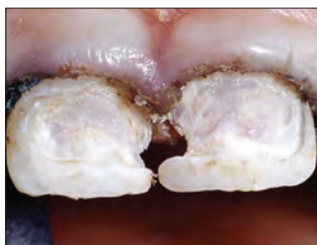

2. Karies mit einem großen Rosenbohrer bei niedriger Drehzahl vollständig entfernen. Mit Sable™ Seek™ Kariesindikator anfärben, um sicherzugehen, dass die Präparation überall bis ins harte, mineralisierte Dentin reicht. Gutes Tissue Management ist hier unverzichtbar: Ein langer, in ein Hämostatikum getränkter Ultrapak™ Faden wird gelegt.



3. Präparationen ätzen und Peak™ Universal Bond Adhäsiv applizieren. Mit der VALO Polymerisationsleuchte im Standard-Modus 10 Sekunden lichthärten. Eine erste dünne Schicht PermaFlo Komposit mit dem Micro 20 ga Tip auf die Adhäsivschicht applizieren. Lichthärten.

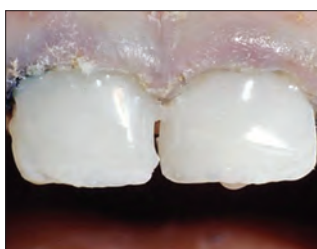

4. 1 oder 2 weitere Schichten applizieren und aushärten. Restaurationen schnell mit Finierern und Polierkelchen ausarbeiten.



5. Ein Jahr später.



IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



**PermaFlo Spritzen-Kits**

| Farbe | Kit | Farbe          | Kit  |
|-------|-----|----------------|------|
| A1    | 947 | B1             | 956  |
| A2    | 948 | Dentin Opaquer | 1005 |
| A3    | 949 |                |      |

2 x 1,2 ml (2,30 g) Spritzen  
4 x Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tips

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. \*\* Wie vom Originalhersteller bereitgestellt. 1. Daten liegen vor, auf Anfrage.

## Composite Wetting Resin

WETTING RESIN




Inspirat™ Brush Tip

- Erleichtert Adaptierung von Komposit
- Benetzt trockenes Komposit während der Modellation
- Hydrophober und lösungsmittelfreier Kunststoff

Composite Wetting Resin ist zu 45 % gefüllt<sup>2</sup>, lichthärtender, flüssiger Kunststoff. Es ist Einkomponenten-Adhäsiven deutlich überlegen, die Lösungsmittel enthalten und die Kompositpolymerisation hemmen.

Verwenden Sie Composite Wetting Resin während des Schichtens von Kompositmaterialien und wenn die sauerstoffinhibierte Schicht entfernt oder geschädigt wurde (z. B. durch Abwaschen der Kompositoberfläche nach Kontamination). Verwenden Sie Composite Wetting Resin auf einem Instrument oder Pinsel, um die Gleitfähigkeit zu verbessern und die Haftung vom Komposit am Instrument zu verringern. Es kann auch auf die während der Modellation getrocknete Kompositoberfläche aufgetragen werden. Composite Wetting Resin erleichtert die Adaptierung der Kompositfüllung an die Kavitätenwände.

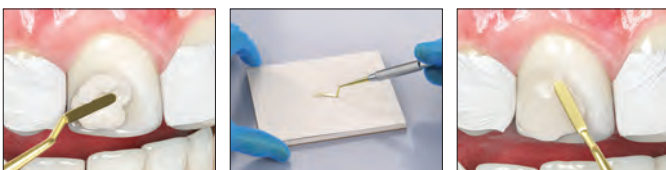

1. Vor Applikation von Composite Wetting Resin.
2. Instrument in Composite Wetting Resin tauchen oder direkt auf den Zahn auftragen.
3. Die Anwendung von Composite Wetting Resin ermöglicht ein besseres Gleiten des Instruments und eine verbesserte Adaptation des Komposits.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



### 3059 – Composite Wetting Resin Refill

2 x 1,2 ml (1,85 g) Spritzen



## PermaFlo™ Pink

KOMPOSIT



Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tip

- Attraktive Alternativlösung für einen ästhetischen Gingivaersatz

PermaFlo Pink Komposit ist eine hervorragende Alternative zu einem Gingivatransplantat, das nicht immer möglich ist. Verwendung als Maskierung bei Klasse-V-Restaurationen mit freiliegender Wurzeloberfläche. Auch zur Maskierung einer Gingivarecession.

### VORHER UND NACHHER



Foto von Dr. Anna Kylova.



1. Nach der Zahnpräparation und Applikation von Peak™ Universal Bond Adhäsiv die Füllung schichtweise mit PermaFlo Pink Komposit aufbauen.

2. Die entstandene Restauration kann freiliegende Wurzeloberflächen maskieren, wenn ein Gingivatransplantat nicht möglich ist.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



### 963 – PermaFlo Pink Kit

2 x 1,2 ml (2,30 g) Spritzen  
4 x Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tips



1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage.



## PermaSeal™

KOMPOSITVERSIEGLER



Black Micro™ FX™ Tip

- Haftet an Komposit und angeätztem Schmelz
- Versiegelt Mikrorisse
- Schützt Kompositfüllungen und frischt sie auf

Der Kompositversiegler PermaSeal ist ein lichthärtender, ungefüllter Kunststoff auf Methacrylatbasis. Seine niedrige Viskosität ermöglicht ein intensives Penetrieren, und die ultradünne Schicht macht okklusale Korrekturen meist überflüssig.

PermaSeal versiegelt während der Politur entstandene Hohlräume und Unebenheiten, wodurch Verfärbung und Abnutzung minimiert werden. Auf Kompositränder bei Klasse-V-Restaurationen appliziert, reduziert der Versiegler Mikroleakage.<sup>2</sup> PermaSeal Kompositversiegler haftet gut an provisorischen Materialien auf Komposit-Basis und kann auch zur Auffrischung älterer Komposite verwendet werden.

### NEUE RESTAURATIONEN

Foto von Dr. Dan Fischer.



Vorher: Zahnzwischenräume und leichte Zahnrotationen sollen mit Peak™ Universal Bond Adhäsiv und Komposit korrigiert werden.



Nach der Restauration und Politur 5 Sekunden ätzen, spülen und trocknen; dann PermaSeal applizieren, um das Komposit zu versiegeln und ein glänzendes Ergebnis zu erzielen. Verblasen und 10 Sekunden lichthärten.

### VORHANDENE RESTAURATIONEN

Foto von Dr. Brett Richins.



Zu versiegelnde Oberflächen und Ränder mit einer antibakteriellen Paste oder einem Sandstrahler reinigen oder mit einem Diamantschleifer auffrischen. Gründlich abspülen. Unmittelbar an die Restauration angrenzenden Schmelz und alle zugänglichen Kompositoberflächen 15 Sekunden ätzen. Wenn der Schmelz nicht wie oben beschrieben vorbereitet wird, 30 Sekunden ätzen. Anschließend PermaSeal Kompositversiegler auftragen.



Restauration unmittelbar nach der Applikation von PermaSeal Kompositversiegler



Oberfläche des Provisoriums glätten. 5 Sekunden ätzen, PermaSeal Versiegler auf die Oberflächen applizieren, sanft verblasen und 10 Sekunden lichthärten.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



#### 631 – PermaSeal Kit

4 x 1,2 ml (1,30 g) Spritzen  
10 x Black Micro FX Tips

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



#### 1013 – PermaSeal Mini Kit

2 x 1,2 ml (1,30 g) Spritzen  
10 x Black Micro FX Tips

Hinweis: Vor dem Auftragen von PermaSeal Kompositversiegler lässt sich die Oberfläche mit PrimaDry Trocknungsmittel optimal trocknen.

## PrimaDry™

TROCKNUNGSMITTEL



Black Micro™ FX™ Tip

Das Trocknungsmittel PrimaDry enthält 99 % organische Lösungsmittel und 1 % Primer und eignet sich optimal für die Trocknung und Vorbereitung von Grübchen und Fissuren. Es entfernt schnell alle Feuchtigkeit aus Grübchen und Fissuren. Der hauchfeine Primerfilm ermöglicht es dem UltraSeal XT™ plus Fissurenversiegler, perfekt in jede Fissur einzufliessen.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



#### 716 – PrimaDry Spritze Refill

4 x 1,2 ml (0,95 g) Spritzen

1. realityesthetics.com 2. Daten liegen vor, auf Anfrage.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.





KODA PEARCE – Snowbasin

# ZEMENTE

Eugenolfreie provisorische Zemente auf Polycarboxylat- und Kunststoffbasis  
Provisorischer Zement für Veneers  
Dualhärtendes Komposit für Befestigung und Aufbauten



|                                 | UltraTemp™                                                                                                                                                                                                                    | UltraTemp™ REZ II                                                                                                                                                                                                                                                     | ClearTemp™ LC                                                                                                                         | PermaFlo™ DC                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialgruppe                  | Provisorischer Befestigungszement                                                                                                                                                                                             | Provisorischer Befestigungszement                                                                                                                                                                                                                                     | Provisorischer Zement für Veneers                                                                                                     | Zement für Befestigung und Restauration                                                                                                                                       |
| Zusammensetzung                 | Paste-Paste-eugenolfreier Polycarboxylatzement                                                                                                                                                                                | Paste-Paste-Kombination, eugenolfrei, auf Kunststoffbasis                                                                                                                                                                                                             | Niedrig-/mittelgefülltes Komposit                                                                                                     | Hochgefülltes Feinpartikel-Komposit                                                                                                                                           |
| Indikationen                    | Temporäre Befestigung von provisorischen Kronen, Brücken, Inlays und Onlays                                                                                                                                                   | Temporäre Befestigung von provisorischen Versorgungen oder restaurative Verfahren (z. B. provisorische Kronen, Brücken, Inlays und Onlays)                                                                                                                            | Temporäre Befestigung von provisorischen Veneers                                                                                      | Permanente Befestigung von Kronen, Inlays, Onlays, Brücken, endodontische Stiftzementierung und Herstellung von Stumpfaufbauten                                               |
| Applikation                     | 5 ml Doppelspritze mit Mixing Tip                                                                                                                                                                                             | 5 ml Doppelspritze mit Mixing Tip                                                                                                                                                                                                                                     | 0,67 g abgewinkelte Spritze                                                                                                           | 5 ml Doppelspritze mit Mixing Tip. Zusätzlicher Intraoral Tip für eine präzise Applikation.                                                                                   |
| Art der Aushärtung              | Selbsthärtend                                                                                                                                                                                                                 | Selbsthärtend                                                                                                                                                                                                                                                         | Lichthärtend                                                                                                                          | Dualhärtend                                                                                                                                                                   |
| Verarbeitungszeit / Abbindezeit | 2 – 3 Minuten                                                                                                                                                                                                                 | Fast Set 1 – 2 Minuten                                                                                                                                                                                                                                                | 10 Sekunden mit einer VALO™ Polymerisationsleuchte lichthärten                                                                        | 2,5 Minuten Verarbeitungszeit, vollständige Aushärtung in 5 – 8 Minuten Entsprechend den Anweisungen mit einer VALO™ Polymerisationsleuchte lichthärten.                      |
| Viskosität                      | Fließfähig                                                                                                                                                                                                                    | Fließfähig                                                                                                                                                                                                                                                            | Mittel                                                                                                                                | Fließfähig                                                                                                                                                                    |
| Farben                          | Cremefarben                                                                                                                                                                                                                   | Cremefarben                                                                                                                                                                                                                                                           | Transluzent (fluoresziert unter UV-Licht)                                                                                             | A2, Translucent, Opaque White                                                                                                                                                 |
| Beschreibung                    | Mischen und Ausbringen in einem Arbeitsgang. Die hydrophile Polycarboxylat-Formel reizt die Pulpa nicht. Ideal zum Verschluss der Zugangsöffnung bei einer „Walking Bleach“-Behandlung. Löst sich leicht von der Präparation. | Mischen und Ausbringen in einem Arbeitsgang. Die hydrophile Kunststoffbasis ist gut geeignet für Fälle, die eine längere Retention erfordern. Erhältlich mit schnellen Abbindezeiten. Röntgensichtbar und fluoreszent, um die vollständige Entfernung zu erleichtern. | Liefert die benötigte Festigkeit zur Fixierung provisorischer Veneers. Lässt sich leicht erkennen, da es unter UV-Licht fluoresziert. | Geringste Filmdicke (8 µm) aller bekannten Befestigungszemente. <sup>1</sup> Höhere Druckfestigkeit als andere hochwertige Befestigungszemente. <sup>2</sup> Günstiger Preis. |

|                                   | PROVISORISCH  |               |              | PERMANENT   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Indikationen                      | Selbsthärtend | Selbsthärtend | Lichthärtend | Dualhärtend |
| Krone                             | X             | X             |              | X           |
| Brücke                            | X             | X             |              | X           |
| Veneer                            |               |               | X            |             |
| Stiftzementierung                 |               |               |              | X           |
| Stumpfaufbau                      |               |               |              | X           |
| Walking Bleach                    | X             |               |              |             |
| Kronen und Brücken für Implantate |               | X             |              | X           |
| Endodontische Zugangsöffnung      | X             |               |              |             |
| Orthodontische Bänder             |               |               |              |             |
| Kinderzahnheilkunde               |               |               |              |             |
| Inlays/Onlays                     | X             | X             |              | X           |



1. Daten liegen vor, auf Anfrage. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage. 3. Daten liegen vor, auf Anfrage.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

## UltraTemp™ & UltraTemp™ REZ II

EUGENOLFREIE PROVISORISCHE ZEMENTE AUF POLYCARBOXYLAT- UND KUNSTSTOFFBASIS




Ultradent™ Mixing Tip

- Eugenolfreie Formulierung ohne Beeinträchtigung des Kunststoff-Bondings<sup>2</sup>
- Vor dem Abbinden/Aushärten einfach mit Wasser entfernbar
- Entnahme der Paste-Paste-Kombination aus praktischer Doppelspritze
- Mixing Tips bieten gleichmäßiges Anmischen
- Optimale Versiegelung nach dem Aushärten
- Widerstandsfähig gegenüber normalen Biss- und Kaukräften<sup>3</sup>
- Hydrophile Zusammensetzung für einen verlässlich dichten Verschluss

Die hydrophile Formulierung des provisorischen UltraTemp™ Befestigungszements auf Polycarboxylat-Basis ist pulpenfreundlich und dichtet verlässlich ab.<sup>4</sup> Es lässt sich vor dem Abbinden einfach mit Wasser entfernen. UltraTemp Befestigungszement wird für die routinemäßige ein- bis zweiwöchige temporäre Befestigung individuell hergestellter oder vorgefertigter Provisorien empfohlen.

UltraTemp™ REZ II Provisorischer Zement auf hydrophiler Kunststoffbasis ist zu empfehlen, wenn Interimsrestaurationen auf Implantaten und provisorische Restaurationen während eines längeren Zeitraumes (2–4 Wochen) erforderlich sind. Er ist außerdem unter Schwarzlicht röntgensichtbar und fluoreszent, um die Entfernung zu erleichtern. Er ist in der Variante Fast Set (2 Minuten Abbindezeit) erhältlich.

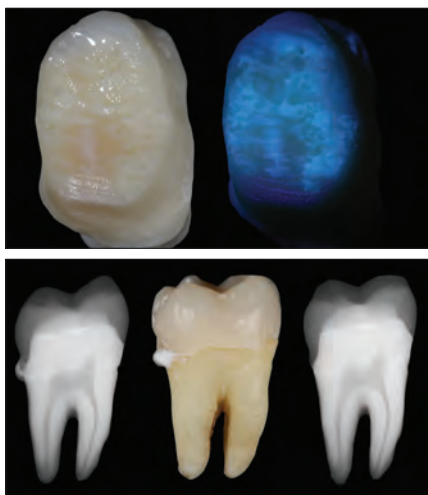


UltraTemp REZ II Provisorischer Zement ist röntgensichtbar und fluoreszent unter Schwarzlicht, um die Entfernung zu erleichtern.

## ZWEI UNTERSCHIEDLICHE ZEMENTE

für verschiedene Befestigungsoptionen

### PROVISORISCHE BEFESTIGUNG

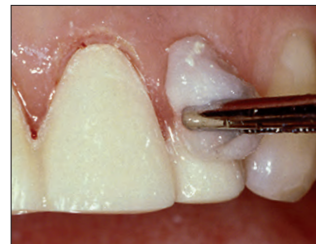

1. Vor dem endgültigen Abbinden UltraTemp Befestigungszement mit einem feuchten Wattepellet oder Wattestäbchen entfernen. Nach 1–2 Minuten Abbinden etwaige subgingivale Zementreste mit einer Sonde entfernen.



2. Nach der Entfernung des Provisoriums zwei Wochen nach der Behandlung haften Zementreste sowohl am Provisorium als auch an der Präparation. Das ist ein sicherer Indikator dafür, dass der Zement zuverlässig abgedichtet hat.



3. Zementüberschüsse mit einem stumpfen Handinstrument entfernen.



4. Verwenden Sie eine antibakterielle CHX-Polierpaste mit einem Gummikelch oder ein Mikro-Reinigungsbürstchen, um Zementreste zu entfernen.

 **5916 – UltraTemp Regular Set Kit** (2–3 Minuten Abbindezeit)

 **6061 – UltraTemp REZ II Fast Set Kit** (1–2 Minuten Abbindezeit)  
1 x 5 ml (7,96 g) Spritze  
20 x Mixing Tips

1. realityesthetics.com. 2. Millstein PL, Nathanson D. Effects of temporary cementation on permanent cement retention to composite resin cores. J Prosthet Dent. 1992;67(6):856-859. 3. Daten liegen vor, auf Anfrage. 4. Daten liegen vor, auf Anfrage.





## ClearTemp™ LC

PROVISORISCHER ZEMENT FÜR VENEERS



- Transluzente Farbe speziell für provisorische Frontzahnveneers
- Lichthärtender Kunststoff bietet ausgezeichnete Versiegelung und Retention
- Fluoreszenz unter Schwarzlicht erleichtert vollständige Entfernung
- Ergonomische, abgewinkelte Entnahmespritze hilft bei präziser Applikation

ClearTemp LC wurde speziell für provisorische Veneers in der ästhetischen Zone entwickelt. Seine proprietäre, lichthärtende Zusammensetzung liefert die benötigte Festigkeit zur Fixierung provisorischer Veneers. Zur Befestigung provisorischer Veneers gibt es kein vergleichbares Material, das so gut haftet und so natürlich scheint wie ClearTemp LC.

### ÄSTHETISCH



Provisorien sehen heute natürlicher aus als je zuvor. ClearTemp LC Zement hilft, auch in dieser kurzen Zeit ein Lächeln zu schaffen, das Patienten stolz vorzeigen.

### VERGLEICH



Ein herkömmlicher provisorischer Zement scheint durch die provisorische Krone an Zahn 11 durch. ClearTemp LC Zement ist durch das provisorische Veneer an 21 hindurch nicht zu sehen.

### FLUORESZIERENDE EIGENSCHAFTEN



ClearTemp LC Zement fluoresziert unter Schwarzlicht zum einfachen Auffinden. Mit einem Schwarzlicht können Sie die vollständige Entfernung von ClearTemp LC Zement überprüfen. Dies ist ein wichtiger Schritt, der die Gefahr einer Beschädigung der endgültigen Restauration minimiert. Verwenden Sie die VALO™ Black Light Lens, um gute Sichtverhältnisse zu schaffen.



Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.

## ANWENDUNG



1. Produkt aus dem Kühlschrank nehmen und auf Raumtemperatur bringen. Die Präparation reinigen, abspülen und leicht trocknen. Ausreichende Menge ClearTemp LC Zement aufbringen, um die Innenfläche des Provisoriums zu bedecken.



2. Provisorisches Veneer einsetzen.



3. Überschuss entfernen.



4. Mit der VALO Polymerisationsleuchte im Standard-Modus 10 Sekunden lichthärten.

## ENTFERNEN



5. Setzen Sie ein Handinstrument am Rand der Kunststoff-Schale an, um die Versiegelung zu lösen und das Provisorium zu entfernen. ClearTemp LC Zement ist sehr stabil und besitzt eine starke Haftung, so dass provisorische Veneers beim Entfernen zerbrechen können. Grobe Zementüberschüsse mit einem stumpfen Handinstrument entfernen.



6. Zahnoberfläche mit UV-Licht beleuchten, um Reste von ClearTemp LC Zement zu identifizieren. Alle Zementreste entfernen und nochmals überprüfen. Präparation mit antibakterieller CHX-Polierpaste und Kelch oder Bürste reinigen. Gründlich abspülen und für die endgültige Befestigung vorbereiten.

**Hinweis:** Aufgrund seiner hohen Haftkraft im Vergleich zu anderen provisorischen Zementen sollte ClearTemp LC **AUSSCHLIESSLICH** für provisorische Veneers und niemals für die temporäre Befestigung endgültiger Restaurationen, Vollkronen, Inlays oder Onlays verwendet werden.

### IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



**3518 – ClearTemp LC Refill**  
4 x 0,67 g (0,5 ml) Spritzen

1. realityesthetics.com.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## PermaFlo™ DC

DUALHÄRTENDES KOMPOSIT  
FÜR RESTAURATION UND BEFESTIGUNG



Ultradent™ Mixing Tip

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, einschließlich Stiftzementierung, Stumpfaufbau und Befestigung
- Abriebfest
- Maximale Festigkeit
- Röntgensichtbar
- Geringe Polymerisationsschrumpfung
- Anmischung durch Mixing Tip
- Neu gestaltete Spritze für einfache Applikation
- 2,5 Minuten Verarbeitungszeit, 5–8 Minuten chemische Aushärtungszeit
- Verwendbar mit der Total-Etch- und der Self-Etch-Technik


PermaFlo DC Befestigungskomposit ist ein hochgefülltes, dualhärtendes Feinpartikel-Komposit, das problemlos durch dünne Applikationsansätze fließt, wodurch Wurzelstifte einfach und bequem befestigt werden können. Es hat die geringste Filmdicke von nur 8 µm.<sup>1</sup>

PermaFlo DC Befestigungskomposit wird empfohlen für die permanente Zementierung von transparenten oder opaken Kronen etc. Sie können es in einem Arbeitsgang zur Befestigung von Wurzelstiften und Herstellung von Stumpfaufbauten verwenden. Mit seiner optimalen Viskosität fließt es leicht in die Tiefen der Stiftpräparation und dann eng um die Köpfe von Wurzelstiften herum. Um das Fließen des Materials während eines Stumpfaufbaus zu stoppen, einfach kurz lichthärten. PermaFlo DC Komposit ist kompatibel mit Peak™ Universal Bond Adhäsiv für lichthärtendes Bonding und Befestigen.

### TECHNISCHE DATEN<sup>2</sup>

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Scherhaftfestigkeit an Schmelz (Total-Etch) | 53,38 MPa  |
| Scherhaftfestigkeit an Dentin (Total-Etch)  | 62,07 MPa  |
| Biegefestigkeit                             | 128,5 MPa  |
| Elastizitätsmodul                           | 9,37 GPa   |
| Druckfestigkeit                             | 355,91 MPa |
| Druckmodul                                  | 4,22 GPa   |


### FILMDICKE<sup>3</sup>

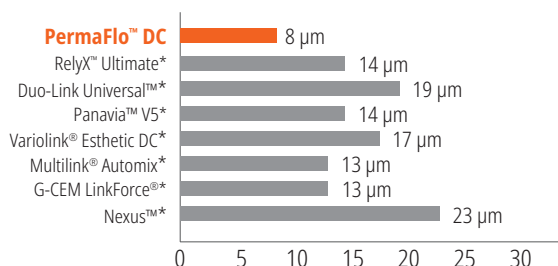


PermaFlo DC Komposit hat die geringste Filmdicke namhafter Befestigungskomposite.<sup>3</sup>

## MEHRERE OPTIONEN


Versagen ist KEINE davon

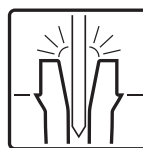

Stiftzementierung

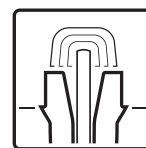

Stumpfaufbau

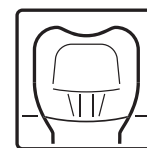

Befestigung

### ANWENDUNG\*\*



Foto von Dr. Gary Findley.



Das Komposit PermaFlo DC ist ein vielseitiges dualhärtendes Komposit, das zur Befestigung von Wurzelstiften und zur Herstellung von Stumpfaufbauten verwendet werden kann.

### INDIKATIONEN



Zur präzisen Applikation des Befestigungsmaterials wird der Intraoral Tip auf den Mixing Tip der Doppelspritze gesetzt.



Adhäsive Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays. Bei der Applikation mittels Spritze/Tip wird die Krone vom Boden aus gefüllt, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

### IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



### PermaFlo DC Spritzen-Kits

| Farbe | Kit  | Farbe        | Kit  |
|-------|------|--------------|------|
| A2    | 5912 | Translucent  | 5914 |
|       |      | Opaque White | 5915 |

1 x 5 ml (9,5 g) PermaFlo DC Spritze  
A2 – 5 ml (9,63 g), Translucent – 5 ml (9,42 g), Opaque White – 5 ml (9,5 g)  
20 x Mixing Tips  
20 x Intraoral Tips

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. \*\* Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. Daten liegen vor, auf Anfrage. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage. 3. Daten liegen vor, auf Anfrage.


Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## ANLEITUNG ZUR ZEMENTIERUNG VON WURZELSTIFTEN MIT PERMAFLO DC




1. Bestimmen Sie Größe und Länge des Stifts mit einem Try-In-Stift bzw. auf dem Röntgenbild und klinischer Beurteilung.

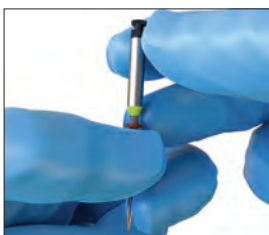

2. Stecken Sie einen Gummistopper bei der gewünschten Länge auf den UniCore® Bohrer.



3. Positionieren Sie den UniCore Tip in der Pilotbohrung. Folgen Sie dem Obturationsmaterial mit leichtem Druck bis zu der vom Gummistopper angezeigten Länge. Ziehen Sie den Bohrer bei voller Drehzahl aus dem Kanal zurück.

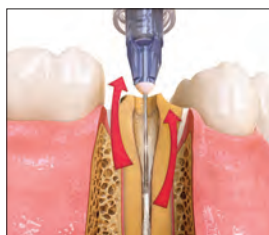

4. Verwenden Sie TriAway™ Adapter\* mit dem Endo-Eze™ 22 ga (0,7 mm ø) Tip, um Materialreste mit Wasser aus dem Stiftkanal zu entfernen.




5. Verifizieren Sie Größe und Länge des Stifts durch Einsetzen des entsprechenden UniCore Stifts. Reinigen Sie den Stift nach der Einprobe mit Isopropylalkohol.

### ETCH-AND-RINSE-TECHNIK




6. Ätzen Sie den Stiftkanal für 15 Sekunden mit Ultra-Etch™ Ätzmittel und Endo-Eze 22 ga (0,7 mm ø) Tip. Beginnen Sie apikal und füllen Sie nach koronal.

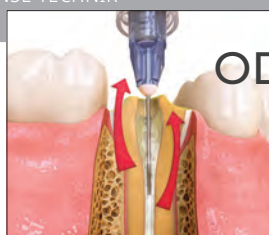


Verwenden Sie TriAway Adapter\* und den Endo-Eze 22 ga (0,7 mm ø) Tip, um gründlich mit Wasser zu spülen und leicht mit Luft zu trocknen, wobei der Stiftkanal etwas feucht belassen wird.

ODER

### ODER ETCH-AND-NO-RINSE-TECHNIK WÄHLEN

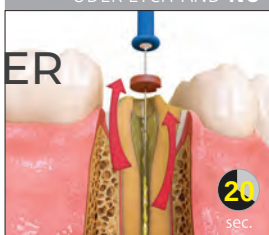

6a. Befestigen Sie den 30 ga (0,3 mm ø) NaviTip™ FX® Brush Tip an der Peak™ SE Primer-Spritze. In den Stiftkanal und auf die koronale Präparation 20 Sekunden lang unter ständiger Bewegung applizieren.

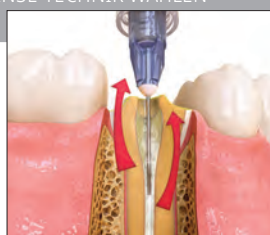

Saugen Sie Überschüsse mit dem TriAway Adapter\* und dem Endo-Eze 22 ga (0,7 mm ø) Tip vom Boden des Kanals ab. Nicht über trocknen.



7. Bringen Sie mit dem 30 ga (0,3 mm ø) NaviTip FX Tip oder dem Micro Applicator Peak™ Universal Bond Adhäsiv ein. Massieren Sie die gesamte Länge des Stiftkanals und die gesamte Zahnpräparation 10 Sekunden lang ein.



8. Saugen Sie überschüssiges Peak Universal Bond Adhäsiv mit dem TriAway Adapter\* und dem Endo-Eze 22 ga (0,7 mm ø) Tip ab. Fahren Sie 10 Sekunden lang mit vollem Luftdruck fort und verblasen Sie dann das Adhäsiv auf der koronalen Fläche.



9. Härten Sie das Adhäsiv 20 Sekunden mit Licht aus. In Gingivanähe mit einer VALO™ Polymerisationsleuchte zweimal 10 Sekunden lang oder 6 Sekunden im Xtra-Power-Modus lichterhärten.



10. Überprüfen Sie den Sitz des UniCore Stifts, bevor Sie Befestigungszement verwenden.



11. Bringen Sie den angemischten PermaFlo DC Zement in den Stiftkanal ein; beginnen Sie dabei apikal und bewegen Sie sich nach koronal.



12. Setzen Sie den Stift langsam bis zur gewünschten Tiefe ein.



13. PermaFlo DC Zement im Kanal 5 Sekunden lang kurz lichterhärten.



14. Bringen Sie PermaFlo DC Zement für den Stumpfaufbau um den Wurzelstift herum auf. Bauen Sie den Stumpf schichtweise auf und lichterhärten Sie jede Schicht für 10 Sekunden. Wenn der Zement wegfließt, zwischen den Schichten kurz lichterhärten. Bauen Sie den Stumpf schichtweise auf.

\* TriAway Adapter sind in der EU nicht erhältlich.





RACHEL NILSEN – Neffs Canyon

# FINISH

Einweg-Polierer  
Scheiben zum Konturieren und Finieren  
Original Komposit-Polierer-System  
Natural Komposit-Polierer-System  
Natural Universal Keramik-Polierer-System  
Universal Keramik-Polierer-System  
Polierbürsten  
Polierpaste  
Trocknungsmittel  
Finierstreifen  
Kompositversiegler



## Jiffy™ One


EINWEG-POLIERER



- Keine Aufbereitung der Polierer nötig
- Die speziell formulierte Diamantkörnung sorgt für den Glanz, den Sie und Ihre Patienten erwarten
- Kein Risiko für Kreuzkontaminationen
- Kein versehentliches Entsorgen mehrfach verwendbarer Polierer

### EINFACH, INTUITIV UND SICHER

Empfohlene Drehzahl: 3.000 – 8.000 U/min

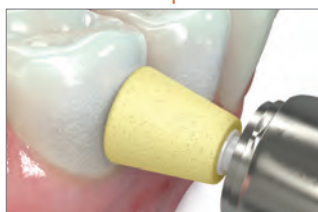

Polieren.



Entsorgen.



Schnell. Einfach. Schön.

**Für eine Politur in nur einem Schritt beginnen Sie mit den Polierern mit mittlerer Körnung. Mehr Glanz gefällig? Dann verwenden Sie zusätzlich die Polierer mit feiner Körnung.**

Erledigen Sie die Politur schnell und einfach in höchstens zwei Arbeitsschritten. Das Jiffy One System liefert schönen, natürlichen wirkenden Glanz und spart Zeit.



### Jiffy One Kelche, Scheiben, Spitzen 20 St.

|        | Kelche 20 St. | Scheiben 0 St. | Spitzen 20 St. |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| Medium | 7024          | 7026           | 7028           |
| Fine   | 7025          | 7027           | 7029           |



### 7030 – Jiffy One Einweg-Polierer Probepack

4 x Medium Yellow Kelche, 2 x Medium Yellow Scheiben,  
2 x Medium Yellow Spitzen  
4 x Fine White Kelche, 2 x Fine White Scheiben, 2 x Fine White Spitzen

## Jiffy™ Spin

SCHEIBEN ZUM KONTURIEREN UND FINIEREN  
VON KOMPOSITEN



- Ultradünne Scheiben – perfekt für das Konturieren und Finieren im Approximalbereich
- Die Komponenten des Jiffy-Systems ergänzen sich gegenseitig für glatte und ästhetisch ansprechende Restaurationen
- Für Kompositmaterialien geeignet
- Die Scheiben mit feiner, mittlerer und grober Körnung dienen zum Glätten und Finieren
- Extra grobe Diamantkörnung für schnelle Konturierung und grobe Entfernung
- Für ein perfektes Finish, das Patienten lieben

Empfohlene Drehzahl: 7.000 – 10.000 U/min

Die Jiffy Spin Scheiben zum Konturieren und Finieren sind eine hochwertige, schnelle und effiziente Lösung zum Konturieren und Finieren von Restaurationen. Anwender schätzen die Ergebnisse, die sich mit den Komponenten der Jiffy Produktfamilie erzielen lassen. Wer Wert auf eine besonders schnelle Politur liegt, sollte zu diesem Produkt greifen.



### 5570 – Jiffy Spin

#### 10 mm Shaping & Finishing Disk Kit

2 x Mandrell, 50 x Scheiben Extra-Coarse, 50 x Scheiben Coarse,  
50 x Scheiben Medium, 50 x Scheiben Fine



### 5571 – Jiffy Spin

#### 14 mm Shaping & Finishing Disk Kit

2 x Mandrell, 50 x Scheiben Extra-Coarse, 50 x Scheiben Coarse,  
50 x Scheiben Medium, 50 x Scheiben Fine



### 5581 – Jiffy Spin Mandrell 10 St.

### Jiffy Spin Scheiben zum Konturieren und Finieren 75 St.

| 75 St. | Extra-Coarse | Coarse | Medium | Fine |
|--------|--------------|--------|--------|------|
| 10 mm  | 5582         | 5572   | 5573   | 5574 |

| 75 St. | Extra-Coarse | Coarse | Medium | Fine |
|--------|--------------|--------|--------|------|
| 14 mm  | 5583         | 5576   | 5578   | 5579 |





**Jiffy™**

ORIGINAL KOMPOSIT-POLIERER-SYSTEM



- Die einzigartige Scheibenform ermöglicht Flexibilität im Arbeitsbereich
- Dank ihres speziellen dünnwandigen Designs und ihrer Flexibilität eignen sich diese Kelche ideal für Polieren nahe der Gingiva
- Mit oder ohne autoklavierbare Aluminiumblöcke erhältlich\*
- Die Jiffy-Körnung sorgt bei allen Komposit-Materialien für ein perfektes Finish
- Frei von Naturlatex



### 1. Konturieren bis Polieren

Verwenden Sie die grünen (groben) Jiffy Polierer, um Kompositen mit Überständen und leichten Unregelmäßigkeiten schnell Form zu geben. Verwenden Sie den gelben (mittleren) und dann den weißen (feinen) Jiffy Polierer zum Polieren.



### 2. Hochglanzpolitur

Verwenden Sie das blaue Jiffy HiShine System mit ultrafeiner Körnung als zusätzlichen Polierschritt für eine extraglatte und hochglanzpolierte Oberfläche.



### 3. Endgültiges Finish

Eine Polierbürste in Kombination mit Ultradent™ Diamond Polish Mint verleiht Restaurationen aus Komposit oder Keramik den letzten ästhetischen Feinschliff.



### 7010 – Jiffy Original Polierer-Sortiment 18 St.

6 x Jiffy WST Original Kelche (2 grob, 2 mittel, 2 fein)  
3 x Jiffy WST Original Scheiben (1 grob, 1 mittel, 1 fein)  
9 x Jiffy WST Original Spitzen (3 grob, 3 mittel, 3 fein)

### Jiffy Kelche, Scheiben, Spitzen 12 St.

|        | Kelche 12 St. | Scheiben 2 St. | Spitzen 12 St. |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| Coarse | 7011          | 7015           | 7019           |
| Medium | 7012          | 7016           | 7020           |
| Fine   | 7013          | 7017           | 7021           |

### Jiffy HiShine Kelche, Scheiben, Spitzen 10 St.

|         | Kelche 10 St. | Scheiben 10 St. | Spitzen 10 St. |
|---------|---------------|-----------------|----------------|
| HiShine | 7014          | 7018            | 7022           |

\* Ultradent empfiehlt die Verwendung eines Aluminiumblocks beim Autoklavieren, um Verzug und Verformung zu vermeiden. 1. realityesthetics.com.

## KONTURIERUNG UND FORMGEBUNG

Empfohlene Drehzahl: 3.000 – 8.000 U/min



Jiffy Coarse Green Kelch zur Formgebung von Höckern, labialen/bukkalen und zervikalen Oberflächen.




Jiffy Coarse Green Scheibe zur Formgebung labialer/bukkaler Oberflächen.



Jiffy Coarse Green Spitze zur Formgebung okklusaler und labialer/bukkaler Oberflächen.

## FINISH UND POLITUR

Empfohlene Drehzahl: 3.000 – 8.000 U/min

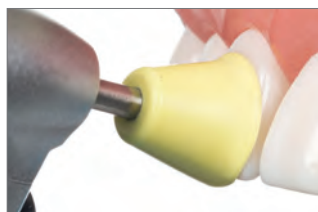

Jiffy Medium Yellow Kelch zum Polieren labialer/bukkaler Oberflächen.



Jiffy Medium Yellow Scheibe zum Polieren labialer/bukkaler Oberflächen.



Jiffy Medium Yellow Spitze zum Polieren okklusaler und labialer/bukkaler Oberflächen.

## POLITUR

Empfohlene Drehzahl: 3.000 – 8.000 U/min



Jiffy Fine White Kelch zum abschließenden Polieren auf Höckern und in labialen/bukkalen und zervikalen Bereichen.



Jiffy Fine White Scheibe zum abschließenden Polieren auf labialen/bukkalen Oberflächen.



Jiffy Fine White Spitze zum abschließenden Polieren auf okklusalen und labialen/bukkalen Oberflächen.

## ABSCHLIESSENDE HOCHGLANZPOLITUR

Empfohlene Drehzahl: 3.000 – 8.000 U/min



Verwenden Sie den Jiffy Ultrafine Blue HiShine Kelch als zusätzlichen Polierschritt für eine extraglatte und hochglanzpolierte Oberfläche auf Höckern und in labialen/bukkalen und zervikalen Bereichen.



Verwenden Sie die Jiffy Ultrafine Blue HiShine Scheibe als zusätzlichen Polierschritt für extraglatte und hochglanzpolierte labiale/bukkale Oberflächen.



Verwenden Sie die Jiffy Ultrafine Blue HiShine Spitze als zusätzlichen Polierschritt für extraglatte und hochglanzpolierte okklusale und labiale/bukkale Oberflächen.



## Jiffy™ Natural

KOMPOSIT-POLIERER-SYSTEM



- Ermöglicht es, den Glanz natürlichen Zahnschmelzes einfach nachzubilden
- Die speziell formulierte Ultradent Diamantkörnung sorgt bei allen Komposit-Materialien für ein perfektes Finish
- Ideal für die abschließende Bearbeitung des Mosaic™ Universalkomposit von Ultradent
- Mit oder ohne autoklavierbare Aluminiumblöcke erhältlich\*


Das Jiffy Natural System zum Finieren und Polieren von Kompositmaterialien besteht aus geschmeidigen, spiralförmigen Scheiben, die sich leicht an alle Zahnoberflächen anpassen, und einem wirbelförmigen Polierer, der ideal für okklusale Oberflächen geeignet ist.

Empfohlene Drehzahl: 5.000 – 8.000 U/min



Die Jiffy Natural Medium Yellow Scheiben eignen sich zum Polieren aller Bereiche mit Ausnahme der Oberflächen in der Nähe der Gingiva, wo ein Jiffy Medium Kelch verwendet werden sollte.

Empfohlene Drehzahl: 5.000 – 8.000 U/min

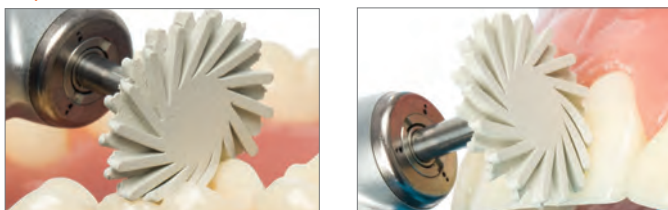

Die Jiffy Fine White Natural Scheiben eignen sich zum abschließenden Polieren aller Bereiche mit Ausnahme der Oberflächen in der Nähe der Gingiva, wo ein Jiffy Fine White Polierkelch verwendet werden sollte.



### 6384-1 – Jiffy Natural Composite Polishing Kit (Kunststoffblock)

2 x Jiffy Natural Polierscheiben (1 mittel, 1 fein)  
2 x Jiffy Natural Twirl (1 mittel, 1 fein)



### 6089-1 – Jiffy Natural WST Medium Spiral Polierscheibe 3 St.

6090-1 – Jiffy Natural WST Fine Spiral Polierscheibe 3 St.  
14 mm Scheiben

Hinweis: Die Jiffy Natural Universal Polierscheiben dürfen nicht zum intraoralen Polieren der labialen Oberfläche in der Nähe des Gingivarands verwendet werden. Dadurch könnte die Gingiva verletzt werden.



### 6305-1 – Jiffy Natural Occlusal Twirl Medium 3 St.

6306-1 – Jiffy Natural Occlusal Twirl Fine 3 St.

\* Ultradent empfiehlt die Verwendung eines Aluminiumblocks beim Autoklavieren, um Verzug und Verformung zu vermeiden. 1. realityesthetics.com.



## Jiffy™ Natural

UNIVERSAL KERAMIK-POLIERER-SYSTEM



- Natürliche Anpassung an alle Zahnoberflächen, einschließlich der okklusalen Anatomie
- Die speziell formulierte Ultradent Diamantkörnung ermöglicht eine effiziente Politur aller Keramikmaterialien, einschließlich Zirkonoxid
- Kann zur Auffrischung älterer prothetischer Versorgungen verwendet werden
- Optimierte zweistufige Poliersequenz

Das Jiffy Natural Universal Keramik-System besteht aus weichen spiralförmigen Scheiben, die sich leicht an die Zahnanatomie anpassen. Mit den biegsamen, fingerähnlichen Erweiterungen lassen sich auch Bereiche bearbeiten, die für Kelche und Spitzen unerreichbar sind, und extrem hochglänzende Flächen erhalten einen weichen Look, der dem Aussehen natürlichen Schmelzes ähnelt. Die Scheiben sind für den Einsatz in Kombination mit dem Jiffy Universal Keramik-System zum Anpassen und Polieren entwickelt, um allen Keramikrestaurationen auf einfache Weise ein natürliches, hochwertiges Finish zu verleihen. Die mit Diamantpartikeln imprägnierten Scheiben sind mit mittlerer und feiner Körnung erhältlich. Das effiziente zweistufige Verfahren ermöglicht es, allen Keramikmaterialien – einschließlich Zirkonoxid, Lithiumdisilikat und Feldspat – auf einfache Weise ein bislang unerreichbares natürliches Finish zu verleihen.

### KERAMIKPOLITUR

Empfohlene Drehzahl: 5.000 – 8.000 U/min



Die Jiffy Natural Universal WST Medium 14 mm Scheibe zum Vorpolieren aller Bereiche mit Ausnahme der Oberflächen in der Nähe der Gingiva verwenden, wo ein Jiffy RA Medium Universal Kelch verwendet werden sollte.



Die Jiffy Natural Universal WST Fine 14 mm Scheibe zum abschließenden Polieren aller Bereiche mit Ausnahme der Oberflächen in der Nähe der Gingiva verwenden, wo ein Jiffy Fine Universal Kelch verwendet werden sollte.

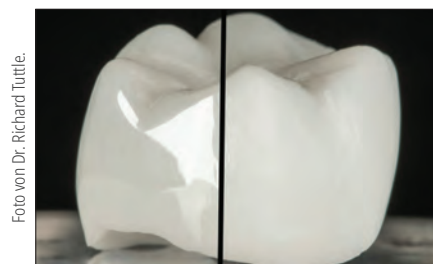


Foto von Dr. Richard Tuttle.

Ästhetisch ansprechendes, glattes Finish einer vollanatomischen Zirkonoxidkrone nach nur wenigen Minuten Bearbeitung mit dem Jiffy Universal Keramik-System zum Anpassen und Polieren und dem Jiffy Natural Universal Keramik-Polierer-System.

**HINWEIS:** Die Jiffy Natural Universal Polierscheiben dürfen nicht zum intraoralen Polieren der labialen Oberfläche in der Nähe des Gingivarands verwendet werden. Dadurch könnte die Gingiva verletzt werden.



### 6082-1 – Jiffy Natural Universal WST Polierscheiben Sortiment 6 St.

je 3 x Jiffy WST Medium und Fine Natural Universal 14 mm Polierscheiben



### 6083-1 – Jiffy Natural Universal WST Medium Spiral Polierscheibe 3 St.

14 mm Scheiben



### 6084-1 – Jiffy Natural Universal WST Fine Spiral Polierscheibe 3 St.

14 mm Scheiben




**Jiffy™**

UNIVERSAL KERAMIK-  
SYSTEM ZUM KONTURIEREN UND POLIEREN



- Die Verwendung von Jiffy Universal bei allen Keramikmaterialien macht den Einsatz mehrerer Finierer und Polierer überflüssig, was Zeit und Geld spart
- Die speziell formulierte Ultradent Diamantkörnung sorgt für optimale Glätte und hervorragende Poliererergebnisse und schont gleichzeitig alle verarbeiteten Keramikmaterialien, einschließlich Zirkonoxid
- Die Diamantpartikel unterschiedlicher Körnung ermöglichen die effektive Bearbeitung von Keramik für eine wirklich glatte und hochglänzende Oberfläche<sup>2</sup>
- Optimierte zweistufige Sequenz zum Konturieren und Polieren
- Maximale Diamantbindung sorgt für eine lange Lebensdauer
- Autoklavierbarer Aluminiumblock verlängert die Lebensdauer des Systems

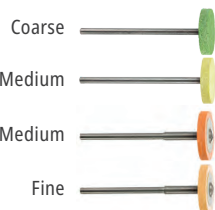

### Extraoral Kit für grobe Konturierung und zum Polieren

Verwenden Sie zum Bearbeiten von Keramiken die grünen (groben) und gelben (mittleren) Jiffy Schleifer und Kegel. Die orangefarbenen Universal Scheiben und die Natural Scheiben werden zum Polieren verwendet.



### Intraoral Kit für kleinere Ausarbeitung und zum Polieren

Verwenden Sie die dunkleren orangefarbenen Spitzen, Kelche und Natural Scheiben mit mittlerer Körnung für die Vorpoltur und die helleren orangefarbenen Polierer für die finale Politur.

### Endgültiges Finish


Eine Polierbürste in Kombination mit Ultradent™ Diamond Polish Mint verleiht Keramikrestaurationen den letzten ästhetischen Feinschliff.




## EXTRAORALE AUSARBEITUNG

- Leichten Druck mit der Hand ausüben
- Grobe Diamantinstrumente und herkömmliche Schleifsteine können starke Hitze erzeugen, die die Ursache von Mikrofrakturen ist. Sie werden daher nicht empfohlen.

Empfohlene Drehzahl: 8.000 – 12.000 U/min

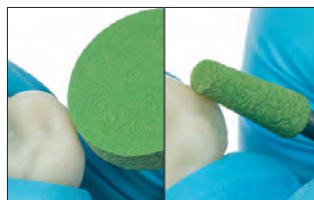

Jiffy Universal Coarse Schleifer (grün) werden zum Abschleifen von Gusskanälen und zur groben Konturierung empfohlen.

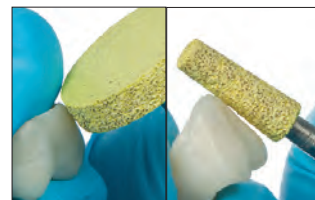


Jiffy Universal Medium Schleifer (gelb) dienen zur Konturierung von Lithiumdisilikat, Zirkonoxid und Feldspatkeramik.

## EXTRAORALE VOR- UND HOCHGLANZPOLITUR

- Leichten Druck mit der Hand ausüben
- Mit jedem Polierschritt die Geschwindigkeit reduzieren, um eine ultraglatte Oberfläche zu erzielen

Empfohlene Drehzahl: 7.000 – 10.000 U/min

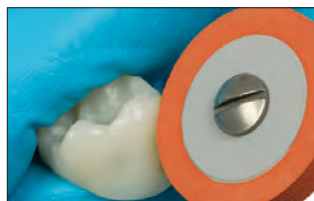

1. Jiffy HST Medium Universal Scheibe zum Vorpolieren verwenden.




2. Jiffy HST Fine Universal Scheibe zur abschließenden Politur verwenden.


## INTRAORALE VOR- UND HOCHGLANZPOLITUR

- Leichten Druck mit der Hand ausüben
- Mit jedem Polierschritt die Geschwindigkeit reduzieren, um eine ultraglatte Oberfläche zu erzielen




Empfohlene Drehzahl: 5.000 – 7.000 U/min

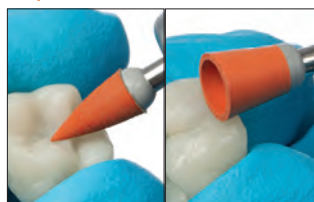

1. Jiffy Universal WST Medium Spitze und Kelch zum Vorpolieren verwenden.

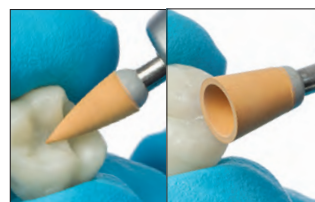

2. Jiffy Universal WST Fine Spitze und Kelch zur abschließenden Politur verwenden.

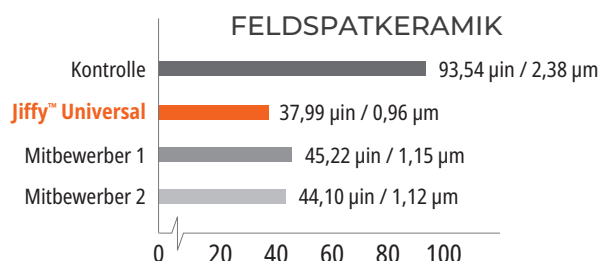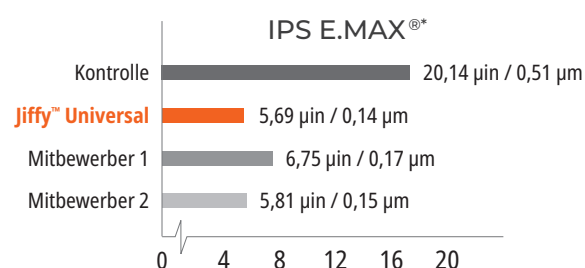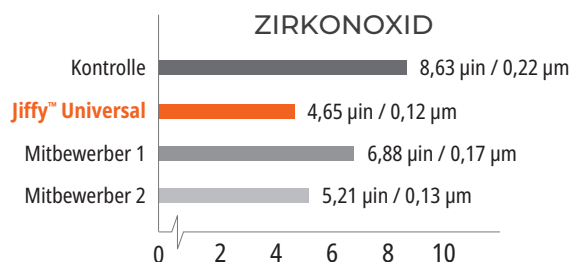OBERFLÄCHENRAUIGKEIT ( $\mu\text{in}/\mu\text{m}$ )<sup>3</sup>
**4018-1 – Jiffy Universal Extraoral Adjusting & Polishing Kit (Aluminiumblock)**

2 x Jiffy HST Schleifscheiben (1 grob, 1 mittel)  
 2 x Jiffy HST Schleifkegel (1 grob, 1 mittel)  
 2 x Jiffy HST Universal Scheiben (1 mittel, 1 fein)


**4238-1 – Jiffy HST Coarse Konturierscheibe 1 St.**
**4241-1 – Jiffy HST Medium Konturierscheibe 1 St.**

**4239-1 – Jiffy HST Coarse Konturierkegel 1 St.**
**4242-1 – Jiffy HST Medium Konturierkegel 1 St.**

**4236-1 – Jiffy HST Medium Polierscheibe 1 St.**
**4237-1 – Jiffy HST Fine Polierscheibe 1 St.**

**4108-1 – Jiffy WST Medium Polierspitze 5 St.**
**4109-1 – Jiffy WST Fine Polierspitze 5 St.**

**4234-1 – Jiffy WST Medium Polierkelch 5 St.**
**4235-1 – Jiffy WST Fine Polierkelch 5 St.**

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. 1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage.  
 3. Daten liegen vor, auf Anfrage.





## Jiffy™ Komposit-Polierbürsten

KELCHE UND SPITZEN



Jede einzelne Borste ist ein Polierinstrument. Die Spezialfasern sind mit einer abrasiven Siliziumkarbid-Beschichtung versehen.

Leicht erkennbar am vergoldeten Schaft.



- Jede Borste enthält Tausende von Siliziumkarbid-Partikeln
- Erreicht und poliert okklusale Fissuren aus Komposit und Keramik
- Zur Kompositpolitur mit untersetztem Winkelstück, mit festem Druck und hoher Drehzahl die Oberfläche mit einer peitschender Bewegung polieren

Empfohlene Drehzahl: 1.000 – 3.000 U/min



Verwenden Sie Jiffy Komposit-Polierbürsten, um alle Oberflächen zu finieren. Optimale Ergebnisse werden erreicht, wenn beim Polieren Druck ausgeübt wird.



850 – Jiffy WST Polierkelch **10 St.**  
1009 – Jiffy WST Polierspitze **10 St.**

## Ultradent™ Diamond Polish **Mint**



Black Mini™ Tip

- Hochreine, weiße mikrokristalline Diamantpartikel
- Unübertroffener ästhetischer Hochglanz
- Ideal für Keramik- oder Kompositrestaurationen



5540 – Diamond Polish **Mint** Refill 0,5 µm  
5541 – Diamond Polish **Mint** Refill 1 µm  
2 x 1,2 ml (1,40 g) Spritzen

## PrimaDry™

TROCKNUNGSMITTEL



Black Micro™ FX™ Tip

Das Trocknungsmittel PrimaDry eignet sich optimal für die Trocknung von Grübchen und Fissuren vor dem Einbringen hydrophober Fissurenversiegler. Es enthält 99 % organische Lösungsmittel und 1 % Primer. Das Trocknungsmittel PrimaDry entfernt nach dem Absprayen des Ätzmittels mit Wasser und der Lufttrocknung schnell die Feuchtigkeit aus Grübchen und Fissuren. Der hauchfeine Primerfilm ermöglicht es dem UltraSeal XT plus Fissurenversiegler, perfekt in jede Fissur einzufliessen.

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



716 – PrimaDry **Spritze** Refill  
4 x 1,2 ml (0,95 g) Spritzen



## Jiffy™ Diamantstreifen



Diese Finierstreifen sind flexibel, haltbar, dünn und aggressiver als Aluminiumoxidstreifen. Das gelochte Design sorgt für bessere Sichtbarkeit und ermöglicht eine präzisere Konturierung. Erhältlich in zwei Ausführungen: breit und schmal.



**4670 – Jiffy Gelochte Diamantstreifen**

*Schmal sortiert 15 St.*

**4674 – Jiffy Gelochte Diamantstreifen**

*Breit sortiert 15 St.*

*je 5 x galvanisch beschichtete Diamantstreifen aus Edelstahl (5 mittel, 5 fein und 5 extrafein)*



**4671 – Jiffy Gelochte Diamantstreifen** *Schmal Medium 10 St.*

**4683 – Jiffy Gelochte Diamantstreifen** *Breit Medium 10 St.*

*10 x galvanisch beschichtete Diamantstreifen aus Edelstahl*



**4672 – Jiffy Gelochte Diamantstreifen** *Schmal Fine 10 St.*

*10 x galvanisch beschichtete Diamantstreifen aus Edelstahl*

## Jiffy™ Approximalsäge

Bei der Jiffy Approximalsäge handelt es sich um sehr dünne Edelstahlstreifen, die an einer Kante mit Zacken versehen sind. Die Sterilisation der Approximalsäge kann im Autoklav erfolgen.



**4680 – Jiffy Approximalsäge Edelstahl 10 St.**


*10 x Bandsäge Edelstahl*



the  
**ULTRADENT**  
PRODUCTS *blog*

## BETTER DENTISTRY THROUGH KNOWLEDGE

Besuchen Sie den Ultradent Products-Blog, um spannende Einblicke in die Welt der Zahnmedizin zu erhalten.

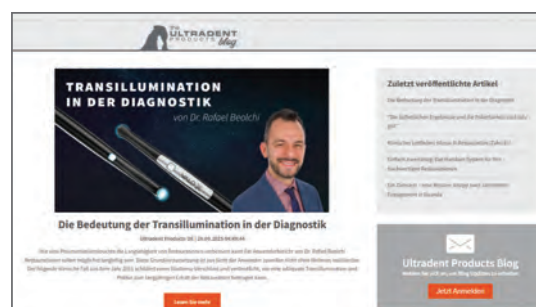

Den QR-Code scannen, um den Ultradent Products Blog zu besuchen

**PermaSeal™**

KOMPOSITVERSIEGLER



Black Micro™ FX™ Tip

- Haftet an Komposit und angeätztem Schmelz
- Versiegelt Mikrorisse
- Schützt Kompositfüllungen und frischt sie auf

Der Kompositversiegler PermaSeal ist ein lichthärtender, ungefüllter Kunststoff auf Methacrylatbasis. Seine niedrige Viskosität ermöglicht ein intensives Penetrieren, und die ultradünne Schicht macht okklusale Korrekturen meist überflüssig.

PermaSeal versiegelt während der Politur entstandene Hohlräume und Unebenheiten, wodurch Verfärbung und Abnutzung minimiert werden. Auf Kompositränder bei Klasse-V-Restaurationen appliziert, reduziert der Versiegler Mikroleakage.<sup>2</sup> PermaSeal Kompositversiegler haftet gut an provisorischen Materialien auf Komposit-Basis und kann auch zur Auffrischung älterer Komposite verwendet werden.

**NEUE RESTAURATIONEN**

Vorher: Zahnzwischenräume und leichte Zahnrotationen sollen mit Peak™ Universal Bond Adhäsiv und Komposit korrigiert werden.



Nach der Restauration und Politur 5 Sekunden ätzen, spülen und trocknen; dann PermaSeal applizieren, um das Komposit zu versiegeln und ein glänzendes Ergebnis zu erzielen. Verblasen und 10 Sekunden lichthärten.

**VORHANDENE RESTAURATIONEN**

Foto von Dr. Brett Richins.

Zu versiegelnde Oberflächen und Ränder mit einer antibakteriellen Paste oder einem Sandstrahler reinigen oder mit einem Diamantschleifer auffrischen. Gründlich abspülen. Unmittelbar an die Restauration angrenzenden Schmelz und alle zugänglichen Kompositoberflächen 15 Sekunden ätzen. Wenn der Schmelz nicht wie oben beschrieben vorbereitet wird, 30 Sekunden ätzen. Anschließend PermaSeal Kompositversiegler auftragen.



Restauration unmittelbar nach der Applikation von PermaSeal Kompositversiegler



Oberfläche des Provisoriums glätten. 5 Sekunden ätzen, PermaSeal Versiegler auf die Oberflächen applizieren, sanft verblasen und 10 Sekunden lichthärten.

**IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN**

**631 – PermaSeal Kit**  
4 x 1,2 ml (1,30 g) Spritzen  
10 x Black Micro FX Tips

**IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN**

**1013 – PermaSeal Mini Kit**  
2 x 1,2 ml (1,30 g) Spritzen  
10 x Black Micro FX Tips

**Hinweis:** Vor dem Auftragen von PermaSeal Kompositversiegler lässt sich die Oberfläche mit PrimaDry Trocknungsmittel optimal trocknen.

1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage.





MELISSA AXEN – Left Fork Subway Entrance

# GERÄTE

Polymerisationsleuchten-Zubehör  
LED-Polymerisationsleuchte  
Diodenlaser  
Schutzbrillen  
Scheren





## VALO™ Produktfamilie

### LED POLYMERISATIONSLEUCHTEN



Beste LED-Polymerisationsleuchte

Reality Five Star Award, 13-facher Gewinner (2012 – 2024)

Cellerant Best of Class, Technology Award, 6-facher Gewinner (2012 – 2015, 2017, 2019)

Dentistry Today Top 50 Technology Products, Readers' Choice Award, 5-facher Gewinner (2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2024)

Dentistry Today Top 25 Aesthetic/Restorative Products, Readers' Choice Award, 4-facher Gewinner (2020 – 2023)

Dental Townie Choice Awards, 10-facher Gewinner (2014 – 2017, 2019 – 2024)

Dental Townie Choice Award "Best New Product", 2-facher Gewinner (VALO Grand 2022, VALO X 2023)



VALO X, 10 Sek., transp. Farbe



Mitbewerber, 10 Sek., transp. Farbe



Mitbewerber, 10 Sek., transp. Farbe



Mitbewerber, 10 Sek., transp. Farbe




Mitbewerber, 3 Sek., transp. Farbe



Mitbewerber, 1 Sek., transp. Farbe

Die multiplen LEDs und die spezielle Optik der VALO Polymerisationsleuchten erzeugen gleichmäßig verteilte Leistung, die gleichbleibend gute Ergebnisse ermöglicht – egal, um welchen Typ von Restauration es sich handelt, welche Größe diese hat und wo sie sich befindet. Durch den speziellen LED-Satz mit Chips in drei Wellenlängen kann die VALO Polymerisationsleuchte alle Dentalmaterialien aushärten – auch solche, die proprietäre Photoinitiatoren wie Lucirin TPO, PPD oder das allgemein übliche Kampherchinon enthalten.

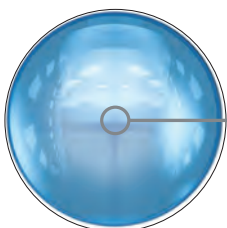

Das einzigartige Glaslinsensystem formt den gebündelten, gemischten Lichtstrahl der VALO Polymerisationsleuchte

VALO X

VALO GRAND

VALO

#### Originalgröße der Linse

12,5 mm



(123 mm<sup>2</sup>)

11,7 mm




(108 mm<sup>2</sup>)

9,7 mm




(74 mm<sup>2</sup>)


#### LED-Chips

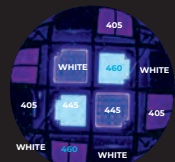

12 LEDs

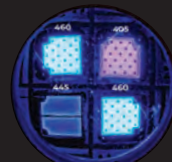


4 LEDs

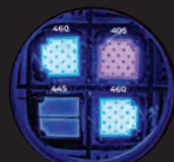


4 LEDs

#### Wellenlänge


380 nm–515 nm

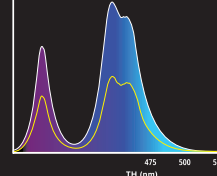

385 nm–515 nm

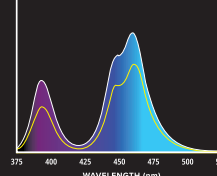

385 nm–515 nm

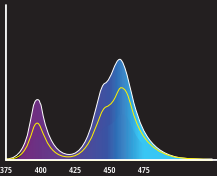

#### Leistung (mW)

1350

STANDARD

2700  
XTRA POWER

970

STANDARD

2260  
XTRA POWER

670

STANDARD

1570  
XTRA POWER

#### Bestrahlungsstärke (mW/cm<sup>2</sup>)

1100

STANDARD

2200  
XTRA POWER

900

STANDARD

2100  
XTRA POWER

900

STANDARD

2100  
XTRA POWER

#### Joules (J)

13,5  
STANDARD

13,5  
XTRA POWER




9,7  
STANDARD

6,8  
XTRA POWER



6,7  
STANDARD

4,7  
XTRA POWER

#### Strahlprofil

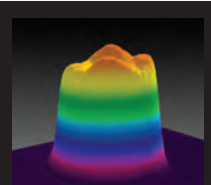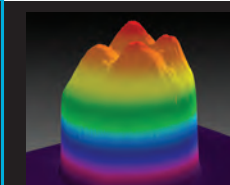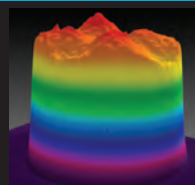

#### 12 mm Molarenabdeckung

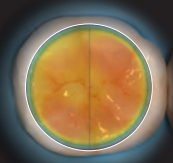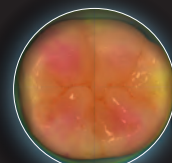

1. realityesthetics.com.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.




### LEISTUNGSSTARK

Die Bündelung des Strahls einer Polymerisationslampe wirkt sich auf die Energiemenge aus, die den Ort der Restauration erreicht. Ein gestreuter Strahl würde weniger Leistung liefern als ein Strahl, der gebündelt bleibt, sowie zu nicht richtig ausgehärteten Restaurationen und schließlich zum Versagen führen. Ein Strahl mit leistungsreichen und leistungsarmen Bereichen führt zu ungleichmäßiger Aushärtung, die Restaurationen beeinträchtigen und Empfindlichkeit bewirken kann.

### LANGLEBIGKEIT

Die langlebige VALO Polymerisationsleuchte wird aus massiven Stäben aus hochreinem Aluminium aus der Luftfahrttechnik hergestellt. Deshalb ist sie praktisch unverwüstlich. Die einteilige Konstruktion der VALO Polymerisationsleuchte gewährleistet Haltbarkeit und sorgt dafür, dass es keine anfälligen Verbindungspunkte gibt. Dadurch widerstehen sie selbst starker Beanspruchung. Weiterhin sorgt die Konstruktion für ausgezeichnete Hitze-Ableitung. Das elegante, ergonomische und schlanke Design ermöglicht der VALO Polymerisationsleuchte Zugang zu Mundregionen, die andere Polymerisationsleuchten einfach nicht erreichen können.

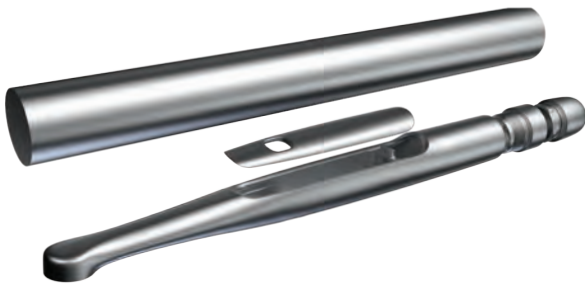


### 5-JÄHRIGE HERSTELLERGARANTIE

Da unser Herstellungsprozess strengste Qualitätsanforderungen erfüllt, stehen wir uneingeschränkt hinter der kompromisslosen Qualität der VALO-Polymerisationsleuchte.

Alle VALO Leuchten sind mit einer 5-jährigen Herstellergarantie ausgestattet, sodass Sie darauf vertrauen können, dass sich Ihre Investition wirklich lohnt.


### DIREKTER ZUGANG

Dank ihres schlanken Designs erreichen Sie mit den VALO Polymerisationsleuchten auch Restaurationen im Seitenzahnbereich, ohne dass Sie Abstriche beim Patientenkomfort machen müssen.<sup>1</sup> Der flache Kopf ermöglicht es Ihnen, die Leuchten direkt über den zu härtenden Bereich zu platzieren, unabhängig davon, wo im Mund sich dieser befindet. So ist sichergestellt, dass das Licht die gesamte Präparation erreicht. Und mit den größeren Linsen wird der Polymerisationsbereich noch einmal vergrößert, sodass der Zugang überall gewährleistet ist.

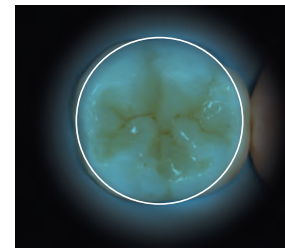


VALO X Polymerisationsleuchte  
Durchmesser und Oberfläche

12,5 mm und 123 mm<sup>2</sup>

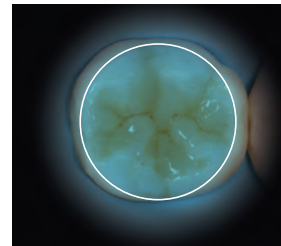

VALO Grand Polymerisationsleuchte  
Durchmesser und Oberfläche

11,7 mm und 108 mm<sup>2</sup>

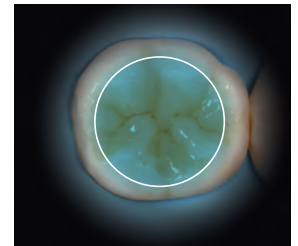

VALO Polymerisationsleuchte  
Durchmesser und Oberfläche

9,7 mm und 74 mm<sup>2</sup>

### DISTALER ZUGANG




**MITBEWERBER:** Ein um 60° abgewinkelter Lichtleiter eines Mitbewerbers führt zu extremen Mundöffnungen und macht es häufig unmöglich, mit der Leuchte alle Bereiche der Präparation zu erreichen.




Der schlanke Kopf der VALO Polymerisationsleuchte ermöglicht einen einfachen und direkten Zugang zu allen Stellen im Mund.

### ZUGANG MIT MATRIZE

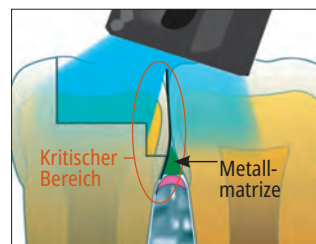

Auf eine Restauration mit einem Matrizenband im Winkel einfallendes Licht kann zu einer unzureichenden Aushärtung führen.

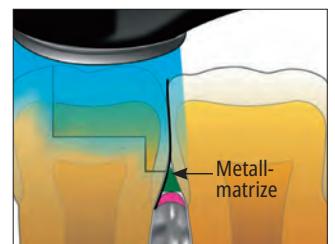

Der direkte Zugang der VALO Polymerisationsleuchte und ein gebündelter Lichtstrahl führen zu vollständiger Polymerisation.

<sup>1</sup> Moreira RJ, de Deus RA, Ribeiro MTH, et al. Effect of light-curing unit design and mouth opening on the polymerization of bulk-fill resin-based composite restorations in molars. J Adhes Dent. 2021;23(2):121-131. doi:10.3290/jjad.b1079561.





## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                                           | VALO X                    | VALO Grand                | VALO                      |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Wellenlängen-Spektrum (nm)</b>         | 380 nm–515 nm             | 385 nm–515 nm             | 385 nm–515 nm             |
| <b>Leistungsspitzen-Wellenlängen (nm)</b> | 380–420 nm und 420–515 nm | 395–415 nm und 440–480 nm | 395–415 nm und 440–480 nm |
| <b>Leistung (mW)</b>                      |                           |                           |                           |
| <b>Standard</b>                           | 1350 mW                   | 970 mW                    | 670 mW                    |
| <b>High Power</b>                         | entfällt                  | 1620 mW                   | 970 mW                    |
| <b>Xtra Power</b>                         | 2700 mW                   | 2260 mW                   | 1570 mW                   |
| <b>Bestrahlungsstärke* (mW/cm²)</b>       |                           |                           |                           |
| <b>Standard</b>                           | 1100 mW/cm²               | 900 mW/cm²                | 900 mW/cm²                |
| <b>High Power</b>                         | entfällt                  | 1500 mW/cm²               | 1300 mW/cm²               |
| <b>Xtra Power</b>                         | 2200 mW/cm²               | 2100 mW/cm²               | 2100 mW/cm²               |
| <b>Gesamtenergie pro Zyklus (Joule)</b>   |                           |                           |                           |
| <b>Standard</b>                           | 13,5 J (10 Sekunden)      | 9,70 J (10 Sekunden)      | 6,65 J (10 Sekunden)      |
| <b>High Power</b>                         | entfällt                  | 6,46 J (4 Sekunden)       | 3,83 J (4 Sekunden)       |
| <b>Xtra Power</b>                         | 13,5 J (5 Sekunden)       | 6,30 J (3 Sekunden)       | 4,65 J (3 Sekunden)       |
| <b>Polymerisationsmodi</b>                |                           |                           |                           |
| <b>Standard</b>                           | 10 Sek.                   | 20/15/10/5 Sek.           | 20/15/10/5 Sek.           |
| <b>High Power</b>                         | entfällt                  | 1/2/3/4 Sek.              | 1/2/3/4 Sek.              |
| <b>Xtra Power</b>                         | 5 Sek.                    | 3 Sek.                    | 3 Sek.                    |

|                              | VALO X                                                                         | VALO Grand                                                                          | VALO                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abmessungen</b>           |                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Durchmesser der Linse</b> | 12,5 mm                                                                        | 11,7 mm                                                                             | 9,75 mm                                                                             |
| <b>Cordless</b>              | 22,6 x 2,1 x 2,1 cm (8,9 x 0,83 x 0,83 in)                                     | 20,3 x 3,3 x 2,7 cm (8 x 1,28 x 1,06 in)                                            | 20,3 x 3,3 x 2,7 cm (8 x 1,28 x 1,06 in)                                            |
| <b>Corded</b>                | 22,6 x 2,1 x 2,1 cm (8,9 x 0,83 x 0,83 in)<br>Kabellänge: 1,80 m (6 ft)        | 23,5 x 2 x 2 cm (9,26 x 0,79 x 0,79 in)<br>Kabellänge: 1,80 m (6 ft)                | 23,5 x 2 x 2 cm (9,26 x 0,79 x 0,79 in)<br>Kabellänge: 1,80 m (6 ft)                |
| <b>Gewicht Leuchte</b>       |                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Cordless</b>              | Gerät: 108 g (3,8 oz)<br>Mit Batterien: 136 g (4,8 oz)                         | Gerät: 150 g (5,3 oz)<br>Mit Batterien: 190 g (6,7 oz)                              | Gerät: 150 g (5,3 oz)<br>Mit Batterien: 190 g (6,7 oz)                              |
| <b>Corded</b>                | Corded: 158 g (5,6 oz)                                                         | Gerät: 226 g (8 oz)                                                                 | Gerät: 226 g (8 oz)                                                                 |
| <b>Stromversorgung</b>       | Kabellos/mit Batterie oder kabelgebunden                                       | Kabellos/Gerät mit Batterie<br>Kabelgebundenes Gerät                                | Kabellos/Gerät mit Batterie<br>Kabelgebundenes Gerät                                |
| <b>Akku</b>                  | Geschützte, aufladbare Lithium-Ionen-Batterie 1IMR14/65 3,7 V, 900 mAh 3,33 Wh | Aufladbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) RCR123A, 3,2 V, 400 mAh 1,28 Wh | Aufladbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) RCR123A, 3,2 V, 400 mAh 1,28 Wh |

\* Bestrahlungsstärke bei Messung entsprechend ISO 10650 mit einem Gigahertz-Spektralanalysator.




## RESTORATIVE SOLUTION

## Das Rundum-System für Ihre HOCHWERTIGEN RESTAURATIONEN

## VALO™ X Polymerisationsleuchte

Die Systemlösung für Restaurationen von Ultradent Products kombiniert einige unserer beliebtesten Produkte – für langlebige und ästhetische Restaurationen.

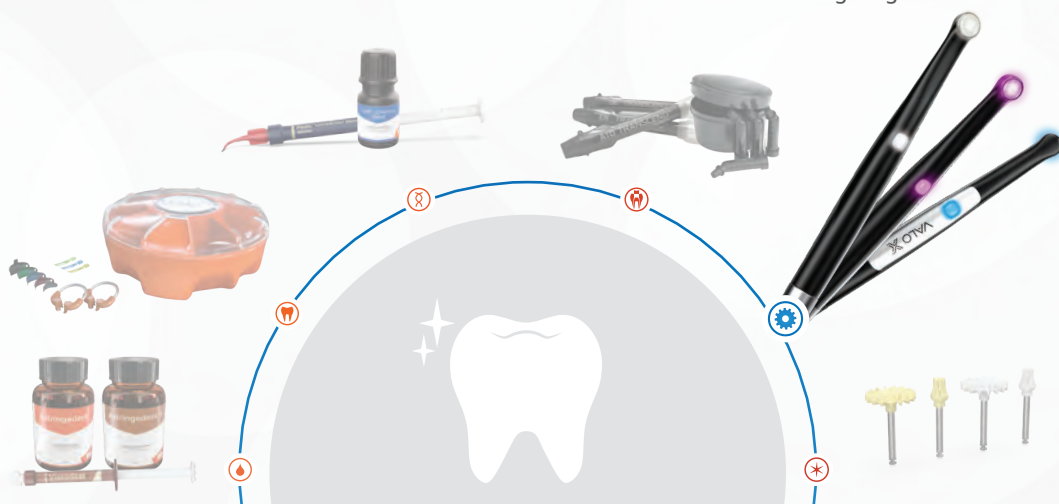



## VALO™ X Betriebsmodi

| VORDERSEITE | RÜCKSEITE | TASTENANZEIGE | STATUS ODER FUNKTION              |
|-------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
|             |           |               | STANDARD POWER MODUS              |
|             |           |               | XTRA POWER – DREIFACHIMPULS-MODUS |
|             |           |               | WEISSLICHT-DIAGNOSEMODUS          |
|             |           |               | SCHWARZLICHT-DIAGNOSEMODUS        |

Vor Verwendung stets die Gebrauchsanweisung lesen.

## DURCH DIE MODI SCHALTEN

### BEWEGUNG



#### ANTIPPEN

Die Leuchte mit einer schnellen Bewegung nach vorne führen, um zwischen 2 Polymerisationsmodi zu wechseln



#### WELLE

Die Leuchte mit einer schnellen Bewegung zur Seite führen, um zwischen 2 Diagnosemodi zu wechseln

### TASTENDRUCK



#### OBERE TASTE

Um von den Diagnosemodi zu den Polymerisationsmodi zu wechseln, die obere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.



#### UNTERE TASTE

Um von den Polymerisationsmodi zu den Diagnosemodi zu wechseln, die untere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.

## TASTENANZEIGE

| TASTENANZEIGE | STATUS ODER FUNKTION                     |
|---------------|------------------------------------------|
|               | Standard Power Modus                     |
|               | Xtra Power – Dreifachimpuls-Modus        |
|               | Weißlicht-Diagnosemodus                  |
|               | Schwarzlicht-Diagnosemodus               |
|               | Ruhemodus                                |
|               | Aktiver Modus; Leuchte in Betrieb        |
|               | Niedriger Ladestand / aufladen           |
|               | Akku entladen                            |
|               | Vorübergehender LED-Übertemperaturschutz |

## VALO™ Grand und VALO™ Betriebsmodi

| CORDED | CORDLESS | STANDARD POWER | HIGH POWER PLUS | XTRA POWER |
|--------|----------|----------------|-----------------|------------|
|        |          |                |                 |            |

Vor Verwendung stets die Gebrauchsanweisung lesen.



# VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT

## NEUE FARBEN

- Bringen Sie Ihren persönlichen Stil mit einer eleganten, zeitlosen Farbe in Ihre Praxis.

## HOCHWERTIGES ALUMINIUM AUS DER LUFT- UND RAUMFAHRT

- Besonders haltbare einteilige Konstruktion für herausragendes Thermomanagement

## GRÖßERE LINSE

- Die 12,5 mm Linse deckt alle Zähne ab, gewährleistet dabei jedoch Zugänglichkeit und Patientenkomfort

## BESCHLEUNIGUNGSSENSOR

- Ermöglicht schnelles und leichtes Wechseln zwischen Polymerisations- und Diagnosemodi

## VEREINFACHTES HANDLING

- Anzeige, Bedienung und Aktivierung der Polymerisations- und Diagnosemodi mithilfe der Tasten an der Geräteober- und -unterseite oder über den Beschleunigungssensor

## CHIPSET MIT 12 LEDS

- Liefert ein hochintensives, breitbandiges Licht für einen optimal gebündelten Lichtstrahl mit gleichmäßiger Aushärtungstiefe

## MEHRERE KONFIGURATIONEN

- Kabelgebundene oder kabellose Verwendung

## 5 JAHRE GARANTIE

- Mit 5-jähriger Herstellergarantie

**POLYMERISATIONSMODI:** Standard Power Mode, Xtra Power Mode

**DIAGNOSEMODI:** Diagnosemodus mit weißem Licht, Diagnosemodus mit Schwarzlicht

### EINSTELLUNG DER MODI



#### POLYMERISATIONSMODI:

Die VALO X Polymerisationsleuchte mit einer schnellen Bewegung nach vorne führen, um zwischen den Polymerisationsmodi zu wechseln.



#### DIAGNOSEMODI:

Die VALO X Polymerisationsleuchte mit einer schnellen Bewegung zur Seite führen, um zwischen den Diagnosemodi zu wechseln.

### ZUSÄTZLICHE LINSEN

#### ZWEI POLYMERISATIONSLINSEN



ProxiCure™ Ball Lens

**5889**



PointCure™ Lens

**5890**



TransLume™ Lens

**5891**



Diffuser Lens

**5892**



Interproximal Lens

**5893**

# SECHS NEUE FARBEN

# UNVERÄNDERT STARKE

# LEISTUNG





## VALO™ X

LED-POLYMERISATIONSLEUCHTE

Größere  
Linse  
(12,5 mm)Scannen Sie den QR-Code  
für weitere Informationen zur VALO X Leuchte.

- Zwölf Breitband-LEDs mit extrem hoher Lichtenergie härten alle lichthärtenden Dentalmaterialien aus
- Der optimal gebündelte Lichtstrahl bewirkt eine gleichbleibende, gleichmäßige Leistung
- Die beiden Polymerisations-Modi – Standard und Xtra-Power – werden Ihren Anforderungen gerecht
- Extrem haltbare Bauweise: Die einteilige Konstruktion besteht aus Aluminium für die Luftfahrttechnik und ermöglicht ein herausragendes Thermomanagement
- Vereinfachte Bedienung mit Polymerisations- und Diagnosemodi
- Schlankes einteiliges Design und ergonomische Form ermöglichen hervorragenden Zugang zu allen Zähnen und ihren Flächen<sup>1</sup>
- Dank der Bedienung mit einem Beschleunigungssensor kann mit einer schnellen Bewegung rasch zwischen den Modi gewechselt werden
- Die zweite Polymerisationstaste auf der Unterseite ermöglicht eine intuitive Bedienung
- Im Kit sind fünf zusätzliche Linsen für Polymerisation und Diagnose enthalten
- Der mitgelieferte Adapter ermöglicht es den Anwendern, die Leuchte im Akku- oder Netzbetrieb zu verwenden
- Das Netzteil (internationaler Standard) eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt

1. Moreira RJ, de Deus RA, Ribeiro MTH, et al. Effect of light-curing unit design and mouth opening on the polymerization of bulk-fill resin-based composite restorations in molars. J Adhes Dent. 2021;23(2):121-131. doi:10.3290/j.jad.b1079561.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

Hinweis: Für Support- oder Serviceanfragen zu Ihrem VALO Produkt wenden Sie sich bitte an Ihre:n Fachberater:in von Ultradent Products.

Mit der VALO X wurde das Konzept der Polymerisationsleuchte neu gedacht. Ihr vereinfachtes Design ermöglicht die Aktivierung mit nur einer Taste, und dank des Beschleunigungssensors können die Anwender durch schnelle Bewegung der Leuchte zwischen dem Polymerisations- und dem Diagnosemodus wechseln. Dies verhindert umständliches Hantieren mitten in der Behandlung und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass die Leuchte fallen gelassen wird. Die Anwender können sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren. Die Leuchte verwendet eine spezielle lichtemittierende Diode (LED) mit unterschiedlichen Wellenlängen für die Abgabe von hochintensivem Licht bei 380 – 515 nm, das alle lichthärtenden Dentalmaterialien polymerisieren kann und dabei eine hervorragende Aushärtungstiefe und gleichbleibende Leistung bietet. Die hohe Leistung durchdringt auch Keramik und ist in der Lage, darunter liegende Kunststoffzemente auszuhärten. Die Leuchte kann in einen freien Köcher des Behandlungsgerätes oder in einen selbstklebenden Handstückhalter gesteckt werden.



## 5973 – VALO X Kit

- 1 x VALO X LED-Polymerisationsleuchte
- 5 x Linsen
- 2 x aufladbare Batterien
- 1 x Batterieladegerät
- 1 x Netzteil (für Batterieladegerät oder Kabeladapter)
- 1 x Kabeladapter
- 1 x Handstückhalter
- 1 x Light Shield
- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen

neu

## 6538 – VALO X Colors Kit – GALAXY PURPLE

## 6497 – VALO X Colors Kit – AURORA PINK

## 6499 – VALO X Colors Kit – NEBULA GREEN

## 6498 – VALO X Colors Kit – STARDUST GRAY

## 6496 – VALO X Colors Kit – HORIZON RED

## 6519 – VALO X Colors Kit – TWILIGHT BLUE

## 6539 – VALO X Colors Kit – ONYX BLACK

- 1 x VALO X LED-Polymerisationsleuchte
- 1 x Diffuser Lens

- 2 x aufladbare Batterien

- 1 x Batterieladegerät

- 1 x Netzteil (für Batterieladegerät und Kabeladapter\*)

- 1 x Light Shield

- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen

\*Kabeladapter nicht enthalten





## GERÄTE

Hinweis: Für Support- oder Serviceanfragen zu Ihrem VALO Produkt wenden Sie sich bitte an Ihre:n Fachberater:in von Ultradent Products.




4665 – VALO X Hygieneschutzhüllen 100 St.  
5898 – VALO X Hygieneschutzhüllen 600 St.

508 – UltraTect Brillen 1 St.



5437 – VALO X aufladbare Batterien 2 St.

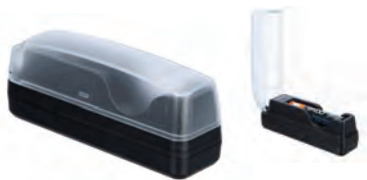

4951 – VALO X Batterieladegerät 1 St.



5189 – VALO X Kabeladapter 1 St.



4952 – VALO X Netzteil 1 St.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

**VALO™ X**  
BROADBAND LED CURING LIGHT



WELCHE  
NEUE FARBE  
PASST ZU  
IHNEN?



## VALO™ Grand Cordless

### LED-POLYMERISATIONSLEUCHTE



11,7 mm  
Linse



Beste LED-  
Polymerisationsleuchte

- Breitband-LEDs mit extrem hoher Lichtenergie härten alle lichthärtenden Dentalmaterialien aus
- Der optimal gebündelte Lichtstrahl bewirkt eine gleichbleibende, gleichmäßige Leistung
- Die drei Polymerisations-Modi – Standard Power, High Power und Xtra Power – werden Ihren Anforderungen gerecht
- Extrem stabile, schlanke, ergonomische Gestaltung ermöglicht hervorragenden Zugang zu allen Zähnen und ihren Flächen<sup>2</sup>
- Einzigartiges einteiliges Design ist leicht und zugleich äußerst stabil
- Hocheffiziente LEDs und spezielles Aluminium aus der Luftfahrttechnik halten das Lampengehäuse immer kühl
- Die zweite Polymerisationstaste auf der Unterseite ermöglicht eine intuitive Bedienung
- Das batteriebetriebene, kabellose Design bietet optimalen Komfort und höchste Flexibilität
- Arbeitet mit sicheren, preiswerten, aufladbaren Batterien

Die LED-Polymerisationsleuchte VALO Grand Cordless verwendet eine spezielle lichtemittierende Diode (LED) mit unterschiedlichen Wellenlängen für die Abgabe von hochintensivem Licht bei 385 – 515 nm, das alle lichthärtenden Dentalmaterialien polymerisieren kann. Die Lichtintensität durchdringt auch Keramik und ist in der Lage, darunter liegende Kunststoffelemente auszuhärten – vergleichbar mit einer guten Halogenleuchte. Die VALO Grand Cordless Polymerisationsleuchte arbeitet mit aufladbaren VALO-Batterien und einem für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt geeigneten Ladegerät. Die Leuchte kann in einen freien Köcher des Behandlungsgerätes oder in einen selbstklebenden Handstückhalter gesteckt werden. Sie kann auch auf der Arbeitsfläche oder in einer Schublade aufbewahrt werden. Die VALO Grand Cordless Polymerisationsleuchte ist mit einem Sensor ausgestattet, der Bewegungen der Leuchte registriert; wenn sie nicht in Gebrauch ist, geht die VALO Grand Cordless Polymerisationsleuchte automatisch in den Schlafmodus, und wenn sie bewegt wird, kehrt sie zur zuletzt verwendeten Einstellung zurück.

1. realityesthetics.com. 2. Moreira RJ, de Deus RA, Ribeiro MTH, et al. Effect of light-curing unit design and mouth opening on the polymerization of bulk-fill resin-based composite restorations in molars. J Adhes Dent. 2021;23(2):121-131. doi:10.3290/j.jad.b1079561.



- 5972 – VALO Grand Cordless Kit – Black  
4864 – VALO Grand Cordless Kit – Sapphire  
4865 – VALO Grand Cordless Kit – Red Rock
- 1 x VALO Grand Cordless LED-Polymerisationsleuchte
  - 4 x aufladbare Batterien
  - 1 x Batterieladegerät
  - 1 x Netzteil für Ladegerät
  - 1 x Handstückhalter
  - 1 x Light Shield
  - 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen



- 4666 – VALO Grand Cordless Hygieneschutzhüllen 100 St.  
5896 – VALO Grand Cordless Hygieneschutzhüllen 600 St.

- 3604 – VALO Grand Light Shield 1 St.



- 508 – UltraTect Brillen 1 St.



- 1667 – VALO Handstückhalter 1 St.



WARNUNG: Nur die in der Gebrauchsanweisung angegebenen aufladbaren Batterien verwenden. Einige aufladbare Batterien können sich auf die Funktion der VALO Polymerisationsleuchte auswirken.

- 5963 – VALO Grand aufladbare Batterien 2 St.



- 5962 – VALO Grand Batterieladegerät 1 St.




- 5961 – VALO Netzteil 1 St.





## VALO™ Grand Corded LED-POLYMERISATIONSLEUCHTE

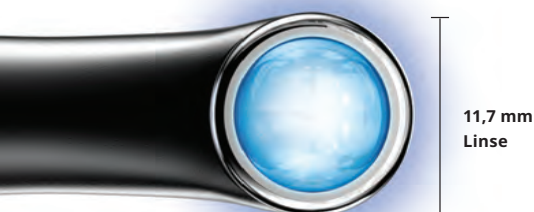

11,7 mm  
Linse



Beste LED-  
Polymerisationsleuchte

- Breitband-LEDs mit extrem hoher Lichtenergie härten alle lichthärtenden Dentalmaterialien aus
- Der optimal gebündelte Lichtstrahl bewirkt eine gleichbleibende, gleichmäßige Leistung
- Die drei Polymerisations-Modi – Standard Power, High Power und Xtra Power – werden Ihren Anforderungen gerecht
- Extrem stabile, schlanke, ergonomische Gestaltung ermöglicht hervorragenden Zugang zu allen Zähnen und ihren Flächen<sup>2</sup>
- Einzigartiges einteiliges Design ist leicht und zugleich äußerst stabil
- Hocheffiziente LEDs und spezielles Aluminium aus der Luftfahrttechnik halten das Lampengehäuse immer kühl
- Die zweite Polymerisationstaste auf der Unterseite ermöglicht eine intuitive Bedienung
- Das Netzteil (internationaler Standard) eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt

Die VALO Grand LED-Polymerisationsleuchte verwendet eine spezielle lichtemittierende Diode (LED) mit unterschiedlichen Wellenlängen für die Abgabe von hochintensivem Licht bei 385 – 515 nm, das alle lichthärtenden Dentalmaterialien polymerisieren kann. Die hohe Leistung durchdringt auch Keramik und ist in der Lage, darunter liegende Kunststoffelemente auszuhärten. Das Netzteil der VALO Grand Polymerisationsleuchte (medizinischer Standard) eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt. Die Leuchte kann in einen freien Köcher des Behandlungsgerätes oder in einen selbstklebenden Handstückhalter gesteckt werden.

1. realityesthetics.com. 2. Moreira RJ, de Deus RA, Ribeiro MTH, et al. Effect of light-curing unit design and mouth opening on the polymerization of bulk-fill resin-based composite restorations in molars. J Adhes Dent. 2021;23(2):121-131. doi:10.3290/j.jad.b1079561.

Hinweis: Für Support- oder Serviceanfragen zu Ihrem VALO Produkt wenden Sie sich bitte an Ihre:n Fachberater:in von Ultradent Products.



### 5971 – VALO Grand Corded Kit

- 1 x VALO Grand LED-Polymerisationsleuchte – 2,13 m Kabel
- 1 x Netzteil mit Universalsteckern – 1,83 m Kabel
- 1 x Handstückhalter
- 1 x Light Shield
- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen



4669 – VALO Grand Hygieneschutzhüllen 100 St.

5897 – VALO Grand Hygieneschutzhüllen 600 St.

### 508 – UltraTest Brillen 1 St.



### 1667 – VALO Corded Handstückhalter 1 St.



### 5930 – VALO Netzteil – 1,83 m Kabel

### 5933 – VALO Netzteil – 4,88 m Kabel

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## VALO™ Cordless

### LED-POLYMERISATIONSLEUCHTE



9,7 mm  
Linse



Beste LED-Polymerisationsleuchte

- Breitband-LEDs mit extrem hoher Lichtenergie härten alle lichthärtenden Dentalmaterialien aus
- Der optimal gebündelte Lichtstrahl bewirkt eine gleichbleibende, gleichmäßige Leistung
- Die drei Polymerisations-Modi – Standard Power, High Power und Xtra Power – werden Ihren Anforderungen gerecht
- Extrem stabile, schlanke, ergonomische Gestaltung ermöglicht hervorragenden Zugang zu allen Zähnen und ihren Flächen<sup>2</sup>
- Einzigartiges einteiliges Design ist leicht und zugleich äußerst stabil
- Hocheffiziente LEDs und spezielles Aluminium aus der Luftfahrttechnik halten das Lampengehäuse immer kühl
- Das batteriebetriebene, kabellose Design bietet optimalen Komfort und höchste Flexibilität
- Arbeitet mit sicheren, preiswerten, aufladbaren Batterien

Die Polymerisationsleuchte VALO Cordless verwendet eine spezielle lichtemittierende Diode (LED) mit unterschiedlichen Wellenlängen für die Abgabe von hochintensivem Licht bei 385 – 515 nm, das alle lichthärtenden Dentalmaterialien polymerisieren kann. Die Lichtintensität durchdringt auch Keramik und ist in der Lage, darunter liegende Kunststoffelemente auszuhärten – vergleichbar mit einer guten Halogenleuchte. Die VALO Cordless Polymerisationsleuchte arbeitet mit aufladbaren VALO-Batterien und einem für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt geeigneten Ladegerät. Die Leuchte kann in einen freien Köcher des Behandlungsgerätes oder in einen selbstklebenden Handstückhalter gesteckt werden. Sie kann auch auf der Arbeitsfläche oder in einer Schublade aufbewahrt werden. Die VALO Cordless Polymerisationsleuchte ist mit einem Sensor ausgestattet, der Bewegungen der Leuchte registriert; wenn sie nicht in Gebrauch ist, geht die VALO Cordless Polymerisationsleuchte automatisch in den Schlafmodus, und wenn sie bewegt wird, kehrt sie zur zuletzt verwendeten Einstellung zurück.

1. realityesthetics.com. 2. Moreira RJ, de Deus RA, Ribeiro MTH, et al. Effect of light-curing unit design and mouth opening on the polymerization of bulk-fill resin-based composite restorations in molars. J Adhes Dent. 2021;23(2):121-131. doi:10.3290/jjad.b1079561.



#### 5941 – VALO Cordless Kit

- 1 x VALO Cordless LED-Polymerisationsleuchte
- 4 x aufladbare Batterien
- 1 x Batterieladegerät
- 1 x Netzteil für Ladegerät
- 1 x Handstückhalter
- 1 x Light Shield
- 1 x Musterpackung Hygieneschutzhüllen



4667 – VALO Cordless Hygieneschutzhüllen 100 St.

5896 – VALO Cordless Hygieneschutzhüllen 600 St.

#### 5929 – VALO Cordless Light Shield 1 St.



#### 508 – UltraTect Brillen 1 St.



#### 1667 – VALO Handstückhalter 1 St.



**WARNUNG:** Nur die in der Gebrauchsanweisung angegebenen aufladbaren Batterien verwenden. Einige aufladbare Batterien können sich auf die Funktion der VALO Polymerisationsleuchte auswirken.

#### 5963 – VALO Cordless aufladbare Batterien 2 St.





#### 5962 – VALO Grand Batterieladegerät 1 St.



#### 5961 – VALO Netzteil 1 St.

**VALO™ X, VALO™ Grand und VALO™ zusätzliche Linsen**

Die Linsen sind wiederverwendbar und sollten mit einer geeigneten Desinfektionslösung desinfiziert werden.
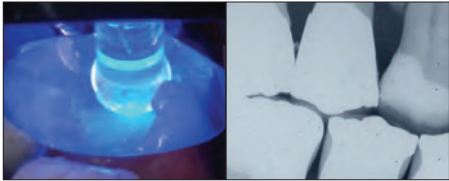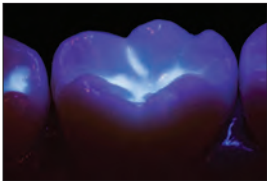
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PointCure™ Lens</b><br>      | Die PointCure Lens ist eine durchsichtige Linse mit einem Durchmesser von 2,5 mm, die sich ideal für die punktgenaue Polymerisation (fixierende Anheftung) von Verblendungen und alle keramischen Kronen eignet. |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| <b>ProxiCure™ Ball Lens</b><br>  | <b>5890 – VALO X</b><br><b>PointCure Lens 2 St.</b><br>                                                                         | <b>4082 – VALO Grand</b><br><b>PointCure Lens 2 St.</b><br>       | <b>5934 – VALO</b><br><b>PointCure Lens 2 St.</b><br>       |
|                                                                                                                  | <b>5889 – VALO X</b><br><b>ProxiCure Ball Lens 2 St.</b><br>                                                                    | <b>4081 – VALO Grand</b><br><b>ProxiCure Ball Lens 2 St.</b><br>  | <b>5936 – VALO</b><br><b>ProxiCure Ball Lens 2 St.</b><br>  |
| <b>TransLume™ Lens</b><br>     | Die TransLume Lens hilft bei der Visualisierung und Lokalisierung von Rissen und Defekten in Zähnen oder Restaurationen.                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| <b>Interproximal Lens</b><br> | <b>5891 – VALO X</b><br><b>TransLume Lens 2 St.</b><br>                                                                        | <b>4084 – VALO Grand</b><br><b>TransLume Lens 2 St.</b><br>      | <b>5937 – VALO</b><br><b>TransLume Lens 2 St.</b><br>      |
|                                                                                                                  | <b>5893 – VALO X</b><br><b>Interproximal Lens 2 St</b><br>                                                                    | <b>4658 – VALO Grand</b><br><b>Interproximal Lens 2 St.</b><br> | <b>4629 – VALO</b><br><b>Interproximal Lens 2 St.</b><br> |
| <b>Black Light Lens</b><br>   | Die Black Light Lens hilft bei der Erkennung fluoreszierender Partikel in Kunststoff, zur einfachen Abgrenzung von natürlichem Schmelz.                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | n. z.                                                                                                                                                                                                            | <b>4319 – VALO Grand</b><br><b>Black Light Lens 1 St.</b><br>   | <b>5939 – VALO</b><br><b>Black Light Lens 1 St.</b><br>   |
| <b>White Light Lens</b><br>   | Die White Light Lens erzeugt ein neutralweißes Licht – zur Farbbestimmung.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| <b>VALO X Diffuser Lens</b>                                                                                      | <b>5892 – VALO X Diffuser</b><br><b>White Light Lens 1 St.</b><br>                                                            | n. z.                                                                                                                                               | n. z.                                                                                                                                          |

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.





# GEMINI EVO™

810 + 980 DIODE LASER

DIE NEUESTE ENTWICKLUNG IM BEREICH DER LASERZAHNMEDIZIN

Der Gemini EVO Diodenlaser bietet Ihnen die Vorteile einer höheren Spitzenleistung von 100 W mit noch schnelleren Schnitten, geringerer Hitzeentwicklung und extrem sauberen Schnitten im Weichgewebe.



## Gemini EVO™

810 + 980 DIODENLASER



Dentistry Today Top 100, 4-facher Gewinner (2016 – 2020)  
Dentistry Today Top 50 Technology Products, Readers Choice 2023  
Dentistry Today Editors' Choice Award 2023  
Cellerant Best of Class, Technology Award, 3-facher Gewinner (2017 – 2019)  
Good Design Award  
Dental Product Shopper "Best Product" 2022

- Liefert eine Spitzenleistung von 100 Watt für schnelleres Schneiden, weniger Hitze und extrem saubere Schnitte in Weichgewebe<sup>1</sup>
- 3-in-1 Design zur Auswahl der optimalen Wellenlängen für Koagulation, Ablation oder eine Kombination
- Mit den drei im Lieferumfang enthaltenen Photobiomodulationsadaptern (3 mm, 7 mm und 25 mm) können Ihre Patienten von allen Vorteilen der Laserbehandlung profitieren.
- Übersichtlichere Gestaltung von Display und Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitivere und benutzerfreundlichere Bedienung
- 16 voreingestellte Verfahren in drei Kategorien für eine effiziente, intuitive Nutzung
- Funktioniert mit den gleichen Tips wie der bisherige Gemini Laser
- Patentierte Einmal-Tips und autoklavierbares Handstück für eine einfache Verwendung und unkomplizierte Sterilisation zwischen den Verfahren
- WiFi-Konnektivität für Over-the-Air-Updates und gezielten technischen Support
- Mobile App und Dashboard zur Überwachung von Nutzungsstatistiken, inklusive Investitionsrentabilität und Verfahrensdaten
- Praktischer Transport von einem Behandlungszimmer zum anderen dank Batteriebetrieb und kabellosem Fußpedal
- Zwei Jahre Garantie
- Entwickelt und gefertigt in den USA aus US-amerikanischen/importierten Komponenten

Zahnmedizinische Laserverfahren waren noch nie so einfach wie mit dem revolutionären Gemini EVO Weichgewebelaser. Dank des Diodenlasers mit zwei Wellenlängen und einer supergepulsten Spitzenleistung von bis zu 100 Watt ermöglicht der Gemini EVO-Laser ein schnelleres, schonenderes und klinisch besser vorhersagbares Schneiden.<sup>1</sup>

Diese Laser ermöglichen minimalinvasive Eingriffe, und viele Verfahren lassen sich mit ihnen ohne Schnitte oder Nähte durchführen. Für die Patienten bedeutet dies eine schonendere, mit weniger Blutungen verbundene und insgesamt angenehmere Behandlung.




1. R Borchers. Comparison of diode lasers in soft tissue surgery using CW and superpulsed mode, an in vivo study. *Int J Laser Dent.* 2011; 1(1):17-27. 2. Akbulut N, Kursun ES, Tumer MK, Kamburoglu K, Gulsen U. Is the 810-nm diode laser the best choice in oral soft tissue therapy? *Eur J Dent.* 2013;7(2):207-211. doi:10.4103/1305-7456.110174. 3. S Pirnat. Versatility of 810 nm laser in dentistry. *J Laser Health Academy*, 2007; (4).

Zudem sind Laserbehandlungen häufiger mit weniger Schmerzen und Schwellungen verbunden als herkömmliche Methoden wie die Hochfrequenz-Chirurgie oder das Skalpell. Dadurch heilen die Wunden schneller – zur Zufriedenheit der Patienten. Die Möglichkeit, bestimmte Weichgewebereiche gezielt und präzise zu behandeln, führt zu besser vorhersehbaren und beständigeren Ergebnissen.

| VORTEILE                                      | SKALPELL | HF-CHIRURGIE | LASER |
|-----------------------------------------------|----------|--------------|-------|
| Effiziente Weichgewebeerntfernung             | X        | X            | X     |
| Exzellente Hämostase                          |          | X            | X     |
| Sicheres Arbeiten in der Nähe von Implantaten | X        |              | X     |
| Benötigt weniger Anästhesie                   |          |              | X     |
| Reduzierte postoperative Schmerzen            |          |              | X     |
| Geringeres Risiko von Gingivarezeptionen      | X        |              | X     |
| Weniger Schwellungen und Beeinträchtigungen   |          |              | X     |
| Keine Naht erforderlich                       |          | X            | X     |
| Dekontamination der Wundränder                |          | X            | X     |
| Photobiomodulation                            |          |              | X     |

## WELLENLÄNGE UND GEWEBEINTERAKTION

Weichgewebe-Diodenlaser für den zahnärztlichen Gebrauch arbeiten mit einem gebündelten Lichtstrahl (nichtionisierende Infrarotstrahlung mit einem Wellenlängenlängenbereich von 800 bis 980 nm), der von Wasser, Hämoglobin und Pigmentmolekülen im Weichgewebe absorbiert wird. Dadurch werden die Moleküle erhitzt und verdampfen, sodass der Laser äußerst präzise durch das Gewebe schneiden kann. Zudem koaguliert der Laser die beteiligten Blutgefäße, kauterisiert die Nervenenden und dekontaminiert das umgebende Gewebe, wodurch Hämostase und Patientenkomfort verbessert werden. Zudem wird dadurch das Risiko für postoperative Infektionen gesenkt.

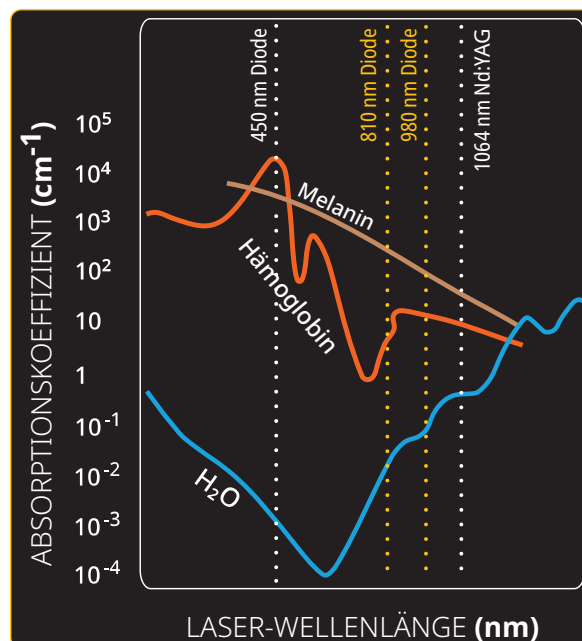


Die Auswahl der optimalen Wellenlänge ist wichtig, um den Laser möglichst effizient im Weichgewebe einzusetzen. Die mit den Wellenlängen 810 nm, 980 nm und mit zwei Wellenlängen erhältlichen Gemini EVO Laser ermöglichen eine optimale Absorption in Melanin, Hämoglobin und Wasser und sind dadurch in der klinischen Praxis vielseitig einsetzbar.<sup>2,3</sup>

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## SPITZENLEISTUNG UND SUPERPULSBETRIEB

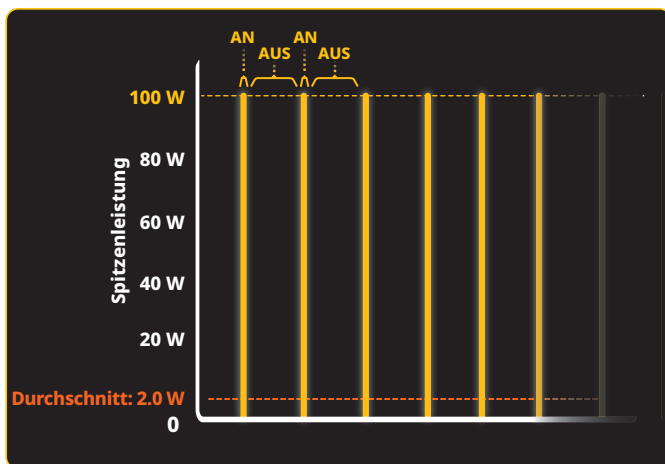


GEMINI EVO

Gemini EVO Laser  
Pulsdauer: 0,05 ms  
Pulsintervall: 2,45 ms


2,0 W durch-  
schnittliche Leistung

Die gewünschten Ergebnisse mit dem geringsten Risiko für thermische Schädigung lassen sich mit sehr kurzen, aber effizienten Leistungspulsen über einen möglichst kurzen Zeitraum erzielen.<sup>1,2</sup>

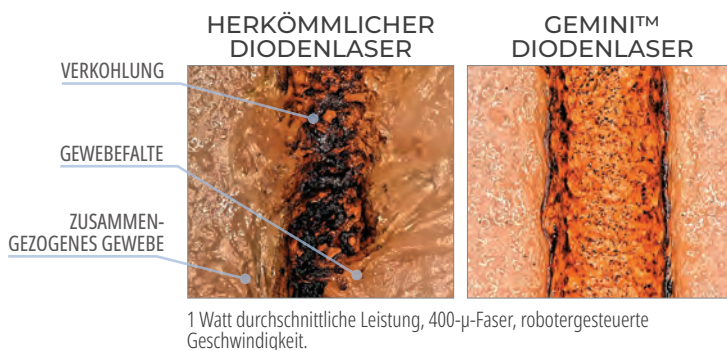

Die effizienten Leistungspulse der Gemini EVO Laser ermöglichen eine effiziente Ablation, während die kurzen Impulse dem Gewebe während des Verfahrens Zeit zum Abkühlen lassen. Dadurch werden Verbrennungen und thermische Schädigungen des umgebenden Gewebes verhindert. Weiterhin wird der Patientenkomfort verbessert, ohne dass Geschwindigkeit oder Wirksamkeit des Verfahrens beeinträchtigt werden.<sup>1,2</sup>

## VERGLEICH DER SPITZENLEISTUNG VON DIODENLASERN\*

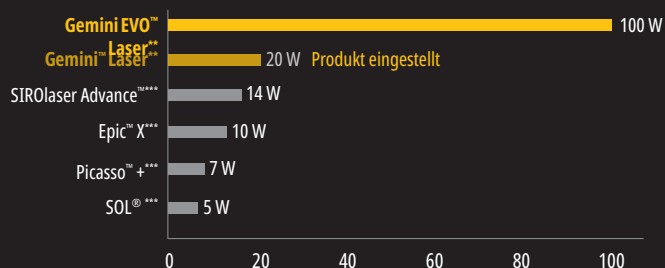

## PHOTOBIOMODULATION



Mit den Gemini EVO Lasern lassen sich Photobiomodulationstherapien (PBMt) durchführen. Dies ermöglicht es den Anwendern, bei Patienten mit verschiedenen zahnmedizinischen Erkrankungen oder postoperativen Beschwerden eine Behandlung zur Schmerzlinderung durchzuführen. Die integrierten PBM-Adapter ermöglichen es den Anwendern, mittels Lichtenergie die Zellfunktion zu verbessern, Schmerzen und Entzündungen zu lindern und die Heilung anzuregen.<sup>3,4</sup>

PBM hat folgende Vorteile:

- Vorübergehende Schmerzlinderung
- Verbesserte lokale Durchblutung
- Temporäre Muskelentspannung
- Entzündungsmodulation
- Beschleunigung der Weich- und Hartgewebeheilung



Es stehen Protokolle zur Photobiomodulation (PBM) zur Verfügung, die Ihnen und Ihren Patienten dabei helfen, den größtmöglichen Nutzen aus dieser Therapie zu ziehen.

QR-Code scannen, um mehr über den Gemini EVO Laser auf unserer Website zu erfahren



**Hinweis:** Der Gemini Laser ist nicht mehr erhältlich. \* Vom Hersteller veröffentlichte Daten. \*\* Spitzenleistung im Modus mit zwei Wellenlängen. \*\*\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. 1. Goharkhay K, Moritz A, Wilder-Smith P, et al. Effects on oral soft tissue produced by a diode laser in vitro. *Lasers Surg Med.* 1999;25(5):401-406. doi:10.1002/(sici)1096-9101(1999)25:5<401::aid-lsm6>3.0.co;2-u. Borchers R. Comparison of diode lasers in soft tissue surgery using CW and superpulsed mode, an in vivo study. *Int J Laser Dent.* 2011; 1(1):17-27. 2. Borchers R. Comparison of diode lasers in soft tissue surgery using CW and superpulsed mode, an in vivo study. *Int J Laser Dent.* 2011; 1(1):17-27. 3. Ross G, Ross A. Photobiomodulation: an invaluable tool for all dental specialties. *J Laser Dent.* 2009;17(3):117-124. 4. Mármora BC, Brochado FT, Schmidt TR, et al. Defocused high-power diode laser accelerates skin repair in a murine model through REDOX state modulation and reepithelization and collagen deposition stimulation. *J Photochem Photobiol B.* 2021;225:112332. doi:10.1016/j.jphotobiol.2021.112332.





## WLAN-VERBINDUNG UND DASHBOARD

Mit dem Gemini EVO Dashboard stehen Ihnen jederzeit zusätzliche Tools, Schulungen und Informationen zur Verfügung, damit Sie Ihren Laser optimal nutzen können.



### Das Dashboard umfasst:

- Behandlungsberichte
- Nützliche Videos und Support-Inhalte und CE-Schulungen
- PBM-Protokolle
- Software-Updates und Over-the-Air-Support
- Auslastungsstatistiken
- Nachverfolgung der Investitionsrentabilität
- Angebote und mehr



25 mm Spitze



7 mm Spitze



3 mm Spitze

## INTEGRIERTE PHOTOBIO-MODULATION

Drei PBM-Adapter für intra- und extraorale Behandlungen im Lieferumfang enthalten.

- 3 mm
- 7 mm
- 25 mm



## HAPTIC SENSE und TOUCH TECHNOLOGIE

- Haptic Sense kann mit dem Fußpedal aktiviert werden, um zusätzlich darauf hinzuweisen, dass der Laser aktiviert ist.
- Haptic Touch ist während der voreingestellten PBM-Verfahren am Handstück verfügbar, um den Patienten während der Behandlung eine zusätzliche physische Empfindung zu vermitteln.



## GUIDED TOUCH INTERFACE (GTI): DIE INTUITIVE TOUCH-BENUTZEROBERFLÄCHE

- Die Bedienung des Gemini EVO Lasers ist einfacher denn je. Es leuchten nur die jeweils relevanten Symbole auf, die Sie durch die Benutzeroberfläche führen, so dass Sie stets die korrekten Eingaben vornehmen können.

## CHIRURGISCHE VERFAHREN

- Exzisions- und Inzisionsbiopsien
- Freilegung retinierter Zähne
- Fibromentfernung
- Frenektomie
- Frenotomie
- Sulkuserweiterung für Kronenabformungen
- Gingivektomie
- Gingivoplastik
- Gingivale Inzision und Exzision
- Hämostase und Koagulation
- Implantatfreilegung
- Abszessinzision und -drainage
- Entfernung von Läsionen (Tumoren)
- Leukoplakie
- Operkulektomie
- Orale Papillektomien
- Pulpotomie
- Pulpotomie als Ergänzung zur Wurzelkanalbehandlung
- Reduktion einer Gingivahypertrophie
- Weichgewebe-Kronenverlängerung
- Behandlung von Aphten, herpetischen und aphthösen Ulzera der Mundschleimhaut
- Vestibulumplastik

## SULKUSERWEITERUNG


Foto von Dr. Brett Richins.



Vor dem Eingriff



Sofort nach dem Eingriff

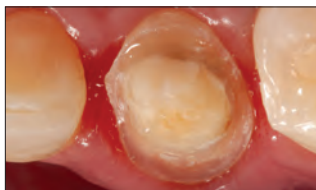

Nach dem Eingriff

**KLINISCHE VORTEILE:** Sekundenschnelle, sanfte und blutungsfreie Gingivaretraktion ohne Retraktionsfäden. Die Abformung kann unmittelbar nach der Sulkuserweiterung erfolgen, ohne dass zusätzliche Zeit für die Flüssigkeitskontrolle benötigt wird. Mangelhafte Abformungen sind der Hauptgrund für schlecht sitzende Restaurationen. Die Verwendung eines Lasers gewährleistet eine reproduzierbare präzise Gingivaretraktion, die besonders bei der Verwendung eines Intraoralscanners wichtig ist, da hier kein physisches Abformmaterial zum Abhalten des Gewebes vorhanden ist.

**VORTEILE FÜR PATIENTEN:** Für den Patienten ist die Behandlung angenehmer, da kein Fadenlegen erforderlich ist, das mit einem Gewebetrauma einhergehen kann. Durch die lasergestützte Sulkuserweiterung werden die Präparationsränder optimal freigelegt, was zu präziser sitzenden Restaurationen und besseren klinischen Resultaten führt.

## LINGUALE FRENEKTOMIE

Foto von Dr. Brett Richins.



Vor dem Eingriff



Sofort nach dem Eingriff



Nach dem Eingriff

## LABIALE FRENEKTOMIE

Foto von Dr. Renato Miotto Palo.



Vor dem Eingriff



Sofort nach dem Eingriff



Nach dem Eingriff

**KLINISCHE VORTEILE:** Die Sanftheit des Gemini EVO Lasers ermöglicht effiziente und schonende Frenektomien mit geringeren Beschwerden für den Patienten. Dank des Koagulationseffekts des Lasers ist keine Naht erforderlich.

**VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN:** Die Patienten profitieren von nur minimalen peri- und postoperativen Schmerzen, Blutungen und Schwellungen sowie von einem raschen Heilungsverlauf.

## GINGIVEKTOMIE

Foto von Dr. Jaleena Fischer-Jessop.



Vor dem Eingriff



Sofort nach dem Eingriff

**KLINISCHE VORTEILE:** Effiziente und präzise Weichgewebekonturierung für vorhersagbare Ränder und eine optimale gingivale Architektur. Die schonende Behandlung mit dem Gemini EVO Laser minimiert das Risiko einer Gingivarezession während des Heilungsverlaufs und erlaubt die finale Abformung in derselben Sitzung, was vorhersagbare Ergebnisse gewährleistet und gleichzeitig mit geringeren Beschwerden für den Patienten verbunden ist. Darüber hinaus werden durch den Koagulationseffekt des Lasers peri- und postoperative Blutungen reduziert.

**VORTEILE FÜR PATIENTEN:** Patienten erhalten ein schönes Lächeln ohne die normalerweise mit Weichgewebeoperationen verbundenen Schmerzen und Beschwerden und mit weniger Besuchen in der Zahnarztpraxis.



## ZAHNFREILEGUNG


Foto von Dr. Stephen Tracey.



Vor dem Eingriff



Sofort nach dem Eingriff

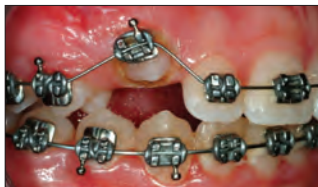

Direktes Bracket-Bonding

## ECKZAHNFREILEGUNG



Vor dem Eingriff



Sofort nach dem Eingriff

**KLINISCHE VORTEILE:** Einfaches Entfernen von Gewebe über einem impaktierten Zahn, z. B. bei einem Eckzahn oder Molaren für die direkte Befestigung von Brackets/Buttons. Dieser schnelle und schmerzfreie Eingriff wird in der Regel unter Lokalanästhesie durchgeführt und verursacht nur geringe bis gar keine Blutungen. Das Warten auf eine passive Eruption entfällt und die kieferorthopädische Behandlung kann um viele Monate verkürzt werden.

**VORTEILE FÜR PATIENTEN:** Eine schnelle und schmerzfreie Möglichkeit, die kieferorthopädische Behandlung zu beschleunigen, ohne einen Spezialisten aufsuchen zu müssen.

## BIOPSIE/FIBROM

Foto von Dr. Renato Miotto Palo.



Vor dem Eingriff



Sofort nach dem Eingriff



Nach dem Eingriff

## PARODONTALE ANWENDUNG

- Laser-Weichgewebe-Kürettage
- Verringerung der Bakterienzahl (Dekontamination) und Entzündung
- Entfernung von erkranktem, infiziertem, entzündetem und nekrotischem Weichgewebe aus den Parodontaltaschen
- Entfernung stark entzündeten ödematösen Gewebes, das von Bakterienbefall an der Tasche betroffen ist
- Sulkus-Debridement (Entfernung von erkranktem, infiziertem, entzündetem und nekrotischem Weichgewebe aus den Parodontaltaschen zur Verbesserung klinischer Indizes, einschließlich Gingivaindex, Gingivablutungsindex, Sondierungstiefe, Attachmentverlust und Zahnbeweglichkeit)

## BAKTERIELLE DEKONTAMINATION ODER VERRINGERUNG DER BAKTERIENZAHL MIT LASER



**KLINISCHE VORTEILE:** Die Verwendung eines Diodenlasers zur Bakterienreduktion kann die Bakterienlast im Sulkus erheblich verringern und das Risiko einer Kreuzkontamination während der Durchführung von Hygienemaßnahmen reduzieren. Das Verfahren erfordert nur 10–20 Sekunden pro Zahn und ist damit schnell und effizient.

**VORTEILE FÜR PATIENTEN:** Reduktion der Sondierungstiefe und insgesamt verbesserte parodontale Gesundheit.

## SULKUS-DEBRIDEMENT ODER WEICHGEWEBE-KÜRETTAGE



**VORTEILE FÜR PATIENTEN:** Diodenlaser können erkranktes Gewebe in Zahnfleischtaschen selektiv entfernen und so die Regeneration von gesundem Gewebe fördern.

**VORTEILE FÜR PATIENTEN:** Reduktion der Sondierungstiefe und insgesamt verbesserte parodontale Gesundheit.




**9121 – Gemini EVO Laser Kit**

1 x Gemini EVO Laser  
1 x Fußpedal  
3 x Schutzbrillen  
10 x 5 mm Einmal-Tips aus Glasfaser  
1 x Gleichstrom-Netzteil  
3 x PBM-Adapter (25 mm, 7 mm, 3 mm)


**8993 – Gemini EVO 5 mm Pre-Initiated Tip 25 St.**
**8994 – Gemini EVO 7 mm Uninitiated Tip 25 St.**

**9127 – Gemini EVO Handstückhülse 1 St.**

**9126 – Gemini EVO Netzteil 1 St.**

**8995 – Gemini EVO Schutzbrille 1 St.**

Hinweis: Wenn Sie die PBM-Adapter oder das Gemini EVO Fußpedal bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre:n Fachberater:in von Ultradent Products.


**9123 – Gemini EVO Intraoral PBM Adapter Kit**

1 x 3 mm Adapter für Photobiomodulation (PBM)  
1 x 7 mm Adapter für Photobiomodulation (PBM)


**9124 – Gemini EVO Extraoral PBM Adapter Kit**

1 x 25 mm Adapter für Photobiomodulation (PBM)  
2 x Einmal-Spacer-Tips  
1 x Reinigungstuch


**8999 – Gemini PBM Spacer Tip Kit 5 St.**



## UltraTect™

SCHUTZBRILLEN




UltraTect-Schutzbrillen sind der zur modernen zahnärztlichen Behandlung passende Augenschutz. Die hochwertigen, leichten Rahmen und Polycarbonatgläser sind komfortabel und langlebig zugleich und erfüllen die ANSI- und CE-Sicherheitsnormen zum Schutz vor Stoßverletzungen und Chemikalienbelastung. Zahnärzte, Assistenten und Patienten profitieren alle von der Sicherheit und dem Komfort der UltraTect-Brille.

**Hinweis:** Nicht als Schutz vor Laserlicht anwenden.



Die Gläser sind flexibel und schlagfest und haben eine lange Lebensdauer.

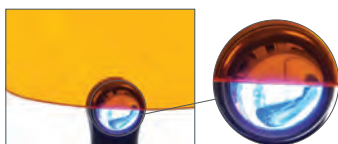

Brillen mit orangefarbenen Gläsern schützen vor dem von den VALO™ Polymerisationsleuchten abgegebenen blauen Licht.



**914 – Schwarz-grünes Gestell/Graue Gläser 1 St.**  
**501 – Schwarzes Gestell/Transparente Gläser 1 St.**  
**508 – Schwarzes Gestell/Orangefarbene Gläser 1 St.**

(blaues Licht abblockende Schutzbrille)

## Ultradent™ Ultra-Trim

FEDERSCHERE

- Zum präzisen Beschneiden des Schienenrands um die Interdentalpapillen
- Mit Federmechanismus zur Entlastung der Finger
- Gezahnte Schneiden – ideal für das Schienenmaterial
- Aus haltbarem Edelstahl



**605 – Ultradent Ultra-Trim Federschere 1 St.**



## BETTER DENTISTRY THROUGH KNOWLEDGE

Besuchen Sie den Ultradent Products-Blog, um spannende Einblicke in die Welt der Zahnmedizin zu erhalten.



Den QR-Code scannen, um den Ultradent Products Blog zu besuchen



HILLARY HUBBARD – Skull Arch, Arches National Park

# ENDODONTIE

Mineral-Trioxid-Aggregat-Reparaturzement

MTA-Reparaturmaterial

Feilen-Gleitmittel

Calciumhydroxidpaste

Citric Acid

Tips – Endodontie

Stifte

Lichthärtendes provisorisches Restaurationsmaterial





Endo-Eze™

## MTAFlow™ White und MTAFlow™

MINERAL-TRIOXID-AGGREGAT-REPARATURZEMENT



- Hat bioaktive apatitbildende Eigenschaften<sup>2</sup>
- Lässt sich zu einer glatten Konsistenz anmischen
- Widerstandsfähig gegen Auswaschen
- Kann je nach Konsistenz mit einem 29 ga (0,33 mm Ø) NaviTip™ appliziert werden
- Bindet vorhersagbar und schnell ab
- Das Mischungsverhältnis kann je nach Verfahren angepasst werden
- In einer nicht verfärbenden weißen Zusammensetzung erhältlich

Endo-Eze™ MTAFlow und MTAFlow White Mineral-Trioxid-Aggregat-Reparaturzemente zeichnen sich durch die gleichen einzigartigen Eigenschaften aus. Beide lassen sich einfach anmischen und mit der gewünschten Konsistenz applizieren. Die Verwendung des NaviTip™ 29 ga (0,33 mm Ø) Tips erleichtert die präzise Applikation für Apexifikation, apikalen Verschluss, Resorption und Perforation. MTAFlow White Reparaturzement eignet sich ideal für die Applikation oberhalb der Gingiva, da es einen röntgensichtbaren, nicht färbenden Wirkstoff enthält – das Material wird in der ästhetischen Zone des Zahns nicht zu sehen sein.

„MTA-Zement ist ein bioaktives Material. Sich bildendes Hydroxylapatit (HA) bedeckt die Oberfläche des MTA dort wo es mit Körperflüssigkeiten in Kontakt kommt. Dadurch wird das MTA nicht als Fremdkörper für vitale Zellen erkannt. Daher unterstützt das MTA den Heilungsprozess.“<sup>3</sup>

**Warnung: MTA hat begrenzte antimikrobielle Eigenschaften. Wenn MTAFlow Zement bei der Pulpotomie vitaler Milchzähne verwendet wird, während des Verfahrens nur steriles Wasser verwenden.**

1. realityesthetics.com. 2. Guimarães BM, Vivan RR, Piazza B, et al. Chemical-physical properties and apatite-forming ability of mineral trioxide aggregate flow. *J Endod.* 2017;43(10):1692-1696. doi:10.1016/j.joen.2017.05.005 3. Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, et al. Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate. *J Endod.* 2005;31(2):97-100.

## DER FÜHLBARE UNTERSCHIED

MTAFlow Reparaturzemente haben dank des ultrafeinen Pulvers und des proprietären Gels eine glatte Konsistenz. Die Formulierung ist widerstandsfähig gegen Auswaschen, um sicherzustellen, dass der angemischte Zement genau an der Stelle bleibt, wo Sie ihn platzieren. Zudem ist eine effektive Behandlung durch die präzise Applikation mit den Spritzen und Tips von Ultradent sichergestellt.



1. Entfernen Sie überschüssiges Pulver mit einem Zementspatel. Verwenden Sie das Pulver **NICHT**, ohne die Löffelfüllung am Rand glatt zu streichen.



2. Schütteln Sie den Inhalt 3-mal von oben nach unten. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gel am vorderen Kanülenende des Fläschchens befindet, bevor Sie das Gel herausdrücken.



3. Nach dem Anmischen den gemischte MTAFlow Zement in das hintere Ende der transparenten Skini Spritze einfüllen.



4. Setzen Sie den Spritzenstempel ein und drücken Sie eine kleine Menge Material durch die Spitze heraus.



5. Der angemischte Endo-Eze MTAFlow Zement im Inneren der Spritze ist bis zu 15 Minuten gebrauchsfähig.



6. Verwenden Sie die dünnflüssige Konsistenz und einen NaviTip™ 29 ga (0,33 mm Ø) für die Abgabe des MTAFlow Zements im Inneren des Kanals.

Nach 5 Minuten können Sie den Bereich vorsichtig spülen und lufttrocknen, ohne den MTAFlow Zement dadurch zu entfernen. Nach dem Anmischen und Einfüllen in die Skini Spritze ist MTAFlow Zement bis zu 15 Minuten lang gebrauchsfähig. Die vollständige Abbindung wird nach einer Stunde erreicht. Die vollständige Aushärtung und Verfestigung dauert vier Wochen.



Perforation im zervikalen Drittel des mesiobuccalen Kanals.



Der eingebrachte MTA-Zement zeigt die Reparatur an.

## DIE RICHTIGE KONSISTENZ FÜR DAS RICHTIGE VERFAHREN

Das Mischungsverhältnis von Pulver- und Gelkomponente kann bei den MTAFlow Reparaturzementen je nach Indikation angepasst werden. Die nicht färbende Formulierung des MTAFlow White Reparaturzements wurde speziell für Verfahren wie Pulpotomien vitaler Milchzähne und Pulpaüberkappungen entwickelt.

Nach dem Einbringen des MTAFlow Reparaturzements 5 Minuten aushärten lassen, dann mit UltraBlend™ plus Liner abdecken und versorgen.

Welche Konsistenz Sie auch brauchen, beim MTAFlow Reparaturzement können Sie sich darauf verlassen, dass die präzise Applikation effektiv, glatt und einfach erfolgt. Während des Mischens kann jederzeit mehr Gel oder Pulver zugegeben werden, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

### EMPFOHLENE MISCHVERHÄLTNISSE (PULVER UND GEL)\*

| Verfahren           | Pulpaüberkappung, Perforation des Pulpakammerbodens, Pulpotomie vitaler Milchzähne | Resorption, Apexifikation, apikaler Verschluss     | Retrograde Wurzelfüllung                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pulver (Messlöffel) | 2 x große Füllung (0,26 g)                                                         | 1 x große Füllung plus 1 x kleine Füllung (0,19 g) | 1 x große Füllung plus 1 x kleine Füllung (0,19 g) |
| Gel-Tropfen         | 3 Tropfen                                                                          | 3 Tropfen                                          | 1 Tropfen**                                        |
| Konsistenz          | Dickflüssig                                                                        | Dünnflüssig                                        | Putty                                              |
| Applikation         | Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tip                                                         | NaviTip 29 ga (0,33 mm ø)                          | Applikation ohne Spritze                           |

\* Es kann mehr Gel oder Pulver zugegeben werden, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. \*\* Hängt von der gewünschten Konsistenz ab.

## ALLES, WAS SIE BRAUCHEN, AN EINEM ORT

Die MTAFlow Reparaturzement Kits enthalten alle Komponenten, die Sie zum Anmischen und Applizieren des Zements brauchen. Die Kits enthalten genug MTA Pulver und Gel für 8 – 10 Anwendungen.



### 5980 – MTAFlow White Reparaturzement Kit

je 1 x Verarbeitungsanleitung, Gebrauchsanleitung,  
2 g MTAFlow Pulver, 2 ml MTAFlow Gel und 1 Messlöffel  
10 x Clear Skini Spritzen  
10 x Luer-Lock-Kappen  
20 x Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tips




### 3980-1 – MTAFlow Reparaturzement Kit

je 1 x Verarbeitungsanleitung, Gebrauchsanleitung,  
2 g MTAFlow Pulver, 2 ml MTAFlow Gel und 1 Messlöffel  
10 x Clear Skini Spritzen  
10 x Luer-Lock-Kappen  
20 x Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tips




### 3981 – MTAFlow Reparaturzement Refill


je 1 x Verarbeitungsanleitung, Gebrauchsanleitung,  
2 g MTAFlow Pulver, 2 ml MTAFlow Gel und 1 Messlöffel

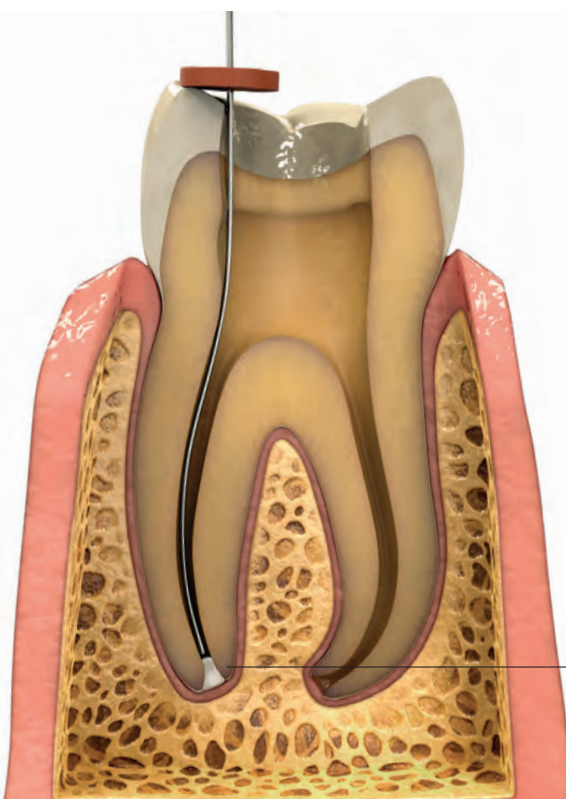


APEXIFIKATION

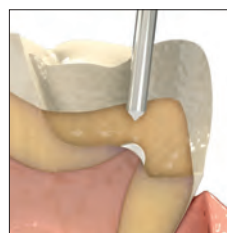


PULPAÜBERKAPPUNG

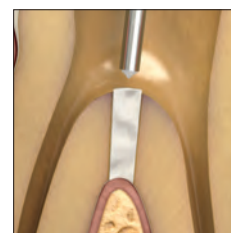


PERFORATION DES PULPA-  
KAMMERBODENS

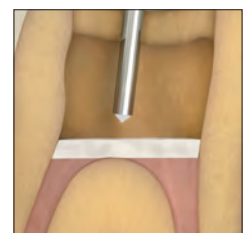


PULPOTOMIE VITALER  
MILCHZÄHNE

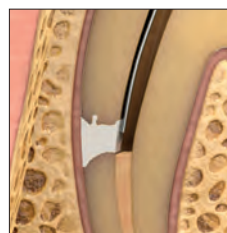

RESORPTION

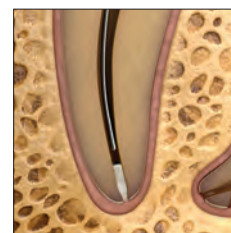

APIKALER VERSCHLUSS

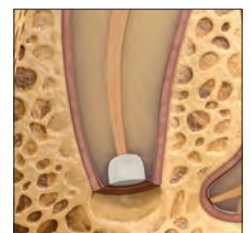

RETROGRADE  
WURZELFÜLLUNG



## EndoREZ™

WURZELKANAL-SEALER




Ultradent™ Mixing Tip

20 – 30 Minuten reguläre Abbindezeit


- Der weltweit erste hydrophile und selbstprimende Kunststoffsealer
- Effektivere Obturation in kürzerer Zeit
- Vollständige, gründliche Versiegelung<sup>2</sup>
- Radiopazität wie Guttapercha
- Haftet an Stumpfaufbau-/Kompositmaterialien auf Kunststoffbasis
- Revisionsfähig bei Kombination mit Guttapercha<sup>3</sup>
- Applikation aus der Spritze bis zum apikalen Drittel

EndoREZ Wurzelkanal-Sealer reduziert den für die Wurzelfüllung erforderlichen Zeitaufwand am Behandlungsstuhl. Dieses thixotrope Material kann durch seine Affinität für Feuchtigkeit tief in Dentintubuli und Seitenkanälen<sup>4</sup> vordringen und liefert so die bestmögliche Versiegelung.<sup>2</sup> Da der auf Methacrylat basierende EndoREZ Wurzelkanal-Sealer chemisch härtet und weder Hitze noch Druck benötigt, um den Kanal zu füllen, ist die Gefahr eines zusätzlichen Wurzeltraumas oder einer Wurzelfraktur stark reduziert.<sup>5</sup> Zudem zeigen Studien, dass EndoREZ Wurzelkanal-Sealer bei jeder Wurzelfüllungsmethode als Sealer verwendet werden kann, z. B. Master Cone, laterale Kondensation oder warme Guttapercha.

EndoREZ Wurzelkanal-Sealer enthält ein spezielles hydrophiles Organophosphat-Methacrylat-Monomer, das seine Hydrophilie verstärkt und ein Harz mit einer starken Affinität für Feuchtigkeit produziert. Das Harz kann bis zu 1.000 µm tief in die Tubuli eindringen.<sup>6</sup>

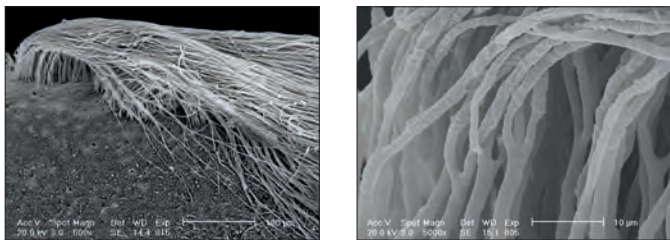




EndoREZ Wurzelkanal-Sealer dringt in die Tubuli ein und passt sich wie kein anderer auf dem Markt erhältliche Sealer an die Wände an.

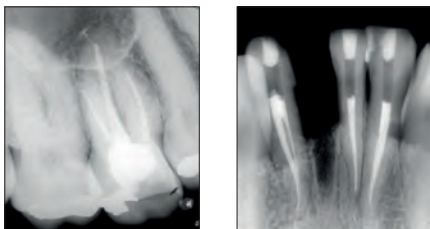

EndoREZ Wurzelkanal-Sealer führt zu zuverlässigen Füllungen, die röntgensichtbar, einfach zu diagnostizieren und für Revisionsbehandlungen sowie Stift- und Stumpfaufbauverfahren geeignet sind.

Hinweis: Die folgenden Beispiele für Gleitmittel enthalten Peroxide, die nicht mit EndoREZ Wurzelkanal-Sealer kompatibel sind: EndoGel\*, EndoSequence\*, Glyde\*, ProLube\*, RC-Prep\* und SlickGel ES\*.

Aufgrund der verbesserten Fließfähigkeit von EndoREZ Wurzelkanal-Sealer kann der Sealer die Isthmen und anderen Bereiche des Kanalsystems während der Wurzelfüllung erreichen, ohne dass dazu ein besonderes Gerät verwendet werden muss.

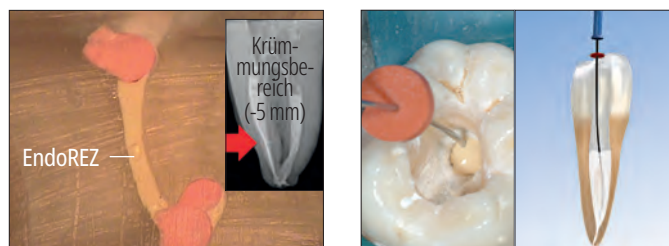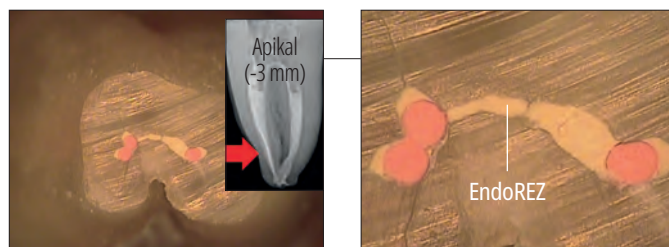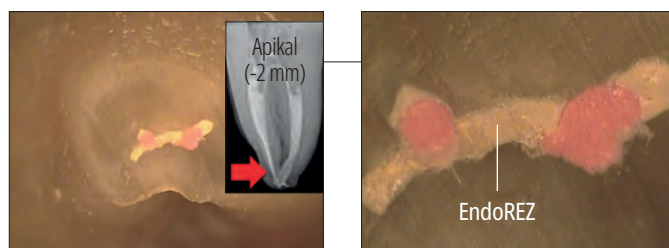

Der patentierte NaviTip™ von Ultradent füllt mit EndoREZ Wurzelkanal-Sealer in einem Schritt die gesamte Kanal-Anatomie.

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent. 1. realitysthetics.com. 2. Zmener O, Pameijer CH. Clinical and radiographic evaluation of a resin-based root canal sealer: an eight-year update. *J Endod.* 2010;36(8):1311-1314. 3. Zmener O, Banegas G, Pameijer C. Efficacy of an automated instrumentation technique in removing resin-based, zinc oxide and eugenol endodontic sealers when retreatment root canal: an in vitro study. *Endod Pract.* 2005;8:29-33. 4. Zmener O, Pameijer CH, Serrano SA, Vidueira M, Macchi RL. Significance of moist root canal dentin with the use of methacrylate-based endodontic sealers: an in vitro coronal dye leakage study. *J Endod.* 2008;34(1):76-79. 5. Hammad M, Qualtrough A, Silikas N. Effect of new obturating materials on vertical root fracture resistance of endodontically treated teeth. *J Endod.* 2007;33(6):732-736. doi:10.1016/j.joen.2007.02.004 6. Daten liegen vor, auf Anfrage.




## ABLAUF DER KLINISCHEN ANWENDUNG VON ENDOREZ WURZELKANAL-SEALER



1. Eine Guttaperchaspitze an die Arbeitslänge anpassen. Röntgenologisch überprüfen.



2. Feuchtigkeit aus dem Kanal entfernen, durch Ausaugen mit dem Capillary Tip und dem Ultradent™ Luer Vacuum Adapter, anschließend mit einer Papierspitze prüfen (die Papierspitze sollte nur 1–3 mm hoch feucht sein). Der Kanal sollte vor der Füllung mit dem hydrophilen EndoREZ Wurzelkanal-Sealer feucht und nicht ausgetrocknet sein. Den hydrophilen EndoREZ Wurzelkanal-Sealer mit einem NaviTip™ 29 ga (0,33 mm Ø) Single Sideport einbringen. Dazu den Tip bis 2–4 mm vor der Arbeitslänge einführen.

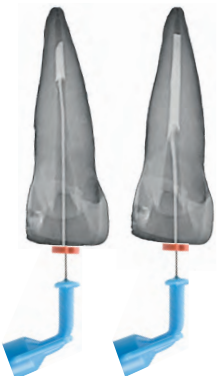

3. EndoREZ Wurzelkanal-Sealer mit leichtem Druck in den Kanal einbringen, während der Tip langsam zurückgezogen wird. Die Spitze des NaviTips während des Einbringens von EndoREZ Wurzelkanal-Sealer und des Zurückziehens im Material eingetaucht lassen.



4. Den Guttapercha-Masterpoint langsam bis zur Arbeitslänge einbringen. Dabei eine einzige sanfte Bewegung zum apikalen Bereich ausführen. Eine „pumpende“ Bewegung mit dem Point ist zu vermeiden. Ergänzend können weitere dünne EndoREZ Points eingeschoben werden. Ohne Accelerator bindet EndoREZ Wurzelkanal-Sealer in 20–30 Minuten im Kanal ab.



5. EndoREZ Wurzelkanal-Sealer 40 Sekunden mit der VALO™ LED-Polymerisationsleuchte lichthärten. Die lichtpolymerisierte Schicht ist weniger als 0,3 mm dick aber für die sofortige Restauration hilfreich. Überschüssige Guttapercha mit einem sehr heißen Instrument oder einer Ultraschallspitze (ohne Wasserkühlung) abtrennen. Nach der Obturation die Restauration abschließen, um den Wurzelkanal richtig zu versiegeln. Keine Wattepellets zwischen Obturation und provisorischer Restauration belassen.




IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



**5900 – EndoREZ Kit**  
1 x 5 ml (8,15 g) Spritze  
20 x Mixing Tips

## VERSIEGELUNG DES WURZELKANALS

Der EndoREZ Wurzelkanal-Sealer auf Kunststoffbasis hat eine verbesserte Fließfähigkeit. Durch die Applikation mit Skini Spritze und NaviTip kann EndoREZ Wurzelkanal-Sealer bis ins apikale Drittel eingebracht werden. Je nach der Stärke des letzten Instruments kann das Einbringen auf verschiedenen Höhen erfolgen. Eine Instrumentierung mit kleinem Durchmesser (230) ermöglicht es, EndoREZ 2 mm vor der Arbeitslänge einzubringen. Bei Instrumentierung mit großen Durchmessern (von 60 bis 80) wird empfohlen, EndoREZ 4 mm vor der Arbeitslänge einzubringen.

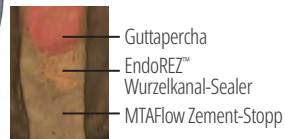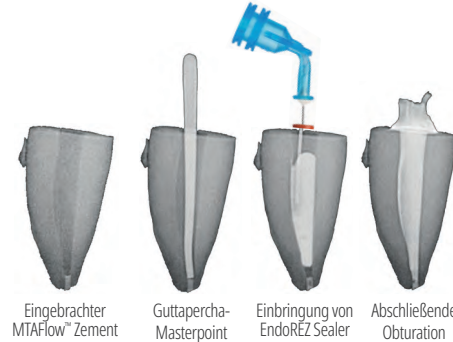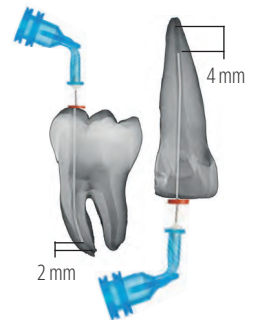

Fälle mit unvollständiger Apexbildung oder resorbiertem Foramen können mit einem apikalen MTAFlow Zement-Stopp an einem Termin behandelt werden. Dies verhindert den Austritt von EndoREZ Wurzelkanal-Sealer und sorgt für eine biologische Versiegelung am Foramen apicale.



## Opalescence™ Endo

„WALKING BLEACH“ FÜR DEVITALE ZÄHNE  
– 35 % WASSERSTOFFPEROXID



- Medizinische Zahnaufhellung
- 35 % Wasserstoffperoxid
- Einfaches Einbringen in die Pulpakammer
- 1–5-tägige Behandlung

Weitere Informationen zu Opalescence Endo sind auf Seite 19 zu finden.




## Skini Spritze




In der Zahnheilkunde behindert Luft in den Wurzelkanälen oft die Verarbeitung von Materialien. Es ist unerlässlich, diese Luft zu verdrängen, um eine vorhersagbare Abdichtung zu erreichen und den aufbereiteten Kanal vollständig zu füllen. Die Applikation von EndoREZ Wurzelkanal-Sealer eignet sich optimal, um Luft zu verdrängen und damit die bestmögliche Versiegelung zu erzielen, da Materialien vom Kanalboden nach oben abgegeben werden, wodurch eine blasenfreie und vollständige Applikation erreicht wird.



1. EndoREZ™ Wurzelkanal-Sealer aus der Doppelspritze mit dem Mixing Tip in das hintere Ende einer Skini Spritze einfüllen.

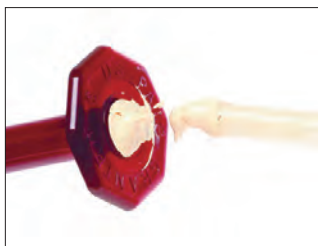

2. Die Spritze bis zum hinteren Ende füllen, so dass keine Luft zwischen Stempel und EndoREZ Wurzelkanal-Sealer eingeschlossen wird.

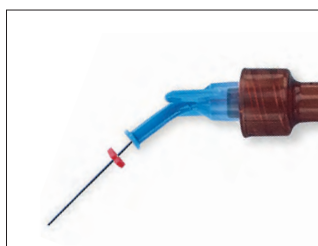

3. Einen NaviTip™ 29 ga (0,33 mm Ø) Single Sideport mit der gewünschten Länge aufsetzen. Außerhalb des Mundes eine kleine Menge EndoREZ Wurzelkanal-Sealer herausdrücken, um den Materialfluss zu überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass das Kanülenende nicht im apikalen Bereich verkeilt ist, bevor Sie den Sealer herausdrücken.



|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 0,5 ml               | 20 St.      |
| <b>Skini Spritze</b> | <b>1680</b> |

## PermaFlo™ Purple


KOMPOSIT MIT ANATOMISCHER  
INDIKATOR-FUNKTION




Micro 20 ga (0,9 mm Ø) Tip

Das PermaFlo Purple Komposit wird mit einem Adhäsivsystem verwendet, um eine leicht erkennbare koronale Versiegelung zu schaffen. Die violette Farbe erleichtert die Erkennung des Pulpakammerbodens bei einem künftigen Zugang zur Pulpakammer zu Therapie Zwecken.



Foto von Dr. Carlos Ramos.

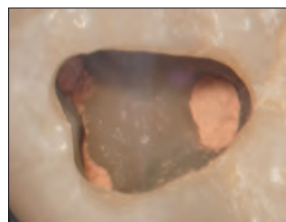

1. Die Behandlung des Wurzelkanals ist abgeschlossen und überschüssiger EndoREZ Wurzelkanal-Sealer in der Pulpakammer wurde entfernt. (Falls an der Kanalöffnung beträchtliche Mengen nicht ausgehärteter EndoREZ Wurzelkanal-Sealer freiliegen, eine dünnen Schicht Ultra-Blend™ plus Liner auftragen und lichterhärten.) Trocken tupfen oder verblasen. Hinweis: Falls Eugenol-haltige Sealer oder Sealer auf ähnlicher Basis verwendet wurden, vollständig aushärten lassen und vor dem Bonding alle Kammer- und/oder Präparationsflächen mit einem Diamantschleifer auffrischen.

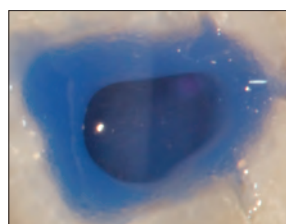

2. Ätzen und Peak™ Universal Bond Adhäsiv auftragen; lichterhärten.

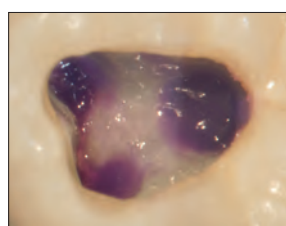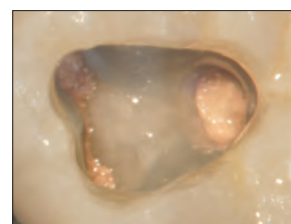

3. Eine Schicht PermaFlo Purple auftragen, die dünner als 1 mm ist. 10 Sekunden lichterhärten, um eine sofortige „koronale Versiegelung“ zu schaffen. Bei Wurzelstift- und/oder Stumpfaufbauten markiert die violette Farbe die Position der Wurzelkanalpräparation. Der Kontrast zeigt dem Zahnarzt den Pulpakammerboden im Verhältnis zu den Kanalöffnungen, wodurch das Risiko einer Perforation minimiert wird.

**Hinweis: Dentin-Haftvermittler zuerst auftragen. Bitte beachten Sie, dass eugenolhaltige Sealer die Polymerisation von Kunststoff-Adhäsiven verhindern können. Wir empfehlen den hydrophilen EndoREZ™ Kunststoffsealer.**

IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN



**962 – PermaFlo Purple Komposit Spritzen-Kit**  
2 x 1,2 ml (2,28 g) Spritzen  
4 x Micro 20 ga (0,9 mm Ø) Tips



# RESTORATIVE SOLUTION

## Das Rundum-System für Ihre HOCHWERTIGEN RESTAURATIONEN

Die Systemlösung für  
Restaurationen von Ultradent  
Products kombiniert einige  
unserer beliebtesten Produkte –  
für langlebige und ästhetische  
Restaurationen.



[ULTRADENTPRODUCTS.COM/RESTORATIVE](http://ULTRADENTPRODUCTS.COM/RESTORATIVE)





## Ultradent™ Luer Vacuum Adapter




Hinweis: Capillary Tips sollten niemals zur Abgabe von Spülmaterien oder Wurzelkanal-Versiegeln verwendet werden.

- Effektive Zeitersparnis für jede Praxis
- Trocknet Kanäle schnell und effizient
- Minimiert Papierspitzenverbrauch



Setzen Sie den Luer Vacuum Adapter von Ultradent auf jeden beliebigen Absaugschlauch an der Behandlungseinheit und entfernen Sie effizient Spülungen und Gewebereste. Der mit jedem Luer-Tip kompatible Luer Vacuum Adapter spart Zeit und minimiert den Verbrauch von Papierspitzen. Er kann mit Capillary Tips angewendet werden, die konische, flexible Kanülen haben, die zur intensiven Reinigung und Trocknung tief in die Kanäle eindringen.

### TROCKNET KANÄLE SCHNELLER ALS JE ZUVOR

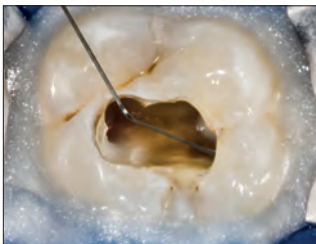


1. Mit Kofferdam und OpalDam (Kunststoffbarriere) isolieren. Kanäle mit dem NaviTip™ 31 ga Double Sideport Irrigator Tip spülen.



2. Den Luer Vacuum Adapter mit Capillary Tip so tief wie möglich in den Kanal einführen. Spitze während des Absaugens auf und ab bewegen.



3. Mit dem Capillary Tip lässt sich einfach sehen, was aus dem Inneren des Kanals kommt; sein Inhalt kann daher leicht identifiziert werden.

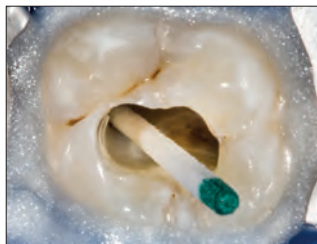

4. Papierspitzen in den Kanal einführen, um die Trockenheit zu prüfen.



230 – Luer Vacuum Adapter 10 St.

## DermaDam™ Synthetic

KOFFERDAM – LATEXFREI



### Keine sensibilisierenden Proteine

DermaDam Synthetic Kofferdam wird nicht mit Naturlatex hergestellt, ist jedoch genauso elastisch und haltbar wie Kofferdam, der aus Naturlatex besteht.



299 – DermaDam Medium Synthetic 0,20 mm 20 St.

330 – DermaDam Medium Synthetic 0,20 mm 60 St.

15 cm x 15 cm

## DermaDam™

KOFFERDAM



- Niedriges Dermatitisrisiko
- Stabil und reißfest
- Puderfrei zur Reduzierung allergischer Reaktionen

DermaDam Kofferdam wird aus reinem Latexgummi hergestellt und ist puderfrei, was das Risiko allergischer Reaktionen reduziert. Die Qualitätsfertigung gewährleistet einen geringen Gehalt an Oberflächenproteinen.



311 – DermaDam Medium 0,20 mm 36 St.

314 – DermaDam Heavy 0,25 mm 36 St.

15 cm x 15 cm

1. realityesthetics.com.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.




## NaviTip™ Übersicht

- Bringen Präparate kontrolliert bis zum apikalen Drittel ein
- Flexible Edelstahlkanülen folgen problemlos gekrümmten Kanälen

|                                                                                     | Produkt        | Empfohlener Tip                                         | Kompatible Tips                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | File-Eze™      | NaviTip™ 29 ga (0,33 mm ø)<br>oder 30 ga (0,30 mm ø)    | NaviTip™ 29 ga (0,33 mm ø)<br>Single Sideport                                                                                          |
|    | EDTA 18 %      | NaviTip™ 31 ga (0,28 mm ø)<br>Double Sideport Irrigator | NaviTip™ 30 ga (0,30 mm ø) und<br>NaviTip™ FX™                                                                                         |
|    | UltraCal™ XS   | NaviTip™ 29 ga (0,33 mm ø)<br>Single Sideport           | Zur direkten<br>Pulpaüberkappung und<br>bei einer Perforation des<br>Pulpakammerbodens den<br>Micro 20 ga (0,90 mm ø) Tip<br>verwenden |
|  | Citric Acid    | NaviTip™ FX™                                            | NaviTip™ 30 ga (0,30 mm ø)<br>und NaviTip™ 31 ga (0,28 mm ø)<br>Double Sideport Irrigator                                              |
|  | EndoREZ™       | NaviTip™ 29 ga (0,33 mm ø)                              | NaviTip™ 29 ga (0,33 mm ø)<br>Single Sideport                                                                                          |
|  | MTAFlow™       | NaviTip™ 29 ga (0,33 mm ø)                              | Micro 20 ga (0,90 mm ø)                                                                                                                |
|  | MTAFlow™ White | NaviTip™ 29 ga (0,33 mm ø)                              | Micro 20 ga (0,90 mm ø)                                                                                                                |



## File-Eze™ EDTA EDTA-GLEITMITTEL

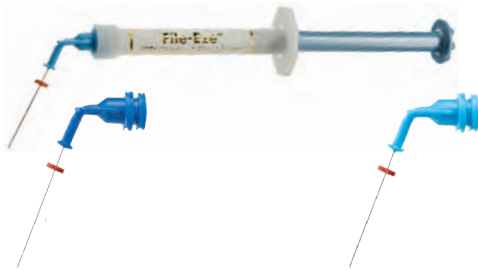

NaviTip™ 30 ga (0,30 mm ø)/25 mm

NaviTip™ 29 ga (0,33 mm ø)/25 mm

- Peroxidfrei; beeinträchtigt Abbildung von Kunststoffsealern nicht

File-Eze EDTA-Gleitmittel ist ein wirksames, 19 %iges EDTA-Präparat in wasserlöslicher, visköser Gelform, das als Chelatbildner und Gleitmittel die Wurzelkanalaufbereitung erleichtert.

Hinweis: Die folgenden Beispiele für Gleitmittel enthalten Peroxide, die nicht mit EndoREZ Wurzelkanal-Sealer kompatibel sind: EndoGel\*, EndoSequence\*, Glyde\*, ProLube\*, RC-Prep\* und SlickGel ES\*.



**1075 – File-Eze Kit**  
4 x 1,2 ml (1,43 g) Spritzen  
je 5 x 30 ga (0,30 mm ø) NaviTips  
17 mm, 21 mm, 25 mm und 27 mm



**297 – File-Eze Refill**  
4 x 1,2 ml (1,43 g) Spritzen



**682 – File-Eze IndiSpense™ Spritze 1 St.**  
30 ml (35,64 g) Spritze


## Ultradent™ EDTA 18 % Lösung




NaviTip™ FX™ 30 ga (0,30 mm ø)/25 mm

NaviTip™ FX™ 30 ga (0,30 mm ø)/17 mm


Als Wurzelkanal-Chelatbildner, der über eine Chelatbildung konditioniert/reinigt, ist Ultradent EDTA 18 % Lösung die Spülung der Wahl für die Entfernung der Smear Layer und kann als abschließende Spülung vor der Obturation verwendet werden.

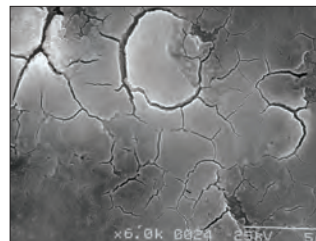


1. Nach der Kanalaufbereitung (keine Spül- oder Gleitmittel). Smear Layer intakt.

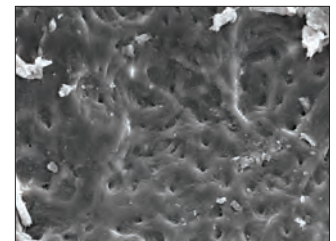

2. Nach Kanalaufbereitung plus Natriumhypochlorit. Dentinkanälchen sind immer noch verschlossen.

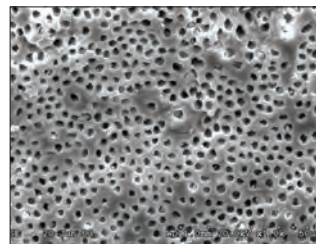

3. Nach Kanalaufbereitung mit Natriumhypochlorit und EDTA. Smear Layer ist entfernt. Saubere, offene Tubuli.

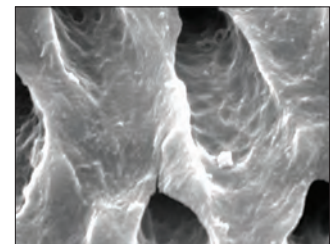

4. Vergrößerung von Abbildung 3.



**162 – EDTA IndiSpense Spritze 1 St.**  
30 ml (33,27 g) Spritze

\* Marke eines anderen Unternehmens als Ultradent.


Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.





## UltraCal™ XS

CALCIUMHYDROXIDPASTE (35 %)

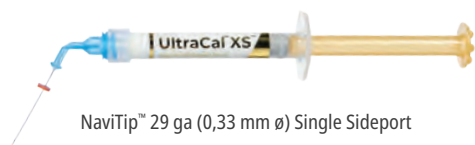

NaviTip™ 29 ga (0,33 mm ø) Single Sideport

- Röntgensichtbar
- Hoher pH-Wert
- Ideale Applikation bis zum Apex!

UltraCal XS Calciumhydroxidpaste ist eine Paste in wässriger Lösung, speziell formuliert, röntgensichtbar und mit einem hohen pH-Wert (12,5). Es empfiehlt sich, den größeren 29 ga (0,33 mm ø) NaviTip™ Single Sideport für einen leichteren Fluss zu verwenden und eine direkte Applikation zu ermöglichen. UltraCal XS-Reste können mit Ultradent Citric Acid und einem NaviTip™ FX™ einfach und gründlich aus dem Kanal entfernt werden.

Die UltraCal XS Paste erhöht den pH-Wert des Dentins auf einen alkalischen Wert. Somit ist sie als medikamentöse Einlage in klinischen Situationen wie Wurzelresorption, Pulpaüberkappung, Apexifikation und Perforationen ideal für eine Versorgung zwischen den Terminen.<sup>1</sup>



**5145 – UltraCal XS Refill**  
4 x 1,2 ml (1,76 g) Spritzen



**5149 – UltraCal XS Econo Refill**  
20 x 1,2 ml (1,76 g) Spritzen

## Ultradent™ Citric Acid 20 % Spüllösung



NaviTip™ FX™ 30 ga (0,30 mm ø)/25 mm



NaviTip™ FX™ 30 ga (0,30 mm ø)/17 mm



1,2 ml-Leerspritze

- Empfohlen zur Reinigung/Konditionierung aufbereiteter Wurzelkanäle
- Entfernt Mineralien und Smear Layer
- Leicht visköse Formulierung erleichtert das Gleiten
- Entfernt Calciumhydroxidpaste

Ultradent Citric Acid ist ein leicht saures Material zur wirkungsvollen Auflösung/Reinigung von Calciumhydroxid-Resten aus dem Wurzelkanal (z. B. UltraCal™ XS Paste). Es wird auch zur Entfernung von Smear Layer von Dentinwänden empfohlen.





**329 – Citric Acid IndiSpense™ Spritze 1 St.**  
30 ml (31,26 g) Spritze

<sup>1</sup> Pedrinha VF, Cuellar MRC, de Barros MC, et al. The vehicles of calcium hydroxide pastes interfere with antimicrobial effect, biofilm polysaccharidic matrix, and pastes' physicochemical properties. *Biomedicines*. 2022;10(12):3123. doi:10.3390/biomedicines10123123.



## SPÜLPROTOKOLL

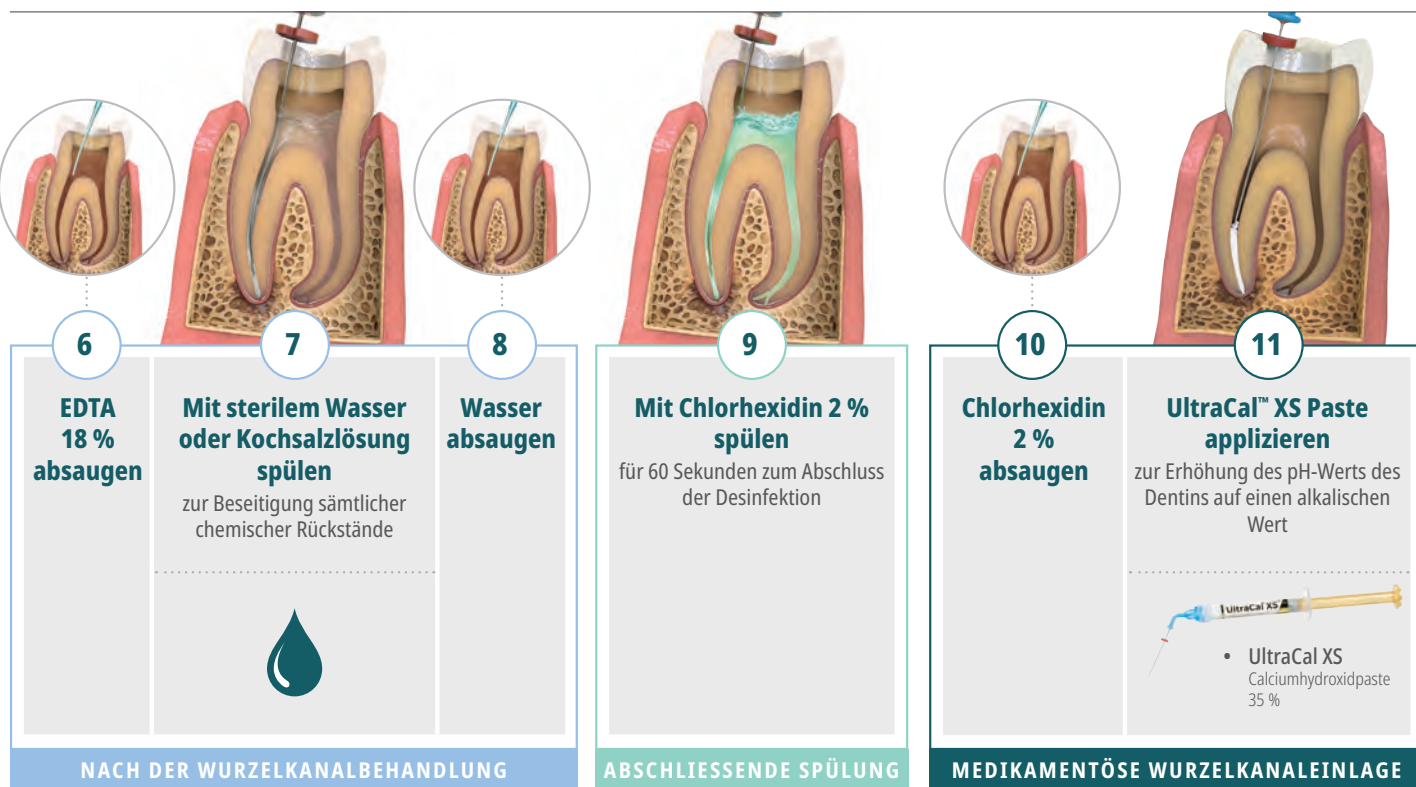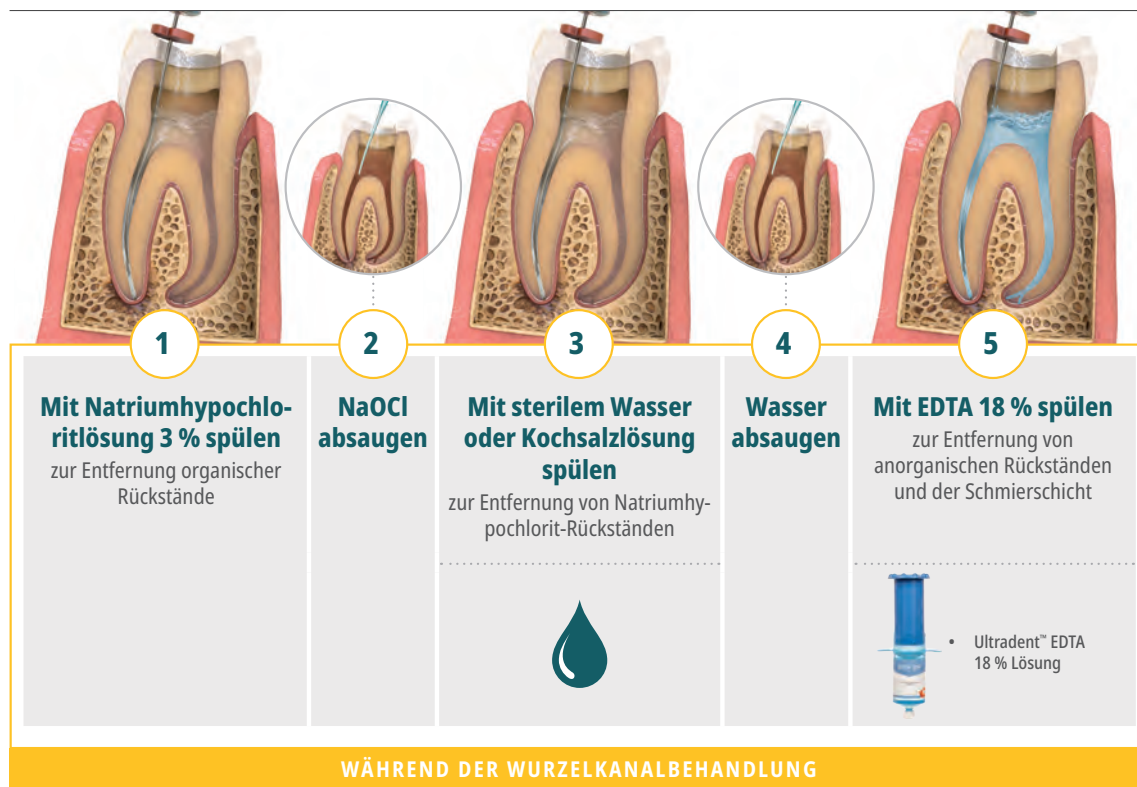



**Bitte beachten: Die Durchgängigkeit und Funktion müssen vor dem intraoralen Gebrauch stets überprüft werden.**

## WARNUNG:

- Den empfohlenen endodontischen Tip verwenden • Darauf achten, dass der Endo Stop in Position ist
- Besonders vorsichtig vorgehen, wenn keine Sideport Tips verwendet werden • Darauf achten, dass der Tip sich nicht im Kanal verkeilt



## Capillary Tips

- Saugt Wurzelkanäle ab und minimiert Verbrauch von Papierspitzen
- Konische, flexible Form folgt auch gekrümmten Kanälen
- Hervorragend geeignet zur Behandlung dentaler Abszesse

**Nicht zur Applikation von Spüllösungen oder endodontischen Materialien verwenden.**

Kann zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Wurzelkanälen am Ultradent™ Luer Vacuum Adapter befestigt werden.

| LOK-TITE™ | Innendurchmesser | 20 St. | 50 St. |
|-----------|------------------|--------|--------|
| Capillary | 0,36 mm          | 341    | 3099   |
| Capillary | 0,48 mm          | 186    | 1425   |



## Micro Capillary™ Tips

- Kontrastreiche Farbe zur deutlichen Unterscheidung von Weichgeweben
- Die kleinsten Spritzguss-Spitzen der Welt

Kann zur Entfernung von Feuchtigkeit aus kleinen Präparationen und kleinen Parodontaltaschen am Ultradent Luer Vacuum Adapter befestigt werden.

| LOK-TITE™       | Spitzenlänge | 20 St. |
|-----------------|--------------|--------|
| Micro Capillary | 5 mm         | 1120   |
| Micro Capillary | 10 mm        | 1121   |



## Endo-Eze™ Irrigator Tip

- Ideale Reichweite und Durchpressen von Flüssigkeiten in Richtung Kanalwand, wodurch der Druck in Richtung Apex reduziert wird
- Mit flexibler, stumpfer Kanüle und einzigartiger, nicht verblockender Spezialspitze
- Unsteril

Zu verwenden mit: Ultradent™ 5 ml Spritze.

|                                    | Spitzenlänge | 20 St. |
|------------------------------------|--------------|--------|
| 27 ga (0,40 mm) Endo-Eze Irrigator | 25 mm        | 207    |




22 ga 20 ga 19 ga 18 ga

## Endo-Eze™ Tips

- Hervorragend geeignet für endodontische Verfahren wie Stiftzementierung und Stumpfaufbauten
- Flexible, stabile Kanülen
- Leicht zu biegen
- Länge 19 mm

Zu verwenden mit: PermaFlo™ DC (20 ga) und Luft-/Wasserspritzen. Mit Ultradent Spritzen verwenden.

|                | Biegbarer Tip | 20 St. | 100 St. |
|----------------|---------------|--------|---------|
| 22 ga Endo-Eze | 0,70 mm       | 348    | 1431    |
| 20 ga Endo-Eze | 0,90 mm       | 347    | 1430    |
| 19 ga Endo-Eze | 1,06 mm       | 346    | 1429    |
| 18 ga Endo-Eze | 1,25 mm       | 345    | 1428    |

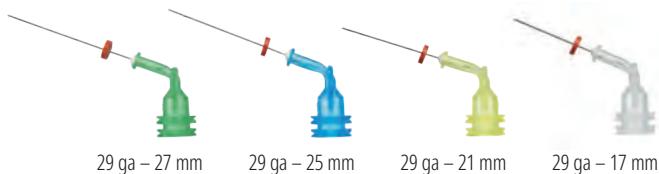

29 ga – 27 mm 29 ga – 25 mm 29 ga – 21 mm 29 ga – 17 mm

## NaviTips™ 29 ga

mit Single Sideport

- Dient zur Lenkung des Materialflusses durch die seitliche Öffnung des Tips und reduziert so das Risiko für einen Austritt des Produkts
- Die flexible Edelstahl-Kanüle folgt problemlos gekrümmten Kanälen
- Biegbarer Tip

**Stärke 29 ga (0,33 mm ø)** für das Einbringen von Pastenmaterialien: MTAFlow™, MTAFlow™ White, EndoREZ™ und UltraCal™ XS.

**HINWEIS:** Die UltraCal™ XS Calciumhydroxidpaste sollte nur mit den NaviTips 29 ga (0,33 mm ø) Single Sideport verwendet werden.



| LOK-TITE™            | Spitzenlänge | 20 St. |
|----------------------|--------------|--------|
| 29 ga NaviTip        | 27 mm        | 4989   |
| 29 ga NaviTip        | 25 mm        | 4990   |
| 29 ga NaviTip        | 21 mm        | 4991   |
| 29 ga NaviTip        | 17 mm        | 4992   |
| 29 ga–29 ga NaviTips | 27 – 17 mm   | 5143   |

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.






Bitte beachten: Die Durchgängigkeit und Funktion müssen vor dem intraoralen Gebrauch stets überprüft werden.

## WARNUNG:

- Den empfohlenen endodontischen Tip verwenden • Darauf achten, dass der Endo Stop in Position ist
- Besonders vorsichtig vorgehen, wenn keine Sideport Tips verwendet werden • Darauf achten, dass der Tip sich nicht im Kanal verkeilt

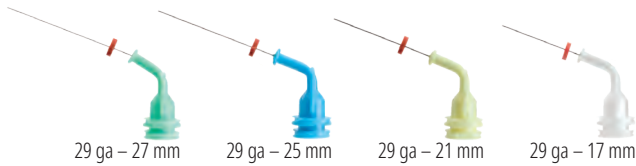


### NaviTips™ 29 ga

- Kontrollierte Applikation der Materialien
- Flexible Edelstahlkanülen folgen problemlos gekrümmten Kanälen
- Biegbarer Tip

Stärke 29 ga (0,33 mm ø) für das Einbringen von Pastenmaterialien: MTAFlow™, MTAFlow™ White, File-Eze™, Ultradent EDTA 18 % Lösung und EndoREZ™.

| LOK-TITE™            | Spitzenlänge | 20 St. | 50 St. |
|----------------------|--------------|--------|--------|
| 29 ga NaviTip        | 27 mm        | 5115   | 1377   |
| 29 ga NaviTip        | 25 mm        | 5114   | 1376   |
| 29 ga NaviTip        | 21 mm        | 5113   | 1374   |
| 29 ga NaviTip        | 17 mm        | 5112   | 1378   |
| 29 ga-29 ga NaviTips | 27 – 17 mm   | 5116   | 1379   |

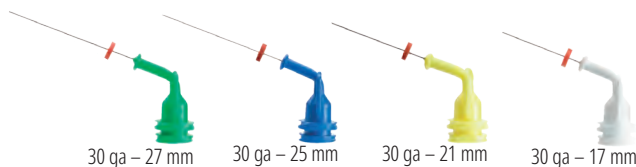


### NaviTips™ 30 ga

- Kontrollierte Applikation der Materialien
- Flexible Edelstahlkanülen folgen problemlos gekrümmten Kanälen
- Biegbarer Tip

Stärke 30 ga (0,30 mm ø) für das Einbringen von Flüssigkeiten: File-Eze™ und Ultradent™ EDTA 18 % Lösung.

| LOK-TITE™            | Spitzenlänge | 20 St. | 50 St. |
|----------------------|--------------|--------|--------|
| 30 ga NaviTip        | 27 mm        | 1354   | 1424   |
| 30 ga NaviTip        | 25 mm        | 1250   | 1423   |
| 30 ga NaviTip        | 21 mm        | 1349   | 1422   |
| 30 ga NaviTip        | 17 mm        | 1249   | 1421   |
| 30 ga-30 ga NaviTips | 27 – 17 mm   | 1351   | 3319   |

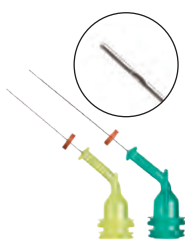

### NaviTips™ 31 ga

mit Double Sideport Irrigator

- Zwei seitliche Öffnungen zur sicheren Applikation von Spülflüssigkeiten minimieren die Gefahr des Durchpressens von Flüssigkeiten über den Apex hinaus
- Eine der dünnsten Kanülen der Welt, 0,28 mm, gelangt in die engsten Kanäle

Zu verwenden mit: Ultradent™ EDTA 18 % Lösung, Ultradent™ Citric Acid 20 % Lösung und Natriumhypochlorid-Lösungen.

| LOK-TITE™     | Spitzenlänge | 20 St. | 50 St. |
|---------------|--------------|--------|--------|
| 31 ga NaviTip | 21 mm        | 5121   | 5122   |
| 31 ga NaviTip | 27 mm        | 5123   | 5124   |



### NaviTips™ FX™ 30 ga

- Einzigartige beflochtene Kanüle reinigt, bürstet und spült gleichzeitig
- Starre Kanüle 0,30 mm

Zu verwenden mit: Ultradent™ Citric Acid 20 % Spüllösung.

Von einem namhaften unabhängigen  
Forschungsinstitut als hervorragend bewertet.<sup>1</sup>

| LOK-TITE™        | Spitzenlänge | 20 St. |
|------------------|--------------|--------|
| 30 ga NaviTip FX | 17 mm        | 1452   |
| 30 ga NaviTip FX | 25 mm        | 1454   |

<sup>1</sup> Clinical Research Associates Newsletter. Volume 29, Issue 1, January 2005.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

## UniCore™ POSTS




- Überlegene Festigkeit
- Ästhetisch und röntgensichtbar
- Farbcodierte Stifte


UniCore Stifte bestehen aus Glasfasern. Die UniCore Stifte bestehen aus unidirektional ausgerichteten Glasfasern und haben eine ähnliche Biegefestigkeit wie Dentin.<sup>2</sup> Der leichte Taper des UniCore Stifts entspricht der natürlichen Anatomie des Zahns.

|                             | Größe 0 | Größe 1                    | Größe 2 | Größe 3 | Größe 4 |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|
| Apikaler Ø                  | 0,6 mm  | 0,8 mm                     | 1,0 mm  | 1,2 mm  | 1,5 mm  |
| Koronaler Ø                 | 1,0 mm  | 1,15 mm                    | 1,35 mm | 1,55 mm | 1,75 mm |
| Taper                       | 2,1°    | 1,8°                       | 1,8°    | 1,8°    | 1,3°    |
| Länge                       | 19 mm   | 19 mm                      | 19 mm   | 19 mm   | 19 mm   |
| Physikalische Eigenschaften |         | UniCore Quarzfaserstift    |         |         |         |
| Biegemodul (GPa)            |         | 43 – 44                    |         |         |         |
| Biegefestigkeit (MPa)       |         | 1500 – 1600                |         |         |         |
| Zugfestigkeit (MPa)         |         | 1200                       |         |         |         |
| Biegemodul bei 30° (GPa)    |         | 13<br>(ähnlich wie Dentin) |         |         |         |
| Scherfestigkeit (MPa)       |         | 70 – 80                    |         |         |         |

Foto von Dr. Carlos Ramos.

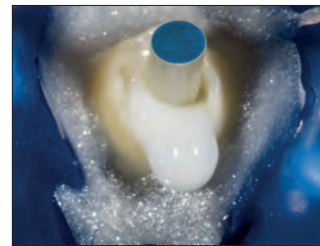

Eingesetzter UniCore-Masterstift.

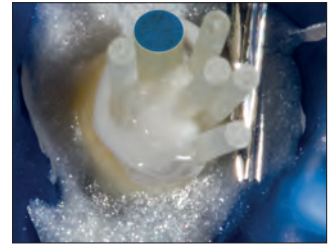

Zusätzliche Nebensterifte.



Endergebnis.



## UNICORE™ STIFT Mit vorgespannten Fasern, zur adhäsiven Befestigung

- Mikromechanische Retention dank mikroporöser Oberfläche
- Keine Stift-Vorbehandlung am Behandlungsstuhl erforderlich
- Röntgensichtbar, über den höchsten ISO-Standards
- Transluzenter Stift lässt bis zur vollständigen Präparationstiefe Licht durch
- Leicht konisches Design folgt der natürlichen Anatomie des Zahns
- Entfernbare, wenn eine erneute endodontische Behandlung erforderlich ist



Der UniCore Stift ist deutlich röntgensichtbarer als der Stift eines führenden Mitbewerbers.

## UniCore Stifte

| Größe | mm     | 5 St. |
|-------|--------|-------|
| 0     | 0,6 mm | 7135  |
| 1     | 0,8 mm | 7125  |
| 2     | 1,0 mm | 7126  |
| 3     | 1,2 mm | 7127  |
| 4     | 1,5 mm | 7128  |



1. realityesthetics.com. 2. Brown PL, Hicks NL. Rehabilitation of endodontically treated teeth using the radiopaque fiber post. *Comp Endod J*. 2003;24(4):275 – 284.



# J-Temp™

TEMPORARY RESIN

## J-Temp™

LICHTHÄRTENDES PROVISORISCHES  
RESTAURATIONS-MATERIAL



Black Mini Tip

Vier klinische Indikationen:

- Provisorische Restaurationen (Endodontie, Walking-Bleach-Technik, Inlays/Onlays, Höckeraufbau)
- Verbindung zwischen mehreren Implantatübertragungspfosten, um eine Dimensionsänderung bei der Abformung zu verhindern
- Halt für Kofferdam-Klammern und Barriere für endodontische Spüllösungen
- Bisshebung und temporärer okklusaler Aufbau bei kieferorthopädischen Behandlungen

- Selbstnivellierend<sup>1</sup>
- Weniger als 5 % Schrumpfungsrate<sup>2</sup>
- Violette Farbe für leichtere Erkennung und Entfernung
- Ohne Farbstoff

J-Temp ist ein röntgenopaker, lichthärtender, fließfähiger Kunststoff auf Methacrylatbasis, der ein beständiges provisorisches Restaurationsmaterial für mehrere klinische Indikationen darstellt. J-Temp ist selbstnivellierend<sup>1</sup>, hat eine Schrumpfungsrate von weniger als 5 %<sup>2</sup>, und seine charakteristische violette Farbe ist leicht von Zahnschmelz und Dentin zu unterscheiden, ohne für den Patienten zu auffällig zu sein. Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und Qualität wird sich J-Temp in Ihrer Praxis schnell etablieren.



### 4897 – J-Temp Spritzen-Kit

4 x 1,2 ml (2,02 g) Spritzen  
20 x Black Mini Tips




## PROVISORISCHE RESTAURATION: ENDODONTIE



1. Wurzelkanäle präparieren.



2. Wattepellet (oder andere Barriere) einbringen und stopfen, um den Kanaleingang zu schützen.

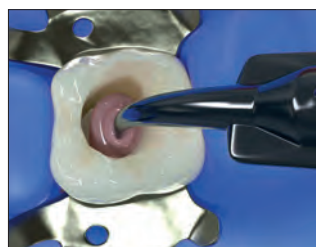

3. Das provisorische Restaurationsmaterial J-Temp schrittweise in Schichten von 2 – 3 mm applizieren.



4. Zwischen den Schichten lichthärten. Zum Anpassen der Okklusion Bohrer verwenden.

1. Daten liegen vor, auf Anfrage. 2. Daten liegen vor, auf Anfrage.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.





ANGELA WELLS – Fire Lake

# APPLIKATION

Tips – Restauration  
Tips – Endodontie  
Spritzen und Spritzenhüllen  
Zubehör



## ULTRADENT™ TIPS APPLIKATIONS- SPEZIALISTEN

Testen Sie unsere Tips mit **LOK-TITE**  
und **COMFORT HUB™**

Luer Lock Tips mit Lok-Tite besitzen Doppelgewinde, die durch Verriegelung des Ansatzes die Sicherheit erhöhen, sowie Flügel für einfaches Aufsetzen und Entfernen.

Tips mit der Comfort Hub Funktion haben größere, ergonomische Flügel, sodass sie sich sicher und bequem greifen lassen.

Die Chemie der von Ihnen verwendeten Materialien ist unterschiedlich. Einige werden chemisch aktiviert und müssen unmittelbar vor der Applikation angemischt werden. Andere haben unterschiedliche Viskositäten. Einige werden in Grübchen und Fissuren eingesetzt, einige im Inneren von Wurzelkanälen und einige auf glatten Oberflächen. Jedes Material, das Sie verwenden, wurde für einen bestimmten Zweck entwickelt. Sollte das Gleiche nicht auch für Ihre Spitzen und Ansätze gelten?

Ultradent fertigt spezielle Ansätze für jedes Material, das wir herstellen. Ob Sie eine Flüssigkeit, ein fließfähiges Komposit oder ein visköses Gel applizieren – wir haben den perfekten Tip für die Anwendung. Und da unsere Ansätze und Spitzen im Hause gefertigt werden, testen wir jedes Design, um sicherzustellen, dass es den höchsten Standards entspricht.



### Black Micro™ FX™ Tip

- Für verschiedene Viskositäten
- Beflockter Ansatz erlaubt es, Materialien in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht zu verteilen

Zu verwenden mit: Composite Wetting Resin, PrimaDry™ und PermaSeal™.

| LOK-TITE™                           | 100 St. |
|-------------------------------------|---------|
| 22 ga (0,70 mm ø)<br>Black Micro FX | 1357    |



### Black Mini™ Tip

- Zur Applikation großer Volumina
- Opaker Kunststoff sichert die Fließfähigkeit von lichterhärtenden Materialien

Zu verwenden mit: J-Temp™, Ultra-Blend™ plus, Ultradent™ LC Block-Out Resin, PermaFlo™, Opalescence™ Boost™, Ultradent™ Diamond Polish Mint, OpalDam™, OpalDam™ Green, Opalescence™ Endo und OraSeal™ Caulking.

| LOK-TITE™  | 20 St. | 100 St. | 500 St. |
|------------|--------|---------|---------|
| Black Mini | 196    | 514     | 1433    |



### Black Mini™ Brush Tip

- Zur kontrollierten, präzisen Applikation von Flüssigkeiten
- Dichte, in der Länge anpassbare Borstenfasern minimieren Blasenbildung
- Nur von Ultradent Products

Zu verwenden mit: Peak™ SE, Sable™ Seek™, Ultradent™ Silane und Ultradent™ Universal Dentin Sealant.

| LOK-TITE™        | 20 St. | 100 St. | 500 St. |
|------------------|--------|---------|---------|
| Black Mini Brush | 190    | 1169    | 1432    |



### Black Micro™ Tip

- Punktueller Applizieren möglich
- Feine Kanülen zur präzisen Applikation

Zu verwenden mit: Ultra-Blend™ plus.

|                                  | 20 St. | 100 St. | 500 St. |
|----------------------------------|--------|---------|---------|
| 22 ga (0,70 mm ø)<br>Black Micro | 194    | 1085    | 1435    |

**Blue Micro™ Tip**

- Punktueller Applizieren möglich
- Feine Kanülen zur präzisen Applikation

Zu verwenden mit: Ultra-Etch™.

|                              | 20 St. | 100 St. | 500 St. |
|------------------------------|--------|---------|---------|
| 25 ga (0,5 mm)<br>Blue Micro | 158    | 127     | 1436    |

**Blue Mini™ Dento-Infusor™ Tip**

- Bietet die gleichen Vorteile für Tissue Management wie der Metal Dento-Infusor™ Tip
- Gezieltes Ausbringen kleinster Hämostatikum-Mengen
- Außendurchmesser: 1,2 mm

Zu verwenden mit: Astringedent™ und Astringedent™ X.

| LOK-TITE™                  | mm   | 20 St. | 100 St. | 500 St. |
|----------------------------|------|--------|---------|---------|
| Blue Mini<br>Dento-Infusor | 1,20 | 128    | 1086    | 1440    |

**Inspirational™ Brush Tip**

- Appliziert visköse oder gefüllte Materialien; der interne Spiralkanal fördert die Fließfähigkeit
- Dichte, in der Länge anpassbare Borstenfasern minimieren Blasenbildung

Zu verwenden mit: Composite Wetting Resin, Peak™ Universal Bond, PQ1™, Ultradent™ Porcelain Etch, Ultra-Etch™, UltraSeal XT™ plus und UltraSeal XT™ hydro.

| LOK-TITE™           | 20 St. | 100 St. | 500 St. |
|---------------------|--------|---------|---------|
| Inspirational Brush | 710    | 123     | 1033    |

**Metal Dento-Infusor™ Tip mit Comfort Hub™**

- Das Comfort Hub™ Design sorgt für eine sichere, komfortable Kontrolle beim Aufsetzen und Entfernen des Tips
- Appliziert blutstillende Mittel präzise und entfernt wirksam oberflächliches Koagulum
- Stumpfe, gebogene Kanüle mit weichen Borsten ermöglicht sanften Druck auf den Sulkus
- Der erste Tip von Ultradent, der „MDI“, eignet sich nach wie vor ausgezeichnet für erfolgreiches Tissue Management

Zu verwenden mit: Astringedent™, Astringedent™ X, ViscoStat™, ViscoStat™ Clear, PQ1™ und Peak™ Universal Bond.

| COMFORT HUB™                           |        |         |         |  |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|--|
| LOK-TITE™                              | 20 St. | 100 St. | 500 St. |  |
| 19 ga (1,06 mm)<br>Metal Dento-Infusor | 4954   | 4955    | 4956    |  |





## Micro Capillary™ Tips

- Kontrastreiche Farbe zur deutlichen Unterscheidung von Weichgeweben
- Die kleinsten Spritzguss-Spitzen der Welt

Kann zur Entfernung von Feuchtigkeit aus kleinen Präparationen und kleinen Parodontaltaschen am Ultradent Luer Vacuum Adapter befestigt werden.

| LOK-TITE™              | mm | 20 St. |
|------------------------|----|--------|
| 0,2 mm Micro Capillary | 5  | 1120   |
| 0,2 mm Micro Capillary | 10 | 1121   |



## Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tip

- Weitlumige Kanüle ermöglicht gleichbleibenden Durchfluss
- Standardapplikator für fließfähiges Komposit

Zu verwenden mit: Opalescence™ Boost™, MTAFlow™, MTAFlow™ White, PermaFlo™, PermaFlo™ Purple, PermaFlo™ Pink, OpalDam™, OpalDam™ Green, UltraCal™ XS und J-Temp™.

| LOK-TITE™              | 20 St. | 100 St. | 500 St. |
|------------------------|--------|---------|---------|
| 20 ga (0,9 mm ø) Micro | 1168   | 1252    | 1437    |



## SoftEZ™ Tip

- Kunststoff-Fasern sorgen für sichtbares, kontrolliertes Applizieren
- Pinselform erleichtert glattes Auftragen

Zu verwenden mit: Enamelast™.

| LOK-TITE™ | 50 St. |
|-----------|--------|
| SoftEZ    | 4712   |



## SST™ – Surgical Suction Tip

- Ideal für die Feinabsaugung
- Spitzenöffnung mit großem Durchmesser

Zu verwenden mit: Ultradent™ Luer Vacuum Adapter für kleine parodontale oder endodontische Operationen sowie kontrolliertes Absaugen von Opalescence™ Boost™.

| LOK-TITE™ | 20 St. |
|-----------|--------|
| SST       | 1248   |



## Ultradent™ Mixing Tip

- Mischen und Ausbringen in einem Arbeitsgang

Zu verwenden mit: UltraTemp™, UltraTemp™ REZ II, EndoREZ™ und PermaFlo™ DC.

|                  | 20 St. |
|------------------|--------|
| Ultradent Mixing | 5920   |

**White Mac™ Tip**

- Zur Applikation großer Volumina
- Applikationsansatz ganz aus Kunststoff
- Größerer Winkel für einfache intraorale Applikation

Zu verwenden mit: OraSeal™ Caulking, OraSeal™ Putty, Opalustre™ und dickflüssigeren Pasten.

|           | 20 St. | 100 St. |
|-----------|--------|---------|
| White Mac | 661    | 1361    |

Bitte beachten: Die Durchgängigkeit und Funktion müssen vor dem intraoralen Gebrauch stets überprüft werden.

**WARNUNG:**

- Den empfohlenen endodontischen Tip verwenden • Darauf achten, dass der Endo Stop in Position ist
- Besonders vorsichtig vorgehen, wenn keine Sideport Tips verwendet werden • Darauf achten, dass der Tip sich nicht im Kanal verkeilt

**Capillary Tips**

- Saugt Wurzelkanäle ab und minimiert Verbrauch von Papierspitzen
- Konische, flexible Form folgt auch gekrümmten Kanälen
- Hervorragend geeignet zur Behandlung dentaler Abszesse

Nicht zur Applikation von Spüllösungen oder endodontischen Materialien verwenden.

Kann zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Wurzelkanälen am Ultradent™ Luer Vacuum Adapter befestigt werden.

| LOK-TITE™ | Innendurchmesser | 20 St. | 50 St. |
|-----------|------------------|--------|--------|
| Capillary | 0,36 mm          | 341    | 3099   |
| Capillary | 0,48 mm          | 186    | 1425   |

**Micro Capillary™ Tips**

- Kontrastreiche Farbe zur deutlichen Unterscheidung von Weichgeweben
- Die kleinsten Spritzguss-Spitzen der Welt

Kann zur Entfernung von Feuchtigkeit aus kleinen Präparationen und kleinen Parodontaltaschen am Ultradent Luer Vacuum Adapter befestigt werden.

| LOK-TITE™       | Spitzenlänge | 20 St. |
|-----------------|--------------|--------|
| Micro Capillary | 5 mm         | 1120   |
| Micro Capillary | 10 mm        | 1121   |

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



Bitte beachten: Die Durchgängigkeit und Funktion müssen vor dem intraoralen Gebrauch stets überprüft werden.

## WARNUNG:

- Den empfohlenen endodontischen Tip verwenden
- Darauf achten, dass der Endo Stop in Position ist
- Besonders vorsichtig vorgehen, wenn keine Sideport Tips verwendet werden
- Darauf achten, dass der Tip sich nicht im Kanal verkeilt



## Endo-Eze™ Irrigator Tip

- Ideale Reichweite und Durchpressen von Flüssigkeiten in Richtung Kanalwand, wodurch der Druck in Richtung Apex reduziert wird
- Mit flexibler, stumpfer Kanüle und einzigartiger, nicht verblockender Spezialspitze
- Unsteril

Zu verwenden mit: Ultradent™ 5 ml Spritze.

|                                       | Spitzenlänge | 20 St. |
|---------------------------------------|--------------|--------|
| 27 ga (0,40 mm)<br>Endo-Eze Irrigator | 25 mm        | 207    |




22 ga 20 ga 19 ga 18 ga

## Endo-Eze™ Tips

- Hervorragend geeignet für endodontische Verfahren wie Stifzementierung und Stumpfaufbauten
- Flexible, stabile Kanülen
- Leicht zu biegen
- Länge 19 mm

Zu verwenden mit: PermaFlo™ DC (20 ga) und Luft-/Wasserspritzen. Mit Ultradent Spritzen verwenden.

|                | Biegbarer Tip | 20 St. | 100 St. |
|----------------|---------------|--------|---------|
| 22 ga Endo-Eze | 0,70 mm       | 348    | 1431    |
| 20 ga Endo-Eze | 0,90 mm       | 347    | 1430    |
| 19 ga Endo-Eze | 1,06 mm       | 346    | 1429    |
| 18 ga Endo-Eze | 1,25 mm       | 345    | 1428    |

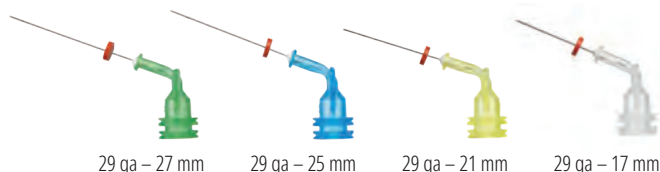

29 ga – 27 mm 29 ga – 25 mm 29 ga – 21 mm 29 ga – 17 mm

## NaviTips™ 29 ga

mit Single Sideport


- Dient zur Lenkung des Materialflusses durch die seitliche Öffnung des Tips und reduziert so das Risiko für einen Austritt des Produkts
- Die flexible Edelstahl-Kanüle folgt problemlos gekrümmten Kanälen
- Biegbarer Tip

Stärke 29 ga (0,33 mm ø) für das Einbringen von Pastenmaterialien: MTAFlow™, MTAFlow™ White, EndoREZ™ und UltraCal™ XS.



HINWEIS: Die UltraCal™ XS Calciumhydroxidpaste sollte nur mit den NaviTips 29 ga (0,33 mm ø) Single Sideport verwendet werden.

| LOK-TITE™              | Spitzenlänge | 20 St. |
|------------------------|--------------|--------|
| 29 ga NaviTip          | 27 mm        | 4989   |
| 29 ga NaviTip          | 25 mm        | 4990   |
| 29 ga NaviTip          | 21 mm        | 4991   |
| 29 ga NaviTip          | 17 mm        | 4992   |
| 29 ga – 29 ga NaviTips | 27 – 17 mm   | 5143   |

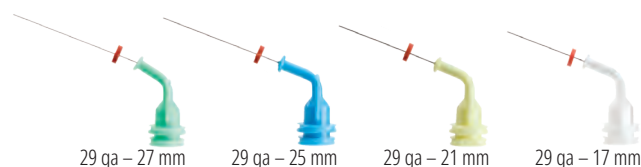

29 ga – 27 mm 29 ga – 25 mm 29 ga – 21 mm 29 ga – 17 mm

## NaviTips™ 29 ga

- Kontrollierte Applikation der Materialien
- Flexible Edelstahlkanülen folgen problemlos gekrümmten Kanälen
- Biegbarer Tip

Stärke 29 ga (0,33 mm ø) für das Einbringen von Pastenmaterialien: MTAFlow™, MTAFlow™ White, File-Eze™, Ultradent EDTA 18 % Lösung und EndoREZ™.


| LOK-TITE™              | Spitzenlänge | 20 St. | 50 St. |
|------------------------|--------------|--------|--------|
| 29 ga NaviTip          | 27 mm        | 5115   | 1377   |
| 29 ga NaviTip          | 25 mm        | 5114   | 1376   |
| 29 ga NaviTip          | 21 mm        | 5113   | 1374   |
| 29 ga NaviTip          | 17 mm        | 5112   | 1378   |
| 29 ga – 29 ga NaviTips | 27 – 17 mm   | 5116   | 1379   |

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



**WARNUNG:**


- Den empfohlenen endodontischen Tip verwenden • Darauf achten, dass der Endo Stop in Position ist
- Besonders vorsichtig vorgehen, wenn keine Sideport Tips verwendet werden • Darauf achten, dass der Tip sich nicht im Kanal verkeilt

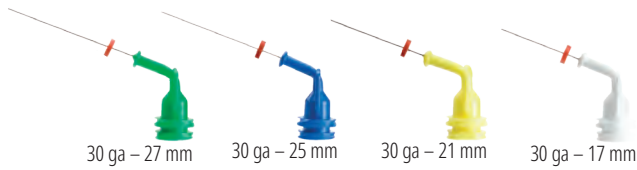**NaviTips™ 30 ga**

- Kontrollierte Applikation der Materialien
- Flexible Edelstahlkanülen folgen problemlos gekrümmten Kanälen
- Biegbarer Tip

Stärke 30 ga (0,30 mm ø) für das Einbringen von Flüssigkeiten: File-Eze™ und Ultradent™ EDTA 18 % Lösung.

| LOK-TITE™            | Spitzenlänge | 20 St. | 50 St. |
|----------------------|--------------|--------|--------|
| 30 ga NaviTip        | 27 mm        | 1354   | 1424   |
| 30 ga NaviTip        | 25 mm        | 1250   | 1423   |
| 30 ga NaviTip        | 21 mm        | 1349   | 1422   |
| 30 ga NaviTip        | 17 mm        | 1249   | 1421   |
| 30 ga-30 ga NaviTips | 27 – 17 mm   | 1351   | 3319   |

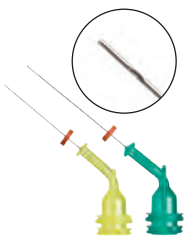**NaviTips™ 31 ga**  
*mit Double Sideport Irrigator*

- Zwei seitliche Öffnungen zur sicheren Applikation von Spülflüssigkeiten minimieren die Gefahr des Durchpressens von Flüssigkeiten über den Apex hinaus
- Eine der dünnsten Kanülen der Welt, gelangt in die engsten Kanäle

Zu verwenden mit: Ultradent™ EDTA 18 % Lösung, Ultradent™ Citric Acid 20 % Lösung und Natriumhypochlorid-Lösungen.

| LOK-TITE™     | Spitzenlänge | 20 St. | 50 St. |
|---------------|--------------|--------|--------|
| 31 ga NaviTip | 21 mm        | 5121   | 5122   |
| 31 ga NaviTip | 27 mm        | 5123   | 5124   |

**NaviTips™ FX™ 30 ga**

- Einzigartige beflochtene Kanüle reinigt, bürstet und spült gleichzeitig
- Starre Kanüle 0,30 mm

Zu verwenden mit: Ultradent™ Citric Acid 20 % Lösung und Ultradent EDTA 18 % Lösung.

Von einem namhaften unabhängigen Forschungsinstitut als hervorragend bewertet.<sup>1</sup>

| LOK-TITE™        | Spitzenlänge | 20 St. |
|------------------|--------------|--------|
| 30 ga NaviTip FX | 17 mm        | 1452   |
| 30 ga NaviTip FX | 25 mm        | 1454   |

<sup>1</sup> Clinical Research Associates Newsletter. Volume 29, Issue 1, January 2005.

Aufgrund der Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar. Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.



## Skini Applikationsspritzen

- Erzeugt bei geringer Kraftausübung auf den Kolben Druck in der Spritze und sorgt so für präzisere apikale Abgabe

Zu verwenden mit: EndoREZ™ und MTAFlow™.



|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 0,5 ml Skini Applikationsspritze | 20 St. |
|                                  | 1680   |

## Applikationsspritze für Hämostatika

- Luer-Lock-Gewinde für sichere Befestigung der Tips
- Farbiger Kunststoff schützt lichtempfindliche Materialien

Zu verwenden mit: 30 ml IndiSpense™ Spritzen von ViscoStat™, ViscoStat™ Clear, Astringedent™ und Astringedent™ X.



|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 1,2 ml Applikationsspritze für Hämostatika | 20 St. |
|                                            | 1278   |

## Ultra-Etch™ Applikationsspritze

- Luer-Lock-Gewinde für sichere Befestigung der Tips
- Einfache Identifizierung durch blaue Farbe

Zu verwenden mit: 30 ml IndiSpense Spritzen von Ultra-Etch™.



|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1,2 ml Ultra-Etch Applikationsspritze | 20 St. |
|                                       | 129    |

## 1,2 ml Applikationsspritze

- Luer-Lock-Gewinde für sichere Befestigung der Tips

Zu verwenden mit: allen 30 ml IndiSpense™ Spritzen.



|                            |        |         |
|----------------------------|--------|---------|
| 1,2 ml Applikationsspritze | 20 St. | 100 St. |
|                            | 124    | 157     |

## 5 ml Applikationsspritze

- Seitenflügel am Spritzenzylinder für optimale Kontrolle/ Hebelwirkung
- Capillary Tip nicht zur Applikation verwenden

Zu verwenden mit: Spülflüssigkeiten für Verfahren in der Praxis oder unter Aufsicht des Zahnarztes und Ultradent™ EDTA 18 % Lösung.



|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 5 ml Applikationsspritze | 10 St. |
|                          | 201    |

## Ultradent™ Spritzenhülle

- Deckt zuverlässig Spritze und Ansatz ab
- Gewährleistet Asepsis der Spritze, da die Hülle zusammen mit dem Ansatz entfernt wird

Zu verwenden mit: allen 1,2-ml-Spritzen.



|                      |         |
|----------------------|---------|
| 1,2 ml Spritzenhülle | 300 St. |
|                      | 5993    |



### Luer Lock Cap

- Verschlusskappe aus Polypropylen mit Flügeln für Luer-Lock-Spritzen
- Auch zum Verschluss von in der Praxis befüllten Spritzen

Zu verwenden mit: allen Ultradent™ Kunststoffspritzen.



20 St.

Luer Lock Cap

205

### Ultradent™ Luer Vacuum Adapter

- Effektive Zeitersparnis für jede Praxis
- Trocknet Kanäle schnell und effizient
- Minimiert Papierspitzenverbrauch



10 St.

Luer Vacuum Adapter

230

### Organisationsständer für Spritzen

- Für 14 Spritzen
- Aus transparentem Acrylglas



1 St.

Organisationsständer für Spritzen

382

## Ein weißeres Lächeln lässt Deine Welt erstrahlen

Opalescence verleiht Ihren Patienten nicht nur ein strahlend weißes Lächeln, sondern auch ein blendendes Aussehen und ein positives Gefühl. Damit werden schöne Tage noch schöner.



Ein strahlendes Lächeln gibt Ihren Patienten das Selbstvertrauen, häufiger zu lachen.

Opalescence™  
tooth whitening systems



Erfahren Sie mehr über Opalescence Zahnaufhellung auf [ultradentproducts.com/brighterworld](http://ultradentproducts.com/brighterworld) und lassen Sie Ihre Patienten strahlen.



## NOTIZEN

[illegible]



Ein strahlendes Lächeln  
gibt Ihren Patienten  
das Selbstvertrauen,  
häufiger zu lachen.

Siehe Seiten 3 – 26

# Ein weißeres Lächeln lässt Deine Welt erstrahlen

Opalescence verleiht Ihren Patienten nicht nur ein strahlend weißes Lächeln, sondern auch ein blendendes Aussehen und ein positives Gefühl. Damit werden schöne Tage noch schöner. Als weltweiter Marktführer im Bereich der professionellen Zahnaufhellung<sup>1</sup> hat Opalescence bereits über 100 Millionen Lächeln aufgehellt.<sup>1</sup> Das sind eine Menge schöner Tage!

Opalescence™  
tooth whitening systems



Erfahren Sie mehr über  
Opalescence Zahnaufhellung auf  
[ultradentproducts.com/brighterworld](https://ultradentproducts.com/brighterworld)  
und lassen Sie Ihre Patienten strahlen.

1. Daten liegen vor.



|                                               |                  |                                         |             |                                         |                |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|
| 830 + 1062 Diodenlaser                        | 108 – 113        | Eisensulfat-Lösung                      | 52          | Jiffy HiShine                           | 86 – 87        |
| <b>ADHÄSIVTECHNIK</b>                         | 57 – 66          | Enamelast.                              | 32 – 33     | Jiffy Komposit-Polierbürste             | 92             |
| Aluminiumchlorid-Gel                          | 51               | <b>ENDODONTIE</b>                       | 115 – 130   | Jiffy Natural Composite System          | 88             |
| <b>APPLIKATION</b>                            | 131 – 139        | Endo-Eze Irrigator Tips                 | 127, 136    | Jiffy Natural Universal Keramik-System  | 89             |
| Applikationsspritze für Hämostatika           | 138              | Endo-Eze Luer Vacuum Adapter            | 122, 139    | Jiffy One                               | 84, 85         |
| Applikationsspritzen                          | 120, 138         | Endo-Eze MTAFlow                        | 116 – 117   | Jiffy Original Komposit-Polierer-System | 86 – 87        |
| Approximalsäge                                | 93               | Endo-Eze Tips                           | 127, 136    | Jiffy Spin                              | 85             |
| Astringedent                                  | 52               | EndoREZ                                 | 118 – 119   | Jiffy Universal Keramik-System          | 90 – 91        |
| Astringedent X                                | 52               | <b>Faden-legeinstrumente</b>            | 56          | J-Temp                                  | 130            |
| Ätzmittel                                     | 58 – 59, 64 – 65 | Faden, Retraktion                       | 53 – 55     | <b>Kabellose LED-Polymerisations-</b>   |                |
| Aufbewahrungsboxen                            | 16               | Federschere                             | 16          | leuchte                                 | 103, 105       |
| Aufbisshilfe                                  | 26               | File-Eze EDTA                           | 124         | Kariesindikator                         | 36             |
| Aufhellung devitaler Zähne                    | 19               | Finierer und Polierer, Keramik          | 89 – 91     | Keil                                    | 41             |
| Augenschutz                                   | 114              | Finierer und Polierer, Komposit         | 85 – 88     | Kelche, Finish                          | 86 – 87        |
| Ausblock-Kunststoff                           | 17               | Finierstreifen                          | 93          | Klassische Folien                       | 16             |
| <b>Befestigungskunststoff</b>                 | 81 – 82          | <b>FINISH</b>                           | 83 – 94     | Kofferdam                               | 38, 122        |
| Beidseitige Abstützung                        | 26               | Fissurenversiegler                      | 28 – 31     | <b>KOMPOSITE</b>                        | 67 – 76        |
| Black Light Lens                              | 106              | Fließfähiges Komposit                   | 73, 75      | Komposit-Farbschlüssel                  | 72             |
| Black Micro FX Tip                            | 132              | Fluoridgel                              | 26          | Komposit-Füllungsmaterial               | 71 – 74        |
| Black Micro Tip                               | 132              | Fluoridlack                             | 32 – 33     | Komposit, Mosaic                        | 71 – 72        |
| Black Mini Brush Tip                          | 132              | Flüssigkeitskontrolle                   | 46          | Komposit-Polierbürsten                  | 92             |
| Black Mini Tip                                | 132              | Flusssäure                              | 64          | Komposit-Polierer                       | 86, 88         |
| Blue Micro Tip                                | 133              | Flusssäure-Ätzel                        | 64          | Kompositversiegler                      | 76, 94         |
| Blue Mini Dento-Infusor Tip                   | 133              | Folienmaterial                          | 16          | Kosmetische Zahnaufhellung              | 9 – 15         |
| Bonding                                       | 62               | Fragen rund um die Zahnaufhellung       | 4           | Kreuz-Pinzette                          | 41             |
| Bondingmaterial                               | 60 – 61          | Füllung/Sealer, Wurzelkanal             | 118 – 119   | Kunststoffbarriere                      | 22             |
| Brillen                                       | 114              | Füllungskunststoffe                     | 81 – 82     | <b>Lack, Fluorid</b>                    | 32 – 33        |
| Bürsten-Applikatoren                          | 132 – 133        | Füllungsmaterial                        | 71 – 74     | Laser, Gemini EVO                       | 108 – 113      |
| <b>Calciumhydroxidpaste</b>                   | 125              | <b>Gemini EVO Laser</b>                 | 108 – 113   | LC Block-Out Resin                      | 17             |
| Capillary Tips                                | 127, 135         | Gemini EVO PBM Adapter                  | 113         | LED-Polymerisationsleuchten mit         |                |
| Caps, Luer Lock                               | 139              | Gemini EVO Schutzbrillen                | 113         | Breitbandtechnologie                    | 96 – 105       |
| Carbamidperoxid                               | 10 – 12          | <b>GERÄTE</b>                           | 95 – 114    | Leerspritzen                            | 138            |
| Carbamidperoxid vs. Wasserstoffperoxid        | 6 – 7            | Gestrickter Retraktionsfaden            | 53 – 55     | Lichthärtende Kunststoffbarriere        | 22             |
| Caulking-Material                             | 39               | Gezahnte Ultrapak-legeinstrumente       | 56          | Lichthärtendes Adhäsiv                  | 60             |
| Chelatbildner                                 | 124              | Gleitmittel                             | 124         | Lichthärtendes Bondingsystem            | 59 – 60        |
| Chelatbildner und Gleitmittel                 | 124              | <b>Halo Teilmatrizensystem</b>          | 40 – 42     | Lichthärtendes provisorisches           |                |
| Chemische Abrasionspaste                      | 24 – 25          | Hämostase                               | 46 – 49     | Restaurationsmaterial                   | 130            |
| Citric Acid                                   | 125              | Hämostatika                             | 50 – 52     | Lichtpolymerisationsgeräte              | 96 – 105       |
| Citric Acid 20 % Spüllösung                   | 125              | Handstückhalter                         | 103 – 105   | Light Shield                            | 103 – 105      |
| ClearTemp LC                                  | 80               | HiShine                                 | 86 – 87     | Liner/Unterfüllungsmaterial             | 66             |
| Composite Wetting Resin                       | 75               | Home-Whitening mit individueller        |             | Linsen, VALO, VALO Grand und VALO X     | 106            |
| <b>Dentin-Liner und Unterfüllungsmaterial</b> | 66               | Tiefziehschiene                         | 10 – 12     | Lippenspreizer                          | 26, 37         |
| Dentinversiegler                              | 33               | Hydrophiler Fissurenversiegler          | 28 – 29     | Luer Lock Cap                           | 139            |
| Dento-Infusor Tips                            | 49, 133          | Hydrophober Fissurenversiegler          | 30 – 31     | Luer Vacuum Adapter                     | 139            |
| DermaDam                                      | 38, 122          | Hygieneschutzhüllen, VALO               | 102 – 105   | <b>Matrizen</b>                         | 40 – 44        |
| DermaDam Synthetic                            | 38, 122          | <b>Indikator, Karies</b>                | 36          | Matrizenbänder                          | 41, 44         |
| Desensibilisierungsgele                       | 26               | Indirekte Restaurationen, Bonding       | 47, 59      | Matrizensystem                          | 40 – 44        |
| Diamantstreifen                               | 93               | Individuelle Schienen                   | 10 – 12, 23 | Mechanische Abrasionspaste              | 24 – 25        |
| Diamond Polish Mint                           | 92               | In-Office Whitening                     | 20 – 21, 23 | Medizinische Zahnaufhellung             | 18 – 23        |
| Diodenlaser                                   | 108 – 113        | Inspirat Brush Tip                      | 133         | Metal Dento-Infusor Tip                 | 49, 133        |
| Doppelfadentechnik                            | 54               | Instrumente, Fadenleger                 | 56          | Metallmaskierung                        | 73             |
| Double Sideport Irrigator Tips                | 128, 137         | InterGuard                              | 38          | Micro 20 ga (0,9 mm ø) Tip              | 134            |
| Dualhärtender Kunststoffzement                | 81 – 82          | Intraoral Tip                           | 133         | Micro Capillary Tips                    | 127, 134 – 135 |
| <b>EDTA Gleitmittel</b>                       | 124              | Irrigator Tips                          | 127, 136    | Mineral-Trioxid-Aggregat (MTA)          | 116 – 117      |
| EDTA Lösung                                   | 124              | IsoBlock                                | 26          | Mixing Tip                              | 134            |
| Einkomponentenbonding                         | 62               | <b>Jiffy Approximalsäge</b>             | 93          | Mosaic                                  | 71 – 72        |
| Einweg-Matrizenbänder                         | 44               | Jiffy Diamantstreifen                   | 93          | MTAFlow und MTAFlow White               | 116 – 117      |
| Einweg-Polierer                               | 84               | Jiffy Extraoral Kit                     | 91          | MTA-Reparaturmaterial                   | 118 – 119      |
| Eisensulfat-Hämostatikum                      | 50, 52           | Jiffy Finierkelche, -scheiben, -spitzen | 86 – 87     |                                         |                |



|                                                |                      |                                             |                      |                                              |                  |
|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Natriumfluorid . . . . .                       | 32, 34               | Scheiben, Finish . . . . .                  | 85 – 87              | VALO Cordless LED-Polymerisations-           |                  |
| Natural Komposit-Polierer-System . . . . .     | 88                   | Scheiben zum Konturieren und                |                      | leuchte . . . . .                            | 105              |
| Natural Universal Keramik-Polierer-            |                      | Finieren . . . . .                          | 86 – 87              | VALO Cordless Light Shield . . . . .         | 105              |
| System . . . . .                               | 89                   | Scheren . . . . .                           | 16, 114              | VALO Cordless Netzteil . . . . .             | 105              |
| NaviTip 29 ga Tips . . . . .                   | 127 – 128, 136       | Schienenherstellung . . . . .               | 12                   | VALO Grand Batterieladegerät . . . . .       | 103              |
| NaviTip 31 ga Tips . . . . .                   | 128, 137             | Schmelz-Bondingmittel . . . . .             | 60 – 62              | VALO Grand Cordless Hygieneschutz-           |                  |
| NaviTip FX Tip . . . . .                       | 128, 137             | Schutzbrillen . . . . .                     | 114                  | hüllen . . . . .                             | 103              |
| NaviTip Tips . . . . .                         | 127 – 128, 136 – 137 | Sealer/Füller, Wurzelkanal . . . . .        | 118 – 119            | VALO Grand Cordless LED-                     |                  |
| NaviTip Übersicht . . . . .                    | 123                  | Selbstätzender Primer . . . . .             | 59                   | Polymerisationsleuchte . . . . .             | 103              |
| Nitinolringe . . . . .                         | 41                   | Sideport Irrigator Tips . . . . .           | 128, 137             | VALO X Hygieneschutzhüllen . . . . .         | 102              |
| Omni-Matrix . . . . .                          | 44                   | Silane . . . . .                            | 64                   | VALO, VALO Grand und VALO X Linsen . . . . . | 106              |
| OpalCups . . . . .                             | 24 – 25              | Single Sideport Tips . . . . .              | 127, 136             | VALO X Batterieladegerät . . . . .           | 102              |
| OpalDam . . . . .                              | 22                   | Skini Spritze . . . . .                     | 120, 138             | VALO X Batterien . . . . .                   | 102              |
| OpalDam Green . . . . .                        | 22                   | Smear-Layer-Entferner . . . . .             | 124                  | VALO X Montiertes Kabel . . . . .            | 102              |
| Opalescence Aufbewahrungsboxen . . . . .       | 16                   | SoftEZ Tip . . . . .                        | 134                  | VALO X Netzteil . . . . .                    | 102              |
| Opalescence Boost . . . . .                    | 20 – 21              | Sof-Tray Classic Folien . . . . .           | 16                   | VALO X Polymerisationsleuchte . . . . .      | 100 – 102        |
| Opalescence Endo . . . . .                     | 19                   | Spitzen, Finish . . . . .                   | 84, 86 – 87, 90 – 91 | Versiegelungsmaterial . . . . .              | 28 – 31          |
| Opalescence Go . . . . .                       | 14 – 15              | Spritzen, 1,2 ml, Kunststoff . . . . .      | 138                  | Versiegler, Komposit . . . . .               | 76, 94           |
| Opalescence PF . . . . .                       | 10 – 12              | Spritzen, 5 ml, Kunststoff . . . . .        | 138                  | ViscoStat Clear Hämostatikum . . . . .       | 51               |
| Opalescence Quick . . . . .                    | 23                   | Spritzenhüllen . . . . .                    | 138                  | ViscoStat Hämostatikum . . . . .             | 50               |
| Opalescence Übersicht . . . . .                | 6 – 7                | Spritzen, leer . . . . .                    | 138                  | <b>VORBEREITUNG . . . . .</b>                | <b>35 – 44</b>   |
| Opalescence Zahncreme . . . . .                | 34                   | Spritzen-Organisationsständer . . . . .     | 139                  | Vorgefüllte Aufhellungsschienen . . . . .    | 14 – 15          |
| Opalescence Zahncreme für                      |                      | SST Tip . . . . .                           | 134                  | Vorübergehende Empfindlichkeiten im          |                  |
| empfindliche Zähne . . . . .                   | 34                   | „STEP-BY-STEP“ – KERAMIKREPARATUR . . . . . | 65                   | Wurzelbereich . . . . .                      | 33               |
| Opalustre . . . . .                            | 24 – 25              | Stifte . . . . .                            | 129                  | <b>Walking Bleach . . . . .</b>              | <b>19</b>        |
| OraSeal . . . . .                              | 39                   | Surgical Suction Tip . . . . .              | 134                  | Wangenspreizer . . . . .                     | 37               |
| Organisationsständer für Spritzen . . . . .    | 139                  | Synthetischer Kofferdam . . . . .           | 38, 122              | Wasserstoffperoxid . . . . .                 | 14 – 15, 19 – 21 |
| <b>PBM Adapter . . . . .</b>                   | <b>113</b>           | <b>Teilmatrizen Kits . . . . .</b>          | <b>40</b>            | Wetting Resin . . . . .                      | 75               |
| Peak SE Primer . . . . .                       | 59                   | Teilmatrizensystem . . . . .                | 40 – 43              | White Light Lens . . . . .                   | 106              |
| Peak Universal Bond . . . . .                  | 60                   | Tiefziehfolien . . . . .                    | 16                   | White Mac Tip . . . . .                      | 135              |
| PermaFlo . . . . .                             | 73                   | Tips – Endodontie . . . . .                 | 135 – 137            | Wurzelstifte . . . . .                       | 129              |
| PermaFlo DC . . . . .                          | 81 – 82              | Tips – Restauration . . . . .               | 132 – 135            | <b>ZAHNAUFHELLUNG . . . . .</b>              | <b>3 – 26</b>    |
| PermaFlo Pink . . . . .                        | 75                   | <b>TISSUE MANAGEMENT . . . . .</b>          | <b>45 – 56</b>       | Zahnaufhellung im Wartezimmer . . . . .      | 23               |
| PermaFlo Purple . . . . .                      | 120                  | Total-Etch-System . . . . .                 | 58                   | Zahnaufhellung, individuelle                 |                  |
| PermaSeal . . . . .                            | 76, 94               | Transcend Universalkomposit . . . . .       | 68 – 70              | Tiefziehschienen . . . . .                   | 10 – 12, 23      |
| Phosphorsäuregel . . . . .                     | 58                   | TransLume Lens . . . . .                    | 106                  | Zahnaufhellungsprotokoll . . . . .           | 5                |
| Pinzette . . . . .                             | 41                   | Trocknungsmittel . . . . .                  | 31, 76, 92           | Zahnaufhellung Übersicht . . . . .           | 6 – 7            |
| PointCure Lens . . . . .                       | 106                  | <b>Ultra-Blend plus . . . . .</b>           | <b>66</b>            | Zahnaufhellung, vorgefüllte Trays . . . . .  | 14 – 15          |
| Polierbürsten . . . . .                        | 92                   | UltraCal XS . . . . .                       | 125                  | Zahncreme . . . . .                          | 34               |
| Polierpaste . . . . .                          | 92                   | Ultra-Etch Ätzel . . . . .                  | 58                   | Zahncreme für empfindliche Zähne . . . . .   | 34               |
| Politur, Keramik . . . . .                     | 88 – 89              | UltraEZ . . . . .                           | 26                   | Zahnempfindlichkeit . . . . .                | 33               |
| Polycarboxylatzement, provisorisch . . . . .   | 79                   | UltraFit Tray . . . . .                     | 14 – 15, 26          | Zahnschutzbänder . . . . .                   | 38               |
| Polymerisationsleuchten . . . . .              | 96 – 105             | Ultrapak CleanCut Faden . . . . .           | 53 – 55              | Zange für Platzierung der Ringe . . . . .    | 41               |
| Porcelain Etch . . . . .                       | 64                   | Ultrapak-Legeinstrumente . . . . .          | 56                   | <b>ZEMENTE . . . . .</b>                     | <b>77 – 82</b>   |
| PQ1 . . . . .                                  | 62                   | UltraSeal XT hydro . . . . .                | 28 – 29              | Zement für Veneers . . . . .                 | 80               |
| PrimaDry . . . . .                             | 31, 76, 92           | UltraSeal XT plus . . . . .                 | 30 – 31              | Zungen-, Lippen- und Wangenhalter . . . . .  | 26, 37           |
| <b>PROPHYLAXE UND HYGIENE . . . . .</b>        | <b>27 – 34</b>       | UltraTect Schutzbrillen . . . . .           | 114                  |                                              |                  |
| Provisorischer Zement für Veneers . . . . .    | 80                   | UltraTemp und UltraTemp REZ II . . . . .    | 79                   |                                              |                  |
| Provisorisches Restaurationsmaterial . . . . . | 130                  | Ultra-Trim Federschere . . . . .            | 16, 114              |                                              |                  |
| ProxiCure Ball Lens . . . . .                  | 106                  | Umbrella Wangenhalter . . . . .             | 26, 37               |                                              |                  |
| Proxitector . . . . .                          | 38                   | UniCore Wurzelstifte . . . . .              | 129                  |                                              |                  |
| Pulpaüberkappung . . . . .                     | 66                   | Universal Dentin Sealant . . . . .          | 33                   |                                              |                  |
| Putty-Material . . . . .                       | 39                   | Universal Keramik-Polierer-System . . . . . | 90 – 91              |                                              |                  |
| <b>Reparaturzement . . . . .</b>               | <b>116 – 117</b>     | Universalkomposit . . . . .                 | 68 – 70              |                                              |                  |
| Retraktionsfaden . . . . .                     | 53 – 55              | Universal Ringe . . . . .                   | 41                   |                                              |                  |
| Retraktionsfäden . . . . .                     | 53 – 55              | Unterfüllungsmaterial und Liner . . . . .   | 66                   |                                              |                  |
| <b>Sable Seek . . . . .</b>                    | <b>36</b>            | <b>Vacuum Adapter . . . . .</b>             | <b>122, 139</b>      |                                              |                  |
| Salzsäure-Abrasionspaste . . . . .             | 24 – 25              | VALO-Akkus . . . . .                        | 103, 105             |                                              |                  |
| Säure-Ätzel . . . . .                          | 58 – 59, 64 – 65     | VALO Cordless Hygieneschutzhüllen . . . . . | 105                  |                                              |                  |

## UNTERNEHMENSPOLITIK

Ultradent Products sieht sich in der Pflicht, Produkte anzubieten, die den Zahnarzt in die Lage versetzen, seine Patienten professionell und nach den neuesten Erkenntnissen zu behandeln. Dazu gehört unter anderem die Entwicklung neuer Produkte sowie die Optimierung vorhandener Materialien und Techniken. Ihre Anforderungen an Produkt und Service zu erfüllen, hat für uns höchste Priorität. Wir freuen uns über Ihre Vorschläge, Fragen und Kommentare. In einigen Ländern kann die Verfügbarkeit bestimmter Produkte durch abweichende gesetzliche Regelungen eingeschränkt sein oder andere Indikationsstellungen oder Anforderungen an Kennzeichnungen erfordern, um den örtlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die genaue Anwendung und die zu beachtenden Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktanleitung oder den Aufschriften auf der Verpackung.

**Aufgrund der zum 26.5.2021 in Kraft getretenen Schweizer Medizinprodukteverordnung (MepV) sind ggf. nicht alle gezeigten Produkte in der Schweiz verfügbar – fragen Sie bitte Ihren Dentalhändler. Soweit nicht anders auf Produktverpackung/Gebrauchsanleitung (bei Medizinprodukten) angegeben, wird die Ultradent Products Inc. durch den CH-Rep und CH-Importeur QUNIQUE GmbH, Bahnhofsweg 17, 5610 Wohlen vertreten.**

Ultradent Products nimmt Umweltprobleme ernst. Zur Versendung chemischer Produkte ist jedoch oftmals eine Kunststoff-Umverpackung unerlässlich. Alle Produkte mit Ausnahme des Latex-Kofferdams DermaDam sind latexfrei. Ultradent Products ist gemäß ISO 13505 zertifiziert. Dies bedeutet, dass das Unternehmen ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem entwickelt und eingeführt hat, das von unabhängigen europäischen „Benannten Stellen“ überwacht wird. Wo erforderlich, sind UP-Produkte in Europa mit dem CE-Kennzeichen versehen; dies weist darauf hin, dass sie dem strengen EU-Medizinproduktegesetz entsprechen.

## HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Die Haltbarkeit eines Produktes basiert auf dem Herstellungsdatum. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts und in den Hinweisen zur Lagerung.

## GEWÄHRLEISTUNGEN

Informationen zur Gewährleistungen finden Sie ggf. in der Gebrauchsanweisung des Produkts.

## VERPACKUNG

Ultradent Products nimmt Umweltprobleme ernst. Aus diesem Grund sind wir bemüht, bei unseren Verpackungen so wenig Kunststoff wie möglich zu verwenden. Zur Ihrer Sicherheit und für die sachgemäße Konservierung unserer chemischen Produkte ist jedoch oftmals eine Kunststoff-Umverpackung unerlässlich.

## ULTRADENT PRODUCTS IM INTERNET

Die neuesten Informationen und Nachrichten über Ultradent Products sind online verfügbar. Auf [WWW.ULTRADENTPRODUCTS.COM](http://WWW.ULTRADENTPRODUCTS.COM) finden Sie allgemeine Informationen zu Ultradent Products, zur Firmengeschichte und Philosophie des Unternehmens sowie Produktinformationen. Auch der Katalog sowie die Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsanweisungen der Produkte können dort heruntergeladen werden. Über die Länderauswahl-Liste können Sie die ausführlichen Kontaktinformationen Ihres Vertriebspartners vor Ort finden.

## COPYRIGHT

Nachdruck oder Kopie von Texten oder Bildern, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Ultradent Products GmbH, Deutschland. Januar 2026.

## AUSZEICHNUNGEN



## PRODUKTKENNZEICHNUNG



BKP85 = Chargennummer  
2023-03 = Monat, März  
2023-03 = Jahr, 2023



BL2DC = Chargennummer  
02-24 = Monat, Februar  
02-24 = Jahr, 2024



I10-2020 = Chargennummer  
I10-2020 = Monat Oktober  
I10-2020 = Jahr 2020



O100 = Chargennummer  
O100 = Monat Oktober  
O100 = Jahr 2020

Auf alle Spritzen von Ultradent Products, Inc. ist ein Verfalldatum gestempelt, das aus einem Buchstaben und drei Ziffern besteht. Der Buchstabe ist die für Herstellungszwecke verwendete Chargennummer, und die drei Ziffern sind das Verfalldatum. Die ersten beiden Ziffern sind der Monat und die dritte Ziffer ist die letzte Ziffer des Jahres.

# PRODUKTE BESTELLEN

Die Ultradent Produkte werden ausschließlich vom beratenden und autorisierten Dental-Fachhandel vertrieben. Zur telefonischen Beratung steht Ihnen Ihr Dental-Fachhändler sowie die Hotline von Ultradent Products zur Verfügung. Bestellungen richten Sie bitte an Ihren Dental-Fachhändler, die Angabe der in diesem Katalog aufgeführten Artikel-Nummer unterstützt die Auftragsklarheit. Selbstverständlich können Sie auch bei Ultradent Products bestellen. Ihre Bestellung wird dem von Ihnen benannten Dental-Fachhändler zur Auslieferung weitergeleitet.

Alle in diesem Katalog aufgeführten Preise sind unverb. empf. Verkaufspreise und verstehen sich netto, zzgl. Mehrwertsteuer. Preisänderungen aufgrund von Preiskorrekturen des Herstellers, Wechselkursänderungen oder Irrtum vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Dental-Fachhändlers, der Ihre Bestellung ausliefert.

So erreichen Sie uns:

 +49 (0) 2203 3592-15

 [infoDE@ultradent.com](mailto:infoDE@ultradent.com)

 [www.ultradentproducts.com](http://www.ultradentproducts.com)



Schweiz

**Fachberaterin**  
**Andrea Willen**

 +41 (0) 78 635 33 36

 [Andrea.Willen@ultradent.com](mailto:Andrea.Willen@ultradent.com)



Folgen Sie uns in den sozialen Medien!

Scannen Sie den QR-Code, um Ultradent auf Facebook, Instagram und LinkedIn zu folgen und keine Angebote und Neuigkeiten mehr zu verpassen!

Facebook



Instagram



LinkedIn







**VALO<sup>TM</sup> X**  
BROADBAND LED CURING LIGHT

**SECHS NEUE FARBEN**  
UNVERÄNDERT STARKE  
LEISTUNG



**Ultradent Products GmbH**

Am Westhover Berg 30 — 51149 Köln — Deutschland

Tel: +49 (0) 2203-359215 — Fax: +49 (0) 2203-359222 — [infoDE@ultradent.com](mailto:infoDE@ultradent.com)

[www.ultradentproducts.com](http://www.ultradentproducts.com)

