

# HALO™

SECTIONAL MATRIX SYSTEM



### 4831 HALO KIT - Bands Original con instrumentos

- 2 x Anillos Universales
- 25 x cada tamaño Bandas matrices Originales
- 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, y 7,5 mm
- 25 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande
- 1 x Carrusel dispensador
- 1 x Pinza
- 1 x Forceps

### 4832 HALO INTRO KIT - Bands Original

- 2 x Anillos Universales
- 25 x cada tamaño Bandas matrices Originales
- 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm
- 25 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande
- 1 x Carrusel dispensador

### 4833 HALO INTRO KIT - Bands Firmes Antiadherentes

- 2 x Anillos Universales
- 20 x cada tamaño Bandas matrices Firmes Antiadherentes
- 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, y 7,5 mm
- 25 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande
- 1 x Carrusel dispensador

### 4835 HALO MINI KIT - Bands Original

- 2 x Anillos Universales
- 5 x cada tamaño Bandas matrices Originales
- 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, y 7,5 mm
- 5 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande
- 1 x Carrusel dispensador

### 4834 HALO INTRO KIT - Bands Firmes

- 2 x Anillos Universales
- 25 x cada tamaño Bandas matrices Firmes
- 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, y 7,5 mm
- 25 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande
- 1 x Carrusel dispensador

#### HALO Bandas Original

Tamaño	50 uds.	100 uds.
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457

#### HALO - Cuñas

Tamaño	100 uds.
Pequeña	5042
Mediana	5043
Grande	5044

#### HALO Bandas Firmes

Tamaño	50 uds.	100 uds.
3,5 mm	5059	—
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	—

#### HALO - Anillos Nitinol

Tamaño	1 ud.	2 ud.
Universal	5008	5009


#### HALO - Bands Firmes Antiadherentes

Tamaño	50 uds.	100 uds.
3,5 mm	5049	—
4,5 mm	5051	5052
5,5 mm	5053	5054
6,5 mm	5055	5056
7,5 mm	5057	—

5048 - HALO - Pinza 1 ud.



5047 - HALO - Forceps 1 ud.

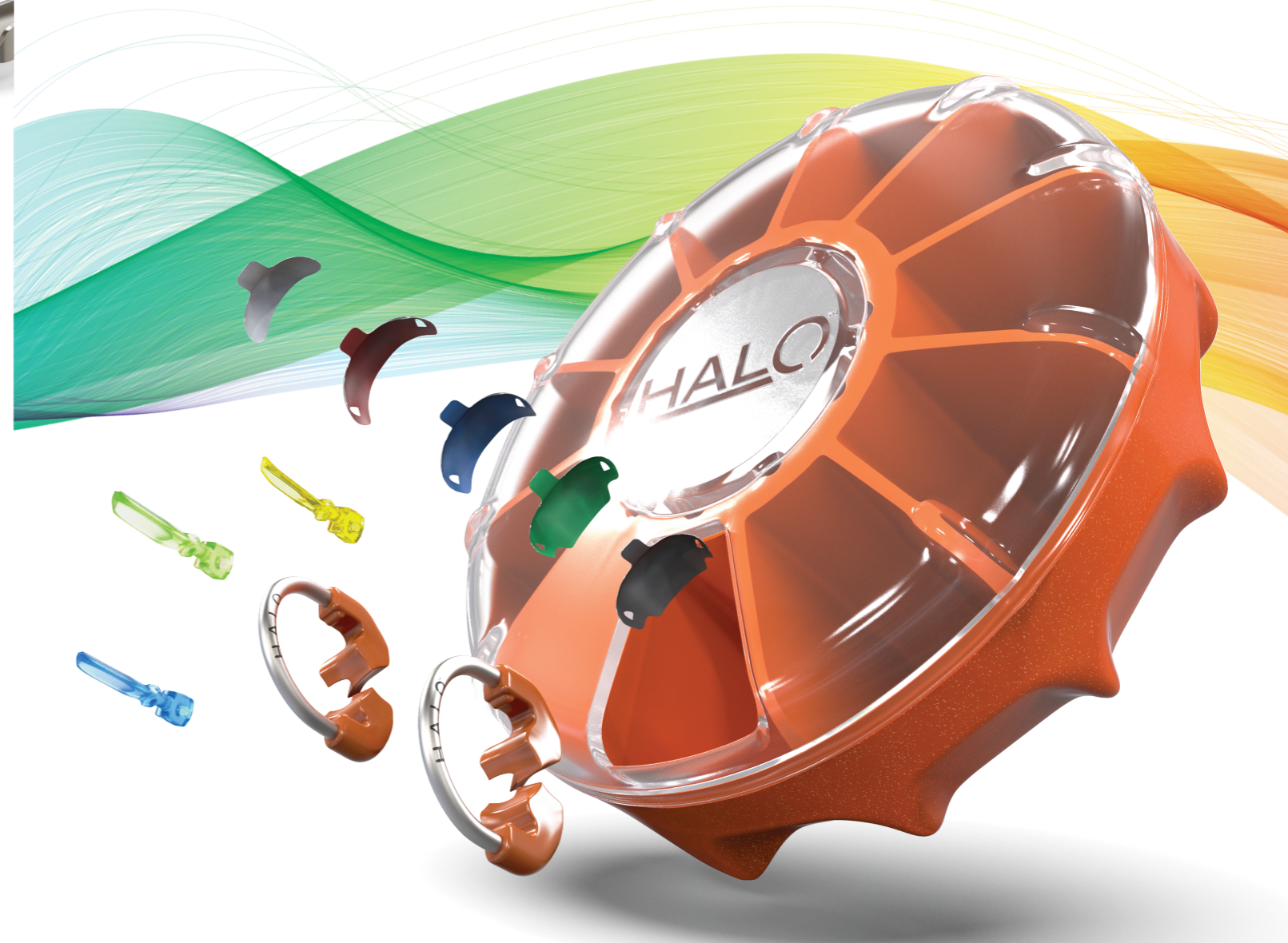

## Excelentes Resultados en menos tiempo

El sistema de matrices seccionales HALO le permite hacer restauraciones de composite anatómicamente contorneadas, de una manera muy sencilla y en muy poco tiempo.

# HALO™

SECTIONAL MATRIX SYSTEM

El sistema de matrices seccionales HALO produce contornos de forma anatómica que reducen el tiempo empleado en dar forma y la terminación de su restauración. El sistema HALO proporciona puntos de contacto consistentemente ajustados, lo que ayuda a garantizar que su restauración tendrá la longevidad que tanto usted como su paciente esperan.

La separación máxima del diente se logra a través de la fuerza del anillo de nitinol y el acuñamiento activo proporcionado por las cuñas. Este sistema ideal de separación le permite restaurar un solo diente o restauraciones consecutivas con facilidad.

El diseño de pico único del anillo HALO permite que la banda se adapte completamente a la preparación desde el margen gingival a la cresta marginal y ayuda a mantener su forma incluso en grandes preparaciones, logrando restauraciones con forma anatómica.

Cuando sus restauraciones tengan puntos de contacto ideales y curvatura anatómica, verá una reducción en el tiempo dedicado a dar forma y acabado. El sistema HALO hace eso con cada restauración.



El sistema de matrices seccionales HALO incluye anillos de nitinol, bandas de matriz de acero inoxidable y cuñas. Cada uno de los componentes fue diseñado para trabajar juntos, para crear consistentemente restauraciones con forma anatómica.



## ANILLOS DE NITINOL

- El metal nitinol superelástico mantiene la fuerza durante los procedimientos y reduce la fatiga cíclica
- Los anillos durarán más de 1000 usos
- Los dientes de nailon rellenos de fibra de vidrio hacen que no se rompan fácilmente en su colocación
- Los contornos de los anillos aseguran la banda de forma natural y anatómica, ayudando a eliminar brillos y reduciendo la cantidad de tiempo empleado en el acabado
- El diseño apilable permite su uso en cavidades MOD y otras restauraciones de clase II
- Proporciona una separación ideal para restauraciones consecutivas



## BANDAS DE MATRIZ

- Con forma anatómica para contactos ideales
- La curva en la cresta marginal crea una tronera oclusal ideal reduciendo tiempo en el acabado
- Orificios para pinzas para una fácil colocación
- La lengüeta plegable permite una fácil colocación y extracción con mayor visibilidad
- Recubrimiento opcional para antiadherencia y fácil identificación
- Las bandas originales permiten una mayor adaptabilidad y bruñido, mientras que las bandas Firm resisten la deformación y son ideales para espacios interproximales estrechos
- Las bandas Original y Firm son de acero inoxidable ultradelgado 0,038mm



## CUÑAS

- La cuña firme crea un acuñamiento activo para mejorar la separación, mientras que es menos traumático para las papilas
- El diseño hueco hace que las cuñas sean fáciles de colocar y permite apilar las cuñas cuando se necesitan varias a la vez.
- Los colores fáciles de distinguir ayudan a identificar los tamaños de las cuñas
- Centro colapsable para adaptación anatómica de la banda



## DISPENSADOR CARRUSEL

- Carrusel dispensador único y fácil de usar para mantener el sistema organizado
- No más derrames y dispersión de bandas y cuñas después de una caída accidental, ahorrando tiempo y frustración
- Se puede desinfectar fácilmente con un desinfectante de superficies